

GADNIC

MANUAL DE USUARIO

MASAJEADOR DE PIES
JACARANDÁ



MASAJ018

IMPORTANTE

Cuando utiliza este tipo de productos eléctricos, especialmente en presencia de chicos, debe respetar las normas básicas de precaución como las siguientes:

PELIGRO: para prevenir la electrocución

- Siempre debe desconectar la fuente de alimentación del producto después de cada uso y antes de limpiarlo.
- No debe tocar el producto si se cayó al agua. Debe desconectarle la fuente de alimentación inmediatamente.

ADVERTENCIA: para prevenir en las personas el riesgo de quemaduras y/o electrocución.

- El producto no se debe dejar sin supervisión de un adulto cuando quede encendido. Desconecte la fuente de alimentación del mismo cuando no lo utilice y/o antes de quitar o colocar piezas o accesorios.
- Es necesario la supervisión de un adulto responsable cuando quieran utilizar el producto los chicos o personas con capacidades diferentes.
- No lo utilice en el exterior, es solo para interiores.
- Este producto solo se debe utilizar como se describe en este manual y no debe agregar accesorios que no estén descriptos en este manual.
- No debe transportar el producto utilizando el cable de alimentación como una manija.
- Nunca debe encender el producto si se ha caído o esté dañado.
- Debe mantener las aberturas de aire libres de pelusas, pelo, etc.
- No inserte ningún objeto por las aberturas del producto.
- No lo debe utilizar en lugares donde la piel es poco sensible o que posea mala circulación.

INSTRUCCIONES

Por favor, lea las siguientes instrucciones detalladamente.

ANTES DE UTILIZAR EL EQUIPO:

- El producto no se debe utilizar con fines médicos, sino que es para dar masajes placenteros en su vivienda.
- Debe consultar a su médico si:
 1. Si usted está embarazada
 2. Si posee un marcapasos
 3. Si tiene alguna consulta con respecto a su salud
- No es recomendable para personas diabéticas
- Nunca debe tapar el producto cuando el mismo esté en funcionamiento.
- No utilice el masajeador por más de 15 minutos. Espere un tiempo para volverlo a utilizar.
- Si deja encendido el producto por mucho tiempo esto provoca el calentamiento del mismo y acorta la vida útil. Apáguelo, y déjelo enfriar para utilizarlo nuevamente.
- No utilice el masajeador en áreas inflamadas o con erupciones cutáneas.
- No reemplace este producto por una atención médica.
- No lo utilice antes de irse a dormir ya que los masajes son estimulantes y pueden retrasar el sueño.
- No se debe hacer masajes dentro de la cama con este producto.
- Está prohibido el uso del masajeador por personas que sufran alguna enfermedad física que les imposibilite utilizar correctamente este producto.
- No debe ser usado por chicos o personas con capacidades diferentes sin la supervisión de un adulto responsable.
- Solo se debe utilizar el producto para uso doméstico.

NOTA: El masajeador debe apagarse cuando se utiliza por un tiempo prolongado


PRECAUCIÓN: Para prevenir daños y/o lesiones, nunca se pare sobre el masajeador, se debe sentar en una silla para hacer un uso correcto del mismo.



CONTROL

CONTROL REMOTO

Led de señal de control remoto

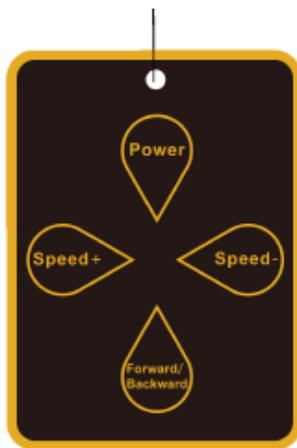

Niveles de velocidad (3 niveles)

Botón cambia entre: Vibración y masaje o masaje solamente

Apagado/Encendido



Instrucciones de uso

CONTROL DEL PRODUCTO

POWER: Enciende o apaga el masajeador

Speed + : Eleva la velocidad hasta llegar al nivel 3

Speed - : Disminuye la velocidad hasta llegar al nivel 1

Forward/Backward: Presione una vez para que realice un masaje con vibración

Presione nuevamente para obtener solo vibración.

CONTROL REMOTO

Speed: Incrementa o disminuye la velocidad

Mode: Presione una vez para que realice un masaje con vibración

Presione nuevamente para obtener solo vibración.

On/Off: Presione para encender o apagar el masajeador.

MATENIMIENTO

Para guardarlo:

Debe guardar el producto en la caja o en un lugar seco, seguro y fresco. Evite que se choque con bordes y objetos puntiagudos. Para prevenir que se rompa el cable de alimentación, no lo enrolle alrededor del producto, y jamás debe colgar el producto desde este cable.

LIMPIEZA

Primero antes de limpiarlo debe desconectarlo y dejar que se enfríe.

Límpielo solo con un trapo suave y levemente humedecido.

Tenga cuidado de que no le ingrese agua ni ningún otro líquido al producto.

- No sumerja el producto en ningún líquido para limpieza.
- No utilice limpiadores abrasivos, cepillos, o productos químicos que sean inflamables ya que lo pueden dañar.
- No realice ninguna reparación por su cuenta.