

GADNIC

MANUAL DE USUARIO


Kit Equipo Botas De Presoterapia **AIRCOM01**



AIRCOM01




ACCESORIOS

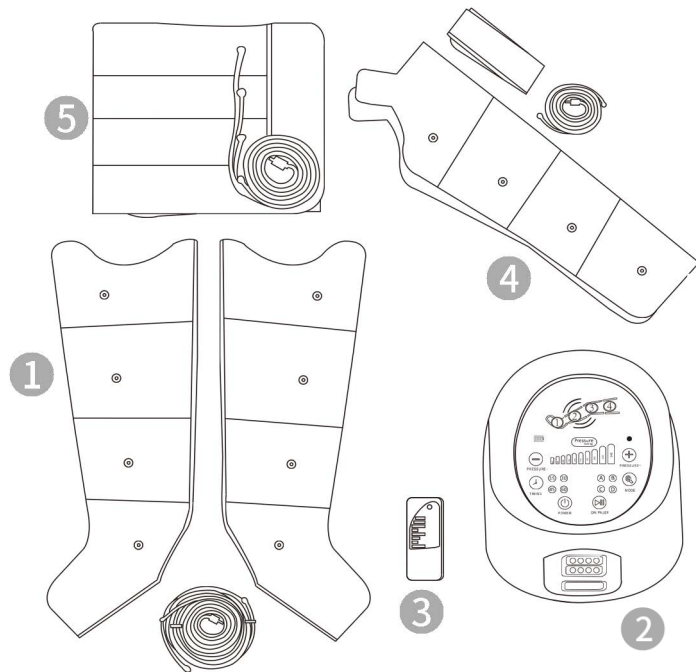


- 1 2 "Puños" (Brazaletes) para las piernas con manguera de conexión
- 2 Unidad principal
- 3 Mando a distancia
- 4 Brazalete para el brazo (OPCIONAL)
- 5 Cinta para la cintura (OPCIONAL)

PANEL DE CONTROL TÁCTIL DE LEDS

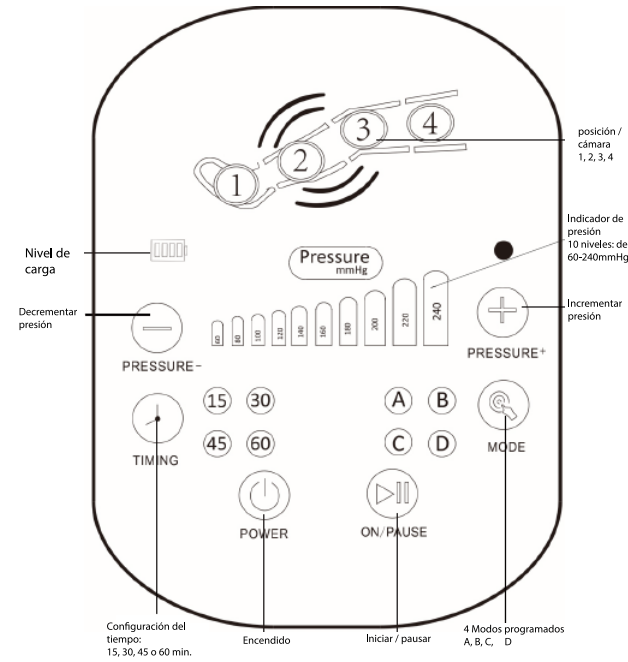

MANDO A DISTANCIA

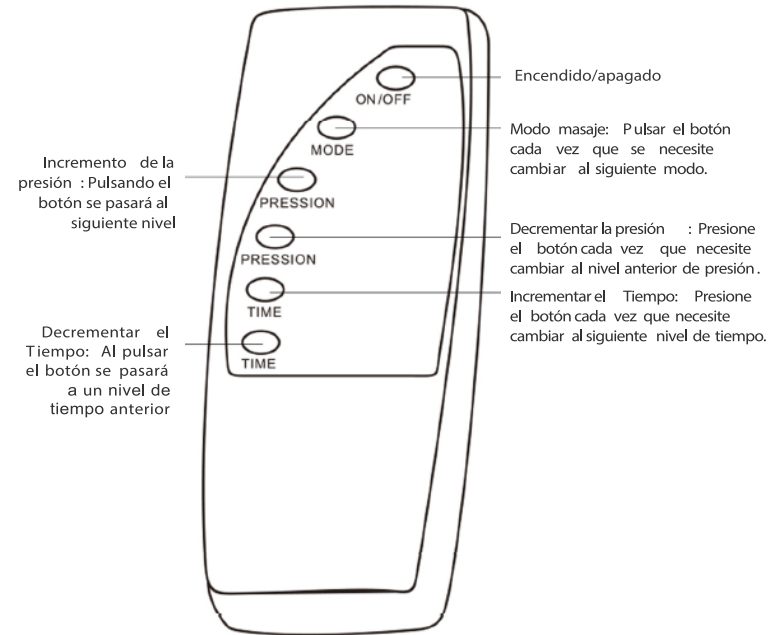

DESPUÉS DEL USO

Sólo hay que desconectar la manguera de la máquina tirando del extremo principal. Los puños conectados con la manguera siempre se mantienen y se utilizan conectados; Cuando se utiliza, sólo necesita insertar el extremo de la manguera a la máquina.

Es mejor no desconectar la manguera de los puños con frecuencia; el abuso puede causar daños a los pasadores o a la manguera.

Nota: Cuando viaje con el producto, podría desconectar la manguera de los puños para ahorrar espacio.

Aviso: No tirar de la manguera.

Desconecte la manguera del brazalete sujetando las clavijas para tirar hacia arriba.



ESPECIFICACIONES DE LA BOMBA

Peso: 2,5KG Tamaño: 21 * 25,6 * 22,7Cm Consumo de energía: 14W
Entrada del cargador: AC 220V 240V 50Hz Salida del cargador: 12V, 2A




Antes de usarla


Por favor, compruebe la energía de la batería pulsando el botón de encendido para tratar de poner en marcha el PWTV; si no se puede iniciar, significa que el PWTV está sin batería. Utilice el cargador para cargarlo.

Paso 1: Inserte el enchufe principal de la línea de alimentación en la toma de corriente de 220-240V como se muestra.


Paso 2: Compruebe si la manguera está bien conectada a los **brazaletes**; en caso afirmativo, pase al PASO 3; en caso contrario, introduzca la clavija de la manguera en las salidas de los **brazaletes**.

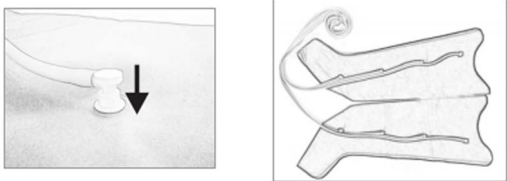

Paso 3: Conecte el extremo principal de la manguera de conexión a la unidad de control como se muestra.

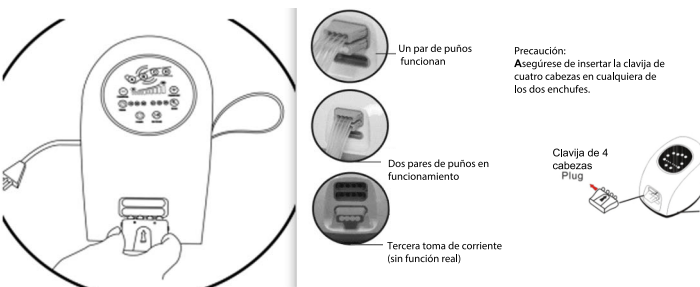

Paso 4: Compruebe y asegúrese de que todas las conexiones a la unidad de control y a los **brazaletes** están bien sellados y herméticos.
Paso 5: Colocar los **brazaletes** en las piernas.

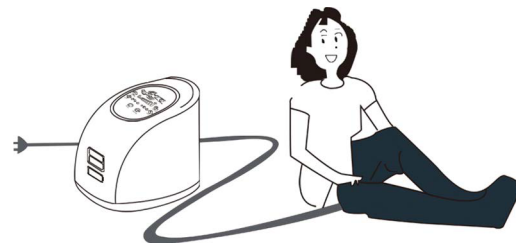

Nota: Es mejor que la unidad de control esté encendida antes de colocar los brazaletes.

Paso 6: Pulsar el botón de encendido POWER ON del panel LED o el botón del mando a distancia ON OFF.

Paso 7: Ajuste la presión pulsando el botón de presión del panel LED - /+ o el botón de presión del mando a distancia.

Nota: para el primer uso, es mejor empezar con la presión no demasiado alta, tal vez 110 o 140mmHg, entonces podría ajustar la presión al nivel que te hace sentir cómodo.

Paso 8: Elija el tiempo pulsando el botón TIMING, pulse **lo y** el tiempo cambiará secuencialmente al siguiente **(15, 30, 45, 60)**.

Paso 9: Elija el modo pulsando el botón MODE; el modo (A,B,C,D) cambiará secuencialmente al siguiente.

Paso 10: Ajuste la posición pulsando 1, 2, 3, 4. Nota: El ajuste original es **el** la luz encendida, lo que significa que todas las cámaras funcionarán; si desea omitir una posición como la posición 1, presione para cerrar la cámara y la luz **se apaga**, significa que la cámara no funcionará. Si necesita reiniciar la cámara, pulse de nuevo para que se encienda. Cuando se infla o desinfla cada cámara, la luz de esa cámara parpadea.

Paso 11: Pulse el botón de encendido/pausa para iniciar. Nota: El estado original del botón de encendido es parpadeante, **cuya** luz es roja; púlselo para iniciar, el dispositivo empezará a funcionar. **PRECAUCIÓN:** NO abra el brazalete cuando la unidad esté encendida. Esto puede causar daños en los brazaletes. Desconecte siempre la alimentación antes de abrir la cremallera de la prenda.

MODOS DE MASAJE: CUATRO TIPOS

MODOS DE MASAJE: CUATRO TIPOS

A: En este modo, sólo se infla una cámara a la vez. Empezando por la cámara 1 y llegando hasta la cámara 4.



B: En este modo, la cámara 1 permanece inflada. Añade gradualmente una cámara hasta que los cuatro canales se llenan de aire.



C: En este modo, las cámaras 1 y 2 se inflan y desinflan a la vez, a continuación las cámaras 3 y 4.



Se infla y se desinfla a la vez. Luego el ciclo se repite.



D: En este modo, todas las cámaras se inflan juntas y se desinflan juntas. Luego el ciclo se repite.