

GADNIC

MANUAL DE USUARIO


Kit Equipo Botas De Presoterapia **AIRCOM02**



AIRCOM02




ACCESORIOS

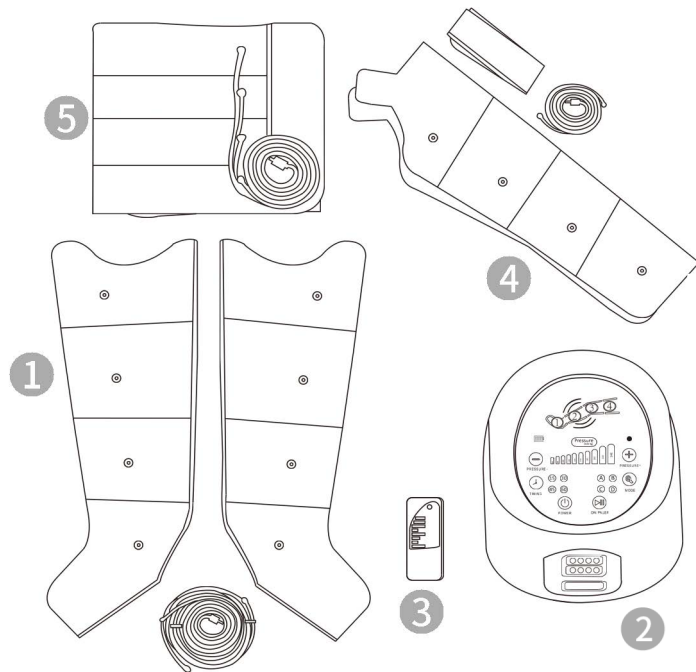


- 1 2 "Puños" (Brazaletes) para las piernas con manguera de conexión
- 2 Unidad principal
- 3 Mando a distancia
- 4 Brazalete para el brazo (OPCIONAL)
- 5 Cinta para la cintura (OPCIONAL)

PANEL DE CONTROL TÁCTIL DE LEDS

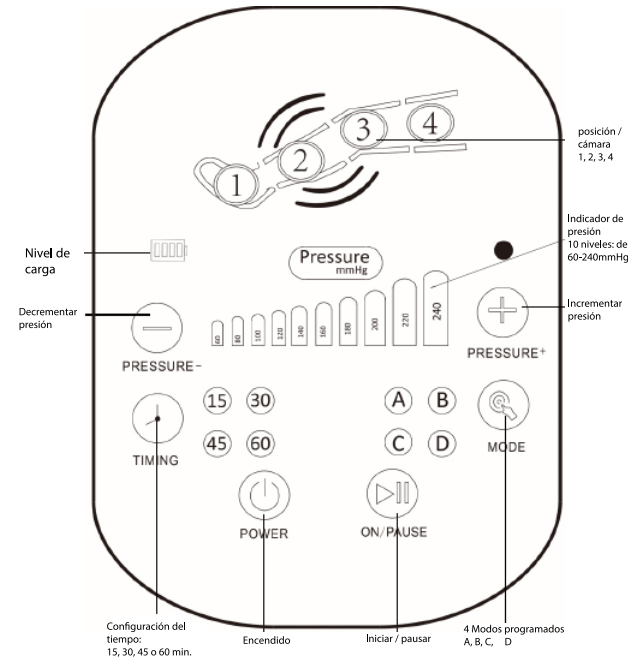

MANDO A DISTANCIA


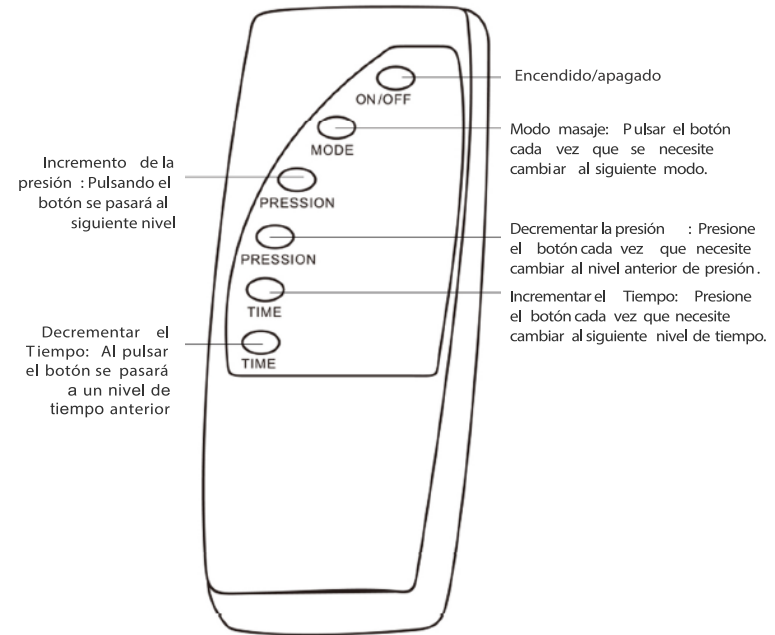


Antes de usarla


Por favor, compruebe la energía de la batería pulsando el botón de encendido para tratar de poner en marcha el PWTV ; si no se puede iniciar, significa que el PWTV está sin batería . U tilice el cargador para cargarlo.

Paso 1: Inserte el enchufe principal de la línea de alimentación en la toma de corriente de 220-240V como se muestra .


Paso 2: Compruebe si la manguera está bien conectada a los **brazaletes**: en caso afirmativo, pase al PASO 3; en caso contrario, introduzca la clavija de la manguera en las salidas de los **brazaletes**.

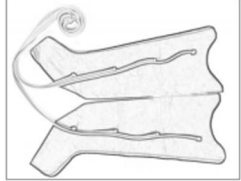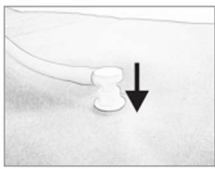

Paso 3: Conecte el extremo principal de la manguera de conexión a la unidad de control como se muestra .

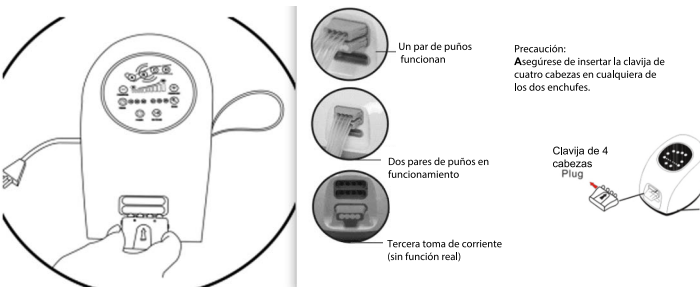

Paso 4: Compruebe y asegúrese de que todas las conexiones a la unidad de control y a los **brazaletes** están bien sellados y herméticos.
Paso 5: Colocar los **brazaletes** en las piernas.

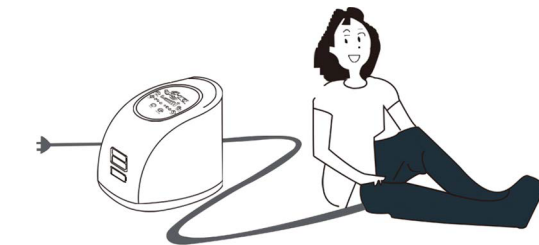

Nota: Es mejor que la unidad de control esté encendida antes de colocar los brazaletes.

Paso 6: Pulsar el botón de encendido POWER ON del panel LED o el botón del mando a distancia ON OFF.

Paso 7: Ajuste la presión pulsando el botón de presión del panel LED - /+ o el botón de presión del mando a distancia.

Nota: para el primer uso, es mejor empezar con la presión no demasiado alta, tal vez 110 o 140mmHg, entonces podría ajustar la presión al nivel que te hace sentir cómodo.

Paso 8: Elija el tiempo pulsando el botón TIMING , pulse **lo y** el tiempo cambiará secuencialmente al siguiente **(15, 30, 45, 60)**.

Paso 9: Elija el modo pulsando el botón MODE ; el modo (A,B,C,D) cambiará secuencialmente al siguiente.

Paso 10: Ajuste la posición pulsando 1, 2, 3, 4 .

Nota: El ajuste original es **el** la luz encendida, lo que significa que todas las cámaras funcionarán; si desea omitir una posición como la posición 1 , presione para cerrar la cámara y la luz **se apaga**, significa que **la** cámara no funcionará. Si necesita reiniciar la cámara, pulse de nuevo para que se encienda. Cuando se infla o desinfla cada cámara, la luz de esa cámara parpadea.

Paso 11: Pulse el botón de encendido/pausa para iniciar.

Nota: El estado original del botón de encendido es parpadeante, **cuya** luz es roja; púlselo para iniciar, el dispositivo empezará a funcionar.

PRECAUCIÓN: NO abra el brazalete cuando la unidad esté encendida. Esto puede causar daños en los brazaletes. Desconecte siempre la alimentación antes de abrir la cremallera de la prenda.

MODOS DE MASAJE: CUATRO TIPOS

MODOS DE MASAJE: CUATRO TIPOS

A:
En este modo, sólo se infla una cámara a la vez. Empezando por la cámara 1 y llegando hasta la cámara 4.



B:
En este modo, la cámara 1 permanece inflada. Añade gradualmente una cámara hasta que los cuatro canales se llenan de aire.



C:
En este modo, las cámaras 1 y 2 se inflan y desinflan a la vez, a continuación las cámaras 3 y 4.



Se infla y se desinfla a la vez. Luego el ciclo se repite.

D:
En este modo, todas las cámaras se inflan juntas y se desinflan juntas. Luego el ciclo se repite.



DESPUÉS DEL USO

Sólo hay que desconectar la manguera de la máquina tirando del extremo principal. Los puños conectados con la manguera siempre se mantienen y se utilizan conectados; Cuando se utiliza, sólo necesita insertar el extremo de la manguera a la máquina.

Es mejor no desconectar la manguera de los puños con frecuencia; el abuso puede causar daños a los pasadores o a la manguera.


Nota: Cuando viaje con el producto, podría desconectar la manguera de los puños para ahorrar espacio.

Aviso: No tirar de la manguera.


Desconecte la manguera del brazalete sujetando las clavijas para tirar hacia arriba.



No tirar de la manguera

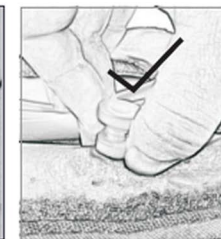

Desconecte la manguera del brazalete sujetando las clavijas para tirar hacia arriba.

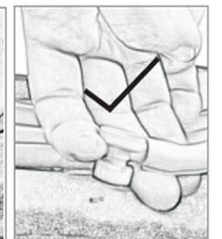

ESPECIFICACIONES DE LA BOMBA

Peso: 2,5KG Tamaño: 21 * 25,6 * 22,7Cm Consumo de energía: 14W

Entrada del cargador: AC 220V 240V 50Hz Salida del cargador: 12V, 2A

