

GADNIC


MANUAL DE USUARIO

BOTAS DE PRESOTERAPIA
AIRCOM03



AIRCOM03

Instrucciones de instalación:

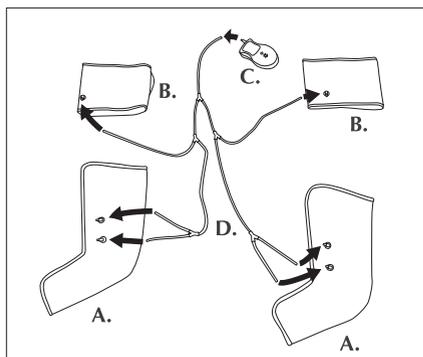


NOTA: Este artículo está destinado a comprimir y estimular suavemente pies, piernas y muslos. Espere al menos cinco minutos para que los masajeadores se inflen por completo para recibir todos los beneficios de la acción de compresión de aire.


Operación:

Úselo sentándose en una silla o recostándose en un sofá o en el piso.

1. Deslice las vendas para las piernas (A) y las vendas para los muslos (B) en su lugar.
2. Conecte A, B y C utilizando los tubos de conexión (D).
3. Conecte el adaptador AC / DC (E) a la unidad de control (C). Asegúrese de que la unidad esté en la posición APAGADA y luego conéctela al tomacorriente.
4. Para encender, presione Power en la unidad de control. La luz indicadora LED se encenderá. Presione nuevamente para apagar.
5. El dispositivo de control bombea aire para masajear suavemente las piernas y los pies. Cuando lo use, tenga siempre la unidad de control a mano. Una vez encendida, la unidad de control comenzará con el ciclo predeterminado que está marcado con un asterisco (*) en el gráfico a continuación. Ajuste a su nivel de comodidad deseado presionando las flechas arriba / abajo.

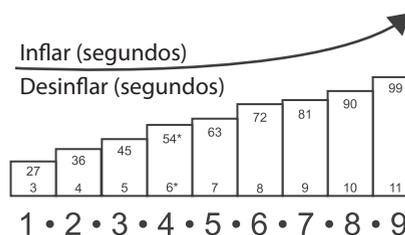

Opcional:

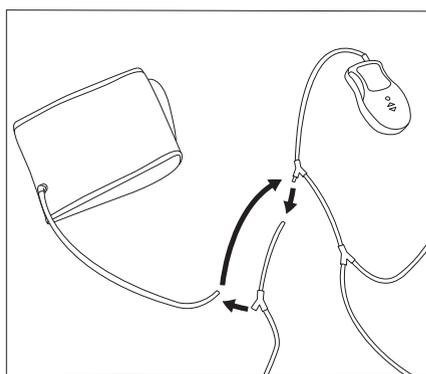

Para usar únicamente las vendas para los muslos, desconecte los tubos que conducen al vendaje para los pies y las piernas. Conecte directamente el tubo que va desde la envoltura del muslo hasta la junta del conector.

Inserción de la batería:

Quite la tapa de la batería en la parte trasera de la unidad de control, deslizando la tapa hacia abajo. Asegúrese de que la unidad esté apagada antes de insertar las baterías. Inserte 4 pilas "AA" (no incluidas) siguiendo las polaridades que se muestran en el interior del compartimento de las pilas. Nota: La instalación incorrecta puede dañar la unidad.

Importante: si opera con baterías, use el mismo tipo de baterías. No mezcle pilas nuevas y viejas, ni alcalinas con no alcalinas. Si estas tienen fugas, deje de usarlo y deseche las baterías de inmediato.

6. Las vendas para piernas (A) y muslos (B) pueden usarse juntas o por separado. Conecte todos los tubos a las juntas del conector como se muestra arriba.
7. Si el dispositivo no se infla correctamente, asegúrese de que el tubo no esté doblado o doblado para evitar el flujo de aire.

Instrucciones de cuidado:

Limpiar suavemente con un paño húmedo. Secar al aire. No blanquear ni limpiar en seco.

SERVITECH

SERVICIO TÉCNICO OFICIAL GADNIC
www.servitech.com.ar

☎ 11 6260 1114 (sólo texto)
serviciotecnico@servitech.com.ar