

# GADNIC

## MANUAL DE USUARIO

Botas de presoterapia  
**ACM6**

### ¿Necesitás ayuda?

Ingresa a nuestro soporte técnico  
escaneando el QR o escribinos por  
nuestros canales oficiales.

 **11 6260 1114 (sólo texto)**  
 **serviciotecnico@bidcom.com.ar**  
 **www.bidcomservice.com.ar**

**Bidcom**  
SERVICE




**AIRCOM06**



Masaje de cintura



Masaje de brazos

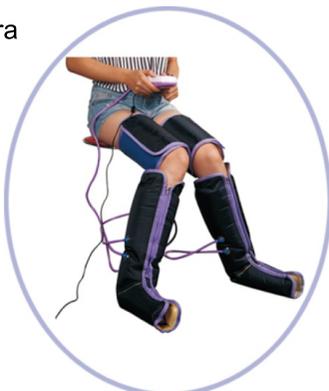

Masaje completo de piernas




### Operación:

- 1, Coloque el masajeador en la parte deseada del cuerpo.
- 2, Conecte correctamente el tubo de aire y el masajeador.
- 3, Conecte la fuente de alimentación y el control correctamente.
- 4, Asegúrese de que el tubo de aire esté liso y que el control esté funcionando normalmente.

### Accesorios del producto:


- A, Masajeador de pies
- B, Masajeador de muslos
- C, Tubo de aire
- D, Control
- E, Adaptador

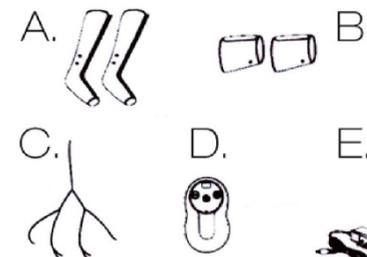

### Identificación del controlador:

Pantalla LED de tiempo / intensidad  
+/- aumentar y disminuir la intensidad

 ENCENDIDO / APAGADO

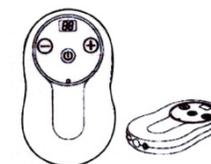

### Instalación y operación:

#### Instalación:

- Conecte el masajeador y el tubo de aire como se muestra a continuación.
- Conecte el control y el tubo de aire como se muestra a la derecha.
- Conecte el control y la fuente de alimentación como se muestra a la derecha.

