

GADNIC

MANUAL DE USUARIO

Botas de presoterapia
ACM6

¿Necesitás ayuda?

Ingresa a nuestro soporte técnico
escaneando el QR o escribinos por
nuestros canales oficiales.

📞 11 6260 1114 (sólo texto)
✉ serviciotecnico@bidcom.com.ar
🌐 www.bidcomservice.com.ar

Bidcom
SERVICE




AIRCOM06



Masaje de cintura



Masaje de brazos

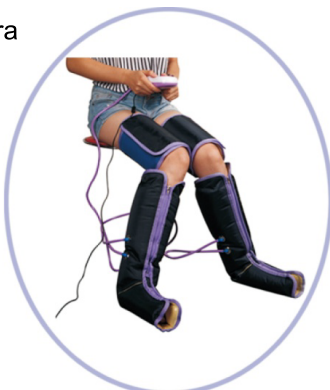

Masaje completo de piernas



Operación:

- 1, Coloque el masajeador en la parte deseada del cuerpo.
- 2, Conecte correctamente el tubo de aire y el masajeador.
- 3, Conecte la fuente de alimentación y el control correctamente.
- 4, Asegúrese de que el tubo de aire esté liso y que el control esté funcionando normalmente.

Accesorios del producto:


- A, Masajeador de pies
- B, Masajeador de muslos
- C, Tubo de aire
- D, Control

E, Adaptador

Identificación del controlador:

Pantalla LED de tiempo / intensidad
+/- aumentar y disminuir la intensidad


ENCENDIDO / APAGADO

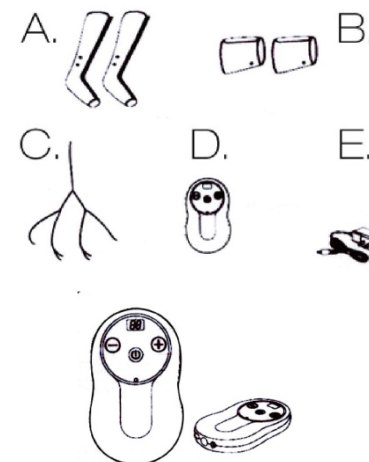

Instalación y operación:

Instalación:

- Conecte el masajeador y el tubo de aire como se muestra a continuación.
- Conecte el control y el tubo de aire como se muestra a la derecha.
- Conecte el control y la fuente de alimentación como se muestra a la derecha.

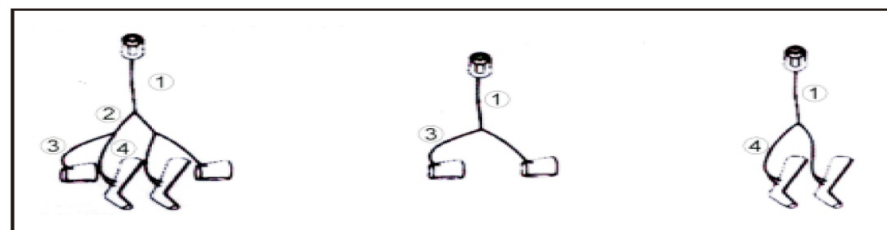

Presiones del producto:

Level	Time(mins)	Max mmHg
9	8	140
8	8	135
7	5	125
6	5	115
5	5	110
4	5	100
3	7	95
2	8	85
1	5	80