


GADNIC

MANUAL DE USUARIO

BALANZA DIGITAL ULTRA FINA

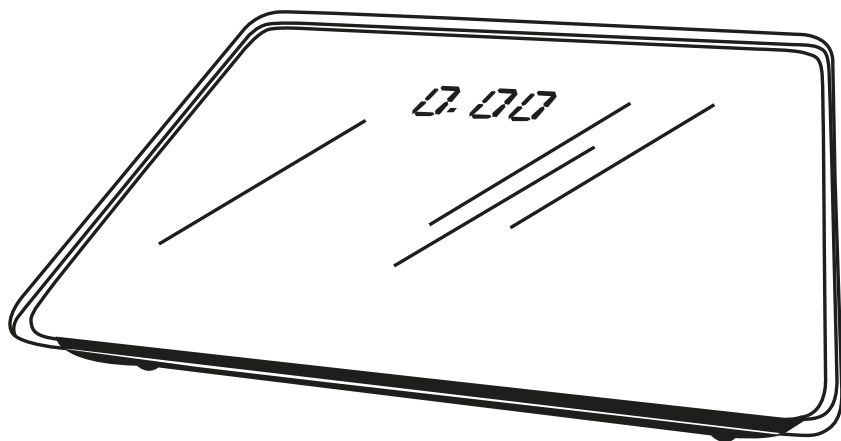

BALANZ16 / BALANZ17

Especificaciones

- ★ Peso inicial :5kg/11lb
- ★ Capacidad : 180kg
- ★ Graduación :50g/0.2lb
- ★ Pantalla :4 dígitos LCD
- ★ Potencia :2x1.5V (AAA) / CR2032 batería de litio
- ★ Temperatura de funcionamiento :5-35 grados Celsius
- ★ Unit : kg / lb
- ★ Apagado automático : 10 segundos
- ★ Indicación de baja tensión : "Lo"
- ★ Pantalla de sobrepeso : "oL"

Instrucciones

- ★ Coloque la báscula sobre una superficie nivelada y súbase a ella cuando el dial indique 0,00 kg.
- ★ Colóquese firmemente en el centro del plato. Cuando el valor del peso es estable, el valor del peso se bloqueará.
- ★ Si abandona el plato y vuelve a subirse a él después del bloqueo, puede volverse a pesar.
- ★ Si no abandona el plato después del bloqueo, el valor de peso en el plato permanecerá invariable durante 10 segundos antes de la desconexión automática.
- ★ Si la balanza muestra "Lo", las pilas están bajas y es necesario cambiarlas.

Atención

- ★ No deje objetos pesados sobre la balanza durante largos periodos de tiempo cuando la balanza no esté en uso.
- ★ Al pesar, procure situarse en el centro de la balanza.
- ★ Manténgase firme sobre la balanza.
- ★ No golpee la báscula con fuerza.
- ★ No utilice la balanza en lugares donde haya agua.
- ★ Las pilas vienen instaladas de fábrica.
- ★ Mantenga la balanza y los pies secos durante el pesaje.



SERVITECH

SERVICIO TÉCNICO OFICIAL GADNIC
www.servitech.com.ar

☎ 11 6260 1114 (sólo texto)
serviciotecnico@servitech.com.ar