

GADNIC

MANUAL DE USUARIO

Balanza
Infantil



BALANZ40

PESABEBÉS 2 EN 1

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

- Desembale cuidadosamente el aparato y tenga cuidado de no tirar ninguna parte del material de embalaje antes de haber encontrado todas las piezas del producto.
- En ningún caso repare o modifique el producto usted mismo. Confíe todas las reparaciones y ajustes a una empresa/servicio especializado. De lo contrario, la garantía podría quedar anulada.
- Almacene y utilice el producto lejos de materiales y sustancias inflamables y volátiles.
- No exponga el producto a calor extremo, luz solar directa o humedad excesiva y NO lo coloque en un entorno demasiado polvoriento.
- No utilice este producto para fines distintos de los previstos.
- Proteja el aparato de golpes con objetos duros, humedad, polvo, productos químicos, artículos de tocador, cosméticos líquidos, grandes fluctuaciones de temperatura y proximidad a fuentes de calor (fuegos abiertos, radiadores).
- Si no va a utilizar este producto durante un periodo de tiempo prolongado, retire las pilas. De lo contrario, podrían derramarse en el interior del producto y causar daños irreparables.
- Manténgase alejado de campos electromagnéticos intensos (por ejemplo, teléfonos móviles), ya que podrían afectar a la precisión de la báscula.

ESPECIFICACIONES

- Plataforma de cristal templado de seguridad de 6 mm
- Modo bebé - capacidad 0 - 20 kg
- Modo niño - capacidad 0 - 100 kg
- División de precisión: 0,01 kg (0 - 20 kg) / 0,05 kg (20,05 - 100 kg)
- Unidad: KG (kilogramo) / LB:OZ (Libra: Onza) disponible
- Bajo consumo eléctrico
- Precisión de pesaje
- Función de tara
- Función de retención
- Indicación de batería baja y sobrecarga
- Gran pantalla LCD con retroiluminación azul: 95-35 mm
- Alimentación: 4 pilas AM (no incluidas)
- Apagado automático y manual
- Temperatura de trabajo: 0°C - 40°C
- Tamaño bandeja: 52°33"7,5 cm



SELECCIÓN DEL MODO DE PESAJE

Esta báscula puede pesar tanto bebés como niños o adultos.

- Puede pesar al niño o al adulto hasta 100 kg sin bandeja.
- Puede pesar bebés de hasta 20 kg en la bandeja.

DESCRIPCIÓN DE PIEZAS

- (1) Plataforma de cristal
- (2) Botón "ON/OFF/TARA"
- (3) Botón "UN/T"
- (4) Botón "MEMOR/A"
- (5) Bandeja
- (6) Compartimento de pilas
- (7) Ranuras centrales
- (8) Ranuras laterales
- (9) Cierre de plástico
- (10) Tornillos

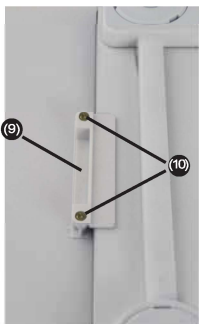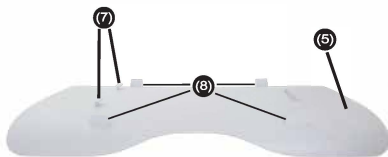

MONTAJE

- Da la vuelta a la bandeja. Hay 4 ranuras de borde en los 4 lados de la bandeja y 2 ranuras de medio lado en un lado de la bandeja. Allí las ranuras se utiliza para fijar la bandeja al cuerpo de la báscula.
- Dé la vuelta al cuerpo de la báscula. Deslice el borde de la plataforma de cristal en las ranuras centrales con un ángulo de 30 grados. Asegúrese de que las 4 esquinas de la plataforma de cristal encajan en las ranuras de los bordes.
- Haga coincidir el sujetador de plástico extraíble con los orificios e instale 2 tornillos para fijar la bandeja a la báscula.
- Cuando la báscula esté montada, compruebe que se encuentra en la posición exacta en todas las direcciones.

SELECCIÓN DEL MODO DE PESAJE

- Coloque la báscula sobre una superficie nivelada y sólida. Coloque las pilas en el compartimento siguiendo la polaridad indicada en el interior del compartimento. Cierre la tapa.

- Pulse el botón "ON/OFF/TARA". La pantalla LCD muestra "0.00kg", la báscula está lista para tomar medidas.
- Pulse el botón "UNIT", puede cambiar la unidad entre "kg", "lb/oz". Seleccione la unidad deseada, la pantalla LCD muestra "0.00". Con la unidad seleccionada.
- Hay tres unidades disponibles: KG (kilogramo) / LB:OZ (Libra: Onza). LB muestra en sólo 1 número digital, OZ muestra en 3 números digitales mientras kilogramo muestra en 4 números digitales.
- Coloque al bebé en la plataforma y se mostrará el peso. Cuando el bebé se mueve mucho, el peso también cambia. Cuando el bebé está más tranquilo, el cambio de peso se hace más lento y finalmente se estabiliza. Cuando la palabra "HOLD" aparece en la parte izquierda de la pantalla LCD, el número de peso parpadea 3 veces y luego el número se bloquea.

FUNCIÓN DE TARA

Si no desea colocar al bebé directamente sobre la superficie de pesaje, sino que prefiere utilizar una toalla y/o cualquier otro elemento que desee descontar durante el pesaje, puede utilizar la función de tara.

- Coloque la toalla sobre la superficie de pesaje, la pantalla LCD mostrará el peso. Si el peso está bloqueado, pulse el botón "ON/OFF/TARE" y la pantalla LCD mostrará "0.00".
- Ponga al bebé en la toalla o manta, el peso del bebé se mostrará en la pantalla.
- Cuando retire al bebé, la pantalla LCD mostrará el peso del bebé con un "-" delante, ya que los datos de peso son negativos en este momento.
- Cuando retire todos los artículos tarados de la báscula, la pantalla LCD mostrará el peso total con un "-" delante.

FUNCIÓN DE MEMORIA

Cuando quiera averiguar el último registro, pulse el botón "ON/OFF/TARE", la pantalla LCD mostrará "0.00". A continuación, pulse el botón "MEMORIA" para visualizar el último registro.

DESCONEXIÓN

Pulse el botón "ON/OFF/TARE" durante 3 segundos, la báscula se apagará. O la báscula se apagará automáticamente después de 2 minutos si el bebé está todavía en la bandeja.

INTRODUCCIÓN A LA VISUALIZACIÓN DE ERRORES

- Cuando la báscula está sobrecargada, aparece "O-LD" en la pantalla.
- Cuando aparece "Lo" en la pantalla, es necesario cambiar las pilas.

MANTENIMIENTO Y ALMACENAMIENTO

- Limpieza: La báscula debe limpiarse con un paño húmedo y un poco de detergente líquido si es necesario.
- No sumerja nunca la báscula en agua ni la enjuague bajo el grifo.
- Almacenamiento: No coloque ningún objeto sobre la báscula cuando no esté en uso.



SERVICIO TÉCNICO OFICIAL GADNIC
www.servitech.com.ar

📞 11 6260 1114 (sólo texto)
serviciotecnico@servitech.com.ar