

# GADNIC

## MANUAL DE USUARIO

### EQUIPO DE CRYOLIPOLISIS REDUCTOR CRYOPAD



CRIOLIPI

## Funcionalidades

Visualización del tiempo

Ajuste del tiempo

Botón de encendido



Correa de ajuste

Al colocar la máquina en el área que desea hacer el tratamiento, se escuchará un sonido "di", cuando se muestra "---- ----" en la pantalla significa que la fuente de alimentación está en estado normal.

Botón de encendido: Pulsar una vez significa que la máquina está encendida (la luz azul se enciende, el tiempo por defecto es de 8 minutos), pulsar una segunda vez, la máquina se apaga (el tiempo muestra "----" y la luz azul se apaga).

Botón de ajuste de tiempo: Sólo cuando la máquina está encendida, puede ajustar el tiempo que necesita, pulsar una vez significa añadir 1 minuto. El botón de pulsación prolongada puede añadir tiempo hasta 30 minutos.

Cuando llegue el tiempo que usted desea, deje de presionar, de lo contrario el tiempo de tratamiento comenzará de 1 minuto a 30 minutos una y otra vez. El tiempo de tratamiento es de 1 - 30 minutos.

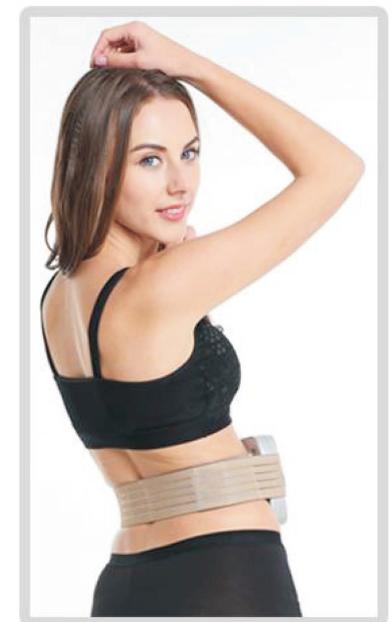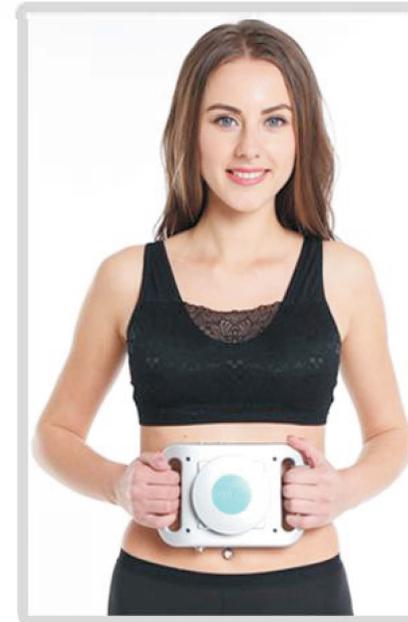

Atención:

1. Contraindicación:

\*Enfermedad de Raynaud (la enfermedad de Raynaud es un trastorno poco frecuente de los vasos sanguíneos, generalmente en los dedos de las manos y de los pies, donde los dígitos muestran una decoloración azulada secundaria a la exposición al frío)

\*Embarazo

\*Dispositivo médico implantado

\*Cirugía reciente en la zona de tratamiento (en el plazo de 1 año)

\*Hernia umbilical o inguinal

\*Sensibilidad al frío

\*Pacientes con hepatitis C

2. Para evitar la congelación, no haga el tratamiento más de 8 minutos en la primera vez .

3. Para asegurar los resultados, por favor no bloquee el área de entrada de aire de ninguno de los lados.

Parámetro:

Área de tratamiento: 98x98mm

Dimensiones del producto: 20cmx13cmx4.4cm

Peso bruto: 1 ,9kg

Voltaje de salida: 12V

Corriente eléctrica de salida: 10A

Tiempo de trabajo automático: 20 minutos, pero el tiempo de tratamiento puede ser ajustado en 20, 40 y 60 minutos manualmente .

Temperatura: Mínimo -2 grados (en la superficie del equipo ), y ajustable según el tiempo de tratamiento para controlar la temperatura.

Ventaja competitiva

Esta pequeña máquina de criolipólisis es muy ligera, con buen precio, bajo consumo , y hacer el tratamiento cuando usted está escuchando música o disfrutar de su propio tiempo después del trabajo duro. No necesita tomar más tiempo en él. Es un diseño estético razonable para la máquina de belleza. Lo que es más, es eficaz y la seguridad para la pérdida de peso.

¿Qué es la criolipólisis?

La criolipólisis es el enfriamiento no invasivo del tejido adiposo para reducir la lipólisis (descomposición de las células grasas) sin dañar otros tejidos. El resultado a lo largo de dos a cuatro meses es una reducción notable y de aspecto natural de la grasa.

¿Cómo funciona la criolipólisis?

La criolipólisis se basa en el principio de que las células grasas son más vulnerables a la extracción de energía (enfriamiento) que los tejidos circundantes. Se coloca un aplicador no invasivo en la zona a tratar para extraer energía del tejido graso subyacente, protegiendo al mismo tiempo la piel, los nervios, los músculos y otros tejidos. Las células grasas enfriadas sufren apoptosis (muerte celular controlada) y se eliminan gradualmente, reduciendo el grosor de la capa de grasa.

¿Cuáles son los resultados?

Los estudios clínicos demuestran que el procedimiento de criolipólisis proporciona una reducción notable y medible de la grasa en pacientes en el transcurso de dos a cuatro meses después del procedimiento. Se pueden administrar procedimientos adicionales entre dos y cuatro meses después del procedimiento inicial para lograr una mayor reducción de la grasa.

¿En qué se diferencia el procedimiento de criolipólisis de otros procedimientos?

El enfriamiento controlado del procedimiento de criolipólisis se dirige a las células grasas y las elimina. Otras modalidades de tratamiento, como el láser, la radiofrecuencia y el itrasonido focalizado, afectan a las células grasas y pueden afectar a otros tejidos adyacentes de una manera u otra .

¿Cuánto duran los resultados?

Los pacientes que experimentan una reducción de la capa de grasa muestran resultados persistentes al menos 5 meses después del tratamiento de criolipólisis. Todavía no se han realizado estudios a más largo plazo. Se sabe que la exposición al frío hace que las células grasas inicien un proceso de eliminación natural, que reduce gradualmente el grosor de la capa de grasa. Las células grasas de la zona tratada se eliminan suavemente a través del proceso de metabolismo normal del cuerpo, como se espera que duren tanto como las células de grasa eliminadas mediante procedimientos invasivos como la liposucción.

Tratar la zona con una sola aplicación al mes.

Puedes tratar varias zonas, pero asegúrese de que sólo trata cada zona una vez, y luego ESPERE 30 días antes de volver a tratarla. No es necesario utilizarlo todos los días para obtener resultados continuos . Los resultados se verán en un plazo de 4 a 8 semanas. Siga estos consejos para obtener resultados óptimos y continuos.

