

LESCOLTON®


FC CE RoHS



MANUAL DE USUARIO

LESCOLTON®

T011C

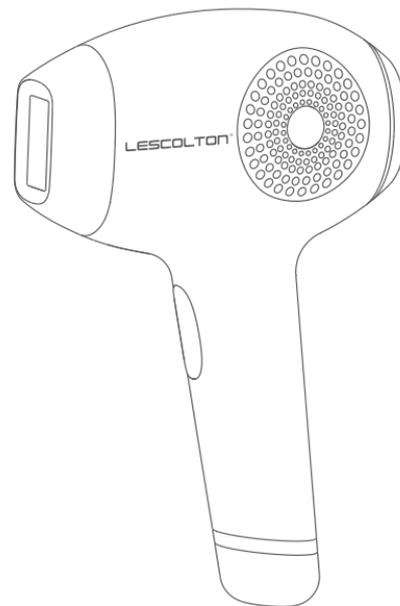

DEPI0002

Descripción general del producto	02
Precauciones de seguridad	03
Introducción a las funciones del teclado	05
Introducción a la visualización de la pantalla	06
Introducción al interruptor de modo de trabajo	06
Modo enfriante/refrescante	07
Test de sensibilidad de piel	08
Pasos para el uso del dispositivo	08
Plan de tratamiento	12
Operación de la función rejuvenecimiento facial	13
Sugerencias para las funciones de durante en el uso	13
Reacciones adversas y tratamiento	14
Piezas incluidas en el empaque	14
Parámetros de especificaciones	15
Solución de problemas	16
Zonas de aplicación.....	17
Preguntas frecuentes	18

Lea atentamente todas las instrucciones y notas y asegúrese de comprenderlas antes de utilizar el dispositivo.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El dispositivo de depilación ICE-Cooling Care (en lo sucesivo denominado dispositivo de depilación) es un producto de belleza que incluye depilación, rejuvenecimiento de la piel y compresas heladas. Con tecnología de luz pulsada “Home” (hogareña), el dispositivo de depilación integra diversas y novedosas tecnologías aplicables al campo de la belleza y la salud, que es uno de los productos más profesionales y prácticos en este campo.

Basado en la tecnología “ice-cool,” el dispositivo de depilación funciona con compresas heladas. Cuando se habilita el modo de cuidado con hielo, puede reducir el calor excesivo generado en la piel por la irradiación de fotones y generar compresas heladas durante la depilación. Puede prevenir eficazmente quemaduras y dolores en la piel, brindando así el cuidado adecuado a su piel. La comodidad y la seguridad del cliente siempre son nuestra prioridad en el diseño del dispositivo de depilación, que se fabrica de acuerdo con altos estándares de calidad.

USUARIOS

El dispositivo de depilación es un instrumento de venta libre que se utiliza para eliminar el exceso de vello en hombres o mujeres adultos. El tratamiento es una terapia totalmente física.

COLORES DE PIEL APLICABLES AL PRODUCTO

Está prohibido el uso para pieles negras. El dispositivo puede ser aplicado en otros tonos de piel. Para la piel morena, se recomienda que se utilice primero el nivel más bajo. Ajustar a un nivel más alto evitando dolores en la piel.

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

CONTRAINDICACIONES

1. Niños y ancianos;
2. Personas con inflamación sistémica;
3. Piel fotosensible y personas que utilizan fármacos fotosensibles;
4. Personas que utilicen un dispositivo de soporte vital, como una máquina electrónica médica implantada (por ejemplo, un marcapasos) y un corazón-pulmón artificial. El producto puede provocar un mal funcionamiento del equipo médico electrónico.

ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD

1. Está prohibido desmontar el dispositivo de depilación sin autorización dado el alto voltaje dentro del producto.
2. Nunca cubra el puerto de ventilación cuando utilice el producto, el cual se utiliza para la radiación de calor y la reducción de temperatura del producto.
3. El producto se debe mantener alejado de la humedad y el agua.
4. No utilice el producto en caso de daños en el enchufe o el cable de alimentación.
5. Está prohibido operar el instrumento en un ambiente inflamable y explosivo.

PRECAUCIONES

1. El producto no se recomienda para mujeres embarazadas o que intentan quedar embarazadas o amamantando, ya que este producto no se ha probado en este grupo de mujeres.
2. El dispositivo no debe utilizarse de forma continua durante más de 25 minutos. Si el área de tratamiento es relativamente grande, se puede dividir en varias veces (asegúrese de apagar el producto y desenchufarlo después de 25 minutos de uso. Continúe usándolo después de 10 minutos).

3. No se recomienda el uso del producto después de haber estado expuesto al sol, o cuando se haya utilizado un bronceador sin sol.

4. No utilice el dispositivo en áreas con tatuajes o manchas negras o grises oscuras. De lo contrario, la piel puede irritarse debido a la absorción de una gran cantidad de energía luminosa.

5. Está prohibido utilizar el producto para las orejas, cuello, pezones, genitales o áreas alrededor del ano, ya que estas zonas son sensibles y muy susceptibles de lesionarse.

6. La irradiación durante cada tratamiento en la misma zona no debe ser superior a 3 veces para evitar causar molestias en la piel debido al calor excesivo.

7. Suspenda el uso del producto si la piel se enrojece o se hincha y la condición persiste por un mínimo de 24 horas. En este caso, póngase en contacto con un médico o consulte a nuestro personal de atención al cliente inmediatamente.

INTRODUCCIÓN DE LA FUNCIÓN DEL TECLADO


Especificación para operaciones de seguridad

1. Está prohibido apuntar la lámpara a partes vulnerables como el ojo. Use gafas protectoras siempre que sea posible. No mire hacia la luz o la luz reflejada de la salida de luz de la lámpara, incluso si usa gafas protectoras.

2. Asegúrese de retirar todos los materiales metálicos, como anillos y pulseras, de su cuerpo antes de usar el producto. De lo contrario, el dispositivo puede fallar.

4. Manténgase siempre alejado de los niños durante el uso del dispositivo. El producto debe guardarse adecuadamente en lugares no accesibles a los niños.


INTRODUCCIÓN A LA FUNCIÓN DEL TECLADO

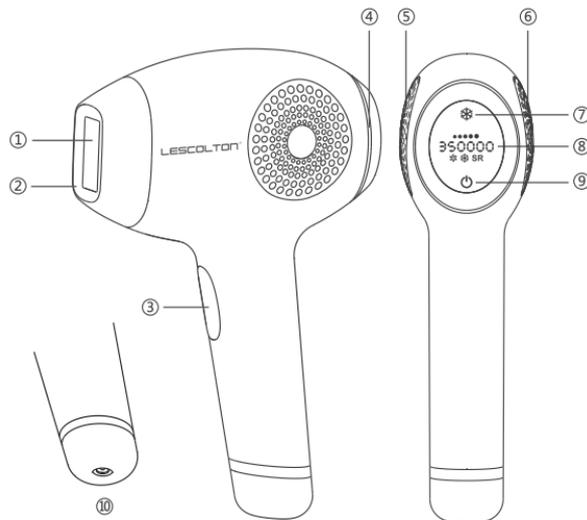

1. Salida de luz
2. Panel de compresión "Ice-cold " (compresas frías)
3. Botón de disparo de luz
4. Luz indicadora de modo "listo"
5. Entrada de aire
6. Salida de aire
7. Botón de cambio de modo de trabajo (depilación / cuidado con compresas heladas / rejuvenecimiento de la piel)
8. Pantalla de visualización
9. Botón de encendido / apagado / ajuste de nivel
10. Entrada de alimentación.

INTRODUCCIÓN DE LA PANTALLA DE VISUALIZACIÓN

Pantalla de visualización después de encender:

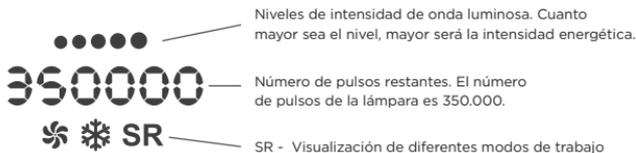

DESCRIPCIÓN DEL INTERRUPTOR DE MODO DE TRABAJO

1. Encienda el dispositivo de acuerdo con los "Pasos de operación", el modo de trabajo se mostrará en la línea inferior de la pantalla. Presione el "Botón de cambio de modo de trabajo" para cambiar.
2. Copo de nieve: Representa que se inicia el modo de "Cuidado de enfriamiento con compresas heladas". SR- Representa que está en el modo de rejuvenecimiento de la piel (Skin rejuvenation). Cuando SR no se muestra en la pantalla: Representa que está en el modo de depilación.

	Dos modos de trabajo (cuidado con compresas de hielo y depilación) se inician al mismo tiempo
	Se inician dos modos de trabajo (cuidado con compresas de hielo y rejuvenecimiento de la piel) al mismo tiempo
	Modo de rejuvenecimiento de la piel
	Modo de depilación


NOTAS IMPORTANTES

1. Después de que el modo de cuidado con enfriamiento de compresas de hielo haya estado funcionando durante un período de tiempo, no se puede cambiar directamente al modo sin enfriamiento con hielo para evitar quemaduras en la piel. Si desea cambiarlo al modo sin enfriamiento con hielo, debe apagar el dispositivo y esperar 20 minutos para disipar el calor, y luego encender el dispositivo para ajustarlo al modo sin enfriamiento con hielo.

2. Después de que se apague el modo de cuidado de enfriamiento con compresas de hielo, el calor se transferirá al panel de la compresa enfriada con hielo. En este momento, mantenga su piel alejada del panel de la compresa helada. Apague el producto y espere 20 minutos para que se disipe el calor.

MODO DE CUIDADO CON COMPRESAS DE HIELO

1. Cuando el dispositivo de depilación está en el modo de emisión de luz manual (el modo predeterminado después del inicio). En los siguientes dos modos de trabajo: , SR puede realizar el cuidado de la compresa de hielo sin presionar el botón de luz de disparo.

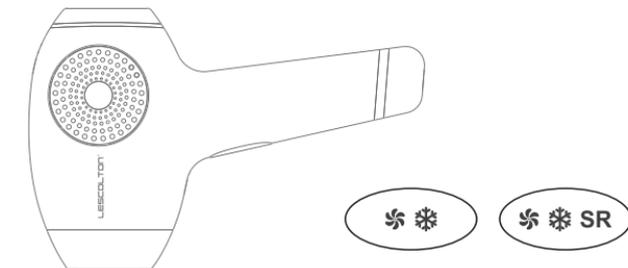

2. Coloque el panel de la compresa helada verticalmente y muy cerca contra su piel, y comience el cuidado de la compresa helada.(Como se muestra en la figura).

NOTAS IMPORTANTES

- En el proceso de cuidado de "compresa helada", es necesario presionar el "botón de ajuste de nivel" una vez dentro de los 5 minutos para mantener el dispositivo de depilación en funcionamiento. De lo contrario, se apagará automáticamente. En este caso, simplemente mantenga presionado el "botón de encendido" durante 2 segundos para iniciarlo.

ANTES DEL PRIMER USO

Por favor, determine qué nivel de energía es adecuado para su piel y en qué área desea eliminar el vello. El dispositivo de depilación le proporciona 5 niveles de energía: nivel 1 (más bajo) a nivel 5 (más alto).

PRUEBA DE SENSIBILIDAD CUTÁNEA

Si usa el dispositivo de depilación por primera vez o lo usa en una nueva área por primera vez. Seleccione un nivel bajo para protegerla y realice una prueba de sensibilidad cutánea de acuerdo con los siguientes requisitos:

1. Encienda el dispositivo de depilación de acuerdo a los "Pasos de operación";
2. Seleccione el nivel inferior (nivel 1 o nivel 2);
3. Realice la prueba en el área de piel seleccionada de acuerdo con las guías de operación y las precauciones de uso mencionadas anteriormente.
4. Inspeccione la reacción de la piel probada al menos 30 minutos después de la prueba cutánea.
5. Si la piel después de los 30 minutos de la prueba está normal, puede continuar usando el instrumento cosmético. Si la piel está enrojecida e hinchada, vuelva a realizar la prueba después de 24 horas.

PASOS DE OPERACIÓN

1. Antes de usar, afeite todo el vello alrededor del área de tratamiento, y límpiela para asegurarse de que el folículo piloso debajo de la piel pueda absorber energía en la mayor medida posible, para lograr el mejor efecto de tratamiento.



2. Coloque el cable en la interfaz de alimentación del dispositivo de depilación.



3. Conecte el enchufe a la toma de corriente, el estado de la pantalla estará en "OFF"



4. Mantenga presionado el "Botón de encendido" durante 2 segundos para iniciar el dispositivo de depilación e ingrese al modo de depilación y cuidado frío de forma predeterminada. Confirme el estado de trabajo actual de acuerdo con la "Introducción de la pantalla de visualización" y la "Descripción del interruptor de modo de trabajo". Presione brevemente el "Botón de cambio de modo de trabajo" para ajustar el modo de trabajo actual.

5. El dispositivo de depilación está provisto de 1 a 5 niveles. El nivel predeterminado después de la puesta en marcha es el nivel 1. Presione brevemente el "Botón de ajuste de nivel" para ajustar los niveles. Comience a usarlo desde el nivel más bajo. Si se siente cómodo, vaya ajustándolo gradualmente a un nivel más alto hasta llegar al nivel correspondiente de acuerdo con la adaptabilidad de su propia piel.

6. Use las gafas de seguridad provistas especialmente para el producto (o gafas de sol con fotoprotección) para evitar daños en los ojos.



7. Ajuste de emisión de luz manual y emisión de luz automática. Emisión de luz manual (se aplica para la depilación en áreas pequeñas). El modo predeterminado es el modo de emisión de luz manual una vez que el dispositivo de depilación está encendido. Presione el botón de luz de disparo “una vez” para que la luz se emita una vez.

Emisión de luz automática (se aplica a la depilación en áreas grandes) Después de encender el dispositivo de depilación, mantenga presionado el botón de luz de disparo durante 2 segundos, el dispositivo enviará continuamente un sonido Tick, Tick, Tick y un tono rápido dos veces, y luego se cambiará al modo de emisión de luz automática. Solo necesita colocar la lámpara contra su piel, el dispositivo emitirá luz automáticamente.

NOTA

Cuando el dispositivo de depilación está en modo de emisión de luz automática, la lámpara no puede tocar el área que no necesita ser tratada y no puede ser tocada por otras personas.


Cambiar el ajuste de emisión de luz manual

Cuando esté en el modo de emisión de luz automática, mantenga presionado el botón de luz de disparo durante 2 segundos, el dispositivo de depilación enviará un tono de aviso “Tick, Tick” una vez, y luego cambiará al modo de emisión de luz manual.

8. Coloque la lámpara cerca de la posición a tratar e intente dejar la lámpara en ángulo recto con la piel:

(1) Cuando el dispositivo de depilación está en el modo de emisión de luz manual, los indicadores de preparación parpadean, presione el botón de luz de disparo para irradiar. Deje que la lámpara cubra el área necesaria a tratar para completar la depilación. Mueva la lámpara a la siguiente área que necesite ser tratada y colóquela nuevamente bien cerca de la piel. Cuando los indicadores de listo parpadeen, presione el botón de luz de disparo para irradiar. Repita estos pasos repetidamente. Se sugiere irradiar cada área 2-3 veces, no más de 3 veces.

(2) Cuando el dispositivo de depilación está en el modo de emisión de luz automática, la luz se emitirá sin presionar el botón de luz de disparo. La lámpara deberá cubrir el área que se necesita tratar para completar la depilación. Mueva la lámpara a la siguiente área que necesite ser tratada y acerquela nuevamente a la piel. El dispositivo de depilación emitirá luz. Se sugiere irradiar cada área 2-3 veces, no más de 3 veces.

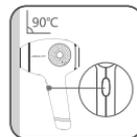

9. Una vez finalizada la operación, mantenga pulsado el botón de apagado durante 2 segundos para apagar el dispositivo de depilación. Cuando el dispositivo de depilación está encendido, se apagará automáticamente si no se realiza ninguna operación en 5 minutos.

10. Extraiga el del adaptador y luego saque el adaptador de la toma de corriente.

11. Utilice un paño húmedo sin alcohol o un paño suave para limpiar la salida de luz de la lámpara cuando la superficie de la lámpara se enfríe después de 20 minutos.

12. Una vez completada la limpieza, vuelva a colocar el dispositivo de depilación y el adaptador en la caja de embalaje. Coloque el dispositivo de depilación en un lugar seco y bien ventilado, y debe mantenerse fuera del alcance de los niños.

13. Cuidado de la piel tratada (depilada)
Después de 20 minutos desde la finalización de la operación, limpie la piel tratada y podrá usar productos hidratantes para el cuidado de la piel para hidratar y reparar la piel tratada. Si se siente incómodo, aplique frío sobre la piel durante 30-60 minutos hasta que la piel ya no sienta dolor ni ardor.

NOTA

- Aplique el gel de aloe vera o un humectante similar en el área después del tratamiento. No aplique cosméticos irritantes de inmediato.
- Antes de la operación, asegúrese de que el área a tratar esté limpia. Se sugiere utilizar agua fría para limpiar la piel.
- La piel tratada no puede tocar el agua durante las 2 horas posteriores a la operación. No tome sol, baños de agua caliente, baño de vapor, etc. dentro de las 48 horas posteriores a la operación.
- Trate de no exponer la posición tratada a la luz solar intensa durante las 2 horas posteriores al tratamiento. Debe usar protector solar antes de las actividades al aire libre. Se sugiere realizar la operación de noche.
- No nade en la piscina con cloro dentro de las 48 horas posteriores al tratamiento.

CURSO DE TRATAMIENTO

Primer Mes	Úselo una vez cada 3-5 días	La apariencia del vello o la piel no cambiará obviamente. Por favor sea paciente. Este resultado es absolutamente de esperar en esta etapa.
Segundo Mes	Úselo una vez por semana	El vello comienza a afinarse y suavizarse gradualmente. Descubrirá que algunos folículos pilosos negros se caen cuando se baña. Empiezan a surgir resultados.
Tercer Mes	Úselo una vez cada 15 días	Puede ver que el vello nuevo básicamente se ha eliminado y no volverá a crecer. Los vellos nuevos se pueden arrancar con facilidad. Solo crecerán algunos pocos.
Cuarto Mes	Úselo una vez cada 30 días	El vello ya casi no crecerá. Se obtiene resultado de una depilación permanente. Tienes una piel perfecta.

OBSERVACIONES

El dispositivo de depilación se utiliza para eliminar el vello de forma permanente según la época. Algunas partes del tratamiento no necesitan mantenimiento. Otras partes del tratamiento deben mantenerse durante diferentes períodos, como 6 meses, 9 meses y 12 meses.

Método de operación de la función de " Rejuvenecimiento de la piel"

- 1) Después de la puesta en marcha, presione brevemente el botón de cambio de modo de trabajo para ajustarlo al modo de trabajo de "rejuvenecimiento de la piel".
- 2) Presione el botón de ajuste de nivel para ajustarlo al nivel 1 y luego alinee la lámpara con el área que requiere el rejuvenecimiento de piel para su irradiación. Se sugiere irradiar cada área una vez y realizar la operación 1-2 veces por semana. Insista en la operación durante 2-3 meses, puede lograr resultados sorprendentes.

Sugerencia sobre el intervalo de aplicación de las distintas funciones

Cada área de su cuerpo solo puede recibir irradiación de fotones para determinada función por día. Si usted quiere aplicar otra función en la misma área, la operación debe realizarse al día siguiente.

REACCIONES ADVERSAS Y TRATAMIENTO

Todas las formas de tratamientos de belleza pueden tener ciertos riesgos. Del mismo modo, si el dispositivo de depilación no se usa correctamente, puede causar efectos secundarios. Los efectos secundarios que pueden ocurrir y las formas de tratamiento sugeridas son los siguientes:

Dolor	Cada persona tiene una tolerancia al dolor diferente debido a una constitución fisiológica. Es raro que se sienta incómodo. Puede experimentar una ligera sensación de ardor, que puede durar como máximo 1 minuto. La mayoría de los adultos y los niños mayores pueden soportar este tipo de molestias.
Enrojecimiento leve o sensación de ardor leve	Es normal. Es porque no se ha realizado la depilación o no se ha eliminado completamente el vello antes de utilizar el instrumento cosmético
Olor a pelo quemado	Es normal. Es porque no se ha realizado el proceso previo o no se ha eliminado el vello por completo antes de utilizar la depiladora.

LISTA DE EMPAQUE

Dispositivo removedor de vello	1	Cable Adaptador	1
Catálogo de especificaciones	1	Gafas de Seguridad	1

ESPECIFICACIONES

Modelo	T011C
Dimensiones	211x138x60mm
Área de irradiación	3,6cm ²
Fuente de alimentación	Entrada: 100-240V AC-50 / 60HZ Salida: DC 24V --- 1.9A
Potencia	40W ±L5W
Peso	320g
Entorno operativo	Temperatura: 5-40 ° C Humedad relativa: 20-90%, sin condensación
Entorno de almacenamiento y transporte	Temperatura: -20 - 55 ° C Humedad relativa: 5-95%, sin condensación

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

PROBLEMA	DESCRIPCIÓN	SOLUCION
La pantalla no enciende	El cable de alimentación no está conectado correctamente.	Conecte el cable de alimentación
Fallo de inicio	El botón de encendido no se ha mantenido presionado durante más de 2 segundos	Al comenzar, asegúrese de mantener presionado el botón de encendido durante al menos 2 segundos.
La luz no se emite cuando se presiona el botón de luz de disparo	1. La lámpara no toca la piel. 2. El almacenamiento de energía eléctrica no se ha completado. Los indicadores de disponibilidad (listo) no parpadean.	1. Vuelva a tocar la piel. 2. Espere hasta que los indicadores de disponibilidad hayan parpadeado y luego presione el botón.
Apagado automático	El dispositivo se apaga automáticamente si no se emite luz en 5 minutos	Mantenga presionado el botón de encendido durante 2 segundos para iniciar el dispositivo.

ZONAS DE APLICACIÓN



PREGUNTAS FRECUENTES

P: ¿Cuál es el modo de depilación? ¿Cuál es el modo de rejuvenecimiento de la piel?

R: Presione el botón "Interruptor de modo de trabajo", cuando la pantalla muestra SR es el modo de rejuvenecimiento de la piel. Cuando la pantalla de visualización no muestra SR, es el modo de depilación

P: ¿Qué nivel es más adecuado?

R: No hay un estándar uniforme para esto. Depende de la resistencia de la piel de cada persona (cuanto más oscura es la piel, se debe usar el nivel más bajo). Debe comenzar a usar el dispositivo desde el nivel inferior y luego usar el nivel superior gradualmente. Cuanto mayor sea el nivel, mayor será la energía, el efecto de uso será más obvio y el período de depilación se acortará en consecuencia. Por el contrario, se usa el nivel más bajo, el periodo de depilación se retrasa proporcionalmente. Se sugiere realizar una prueba de irradiación en una pequeña parte de la piel de 1 a 3 veces antes de la depilación en cada posición.

P: ¿El ajuste de nivel se aplica también al modo "compresa de hielo"?

R: El ajuste de nivel es solo para la intensidad de la energía y no tiene ningún efecto sobre el efecto cuidado de hielo.

P: ¿Se requiere afeitarse antes de cada operación?

R: No es necesario. Cuando use el dispositivo por primera vez, el vello más grueso debe afeitarse una vez. Cuando el vello haya crecido hasta aproximadamente 3 mm y los resultados se vean afectados, el vello debe volver a afeitarse una vez.

P: ¿Por qué se produce un olor a cabello quemado después de usar el dispositivo?

R: Los vellos no se han afeitado completamente durante el uso. La melanina interactúa con la onda de luz para generar calor. Por lo tanto, se producirá un olor a cabello quemado. Es normal.

P: ¿Por qué no se eliminan mis vellos inmediatamente después de la irradiación?

R: Es un sistema depilatorio permanente. Los vellos no se pueden eliminar de forma permanente hasta que haya utilizado el dispositivo durante un período. Solo puede reprimir el crecimiento del cabello y ralentizar la velocidad de crecimiento del vello al principio. El vello entra en estado de supresión bajo una acción continua. Así, se consigue un efecto de depilación permanente.

P: ¿Es doloroso?

R: Durante el uso del dispositivo de depilación, la onda de luz generará calor cuando interactúa con la melanina. Por lo tanto, se producirá un ligero dolor. La sensibilidad de la piel de cada persona es diferente, la tolerancia al dolor es diferente. Por lo tanto, la sensación de todos es diferente. Si siente dolor, puede comenzar desde el nivel más bajo y luego usar el nivel más alto gradualmente para permitir que su piel se adapte a él.

P: He usado el dispositivo varias veces. ¿Por qué el efecto en mi piel no es tan bueno como el de otras personas o no se logra ningún efecto?

R: La constitución de cada persona es diferente. El vello varía en grosor y color. El dispositivo se utiliza en diferentes áreas. Por lo tanto, los períodos de efecto de uso son naturalmente diferentes. El período de uso es un promedio.

El período detallado puede ser ligeramente diferente. Si no se ha logrado ningún efecto después de haber utilizado el dispositivo durante más de un mes, asegúrese de contactarnos. Seguramente, no ha operado el dispositivo correctamente.

P: ¿Cómo depilar el vello? ¿Qué vello se deben afeitar?

R: El vello de las axilas y el vello en áreas como la línea del bikini deben afeitarse antes de usar el dispositivo (se sugiere afeitar el vello con una longitud de más de 1 cm). Antes de afeitarse el vello, se sugiere utilizar los dos métodos siguientes para eliminar el vello con mayor facilidad:

Lubrique la posición que se va a afeitar con espuma de afeitar o un jabón de ducha suave;

O use una toalla caliente para cubrir el área a afeitar durante unos minutos y luego afeite suavemente el vello. De esta forma, es más fácil eliminar los pelos.

P: Quiero eliminar el vello más rápidamente. ¿Puedo usar el dispositivo todos los días?

R: No se sugiere usar el dispositivo todos los días. El cabello tiene un ciclo de crecimiento. Solo necesita usar el dispositivo según el ciclo de uso normal. Puede usar el dispositivo una vez cada 3-5 días durante el primer mes. Una vez que la velocidad de crecimiento del cabello se reduce y el efecto es visible, puede reducir gradualmente los tiempos de uso.

Selección de función: lugar de operación

P: ¿Por qué mi piel se enrojece y aparecen pequeñas manchas rojas después de haber usado el dispositivo?

R: Es porque la piel se lastima al afeitarse demasiadas veces para hacer muchas pruebas. Se sugiere utilizar los siguientes dos métodos para eliminar el vello con mayor facilidad:

Lubrique lel área que se va a depilar con espuma de afeitar o un jabón de ducha suave;

O use una toalla caliente para cubrir el área a depilar durante unos minutos y luego afeite suavemente el vello. De esta manera, su piel no se lastimará. Es mejor usar la afeitadora eléctrica para afeitarse el vello si es posible. Se lo puede testear en un área sin afeitarse para ver si se produce este tipo de situación.

P: ¿Por qué no puedo ver resultados después de haber usado el dispositivo varias veces?

R: Las áreas tratadas con el dispositivo son diferentes y el grosor del vello es diferente. Por lo tanto, el efecto será diferente. En general, el vello de las axilas y la barba de los hombres son más difíciles de eliminar debido a la hormona sexual masculina y al gen, los resultados se verán más lentamente. El efecto de uso también está relacionado con el nivel de uso. El efecto de depilación permanente se logrará siempre que insista en usar el dispositivo.

Selección de función: Depilación Rejuvenecimiento de piel

Nro. Serie	Fecha	Observación
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		

Selección de función: Depilación Rejuvenecimiento de piel

Nro. Serie	Fecha	Observación
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		

Selección de función: Depilación Rejuvenecimiento de piel

Nro. Serie	Fecha	Observación
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		

Selección de función: Depilación Rejuvenecimiento de piel

Nro. Serie	Fecha	Observación
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		

Selección de función: Depilación Rejuvenecimiento de piel

Nro. Serie	Fecha	Observación
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		

Selección de función: Depilación Rejuvenecimiento de piel

Nro. Serie	Fecha	Observación
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		