


LESCOLTON®

FC CE RoHS 

LESCOLTON® MANUAL DE USUARIO

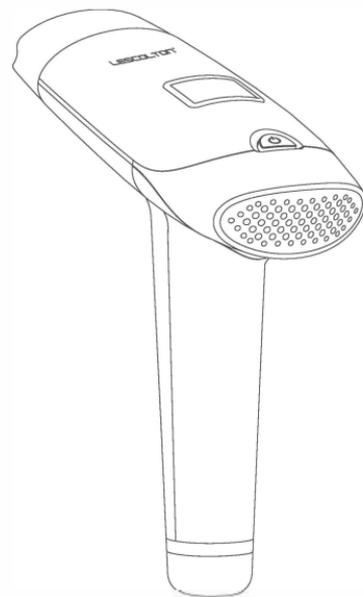

T009i

Contents

| | |
|--|----|
| Introducción del producto..... | 02 |
| Precaución de seguridad | 03 |
| Estructura del producto | 05 |
| Presentación de la pantalla LCD | 06 |
| Prueba de sensibilidad cutánea | 06 |
| Cómo utilizar..... | 07 |
| Curso del tratamiento..... | 11 |
| Sustitución de la lámpara..... | 12 |
| Método de funcionamiento de la función de rejuvenecimiento de la piel..... | 12 |
| Intervalo recomendado utilizando las funciones HR/SR | 13 |
| Reacciones adversas y contraindicaciones..... | 13 |
| Lista de embalaje | 14 |
| Especificaciones | 14 |
| Tabla de resolución de problemas sencillos | 15 |
| Emplazamiento adecuado | 16 |
| Preguntas más frecuentes | 17 |
| Tabla de registro de operaciones | 20 |
| Tarjeta de garantía | 21 |

Presentación del producto

El instrumento cosmético multifuncional de la salud de LESCOLTON es un dispositivo multifuncional innovador, con la función del retiro del pelo, rejuvenecimiento de la piel, tratamiento del acné y así sucesivamente. Es uno de los productos más profesionales y prácticos en este campo.

Antes de utilizarlo, lea atentamente las instrucciones.

El diseño de instrumentos cosméticos LESCOLTON siempre ha tenido como la comodidad y la seguridad del cliente como condición previa, la producción en Por favor, lea y comprenda todas las instrucciones y precauciones antes de usar el producto.

Grupo adecuado

Indicado para hombres y mujeres que deseen eliminar el vello sobrante. El tratamiento es una terapia totalmente física.

Piel adecuada

Las personas de piel morena deben empezar con el nivel más bajo y luego ajustar el nivel adecuado en función de la adaptabilidad de su piel.

Precaución de seguridad

1, Contraindicaciones

No utilizar bajo ninguna de las siguientes condiciones

- Niños y ancianos;
- Personas con inflamación local y sistémica; personas con piel fotosensible y personas que utilizan fármacos fotosensibles;
- Usuarios de dispositivos médicos electrónicos implantados (por ejemplo, marcapasos cardíaco) y sistemas de soporte vital (por ejemplo, máquina de circulación extracorpórea), que pueden provocar errores en el funcionamiento de los dispositivos médicos electrónicos.

2, Consideraciones

- No se recomienda el uso del producto a mujeres embarazadas o que estén intentando quedarse embarazadas o en período de lactancia, ya que este producto no ha sido probado en este grupo de mujeres.
- No se recomienda el uso inmediato del producto a personas que tomen el sol, se bronceen en cama solar o utilicen productos de belleza bronceadores sin sol. Si no está seguro de si su piel se ha bronceado o quemado, le sugerimos que realice una prueba de sensibilidad cutánea y espere 24 horas.
- No utilice el producto directamente hacia los tatuajes, manchas marrones oscuras y negras ya que pueden absorber una gran cantidad de luz, causando molestias en la piel.
- Está prohibido utilizar el producto alrededor de los ojos, el cuello, los pezones, los genitales o el ano, ya que la piel de estas zonas es relativamente sensible y especialmente vulnerable.
- No lo aplique sobre la misma zona durante demasiado tiempo ni lo aplique sobre la misma zona muchas veces, de lo contrario puede producir demasiado calor, haciendo que la piel se sienta incómoda.

- Si la piel aparece enrojecida e hinchada y dura más de 24 horas después de utilizar el producto, deje de hacerlo para ponerse en contacto con su médico o consultar con el servicio de atención al cliente.



3. Advertencia de seguridad

- Alta tensión en instrumento cosmético. No desmontar.
- No bloquee las rejillas de ventilación durante el uso. Sirven para refrigerar el producto.
- No permita que el agua o cualquier humedad en el equipo.
- No utilice el instrumento cuando el enchufe o el cable estén dañados.
- Se prohíbe el uso del instrumento en condiciones inflamables o explosivas.

4. Reglamento de funcionamiento de seguridad

- No apunte la lámpara hacia partes vulnerables, como los ojos, cuando emita luz. Utilice un protector ocular.
- No mire directamente a la luz emitida por la lámpara ni a la luz reflejada aunque lleve protector ocular.
- Antes de usarla, asegúrese de que se ha quitado todos los objetos metálicos, como anillos, pulseras, etc., para evitar un mal funcionamiento del equipo.
- Mantenga el aire circulando en la habitación.
- Utilice el producto lejos de los niños. Manténgalo fuera del alcance de los niños después de su uso.

Estructura del producto

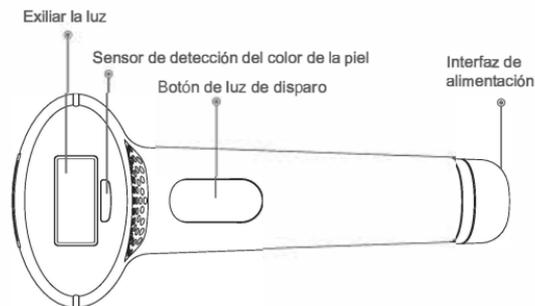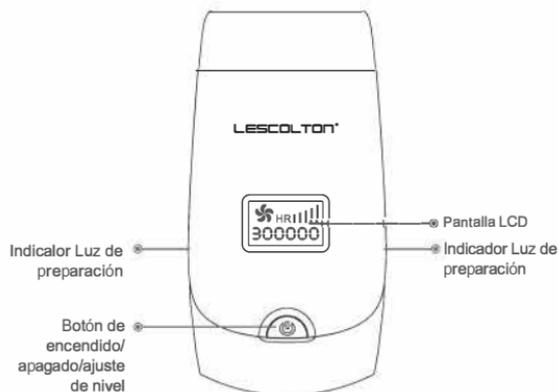

Introducción de la pantalla LCD



| Datos visualizados en la pantalla LCD | Función | Parámetro |
|---------------------------------------|---|----------------|
| HR | Eliminación del vello | 300,000 Pulsos |
| SR | Rejuvenecimiento cutáneo/ Tratamiento del acné | 100,000 Pulsos |
| Número | El número de impulsos restantes | / |
| Columna de energía | Nivel de intensidad luminosa | 1-5 nivel |

Prueba de sensibilidad cutánea

Si es la primera vez que utiliza el producto, o la primera vez que lo utiliza en una zona nueva, elija en primer lugar una pequeña zona para realizar la prueba de sensibilidad cutánea siguiendo las siguientes instrucciones

1. Encienda el instrumento cosmético siguiendo las instrucciones que se muestran más adelante.
2. Elija el nivel bajo, 1er o 2do nivel.
3. Realice la prueba en la zona elegida siguiendo las instrucciones de funcionamiento y prestando atención.
4. Compruebe el estado de la piel transcurridos 30 minutos.
5. Si la piel de la zona probada está normal, puede seguir utilizando el producto.
6. Si aparecen hinchazones rojas en la piel, espere 24 horas y vuelva a realizar la prueba.

1. Antes de usar, afeite todo el vello alrededor de la zona de tratamiento. Limpie y enjague la zona de tratamiento para maximizar la cantidad de energía que absorben los folículos pilosos y conseguir así el mejor efecto de tratamiento.



2. Inserte el enchufe del adaptador de CA en la toma del adaptador del instrumento cosmético.




3. Conecte el adaptador de CA a una toma de corriente para encender la luz de fondo de la pantalla LCD, que se apagará.



4. Mantenga pulsado el botón de encendido durante 2 segundos para encender el instrumento cosmético.

- El instrumento tiene 5 niveles (1-5), pulse brevemente el botón de ajuste de nivel para ajustar el nivel. Comience a utilizarlo con el nivel más bajo y luego aumentelo gradualmente si se siente bien. Ajuste el nivel de acuerdo con la adaptabilidad de su propia piel.
- Utilice el protector ocular exclusivo del producto (gafas de sol normales) para evitar daños en los ojos.

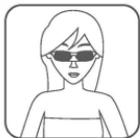

7. Ajuste de la emisión de luz manual y de la emisión de luz automática

Ajuste de la emisión de luz manual

El ajuste por defecto es la emisión de luz manual, es decir, que brillará una vez con una pulsación en la pantalla. (adecuado para la depilación de áreas pequeñas).

Ajuste de la emisión de luz automática

Después de arrancar el aparato, pulse durante 2 segundos el botón de luz de disparo y el aparato emitirá 2 pitidos continuos, indicando que ha cambiado a emisión de luz automática.

Basta con acercar la lámpara a la piel para que el aparato se ilumine automáticamente. (adecuado para la depilación de grandes áreas)

Atención Cuando el instrumento cosmético está en emisión de luz automática, tenga cuidado de evitar que cualquier otra área esté expuesta a la lámpara y nunca deje que otras personas toquen la lámpara.

Cambie a emisión de luz manual

Cuando el instrumento estético esté en emisión de luz automática, pulse el botón de la luz de disparo durante 2 segundos, entonces el instrumento estético emitirá un pitido, indicando que ha cambiado a emisión de luz manual.

8. Sujete la lámpara cerca de la zona de depilación, manteniendo la lámpara en ángulo recto con la piel en la medida de lo posible

1) Cuando el instrumento de belleza esté en emisión de luz manual, pulse el botón del foco para irradiar cuando la luz indicadora de listo parpadee y la zona cubierta por la lámpara haya terminado de depilarse. A continuación, mueva la lámpara a la siguiente zona de tratamiento de modo que quede cerca de la piel y, cuando parpadee la luz indicadora de preparado, pulse el botón del foco para irradiar. repita estos pasos. Se recomienda irradiar una zona de 2 a 3 veces.

2) Cuando el aparato de belleza está en auto-iluminación, el aparato se ilumina automáticamente, por lo que no es necesario pulsar el botón del foco y la zona cubierta por la lámpara ya está depilada. A continuación, la lámpara se desplaza a la siguiente zona de tratamiento para que se adhiera a la piel y el aparato se iluminará automáticamente. repita estos pasos. Se recomienda irradiar una zona de 2 a 3 veces.

Consejo Cuando el aparato está en auto-iluminación y la lámpara está pegada a la piel sin moverse, el aparato brillará hasta 8 segundos.



9. Cuando haya terminado de utilizar el instrumento, mantenga pulsado el botón de apagado durante 2 segundos para apagarlo. Si no hace nada, el instrumento se apagará automáticamente en 5 minutos.

10. Desenchufe el adaptador y retírelo de la toma de corriente.

11. Después de 10 minutos, cuando la bombilla se haya enfriado, limpie la salida de luz de la bombilla con un papel húmedo sin alcohol o un papel suave.

12. Después de la limpieza, introduzca el aparato de belleza y el adaptador en la caja. A continuación, coloque la caja en un lugar ventilado y seco, lejos del alcance de los niños.

13. Cuidados de la piel tratada

Después de 20 minutos, limpie la piel tratada. Puede elegir un producto hidratante para nutrir y reparar la piel tratada, o aplicar una compresa fría sobre la piel si se siente incómoda.

durante 30-60 minutos hasta que la piel deje de tener sensación de quemazón.

Precauciones:

1- Aplicar gel de aloe vera o producto tipo hidratante sobre la piel tratada. No utilice inmediatamente cosméticos irritantes.

2- Asegúrese de que la piel tratada está limpia antes del tratamiento. Se recomienda utilizar agua hervida fría para limpiar la piel.

3- La piel tratada no debe mojarse con agua durante las 2 horas posteriores al tratamiento. Durante 48 horas no se debe tomar el sol, baños calientes, baños de vapor, etc.

4- Evite exponer la piel tratada a la luz solar intensa durante las 2 horas posteriores al tratamiento. Tome medidas de protección solar antes de realizar actividades al aire libre. Es mejor tratarse por la noche.

5- No nade en una piscina desinfectada durante las 48 horas posteriores al tratamiento.

6- Si se ignoran las advertencias anteriores, el uso del dispositivo puede provocar enrojecimiento de la piel, hinchazón y decoloración de la piel a corto o largo plazo.

7- No pulse el botón del foco continuamente, la luz brillará cuando se pulse el botón del foco una vez. Se recomienda iluminar una zona 2 ó 3 veces. (Toda el área de la luz cerca de la piel es un lugar)

8- No utilice el aparato de forma continuada durante más de 25 minutos. Si la zona a tratar es grande, puede repartirse en varias sesiones. (Desconectar después de 25 minutos de uso, hacer una pausa de 10 minutos para poder continuar).

Curso del tratamiento

Primer mes (una vez cada 3-5 días).

El aspecto de su cabello y piel no cambiará. Tenga paciencia, los resultados le sorprenderán.

Segundo mes (una vez a la semana)

El cabello se volverá fino y suave. Verá cómo se desprenden folículos pilosos negros en la ducha. La sorpresa está a la vuelta de la esquina.

Tercer mes (cada 15 días)

Se inhibe el crecimiento de nuevos cabellos. Ya no rebotan. Pueden arrancarlos suavemente. Sólo crece un pequeño número de pelos en la zona.

Cuarto mes (cada 30 días)

Sin vello. Ha eliminado todo el vello para siempre en el momento del tratamiento.

Siempre tendrás una piel perfecta. Durante el tratamiento, el dispositivo de belleza LESCOLTON te ayudará a eliminar el vello de zonas específicas. Algunas zonas de tratamiento no requieren recuperación, otras requieren un seguimiento de mantenimiento durante un periodo de tiempo determinado.

Estos incluyen 6 meses, 9 meses y 12 meses.

Sustitución de la lámpara

Cuando el número de impulsos restantes que aparece en la pantalla LCD es "0", significa que la vida útil de la lámpara se ha agotado. Debe sustituirla por una lámpara nueva.

1. Mantenga pulsado el botón durante 2 segundos para apagar el aparato y, a continuación, desconecte el cable de alimentación.
2. Sujetando la parte superior del mango con una mano y la lámpara con la otra, extraiga la lámpara vieja e inserte la nueva.
3. Sustituya la lámpara con una función diferente siguiendo el mismo procedimiento.
 - Después de sustituir las lámparas con diferentes funciones, la pantalla LCD mostrará diferentes palabras que representan las diferentes funciones, por ejemplo, Depilación: HR, regeneración de la piel/tratamiento del acné: SR.



Método de funcionamiento de la función de rejuvenecimiento de la piel

1. Inserte la lámpara SR. Si aparece SR en la pantalla LCD, la lámpara está instalada.
2. Pulse el botón de ajuste de nivel, ajuste al nivel 1 y dirija la lámpara a la zona a rejuvenecer a distancia. Se recomienda irradiar cada zona a distancia una vez, y hacerlo 1-2 veces por semana. Después de 2-3 meses de tratamiento persistente, podrá ver resultados visibles.

Intervalo recomendado utilizando las funciones HR/SR

Para irradiar la misma zona con el mismo fotón en un día. Si quieres irradiar la misma zona con otro tipo de fotón, entonces debes esperar hasta el día siguiente.

Reacciones adversas y medidas para contrarrestarlas

Todos los métodos cosméticos conllevan algunos riesgos. Este producto no es una excepción. A continuación se enumeran las reacciones adversas y las soluciones correspondientes:

1. Dolor

Como las personas tienen diferentes tipos de cuerpo, pueden experimentar diferentes niveles de dolor. Es raro que un usuario experimente molestias. Si se siente una ligera sensación de quemazón, ésta puede durar bastante más de un minuto, lo cual es tolerable para la mayoría de los adultos y niños mayores.

2. Ligero enrojecimiento o sensación de quemazón en la piel

Se trata de una reacción normal. En la mayoría de los casos, esta molestia desaparecerá rápida y espontáneamente. Sin embargo, si tarda más de 24 horas, debe consultar al servicio de atención al cliente.

3. Olor a pelo quemado

Esto indica que no se ha afeitado todo el vello antes del uso. Esto es normal.

Lista de embalaje

| | | | |
|-----------------------------|--|------------------|-------|
| Unidad principal | 1 PCS | Adaptador | 1 PCS |
| Lámpara de depilación | 1 PCS: Lente amarilla | Protector ocular | 1 PCS |
| Rejuvenecimiento de la piel | 1 PCS: Lente roja (lámpara de regalo o compra) | Instrucciones | 1 PCS |

Especificación

| | |
|-------------------------------|---|
| Nº de modelo | T009i |
| Tamaño de la unidad principal | 182×78×151mm |
| Potencia | <36W |
| Alimentación | Entrada: 100-240V ~ 50/60Hz Output: 24V === 1.5A |
| Peso de la unidad principal | 0.32KG |
| Peso bruto | 1.1KG |
| área de radiación | 4cm ² |
| Entorno exterior | Temperatura: -20-60°C Humedad relativa: 20-90% sin condensación de humedad |
| Masa de la unidad principal | Un año de garantía para la unidad principal |

Tabla de resolución de problemas sencillos

| Nombre | Explicación | Método de tratamiento |
|---|--|---|
| La pantalla no muestra nada | El instrumento no está conectado correctamente con la fuente de alimentación. | Conecte correctamente el instrumento con el cable electrónico. |
| No se puede encender el instrumento | 1. No ha pulsado correctamente el botón de encendido; 2. No ha pulsado el botón de encendido durante 2 segundos. | Mantenga pulsado el botón de encendido durante al menos 2 segundos al encender el aparato. |
| HR SR mostrado en la pantalla LCD parpadea | La lámpara no se ha instalado correctamente | Vuelva a instalar la lámpara (apague el instrumento y desenchufe el cable de alimentación mientras sustituye la lámpara). |
| No se emite ninguna luz mientras se pulsa el botón de disparo de luz. | 1. La lámpara no está en contacto con la piel. 2. Se ha agotado el tiempo de iluminación de la lámpara. 3. El proceso de carga ha finalizado antes de que se encienda la luz de preparado. | 1. Haz que la lámpara toque la piel. 2. Sustituya la lámpara 3. Pulse el botón de la luz de disparo hasta que se enciendan los indicadores de disponibilidad. |
| Apagado automático | Si no hace nada, el aparato se apagará automáticamente al cabo de 5 minutos. | Pulsación larga On bullan far 2 segundos |

Sitio adecuado



Preguntas frecuentes

P: ¿Cuáles son las funciones de las distintas lámparas de colores?

R: La lámpara amarilla se utiliza para la depilación y la roja para el rejuvenecimiento de la piel.

P: ¿Es necesario depilarse antes de cada intervención?

R: No necesariamente. Cuando utilice el aparato por primera vez, deberá afeitarse una vez el vello más grueso. Cuando el vello crece hasta aproximadamente 3 mm, la eficacia del uso se ve comprometida y el vello debe afeitarse una vez más.

P: ¿Por qué no se elimina el vello inmediatamente después de la irradiación, o no se producen cambios en el vello después de la irradiación?

R: Se trata de un producto de depilación permanente. El vello no se elimina de forma permanente hasta después de haber utilizado el aparato durante un periodo de tiempo. Sólo inhibe el crecimiento del vello al principio y ralentiza su crecimiento. Bajo la acción continua, el vello se duerme. Por lo tanto, se puede conseguir una depilación permanente.

P: He utilizado el aparato varias veces. ¿Por qué los resultados de mi piel no son tan buenos como los de otros, o no consigo resultados?

R: El tipo de cuerpo de cada persona es diferente. El grosor y el color del vello varían. El aparato se utiliza en lugares diferentes. Por lo tanto, el efecto del periodo de uso es naturalmente diferente. El periodo de uso es una media. Si no observa ningún resultado después de utilizar el producto durante más de un mes, póngase en contacto con nosotros. Es posible que no esté utilizando el aparato correctamente.

P: ¿Qué nivel es más apropiado?

R: No existe una norma única. Depende de la tolerancia cutánea de cada persona (cuanto más oscura sea la piel, menor nivel debe utilizarse). Se debe empezar con un nivel más bajo y utilizar gradualmente el nivel más alto. Cuanto mayor sea el nivel, mayor será la energía, más eficaz será el uso y, en consecuencia, menor será el tiempo de depilación. A la inversa, el uso de un nivel inferior provocará el correspondiente retraso en el tiempo de depilación. Se recomienda irradiar una pequeña sección de su piel para realizar una prueba de 1 a 3 veces antes de eliminar cada lugar.

P: ¿Por qué tengo olor a pelo quemado después de usar el aparato?

R: Durante el uso, el vello no se ha afeitado. La melanina interactuará con las ondas de luz y generará calor. Por lo tanto, es normal que aparezca olor a pelo quemado.

P: ¿Puedo hacerme daño?

R: Durante el uso del aparato de belleza, las ondas de luz interactúan con la melanina para generar calor.

Al interactuar con la melanina, se genera calor. Como resultado, puede producirse un ligero dolor. Cada persona tiene una sensibilidad cutánea y una tolerancia al dolor diferentes.

Por lo tanto, cada persona lo siente de forma diferente.

Si siente dolor, puede empezar con un nivel más bajo y luego utilizar gradualmente un nivel más alto para permitir que su piel se adapte a él.

P: ¿Cómo debo afeitarme el vello? ¿Qué vello hay que afeitar?

R: El vello de zonas como las axilas y las ingles debe afeitarse antes de utilizar el aparato.

El vello debe afeitarse antes de utilizar el dispositivo (se recomienda afeitar el vello de más de 1 cm).

El vello se puede eliminar más fácilmente utilizando

1 - Lubricar la zona que se va a eliminar con crema de afeitar o un limpiador suave de ducha;

2 - O cubra la zona a depilar con una toalla caliente durante unos minutos y luego afeite suavemente. De este modo, es más fácil eliminar el vello.

P: Quiero eliminar el vello más rápidamente. ¿Puedo utilizar el aparato todos los días?

R: No se recomienda el uso diario del aparato. El vello tiene un ciclo de crecimiento. Sólo tiene que utilizar el aparato según el ciclo normal de uso. Durante el primer mes, puede utilizarlo cada 3-5 días. Una vez que el crecimiento del vello se haya ralentizado y los resultados sean visibles, puede reducir gradualmente la frecuencia de uso.

P: ¿Por qué mi piel se enrojece y aparecen pequeñas manchas rojas después de su uso?

R: Esto se debe a que la piel se ha dañado por afeitarse demasiado según varias pruebas. Se recomienda utilizar los dos métodos siguientes para facilitar la depilación:

1- Aplicar crema de afeitar en la zona a depilar o un suave cepillo.

2- O cubra la zona a depilar con una toalla caliente durante unos minutos y luego afeite suavemente el vello. De esta forma, tu piel no sufrirá ningún daño. Si es posible, lo mejor es utilizar una maquinilla eléctrica para afeitarse. Puedes probarla en la posición sin afeitar para ver si esto ocurre.

P: Por qué no veo resultados después de utilizar el aparato varias veces?

R: La posición del instrumento utilizado varía, al igual que el grosor del vello. En consecuencia, el efecto también variará. En general, el vello axilar y la barba masculina son más difíciles de eliminar debido a las hormonas sexuales masculinas y a la genética, por lo que los resultados serán diferentes.

El efecto del uso será más lento debido a las hormonas androgénicas y la genética. El efecto del uso también está relacionado con el tiempo de uso. Con un uso constante del aparato, se puede conseguir una depilación permanente.

1. El periodo de garantía (gratuita) de los productos LESCOLTON comienza a partir de la fecha de compra.
2. Queda prohibido el desmontaje, modificación o manipulación no autorizada de este producto. No se ofrecerá garantía por daños causados por desmontaje, modificación o autoreparación no autorizados.
3. Los productos LESCOLTON sólo pueden ser reparados durante el periodo de garantía en el lugar designado por la Empresa. Presente esta tarjeta de garantía, la fecha de compra y el comprobante cuando requiera el servicio de garantía. Los productos LESCOLTON están cubiertos por una garantía gratuita a partir de la fecha de compra durante los siguientes periodos cuando se averíen durante un uso normal. Sin embargo, incluso dentro del periodo de garantía, el producto no está cubierto por la garantía en ninguno de los siguientes casos, para los que ofrecemos un servicio de reparación de pago

*Daños en el producto causados por un funcionamiento incorrecto no conforme con el Manual del usuario;

*Daños en el producto causados por accesorios no aprobados (por ejemplo, cargadores);

*Daños en el producto causados por condiciones de funcionamiento inadecuadas, como altas temperaturas, corrosión, etc.

* Daños en el producto debidos a fuerzas externas anormales, como caídas, aplastamientos, golpes, impactos, etc.

*Fallos del producto causados por catástrofes naturales o fuerza mayor, como incendios, inundaciones, terremotos, etc.

*Productos falsificados o de contrabando;

*Productos sin comprobante de compra válido, como factura, tarjeta de garantía, etc.

*Otros daños a este producto debidos a accidentes o a un uso inadecuado.

REV.1