


MANUAL DE USUARIO

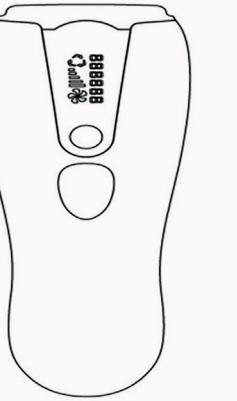


DEPILADORA IPL
999 KR

DEPIO017

Descripción del producto

1.1 Descripción del instrumento

- ① Instrumento de depilación
- ② Superficie de contacto
- ③ Botón interruptor
- ④ Pantalla
- ⑤ Botón de luz

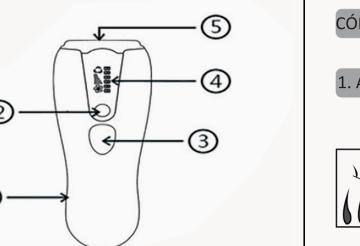

Pantalla de visualización


1. Destello de visualización del número residual
2. Indicación de la posición de la marcha
3. Modo de salida de luz continua automática
4. Ventilador



Por favor, líelo detenidamente antes de usar.

No todo el mundo es apto para utilizar este instrumento de depilación. Consulte los datos antes de su uso.

Consulte la página 1 (diagrama de control de color). Para el tipo de piel VI, no utilice este dispositivo sin antes haberlo hecho, de lo contrario es muy posible que se produzcan reacciones adversas en la piel.

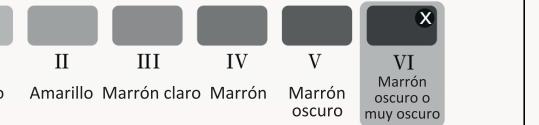

1

CÓMO UTILIZAR

1. Antes de usar



1. Primero, elimine el vello de la superficie de la piel. Si el cabello no supera los 2 mm, el instrumento se puede operar directamente sin afeitarse.



2. Limpie la piel y asegúrese de que no tenga pelo, esté seca y sin sustancias grasas. Está estrictamente prohibido aplicar condensadores, gel de aloe vera y otros productos.

2. Pasos



1. Limpie la superficie de la piel y filtre con un paño suave antes de usar.
2. Conecte el adaptador de corriente y el indicador de intensidad. La "luz roja" intermitente indica que el circuito es normal.



3. Presione el interruptor de encendido hasta que se encienda la pantalla.



4. Coloque el dispositivo en un ángulo de 90 ° sobre la piel y asegúrese de que la ventana del flash esté en pleno contacto con su piel.
5. Si la pantalla cambia de "parpadeando" a "constantemente brillante", indica que la depiladora está electrificada.

2



6. Despues de presionar la máquina contra la piel, presione suavemente el botón de flash para emitir un flash.
7. Despues de usar el instrumento, reemplace la parte depilada.
8. Emite otro flash lo más cerca posible del sitio del tratamiento anterior para asegurarse de que todos los sitios sean tratados adecuadamente.

Después de su uso


- ① La piel puede estar levemente inflamada, espinosa o caliente. Estas reacciones son completamente inofensivas y pronto desaparecerán.

- ② Puede aplicar de forma segura loción, crema, desodorante, humectante o cosméticos en el área tratada. Si aparece algún hormigueo o enrojecimiento después del tratamiento, espere a que desaparezcan estas condiciones antes de aplicar cualquier otro producto en su piel.

Preservación limpia

1. Despues de su uso, apague el instrumento y desconecte el enchufe para enfriar el instrumento.
2. Utilice un paño húmedo en las siguientes partes: - Filtro - Superficie de la piel.
3. Mantenga el instrumento en un lugar seco y sin polvo con una temperatura que oscile entre 0 y 60 ° C.

Tabla de referencia del ciclo terapéutico

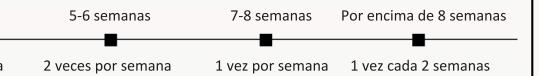

3

Un curso de tratamiento depilatorio se refiere a 3 veces de irradiación. Por favor, no ilumine continuamente el mismo lugar tres veces.

Con la posición de marcha más alta se logra el mejor efecto. La recomendación es la siguiente: utilice el equipo de 2 a 4 veces por primera vez. Luego, elija la marcha 5. Durante el intervalo de tratamiento, examine la velocidad de crecimiento de su cabello. El efecto difiere en varias partes del cuerpo.

Después de su uso

- ① La piel puede estar levemente inflamada, espinosa o caliente. Estas reacciones son completamente inofensivas y pronto desaparecerán.

- ② Puede aplicar de forma segura loción, crema, desodorante, humectante o cosméticos en el área tratada. Si aparece algún hormigueo o enrojecimiento después del tratamiento, espere a que desaparezcan estas condiciones antes de aplicar cualquier otro producto en su piel.

Preservación limpia

1. Despues de su uso, apague el instrumento y desconecte el enchufe para enfriar el instrumento.
2. Utilice un paño húmedo en las siguientes partes: - Filtro - Superficie de la piel.
3. Mantenga el instrumento en un lugar seco y sin polvo con una temperatura que oscile entre 0 y 60 ° C.

4

El efecto curativo es notable

Los resultados clínicamente probados muestran hasta un 90% de reducción del vello después de 4-7 veces de tratamiento y el 98% de los clientes están satisfechos con el resultado del tratamiento después de un uso prolongado. La longitud de onda superior a 510 nm puede cerrar los folículos pilosos e inhibir la regeneración del cabello. Para que puedas despedirte de la depilación repetida.

¿Cuándo veré los resultados?

Con solo 4-5 sesiones de autotratamiento, la mayoría de los usuarios pueden experimentar una disminución visual del cabello que es comparable a los resultados obtenidos mediante procedimientos láser administrados por profesionales. Los resultados óptimos requieren al menos un uso continuado durante 6 meses.

¿Dónde puedo usarlo?

1. Puede eliminar el vello de los labios, la barbilla, las patillas, las axilas, los brazos, las piernas, la barriga y las partes íntimas.
2. Se sugiere el nivel 1 por primera vez. Despues de eso, puede ajustarse a la intensidad que puede soportar.

¿Quién puede usarlo?

No utilice este instrumento en pieles naturalmente oscuras o recién procedidas. Este rodillo de belleza es ideal para usar con tonos de piel más claros. No se recomiendan los pelos blancos, grises, rojos y rubios.

5

Consejos para después del tratamiento

1. Utilice una crema hidratante para calmar su piel después del tratamiento.
2. Evite los rayos ultravioleta dentro de las 24 horas posteriores al tratamiento.

¿Necesitas ayuda?

Ingresá a nuestro soporte técnico escaneando el QR o escribíos por nuestros canales oficiales.

11 6260 1114 (sólo texto)
servicetecnico@bidcom.com.ar
www.bidcomservice.com.ar



6

7

8

9

10

11