





DEPI0018

I.	Resumen del producto	2
1.1	Descripción de los botones	2
II.	Exposición de principios	2
III.	Uso	2
IV.	Introducción al Uso	3
4.1	Preparación de Uso	3
4.2	Pasos de Uso	3
4.3	Detección de piel	5
4.4	Fin de Uso	6
4.5	Limpiar y guardar	6
V.	Solución de problemas	7

1.1 Descripción de los botones

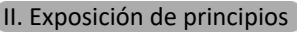

III. Uso

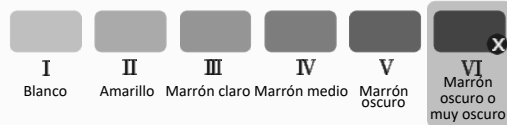

4.1 Preparación de uso

4.2 Pasos de uso

1. Saque el instrumento, limpie el filtro del cabezal de la máquina con un paño suave.
2. Antes de usar este instrumento para depilarse, humedezca el cabello y quítelo con una cuchilla de afeitar.
3. Conecte el adaptador de corriente y la pantalla de la máquina mostrará la palabra "APAGADO".
4. Pulse la "Tecla de encendido" durante un tiempo prolongado hasta que se encienda la pantalla de visualización (la máquina se enciende cuando cambia el contenido de la pantalla de visualización).
5. Cuando el contenido de la pantalla cambia de "parpadeante" a "siempre brillante", significa que el dispositivo de depilación está listo (el primer flash es brillante, es posible que los ojos no se adapten, use gafas para reducir la incomodidad del flash a los ojos).
6. El contenido de la pantalla de visualización está "siempre encendido" y los instrumentos están en el estado de "flash listo"; Si el contenido de la pantalla de visualización no ha cambiado, intente desconectar el adaptador de corriente y reinicie la máquina.
7. Presione la depiladora verticalmente sobre la piel en un ángulo de 90° para asegurarse de que la piel está en pleno contacto, y el "número" en la pantalla de visualización "parpadeará".

(Al usar el instrumento de depilación por primera vez, habrá una sensación de "microcorrientes" debido a la incomodidad de la piel, que es la reacción normal del cuerpo humano, no causada por una fuga de la máquina).

8. Después de que la máquina esté pegada a la piel, presione suavemente el "botón de flash" del instrumento, y el instrumento enviará un flash, acompañado de un claro "crujido" y sentirá la cálida sensación producida por el flash. (Si la temperatura es demasiado alta, significa que la marcha que ha elegido es demasiado alta, se recomienda arrancar desde la primera marcha).

9. Después de usar el instrumento para enviar un flash, cambie la parte de depilación, cuando la energía esté lista, la "indicación de marcha" en la pantalla estará "siempre encendida" y podrá repetir el paso anterior.

10. Utilice la primera marcha para probar la piel. Si no hay una reacción adversa después de 24 horas, puede ajustar el engranaje de energía a través de la "tecla de encendido", se puede dividir en 5 engranajes.

11. Sigue estos pasos, podrás depilar la parte que prefieras. Un curso de depilación suele iluminarse tres veces. Primero quítese todo el cuerpo y luego hágalo por segunda y tercera vez.

12. Por favor, párese lo más cerca posible del último flash para tratar completamente la parte deseada.

13. Después de usar, presione la tecla "Encendido" durante un tiempo prolongado para apagar (después del apagado, el producto entrará en la cuenta regresiva para el apagado), la pantalla ingresará la palabra "APAGADO" y cortará la fuente de alimentación. Finalmente, se limpian la cabeza y el fuselaje.

Dos modos de tratamiento: [flash presionando] y [luz continua automática], es conveniente utilizarlo en diferentes partes del cuerpo:

- El modo [flash presionando] es adecuado para áreas pequeñas y curvas, como rodillas y axilas.

Siempre que presione el botón de flash, puede enviar un flash.

- El modo [luz continua automática] es conveniente para áreas grandes como piernas. Presione el botón de flash durante 3-5 segundos hasta que aparezca el icono de "modo de luz continua automática" en la pantalla, deslice el instrumento a lo largo de la piel y puede enviar automáticamente varios flashes de forma continua.

1-4 semanas	5-6 semanas	7-8 semanas	Más de 8 semanas
1-3 veces por semana Más del 75% del cabello comienza a caerse de forma natural.	Dos veces a la semana El cabello nuevo se cae e inhibe el crecimiento.	Una vez por semana El cabello se vuelve más delgado y menos, ya no se repite.	1-2 veces por semana Uselo selectivamente de acuerdo con el estado de crecimiento del cabello (cuando el cabello está creciendo).

El curso de depilación es de 3 veces. Después de irradiar la parte depilada una vez, haga la segunda y tercera vez, no irradie en el mismo lugar 3 veces seguidas. Cuanto más alta sea la marcha, mejor será el efecto. En la etapa inicial, se recomienda usar primero 1-2 engranajes, y puede optar por usar 5 engranajes después de la adaptación de la piel en la etapa posterior. El intervalo del curso de tratamiento puede depender de la tasa de crecimiento del cabello personal, y la situación en diferentes partes del cuerpo será diferente.

Antes de usarlo por primera vez o después del bronceado, realice una prueba cutánea en el lugar de cada tratamiento. La prueba cutánea es un paso necesario para comprobar la respuesta de la piel al curso del tratamiento y determinar el nivel de intensidad de luz adecuado para cada parte del cuerpo.

1. Seleccione el área cercana al área donde desea realizar el tratamiento.
2. Encienda el instrumento y asegúrese de seleccionar la marcha 1.
3. Coloque el instrumento contra la piel, luego presione el botón de flash para emitir un flash.
4. Deslice el instrumento a lo largo de la piel hasta la siguiente zona de depilación.
5. Suba el engranaje un nivel, emita un destello y luego deslice el instrumento a la siguiente posición.
6. Después de terminar la prueba cutánea, espere 24 horas antes de revisar la

piel para detectar cualquier reacción. Si la piel reacciona, seleccione el engranaje más alto que no cause reacciones cutáneas y utilícelo en el tratamiento de depilación posterior.

1. La piel puede estar ligeramente enrojecida e hinchada, con hormigueo o caliente. Estas reacciones son completamente inofensivas y pronto desaparecerán.
2. Puede aplicar de forma segura lociones, cremas, desodorantes, humectantes o cosméticos en el área de tratamiento. Si siente hormigueo o hinchazón en la piel al final del tratamiento, espere a que desaparezcan estas condiciones antes de aplicar cualquier producto en la piel. Si siente un hormigueo en la piel después de aplicar el producto, lávelo con agua limpia.

1. Después de su uso, apague el dispositivo, desenchufe el enchufe y deje que el instrumento se enfríe.
2. Humedezca el paño de limpieza suave con un poco de agua y luego úselo para limpiar las siguientes partes:
 - Filtro de luz
 - Superficie de contacto con la piel
3. Almacene el instrumento en un lugar seco y libre de polvo con una temperatura entre 0 °C y 60 °C.

Este capítulo describe los problemas más comunes encontrados al usar este instrumento. Si no puede resolver el problema utilizando la siguiente información, comuníquese con el centro de servicio al cliente de su país.

Descripción del problema	Posibles razones	Soluciones
El dispositivo / adaptador de corriente se calienta durante el uso.	Este es un fenómeno normal.	No es necesario realizar ninguna acción.
Al poner la depiladora en la piel (el número parpadea) pero el ventilador de enfriamiento comenzó a funcionar.	Se ha activado la protección contra sobrecalentamiento.	Cuando se inicia la protección contra sobrecalentamiento, el ventilador se enciende de forma continua. No saque el dispositivo, espere a que se enfríe durante más de 15 minutos antes de continuar usando.
[Flash] lista para parpadear pero el dispositivo no parpadea cuando se presiona el botón de flash.	Es necesario reiniciar el dispositivo.	Reinicie el dispositivo, apague y vuelva a encender.
No se puede aumentar o disminuir el ajuste de intensidad del flash.	Es necesario reiniciar el dispositivo.	Reinicie el dispositivo, apague y vuelva a encender.
Huele mal al usar el dispositivo.	Los accesorios o filtros están demasiado sucios. No ha eliminado completamente el vello del sitio de tratamiento. Estos pelos pueden quemarse y producir mal olor.	Limpie los accesorios con cuidado. Retire el vello de la superficie de la piel antes de usar este instrumento.
Durante el curso del tratamiento, la piel se siente más sensible de lo habitual / dolor insostenible al usar el dispositivo.	El ajuste de intensidad de luz que está utilizando es demasiado intenso. No ha eliminado completamente el vello del sitio de tratamiento.	Verifique para asegurarse de que se seleccione la configuración de intensidad de luz adecuada. Reduzca la configuración si es necesario. Quite el vello de la superficie de la piel antes de usar este instrumento.
	El filtro ultravioleta en la salida está dañado.	Una vez que el filtro UV está dañado, no continúe utilizando este dispositivo. Póngase en contacto con el centro de atención al cliente de su país.
	Utiliza este dispositivo donde no es aplicable.	No use este dispositivo en las siguientes áreas: pezones, areolas, labios menores, vagina, ano, así como en el interior de las fajas nasales y los oídos. Los usuarios masculinos no deben usar el producto en la cara o el escroto.
Este dispositivo no es adecuado para su piel.		El tipo de piel es VI o V, piel marrón-negra u oscura, no utilice este dispositivo.

La reacción cutánea fue más prolongada de lo habitual al final del curso del tratamiento.	El ajuste de intensidad de luz que está utilizando es demasiado alto.	La próxima vez, elija una intensidad de luz más baja. Consulte la sección "pruebas cutáneas" en la unidad "Instrucciones de uso".
No estoy satisfecho con el resultado del tratamiento.	El ajuste de intensidad de luz que está utilizando es demasiado bajo.	Elija una configuración más alta la próxima vez.
	No ha vuelto a depilar alrededor de la zona donde se ha tratado antes.	Por favor, emita un flash más cerca posible de la parte anterior.
	Este dispositivo no tiene ningún efecto sobre el color de su cabello.	Necesita eliminar todo el vello con éxito. Se recomienda que siga el procedimiento de tratamiento recomendado.
	La frecuencia de uso del instrumento es insuficiente.	Se recomienda que siga el procedimiento de tratamiento recomendado. Puede acortar el intervalo de tratamiento, pero no más de una vez cada dos semanas.
	Su respuesta al tratamiento con IPL puede ser lenta.	Continúe usando el dispositivo durante al menos 6 meses, porque el cabello volverá a crecer durante este período, pero seguirá disminuyendo.

Estimado cliente,
En primer lugar, muchas gracias por elegir este producto, para que tengamos la oportunidad de brindarle el mejor servicio. Para utilizar el servicio del instrumento para que se sienta más satisfecho, lea atentamente esta descripción y cuide bien esta tarjeta de garantía después de la compra.

Si tiene alguna pregunta, comuníquese con nosotros a tiempo y la resolveremos lo antes posible.

1. Si hay un problema de calidad que hace que los productos no se puedan utilizar, comuníquese con el servicio de atención al cliente posventa del vendedor de los productos que compra a tiempo para brindarle el servicio posventa.
2. No aceptamos correo de superficie ni contra reembolso, y el servicio de atención al cliente especial de posventa se comunicará con usted para resolver el franqueo.
3. Complete la tarjeta de garantía del servicio posventa con paciencia y devuélvala con la mercancía para que podamos ocuparnos de ella lo antes posible.

Nombre (requerido) _____ Número de contacto: (requerido) _____

Canales de compra: _____ Cuenta de compra: _____

Número de orden: _____

Selección postventa: (obligatorio)

- Devolución de bienes
- Bienes de cambio

Dirección de recepción: (requerido) _____

Instrucciones de devolución: _____

