


MANUAL DE USUARIO

Care
by GADNIC



Depiladora Laser IPL
IPL990KP

DEPI0020

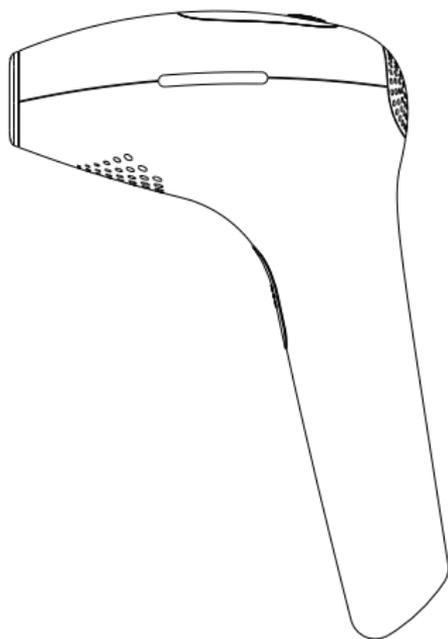

Máquina de depilación


- Arregle la máquina y utilícela de acuerdo con las normas del manual de funcionamiento.
- Lea atentamente el manual de funcionamiento y guárdelo para comprobarlo.
- Si tiene alguna pregunta con el uso, comuníquese con el servicio de atención al cliente en línea de acuerdo con el idioma requerido.

Contenido

Principio de la máquina	1
Regulaciones de Uso	4
Posibles efectos secundarios	5
Instrucciones	7
Limpieza y Cuidado	11
Problemas comunes reparando por sí mismo	11
Servicios posventa	12
Preguntas más frecuentes	13

Principio de la máquina

(1) ¿Cómo remover el vello?

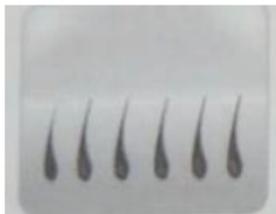

- ① Las ondas de luz actúan sobre la piel y producen un efecto térmico.
- ② Durante la depilación. Cuando las ondas de luz golpean el tejido, el cabello y los gránulos de pigmento absorben preferentemente y elevan la temperatura.
- ③ La temperatura se transmite a las raíces del cabello, dañando la papila dérmica, retrasando la velocidad de crecimiento del cabello y reduciendo la densidad del cabello.


¿Cómo afecta el ciclo de crecimiento del cabello a las ondas de luz?



Período de crecimiento - etapa de crecimiento del cabello: el cabello en la fase de crecimiento está conectado al folículo piloso y el efecto de depilación se logra de manera efectiva mediante el uso de la máquina de depilación.




Fase de descanso del cabello - el cabello inactivo se separa de los folículos pilosos y la máquina de depilación se usa después de que el cabello vuelve a crecer.

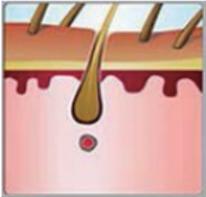

Degeneración - Fase de reposo del vello: El vello en el período degenerativo se separa de los folículos pilosos y es necesario utilizar la máquina de depilación después de que el vello haya vuelto a crecer.

(1) Plan de depilación

- A. Semana 1-2 uso dos veces por semana
- B. Semana 3-4 Usar una vez por semana
- C. Semana 5-8 Usar una vez cada 2 semanas
- D. Después de la octava semana, se consolida una vez cada 1-3 meses

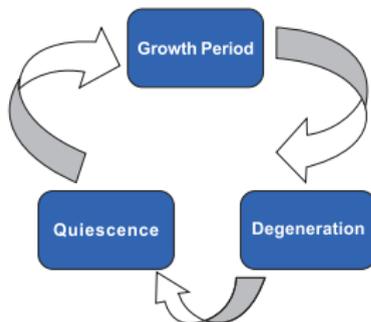

Úselo varias veces dependiendo del crecimiento del cabello, pero úselo hasta 4-6 veces por mes. El intervalo de tiempo específico depende de las diferencias individuales. Utilizar según corresponda para el crecimiento del cabello.

Regulaciones de Uso

Para obtener buenos efectos, siga las instrucciones a continuación.

Si hay una gran cantidad de vello en el área irradiada, aféitelo antes de usar el producto (no use un método de depilación química).

Limpiar la piel, asegurarse de que no queden restos de pelo en la superficie, que esté completamente seca y que no quede ninguna mancha de material aceitoso.

Verifique que la apariencia física del producto se encuentre en orden.

Cuando el crecimiento del vello se detiene temporalmente (después de usar este producto 4-5 veces), no es necesario afeitarse antes de usar este producto.

Para invierno o piel seca, afeite el cabello e hidrate la piel con anticipación. Después del día siguiente, vuelva a realizar la depilación.

La piel puede estar ligeramente rojiza después de la depilación. Este es un fenómeno normal. Recomendamos compresas de hielo o esperar a que se enfríe por sí mismo.

Al operar, use gafas protectoras. No mire directamente a la luz parpadeante. No destelle hacia los ojos.

No utilice si su tono de piel no está en la gama de la carta de colores.


Se recomienda su uso a una temperatura ambiente de 10-30 grados centígrados. Cuando el ambiente supera los 30 grados, el cuerpo humano es propenso a sudar, y cuando se quita el vello, es probable que el cabezal de la lámpara esté sucio, lo que puede afectar el efecto de depilación posterior.

Si la temperatura ambiente es demasiado baja, la diferencia de temperatura dentro del producto será grande, lo que no favorece la estabilidad del producto.

Esta especificación de producto no es exhaustiva. Si no está seguro de poder usar este producto, se recomienda que primero consulte a un médico.

Posibles efectos secundarios

Efecto secundario	Posibilidad
Ligera irritación de la piel/ hormigueo en la piel	Posible
Rubefacción	Posible
Alergia de piel	Posible
Quemadura, dolor	Menos probable
Cicatriz	Menos probable
Pigmentación	Menos probable
Edema excesivo	Menos probable
Infección	Casi imposible
Contusión	Casi imposible

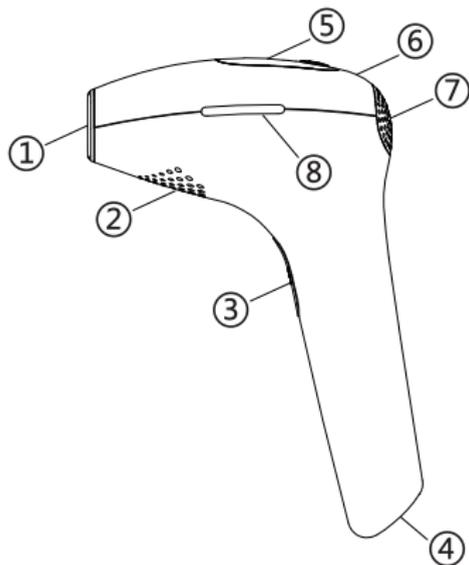

Estructura de la máquina

- ① Pantalla de flash
- ② Ventilación de entrada
- ③ Botón de lanzamiento de flash
- ④ Toma de corriente
- ⑤ Número de cabello, pantalla indicadora de intensidad de onda de luz
- ⑥ Botón de encendido / apagado; Botón de aumentar/ disminuir
- ⑦ Salida de aire
- ⑧ Indicador de preparación de ventilación/flash

Instrucciones

Elija cuidadosamente el estándar de intensidad de luz

Precaución: Independientemente del tipo de piel que tenga, realice una prueba en la pierna según el estándar de intensidad 1 48 horas antes de utilizar la máquina por primera vez. Si su piel no siente ninguna molestia 48 horas después de la prueba, seleccione la intensidad de la luz para la primera depilación de acuerdo con el cuadro a continuación.

Tipos de piel:

1. Piel muy blanca
2. Piel clara
3. Piel beige
4. Piel morena
5. Piel morena oscura
6. Piel muy oscura



Tipos de piel	1	2	3	4	5	6
Test (48 horas antes de la depilación por primera vez)	Estándar 1	X				
Primera depilación	Estándar 3	X				
Depilación posterior	Estándar 4-5	Estándar 4-5	Estándar 3-4	Estándar 3-4	Estándar 2-3	X

X: La máquina de depilación no es adecuada para el sexto tipo de piel.

Prepárese para la depilación

Primero debe afeitarse y mantener su piel limpia y seca. Lo más importante, no puede tirar del pelo.

Instalación y configuración

- ① Conecte el cuerpo de la máquina de depilación al adaptador de corriente y otros accesorios.
- ② Presione el botón de encendido durante 3 segundos (escuchará el sonido del ventilador).
- ③ Seleccione el equipo que se adapte a tu piel.
- ④ Asegúrese de que la ventana del flash esté completamente en contacto con su piel.
- ⑤ Presione el botón de lanzamiento de flash, el dispositivo de piel brillará. Entonces sentirá un poco de calor y hormigueo en la piel.
- ⑥ Mueva la máquina de depilación hacia adelante y hacia atrás sobre la piel que necesita depilación, evitando la depilación dos veces en 10 segundos en el mismo lugar.
- ⑦ Si necesita reemplazar la lámpara, primero apague y desenchufe la alimentación, y tire de la lámpara ligeramente en ambos lados, alinee el orificio y presiónelo ligeramente al instalar la puerta de la lámpara. No reemplace la válvula de luz con frecuencia para evitar un contacto deficiente con el producto.

Depilación facial

No mire directamente al flash y use gafas. Además, no se pueden depilar las pestañas, cejas y cabello. Los bigotes de hombre tampoco son adecuados. En la cara por favor no use la máquina por más de 10 minutos.

Tiempo aproximado

Partes	Tiempo aproximado
Brazos	8-10 minutos
Piernas	15 minutos
Línea de bikini	2 minutos
Axilas	1 minuto

Fenómenos normales al usar

A. Ruido de los ventiladores: Es normal que la máquina arranque con un poco de ruido.

B. Calor y hormigueo; la fiebre y un ligero hormigueo son síntomas normales cuando se usa la máquina.

C. Rubefacción: es normal que la piel se enrojezca a las 24 horas de su uso y el síntoma desaparezca a las 24 horas. Si hay hinchazón, ampollas y quemaduras, deje de usar la máquina al instante.

Después de la depilación

Después de la depilación, apague el botón del interruptor.

Desconecte el adaptador.

Limpie la máquina especialmente la superficie después de la depilación.

Coloque la máquina de belleza en lugares secos después de la limpieza.

Limpieza y Cuidado

- ① Le sugerimos que limpie la máquina después de usarla cada vez para garantizar el efecto de uso y la vida útil.
- ② Por favor, no lave la máquina ni sus accesorios bajo el grifo o en el lavavajillas.
- ③ No utilice bolas de limpieza de acero, limpiadores abrasivos (pasta de dientes, etc.) ni líquidos corrosivos (gasolina, aceite, acetona, etc.) para limpiar la máquina.
- ④ Limpie suavemente alrededor de la ventana de la linterna.

Problemas comunes reparando por si mismo

¿No puedo encender mi máquina de depilación?

Asegúrese de que el adaptador sea compatible con la máquina de depilación y enciéndala.

¿Cómo se apaga automáticamente el interruptor de mi máquina de depilación?

Por motivos de seguridad y ahorro de energía, se apagará automáticamente después de cinco minutos de inactividad. Si necesita usarlo nuevamente, simplemente reinícielo y úselo normalmente.

¿Por qué no siento cuando presiono el botón de luz?

Asegúrese de que la ventana del flash esté completamente en contacto con la piel. Deje la lámpara fuera de la piel durante 10 segundos y vuelva a ponerse en contacto con la piel para continuar encendiéndola si nota que el indicador de flash listo (verde) está encendido pero no parpadea. Si aún no se enciende después de esperar 10 segundos, desconecte la fuente de alimentación y vuelva a conectarla y comience de nuevo.

Póngase en contacto con su distribuidor local si este problema aún no se puede resolver.

Si encuentra que la luz indicadora de marcha parpadea durante el uso, significa que la temperatura del producto es demasiado alta. Debe deshabilitarlo por un período de tiempo antes de que la temperatura se pueda usar normalmente. Si encuentra que todas las luces están parpadeando, asegúrese de que la lámpara reemplazable esté instalada correctamente y luego vuelva a encenderla. Si se asegura de que la lámpara reemplazable esté correctamente instalada, pero todos los indicadores aún parpadean y el dispositivo no puede iniciarse normalmente, significa que la vida útil de la lámpara reemplazable finaliza.

Servicios posventa

Para obtener más información sobre la máquina de depilación, si necesita reparación o ayuda para los productos que trajo, comuníquese con el servicio al cliente.

Preguntas más frecuentes

① ¿Qué partes del cuerpo pueden recibir depilación?

Este medidor de belleza está diseñado para eliminar el vello corporal. Los sitios de depilación más comunes son: piernas, axilas, brazos, líneas del bikini y cara (mejillas, labios y vello de la barbilla).

② ¿Cuánto tiempo lleva una depilación?

Ver tiempo aproximado en el apartado 5.

③ ¿Es segura la máquina de depilación?

La máquina de depilación está diseñada en función de su seguridad. Cumple con los estándares para electrodomésticos seguros. Sin embargo, debe utilizarlo de acuerdo con las instrucciones de funcionamiento y las normas de seguridad del manual.

④ ¿Me causará daño al usar la máquina de depilación?

La mayoría de las personas que usan la máquina de depilación solo tendrán un ligero calor en la piel cuando las ondas de luz golpeen la piel. Las personas de piel más gruesa o de piel más oscura pueden sentirse incómodas, pero estas molestias desaparecen con el final de la depilación. Para un uso cómodo y seguro, la máquina de depilación tiene 5 intensidades de luz para elegir.

⑤ ¿Con qué frecuencia debo usarlo?

Las primeras 4 depilaciones deben realizarse dos veces por semana. Las depilaciones futuras deben realizarse de acuerdo con su propia situación hasta lograr el efecto deseado.

⑥ ¿Es posible usar el dispositivo con el cabello blanco, gris o dorado?

El uso del producto es más efectivo en cabello oscuro o con más melanina. El cabello negro absorberá la onda de luz a través de la melanina. El pelo rojo puede funcionar. Pero por lo general, los pelos blancos, grises y dorados no tienen ningún efecto. Sin embargo, también hay algunos ejemplos que tienen efectos obtenidos después de múltiples depilaciones.

⑦ ¿Puedo usarlo en pieles morenas y negras?

Le sugerimos que no utilice. Es un dispositivo de depilación ligera que rastrea los pigmentos del cabello y elimina selectivamente el exceso de vello. También hay colores desiguales en la piel, puede causar daño a la piel cuando se usan ondas de luz para la depilación si estos pigmentos desiguales son más claros que el tono de la piel. Puede causar ampollas, cambios en el tono de la piel (aumento de la pigmentación o falta de coloración, etc.) si se usa en pieles oscuras naturales. Así que asegúrese de verificar los diferentes iconos de color de piel y confirme su tipo de piel para usar.

⑧ ¿Cuándo se verá el efecto de depilación?

Como todas las demás máquinas de depilación, no proporcionan resultados inmediatos e incluso puede pensar que no ha pasado nada. Una vez que se completa la depilación, algunos vellos pueden volver a crecer, pero la mayoría de los vellos se caerán naturalmente después de dos semanas. Esta es una de las razones por las que es necesario realizar múltiples depilaciones para lograr el resultado deseado.

⑨ ¿Pueden los hombres usar la máquina de depilación?

Aplican tanto hombres como mujeres. Sin embargo, el vello de los hombres, especialmente el vello del pecho, necesitará más veces para lograr el efecto deseado.

⑩ ¿Por qué el vello vuelve a crecer incluso si me hice la depilación hace solo una semana?

Es normal que el cabello crezca dentro de una o dos semanas después de usarlo. Este proceso se llama descarga. Después de dos semanas, notará que su cabello se ha caído o es muy fácil de quitar. Sugerimos sinceramente que puede dejar que se caiga naturalmente en lugar de arrancarlo. Es posible que algunos cabellos no se vean afectados por la pérdida de cabello porque faltan o aún están creciendo. Estos pelos serán tratados en la futura depilación. Por eso decimos que también es necesario realizar más depilaciones para lograr el efecto deseado.

⑪ He oído que el vello crecerá bien cuando utilice la depilación con ondas de luz.

Después de usarlo, algunos vellos pueden volverse finos cuando vuelven a crecer. Sin embargo, esto es solo una pequeña parte del cabello que ya está allí. Puede lograr el efecto deseado si continúa con la depilación.

⑫ ¿Será perjudicial para mi piel el uso de la máquina de depilación durante mucho tiempo?

En los últimos 15 años, la belleza de las ondas de luz se ha presentado en algunas revistas profesionales. Estos informes y agencias profesionales no han informado efectos secundarios ni peligros después de un uso a largo plazo.

⑬ ¿Puedo usar la depiladora para eliminar el vello facial y/o de la barbilla?

Se puede usar en cabello alrededor de las mejillas, la barbilla o los labios. Sin embargo, las pestañas, las cejas y en la cabeza no se pueden usar. Debe usar gafas de protección al realizar la depilación facial.

⑭ ¿Cuánto tiempo puedo usar el dispositivo después de un baño de sol sin ninguna protección?

Debe evitar exponer su piel directamente al sol. Se debe realizar la protección adecuada antes o después del uso de. Como usar protector solar (SPF50+) tres semanas antes o después de la depilación. En teoría, se debe esperar al menos un mes para su uso después de la exposición al sol sin protectores. Si tiene alguna pregunta, puede consultar al médico o al servicio de atención al cliente con respecto a la depilación después de la exposición.

⑮ ¿Qué debo hacer antes de usar la máquina de depilación?

Al igual que cualquier dispositivo de belleza de la piel de los salones de belleza, debe evitar la luz solar directa en la piel donde necesita depilación durante 4 semanas antes de hacerlo. Le sugerimos que use bloqueador solar (50+) o cubrirse con ropa.

⑯ ¿Qué debo hacer para cuidar la piel depilada después de la depilación?

La piel que ha sido depilada debe mantenerse limpia. También se pueden realizar algunas rutinas ordinarias de cuidado de la piel. Pero tenga cuidado de no exponer su piel directamente a la luz solar. Se pueden utilizar filtros solares muy intensos o capas largas para proteger la piel que se ha depilado.

**SERVI
TECH**

SERVICIO TÉCNICO OFICIAL GADNIC
www.servitech.com.ar

 **11 6260 1114 (sólo texto)**
serviciotecnico@servitech.com.ar