

MANUAL DE USUARIO



Depiladora IPL  
FLYZ


DEPI0021



I. Resumen del producto

1.1 Descripción del botón

Pantalla:

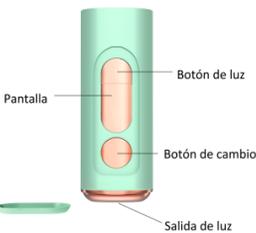

II. Descripción de principios

La máquina adopta la tecnología IPL cosmética internacional avanzada de fotones, que irradia directamente la piel con una fuerte luz pulsada para producir el efecto fotobioquímico. Por un lado puede hacer que la fibra de colágeno y la fibra elástica en la piel se regeneren, restaurar la elasticidad de la piel y mejorar la microcirculación facial y eliminar o aligerar las arrugas. Por otro lado, la luz pulsada intensa puede penetrar en la piel y ser absorbida selectivamente por la masa pigmentada y los capilares del tejido. Con la premisa de no destruir el tejido normal de la piel, la energía térmica hace que la coagulación de la sangre y la masa pigmentada se destruyan por descomposición térmica, para tratar la dilatación capilar, eliminar el color deportivo y eliminar el exceso de vello, etc.

III. Introducción al uso

3.1 Preparación del uso

1. Retire primero el vello de la superficie de la piel. Asegúrese de mojar el vello, use el método de raspado para hacer un buen tratamiento en la piel con anticipación, de modo que el vello debajo de la superficie de la piel pueda ser absorbido por la fuente de luz para garantizar el efecto del tratamiento. Si el vello no supera los 2mm, puede operar el instrumento sin afeitarse.
2. Limpie la piel y asegúrese de que no quede vello en la superficie, que quede completamente seca y libre de cualquier sustancia aceitosa. Antes de usar la depiladora, está estrictamente prohibido aplicar condensador, gel de aloe y otros productos, de lo contrario no dará lugar a la luz.

3.2 Pasos para el uso

1. Antes de sacar el instrumento, limpie el filtro principal de la máquina con un paño suave.
2. Antes de la depilación con este instrumento, moje primero el vello y luego afeite.
3. Conecte el adaptador. Después de que la pantalla parpadee tres veces, ingresa al modo de espera y el ícono de detección táctil en la pantalla permanece encendido durante mucho tiempo.
4. Botón de cambio: mantenga presionado 3 segundos para iniciar/ apagar. Después del inicio, el ícono predeterminado de bajo nivel estará encendido durante mucho tiempo. Presione brevemente para subir/ bajar el engranaje de 1-5 y 5-1 sucesivamente. Después del inicio, el modo de flash de embellecimiento de la piel predeterminado/ ícono de embellecimiento de la piel estará encendido durante mucho tiempo. Presione rápidamente dos veces para cambiar a otros modos de flash, embellecimiento de la piel - cara - cuerpo - bikini, y ciclo por turnos.
5. Botón de flash: después del inicio, el modo de flash manual está predeterminado. El ícono manual estará encendido durante mucho tiempo. Presione una vez por un corto tiempo para parpadear una vez. Presione 3s durante un tiempo prolongado para ingresar/ salir del modo de flash automático. Después de ingresar al modo de flash automático, deslice para cambiar la posición y parpadee continuamente.
6. Ajuste el engranaje y el modo correspondiente. Si el engranaje y el modo correspondiente en la pantalla de visualización están encendidos durante mucho tiempo, significa que la energía de la depiladora está lista (el primer flash es brillante y es posible que los ojos no se adapten. Use gafas para reducir la incomodidad del flash a los ojos).
7. El contenido de la pantalla de visualización es "largo" y el instrumento está en el estado de flash listo, si no hay cambios en la pantalla, intente desconectar el adaptador de corriente y reinicie la máquina.
8. Asegúrese de que la tapa de la lámpara esté a 90° verticalmente cerca de la piel. Si el ícono de detección táctil en la pantalla parpadea, se detecta la piel; si se apaga, no se detecta la piel. (Cuando se usa la depiladora por primera vez, la piel no se adapta, por lo que habrá una sensación de "micro corriente", que es una reacción normal del cuerpo humano y no es causada por una fuga de la máquina).
9. Después de que la máquina se adhiera a la piel, presione suavemente el "botón de flash" del instrumento, y el instrumento emitirá un flash acompañado de un sonido nítido. En este momento, sentirá la sensación de calor que genera el flash de forma sincronizada (si la temperatura es demasiado alta, significa que la marcha que seleccionó es demasiado alta, por lo que se recomienda comenzar desde la primera marcha).
10. Después de que el instrumento emita un flash, reemplace la parte de depilación y repita los "pasos 7 y 8".

11. Use la primera marcha para probar en la piel. Si no hay reacciones adversas después de 24 horas, el engranaje de energía se puede ajustar a través de la "tecla de encendido". El engranaje de energía se divide en cinco engranajes.
12. Realice el ciclo de acuerdo con los pasos anteriores para depilar la parte seleccionada. Un curso de tratamiento de depilación generalmente se hace tres veces, primero se quita el vello de todo el cuerpo y luego se hace una segunda y tercera vez.
13. Flashee lo más cerca posible de la parte depilada anteriormente, para tratar completamente con la parte requerida.
14. Después del uso, mantenga presionado el "botón de cambio" para apagar y cortar la fuente de alimentación. Por último, limpie el cabezal y el fuselaje.

Introducción al modo

- **Modo de reproducción continua (para áreas grandes como brazos y piernas):** Coloque la salida de luz en la zona a tratar sobre la piel y ajuste completamente la piel. En este momento, la lámpara del sensor de depilación se encenderá, lo que indica que el cabezal de la lámpara está en pleno contacto con la piel. Mantenga presionado el botón de flash e inmediatamente comience a mover el instrumento lento y uniformemente sobre la piel, manteniendo el ajuste con la piel, y el flash se emitirá en un cierto intervalo. En este momento, mantenga la eliminación de aire en movimiento y deslice el vello hacia adelante y hacia atrás dos veces en el área donde se necesita la depilación. Para garantizar que el área de depilación esté cubierta de manera uniforme y evitar la pérdida de luz. Consejo: la velocidad de movimiento se puede ajustar de acuerdo con la velocidad del flash, de modo que la cobertura sea más uniforme, la frecuencia del flash es más rápida en la primera marcha, la frecuencia del flash es más lenta en la segunda marcha y cuanto mayor sea la marcha, más lenta será la velocidad de salida de la luz.

- **Modo de reproducción individual (adecuado para áreas pequeñas como los dedos):**

Coloque la salida de luz en el área a tratar sobre la piel y ajuste completamente la piel. En este momento, la lámpara del sensor de depilación se encenderá, lo que indica que el cabezal de la lámpara está en pleno contacto con la piel. Presione brevemente el botón de flash para iniciar la depilación. Mueva el cabezal de la lámpara al siguiente lugar a depilar, espere a que se encienda la luz blanca de la lámpara del sensor de depilación y luego presione el botón de flash para repetir la operación anterior en orden. Consejo: en cualquier momento durante el proceso de depilación, si su piel comienza a sentirse sobrecalentada, solo haga una pausa de unos segundos, deje que la salida de luz se enfríe nuevamente y luego realice la depilación.

Tabla de referencia del ciclo terapéutico

1-4 semanas	5-6 semanas	7-8 semanas	Más de 8 semanas
2-3 veces a la semana. Más del 75% del cabello comienza a caerse naturalmente.	Dos veces a la semana. El cabello nuevo se cae e inhibe el crecimiento.	Una vez por semana. El cabello se vuelve más delgado y crece menos.	1-2 veces a la semana. Úselo selectivamente según el estado de crecimiento del cabello (cuando el cabello está creciendo).

Limpieza y mantenimiento

Para garantizar los mejores resultados y la vida útil más larga del producto, limpie el producto antes y después de cada depilación para evitar la acumulación de pelo y polvo a largo plazo. Si no lo limpia correctamente, el producto no conseguirá su efecto adecuado.

- Antes de comenzar la limpieza, el dispositivo debe apagarse y desenchufarse para permitir que la máquina se enfríe.
- Use un paño suave, limpio y seco para limpiar la superficie de la salida de luz.
- Guarde el dispositivo en un ambiente seco y libre de polvo a 10-60 °C.
- Nunca lave el producto y los accesorios en grifos y lavavajillas.
- No utilice bolas de acero, limpiadores abrasivos (pasta de dientes, etc.) o líquidos corrosivos (gasolina, aceite de motor, acetona, etc.) para limpiar el producto.

Nota: Si el agua no limpia bien, puede usar unas gotas de alcohol de alta concentración (no más del 96%) para limpiar las partes anteriores.

Solución de problemas

Este capítulo describe los problemas más comunes encontrados al usar este instrumento. Si no puede resolver el problema utilizando la siguiente información, comuníquese con el centro de atención al cliente de su país.

Problema	Posibles razones	Solución
El dispositivo/ adaptador de corriente se calienta durante el uso	Este es un fenómeno normal	No hay necesidad de tomar ninguna acción.
Puse la depiladora sobre la piel y el número parpadeo pero el ventilador de enfriamiento comenzó a funcionar	Se ha activado la protección contra sobrecalentamiento	Cuando se inicia la protección contra sobrecalentamiento, el ventilador sigue funcionando de forma continua. No apague el dispositivo, espere a que se enfríe durante más de 15 minutos antes de continuar usándolo.
(Flash listo) parpadea, pero el dispositivo no emite un flash cuando se presiona el botón de flash	El dispositivo necesita ser reiniciado	Reinicie el dispositivo, apáguelo y vuelva a encenderlo.
No puedo aumentar o disminuir la configuración de intensidad del flash	El dispositivo necesita ser reiniciado	Reinicie el dispositivo, apáguelo y vuelva a encenderlo.
Huele mal al usar el dispositivo	Los accesorios o los filtros están demasiado sucios.  No ha eliminado completamente el vello del sitio de tratamiento. Estos pelos pueden quemarse y producir mal olor.	Por favor, limpie los accesorios con cuidado.  Retire el vello de la superficie de la piel antes de usar este instrumento.
Durante el curso del tratamiento, la piel se siente más sensible de lo normal/ dolor insoportable al usar el dispositivo	El ajuste de intensidad de la luz que está utilizando es demasiado alto.  No ha eliminado completamente el vello del sitio de tratamiento.  El filtro ultravioleta en la salida está dañado.  Usa este dispositivo donde no es aplicable	Verifique para asegurarse de que se haya seleccionado la configuración de intensidad de luz adecuada. Baje el ajuste si es necesario.  Retire el vello de la superficie de la piel antes de usar este instrumento.  Una vez que el filtro UV esté dañado, no continúe usando este dispositivo. Póngase en contacto con el centro de atención al cliente de su país.  No utilice este dispositivo en las siguientes áreas: pección, areola, labios menores, vagina, ano, así como el interior de las fosas nasales y las orejas. Los usuarios masculinos no deben usar el producto en la cara o el escroto.
	El dispositivo no es adecuado para su tipo de piel	El tipo de piel es VI o V, piel oscura, no use este dispositivo.

La reacción de la piel fue más prolongada de lo habitual al final del tratamiento	El ajuste de intensidad de la luz que está utilizando es demasiado alto	La próxima vez, elija una intensidad de luz más baja.
No estoy satisfecho con el resultado del curso del tratamiento	El ajuste de intensidad de la luz que está utilizando es demasiado bajo	Elija una configuración más alta la próxima vez.
	No ha vuelto a pasar el flash por la zona donde ha sido tratado antes	Por favor, emita un flash lo más cerca posible de la parte anterior.
	Este dispositivo no tiene efecto en el color de su cabello	Necesita eliminar con éxito todo el vello. Se recomienda que siga el procedimiento de tratamiento recomendado.
	La frecuencia de uso del instrumento es insuficiente	Se recomienda que siga el procedimiento de tratamiento recomendado. Puede acortar el intervalo de tratamiento, pero no más de una vez cada dos semanas.
	Su respuesta al tratamiento con IPL puede ser lenta	Continúe usando el dispositivo durante al menos 6 meses, porque el vello volverá a crecer durante este periodo, pero seguirá disminuyendo.

**SERVITECH**  
SERVICIO TÉCNICO OFICIAL GADNIC  
www.servitech.com.ar  
☎ 11 6260 1114 (sólo texto)  
serviciotecnico@servitech.com.ar