

Care
by GADNIC

MANUAL DE USUARIO



Depiladora Láser
999K


DEPIO22

SERVITECH

SERVICIO TÉCNICO OFICIAL GADNIC
www.servitech.com.ar

☎ 11 6260 1114 (sólo texto)
serviciotecnico@servitech.com.ar

Introducción del dispositivo

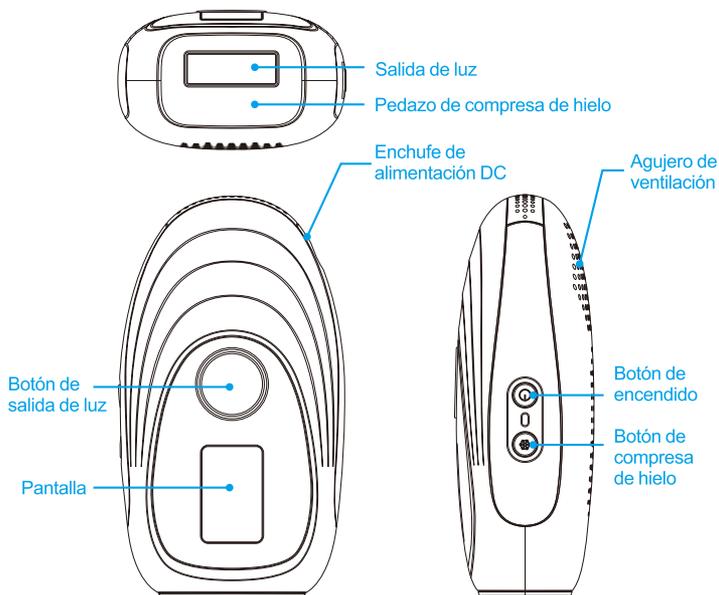

Nombre del producto	Dispositivo de depilación de punto de congelación IPL	Dimensiones	136.5x77x47.5mm
Adaptador de alimentación	100~240V	Superficie de salida de luz	3cm ²
Potencia de entrada nominal	DC12V --- 4A	Vida útil	999900 veces
Máxima potencia de salida	48W	Peso neto	Casi 249g

Principios de trabajo

- ▶ Bajo la luz de pulso con banda de onda y ancho de pulso específicos, la melanina en la piel absorbe más energía luminosa y transfiere calor instantáneo al folículo piloso; cuando el folículo piloso se eleva a cierta temperatura, entrará en el período de latencia. Al mismo tiempo, el cabello dejará de crecer y caerse lentamente, y el efecto se puede lograr al usuario durante 8 semanas o más. El filtro químico incorporado filtrará las impurezas, como los rayos ultravioleta, que no afectarán la salud de la piel. Úselo con confianza.
- ▶ La función de compresa de hielo puede calmar efectivamente la sensación de ardor causada por la iluminación. El pedazo de compresa de hielo tarda unos 10 segundos en alcanzar la temperatura ideal de compresa de hielo.

Nota: Incluso para el mismo equipo, la definición de cada persona de la sensación de ardor será diferente.

Tono de piel aplicable


	Tono de piel blanca	<input checked="" type="checkbox"/>		Beige	<input checked="" type="checkbox"/>
	Marrón claro	<input checked="" type="checkbox"/>		Marrón medio	<input checked="" type="checkbox"/>
	Marrón oscuro	<input checked="" type="checkbox"/>		Marrón o negro	<input type="checkbox"/>

Precauciones antes del uso

- ▶ No cargue. Se puede usar después de enchufarse. Después de uso, desenchufe el cable de alimentación y coloque el producto en un lugar fresco.
- ▶ Afeitarse antes de usar este producto, lo mejor es usar una crema de afeitado especial, de lo contrario, cuando la piel está seca, el afeitado rasará fácilmente la cutícula de la piel, causando daños a la piel.
- ▶ En vista de los diferentes tipos de piel, se debe realizar una prueba de área pequeña en el área donde se necesita la depilación para el primer uso, y se puede usar en un amplio rango sin reacciones adversas a intervalos de 12 horas.

- No utilice el nivel alto para la depilación por primera vez. Si el nivel es demasiado alto, puede causar molestias en la piel o incluso alergias. Es mejor comenzar desde el primer nivel y adaptarse lentamente, ajustando al nivel adecuado según su situación actual.
- Cuando use este producto, no irradie repetidamente la misma parte, sino que irradie uniformemente cada centímetro de piel en el área.
- La ayuda de la función de compresa de hielo mejora la experiencia del producto de consumo.
- Este producto puede lograr el efecto mejor después de persistir durante 8 semanas o más. Al final, el cabello se adelgazará y se desprenderá por completo. Al mismo tiempo, debe usarse una vez dentro de 15 a 30 días para mantener el mejor efecto de depilación.
- Si tu cabello mide más de 1 mm, afeita primero. Recomendamos que lo use con una afeitadora. La absorción de calor en la superficie de la piel por el cabello excesivamente largo hará que la piel se enrojezca e hinche, y el cabello quemado producirá un olor. Esto afectará su experiencia con el producto.
- No lo use cerca de los niños, ya que el producto emitirá una luz intensa y dañará fácilmente sus ojos.

Guía de uso

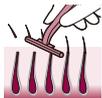

1. Use una maquinilla de afeitado para eliminar el cabello en el área de depilación y luego mantenga la piel seca y limpia




2. Enchufe el cable de alimentación, busque el botón de encendido en el lado lateral del producto y mantenga presionado para encender. Haga clic en el botón de encendido nuevamente para cambiar el nivel; haga clic en el botón de compresa de hielo para activar o desactivar la función de compresa de hielo (la luz y la compresa de hielo se pueden sincronizar), y presione el botón de compresa de hielo durante 3 segundos para ingresar al modo de compresa de hielo (solo compresa de hielo, sin luz)



3. Mantenga presionado el botón de luz para ingresar al modo de depilación automática, presione nuevamente para salir de este modo




4. Use los anteojos protectores profesionales adjuntos para proteger sus ojos durante la operación

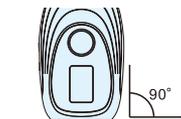

5. Después de que el cabezal de la lámpara esté cerca de la piel, si la luz azul al lado del botón de encendido parpadea continuamente, significa que se puede emitir la luz (si la luz azul está encendida constantemente, ajuste la posición del cabezal de la lámpara para asegurarse de que esté cerca de la piel hasta que la luz azul parpadee), luego presione el botón de luz para depilación, si la máquina está en modo automático, emitirá luz automáticamente sin presionar nuevamente el botón de luz

Recomendaciones para el tiempo de la depilación

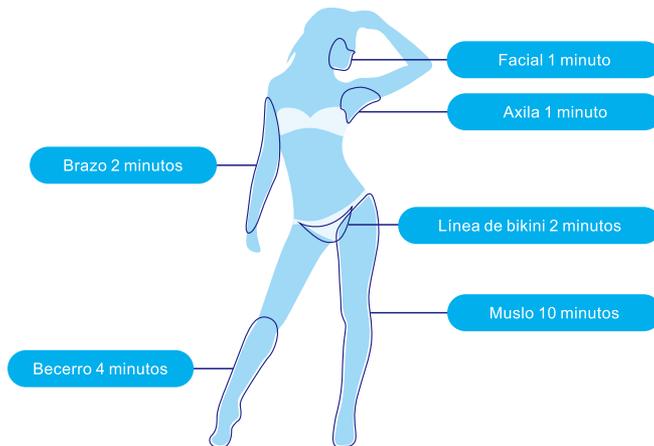

Aviso: el tiempo específico varía de persona a persona, determine el tiempo de acuerdo con su propia reacción cutánea, lo anterior es solo para referencia.

Ciclo de depilación

1-2 semanas	3 veces cada semana	El crecimiento del cabello se vuelve lento	
3-4 semanas	2 veces cada semana	El cabello se vuelve más delgado y suave, con la caída de las raíces negras.	
4-8 semanas o más	1 vez cada medio mes/1 mes	Los poros se encogen naturalmente y el cabello deja de crecer	

Nota: ¡La situación específica de los datos anteriores varía de persona a persona

Situaciones no aplicables

- Las mujeres embarazadas, las personas en el período menstrual, las mujeres en el período de lactancia, los fotosensibilizadores, las personas cicatrizadas están prohibidas de usar, no se recomienda el uso de menores;
- Las personas con enfermedad del corazón, presión arterial alta, tumores malignos, folliculitis, enfermedad infecciosa de la piel, piel quemada y trastornos anticoagulantes están prohibidas;
- Las personas con alergias leves y diabetes deben usarlo con precaución;
- Aquellos que han usado otros métodos de depilación deben esperar a que crezca antes de usarlo;
- No se recomiendan aquellos que han usado productos blanqueadores o productos que contienen vitamina A dentro de una semana;
- Este producto no se puede usar con productos para el cuidado de aceites esenciales;
- Úselo con precaución cuando tome aspirina e inmunosupresores; no se recomiendan aquellos que hayan usado recientemente medicamentos sensibles a la luz (como tetraciclina, sulfonamida, etc.);
- Los que han estado expuestos a la luz solar y las quemaduras solares en las últimas dos semanas, lo usan después de reparar la piel;
- Se prohíbe el uso de partes sensibles como las membranas mucosas y las partes privadas (como los párpados superiores, los labios, los pezones, la vagina, etc.)
- No recomendado para pacientes con complicaciones causadas por hirsutismo y otras enfermedades;
- Las personas con piel sensible deben usar este producto con precaución. Si se produce molestia en la piel, deje de usarlo inmediatamente y consulte a un médico
- No lo use si tiene venas varicosas y vasodilatación
- No lo use si el sitio de irradiación es sensible, herpes simple, lesiones cutáneas, hematoma, etc.

Precauciones

- En invierno o con piel seca, preste atención al cuidado diario e hidratación de la piel;
- Durante el funcionamiento, es necesario usar gafas protectoras, los ojos no deben mirar directamente a la luz intermitente, ni brillar directamente sobre los ojos;

- Raramente se presentan síntomas como un ligero enrojecimiento y picazón en la piel, pero también es un fenómeno normal. Puede esperar a que la piel se recupere antes de usar este producto;
- Al limpiar las manchas en el vidrio dentro de la tapa de la lámpara, está prohibido rociar alcohol directamente sobre la tapa de la lámpara;
- Al operar el dispositivo, no aplique cosméticos o líquidos similares a gel en la piel, como gel, para no dañar la piel o el dispositivo;
- Trate de no comer alimentos sensibles a la luz (como: espinacas, colza, mostaza, etc.) durante la operación;
- El ajuste del nivel de energía es de débil a fuerte. Bajo la condición de que la piel pueda resistir, cuanto mayor sea la energía, mejor será el efecto; cuando la persona con un color de piel más oscuro está operando, tenga cuidado de no elegir un nivel de energía demasiado alto, de lo contrario, quemará fácilmente la piel;
- Preste atención a la hidratación y protección solar de la piel después del uso. No toque el agua caliente durante 6 horas;
- Evite la radiación ultravioleta durante el uso, y tome medidas de protección solar al salir, puede aplicar crema barrera o protección solar. Trate de evitar la radiación de la computadora mientras trabaja;
- Después de usar el dispositivo y apagarlo, use hisopos de algodón o un paño limpio humedecido en una pequeña cantidad de alcohol medicinal (o use algodón con alcohol) para limpiar la mancha en el vidrio del cabezal de la lámpara. Está prohibido rociar alcohol directamente sobre el cabezal de la lámpara.
- Durante el uso del dispositivo, si hay pelos o manchas en el plástico en el borde de la ventana de salida de luz, hará que el plástico en el borde del cabezal de la lámpara se ennegrezca o produzca manchas negras. Aunque no afecta el rendimiento y el uso normal del instrumento, debe evitarse lo más posible;
- El producto no tiene función impermeable, no lo use en el baño, en la ducha ni en otros lugares propensos a mojarse;
- Si la carcasa del producto, el cabezal de la lámpara está dañado o el dispositivo se sumerge accidentalmente en agua, envíelo de vuelta al fabricante para que lo inspeccione para confirmar si se puede reparar; si está sumergido en una situación activa, desconecte la alimentación antes de tocar el dispositivo para garantizar la seguridad personal.
- Asegúrese de que este producto esté alejado de lugares con paredes magnéticas fuertes, humedad, polvo severo o alta temperatura;
- No someta el producto a fuertes choques o golpes., y use el producto para fines distintos al cuidado designado.
- Excepto el personal autorizado de esta compañía, otros no deben abrir la carcasa del producto, de lo contrario habrá peligro de descarga eléctrica. Los no profesionales tienen estrictamente prohibido realizar reparaciones sin autorización.

Problemas comunes y soluciones

Problema	Causa posible	Soluciones
Incapaz de encender	La fuente de alimentación no está conectada	Compruebe si el cable de alimentación del adaptador de alimentación está enchufado
El adaptador se calienta durante el uso.	Fenómeno normal	No es necesario
El uso a largo plazo provoca manchas en el borde de cabezal de la lámpara.	Sin pelo limpio antes y después de usar, lo que causa melanina en cabezal de la lámpara	Use alcohol para limpiar las áreas relevantes del producto; asegúrese de eliminar el vello
Efecto de iluminación insatisfactorio	El nivel es demasiado bajo; la frecuencia de uso es demasiado baja	Elija el nivel adecuado; tenga paciencia para seguir las pautas; asegúrese de que cada parte esté expuesta de manera uniforme a la luz
Incapaz de emitir luz	El cabezal de la lámpara no está cerca de la piel.	Asegúrese de que el cabezal de la lámpara esté en contacto de 90 grados con la piel.
Protección automática contra sobrecalentamiento (error 3)	Programa de autoprotección para el sobrecalentamiento de la máquina.	Deje que el producto se enfríe en un lugar ventilado.
Piel sensible cuando se irradia	El nivel es demasiado alto; la ventana de transmisión de luz está dañada	Ajústelo a una marcha adecuada; consulte con el servicio postventa para el mantenimiento
Olor cuando se irradia	El espejo de filtro está contaminado con polvo; hay vello residual en la superficie del cuerpo	Limpie el cabezal de la lámpara y el área circundante; asegúrese de eliminar el vello; ajústelo al nivel apropiado