


MANUAL DE USUARIO

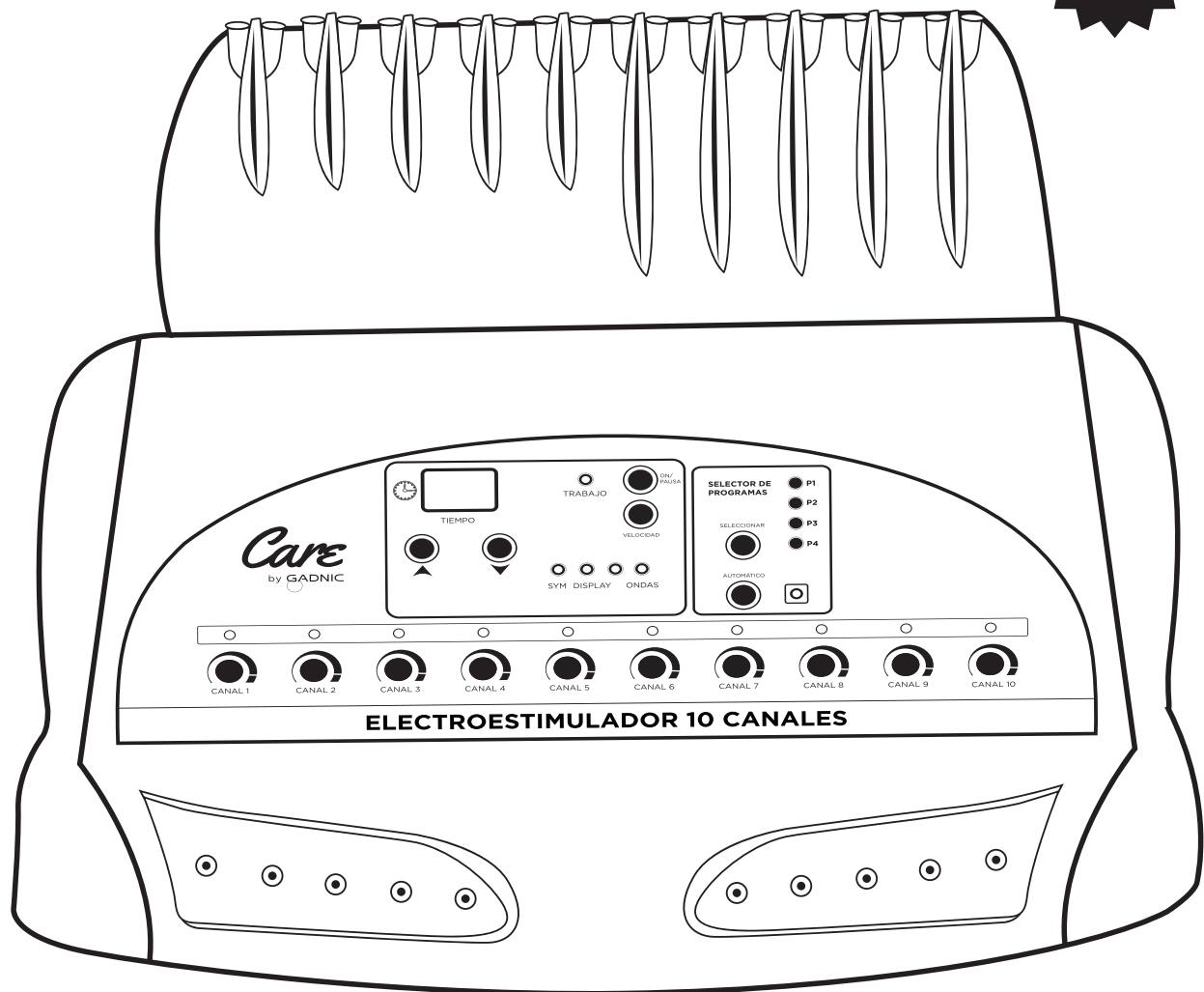

ELECTROESTIMULADOR
10 CANALES

ESTIMU04

Máquina de pérdida de peso electro estimulador muscular

Introducción:

Estimulador electro muscular es un producto revolucionario con tecnología avanzada especialmente diseñado para la generación actual para la óptima calidad de vida. Los resultados probados de las pruebas otorgaron el mayor valor al producto en su conjunto. Damos una sincera bienvenida a los clientes de todo el mundo para que intenten estar satisfechos.

Funciones:

1. Perder peso, adelgazar el cuerpo.
2. Realce de senos sin agrandar los senos y fisioterapia.
3. Estimulación farádica corporal y mamaria computarizada.
4. Trate la celulitis en muslos, tobillos, rodillas, estómago, glúteos, caderas, y brazos:

Estimular y hacer que los músculos hagan ejercicio de contracción.


5. Tonifica los músculos y micro músculos que sostienen la dermis.
6. Trata los músculos y masa muscular flojos y firmes.

Características:


1. Con 10 grupos de electrodos y 1 par de electrodos de sujetador.
2. 8 variedades de formas de onda independientes de baja frecuencia para permitir que los músculos realicen diferentes formas de ejercicio.
3. Fácil de usar con una gran pantalla LCD.

4. Debido a la excelente placa de circuito, todas las almohadillas de electrodos pueden seguir trabajando juntas con diferentes energías durante mucho tiempo sin ninguna almohadilla fuera de control.
5. Cuida la espalda y fortalece los músculos de los hombros para una buena línea corporal.
6. Promueve la circulación sanguínea y mejora el metabolismo, farádico corporal computarizado para adelgazar con estimulación de biocorriente.

Panel de operaciones:

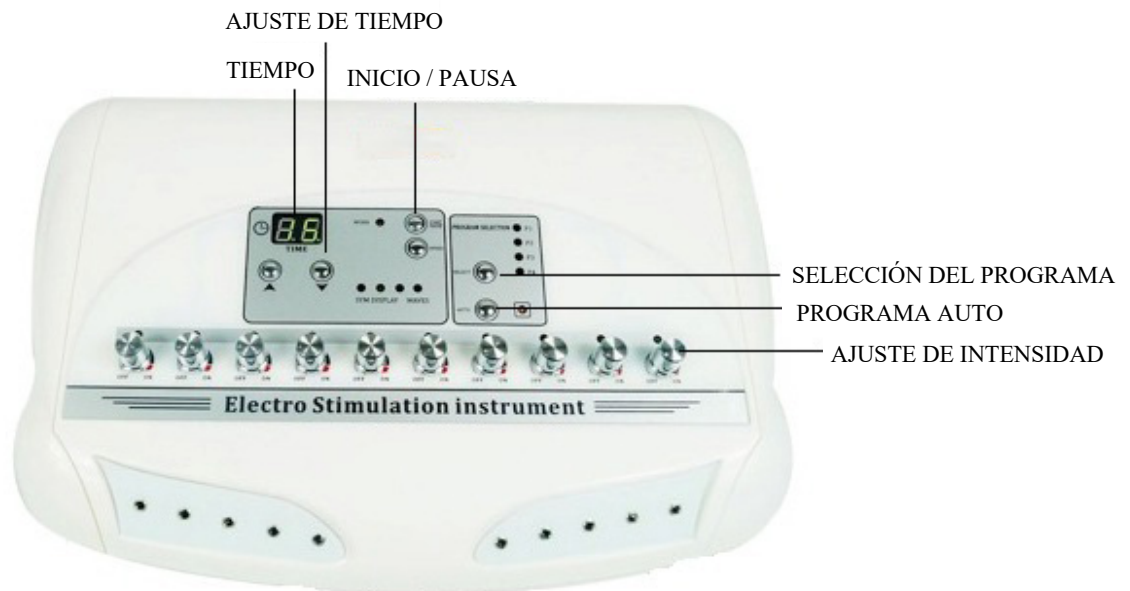

Almohadillas de electrodos para partes del cuerpo:

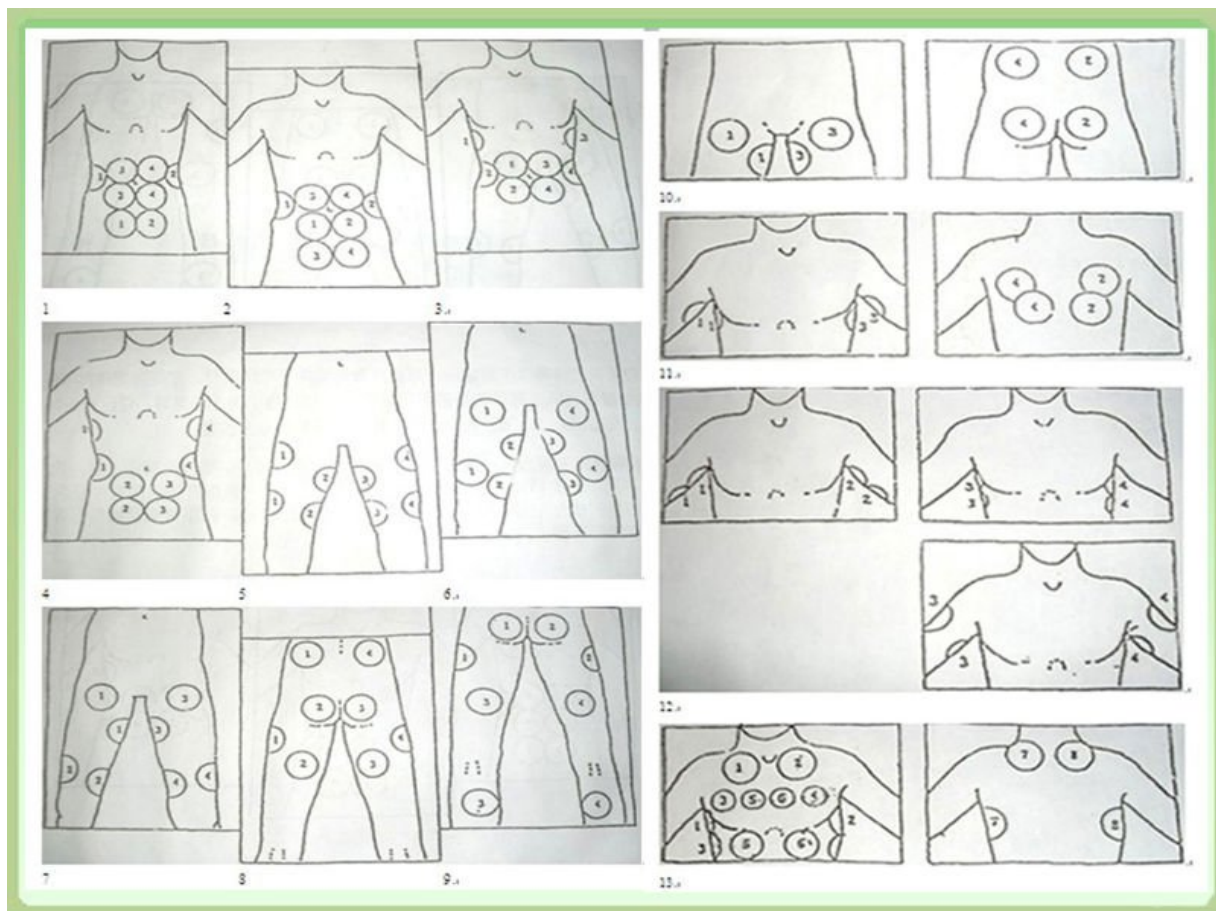

Instrucciones de operación:

1. Enchufe y encienda el producto.
2. Presione la tecla SELECCIONAR para seleccionar uno de los programas de pérdida de peso de P1-P4, o presione la tecla AUTO.
3. Presione la tecla VELOCIDAD para seleccionar la ola de pérdida de peso.

Olas densas (P1): Las ondas más adecuadas para estimular el crecimiento de las células glandulares mamarias. A través de los golpes producidos por las almohadillas eléctricas, puede reafirmar y fortalecer ectopectoralis y entopectoralis y costoscapularis. Es eficaz para promover el crecimiento de los senos, mejorar los senos laxos o caídos.

Olas dispersas (P2): Mejora la circulación sanguínea, promueve el metabolismo, aprieta y reafirma los músculos.

Olas densas y escasas (P3): Apriete y libere un músculo, lo que provoca el ejercicio aeróbico, disuelve y consume grasa, agota el exceso de energía interna, bloquea la acumulación de grasa, convierte la grasa sólida en ácido graso libre.

Ondas fluctuantes (P4): Comprima la grasa para que se descomponga y se convierta en calor y agua, ayude a eliminar los desechos corporales y las toxinas y los ácidos grasos libres del cuerpo. Estas ondas son adecuadas para masajes de todo el cuerpo.

Ondas automáticas: Selecciona automáticamente las 4 ondas diferentes, cada onda dura alternativamente 10 segundos.

Por tanto, F2 / F3 / F4 se utilizan para bajar de peso y adelgazar.

Sugerimos 1 vez al día, 10 veces como curso de tratamiento.

Instrucciones de operación:

1. Enchufe y **encienda** el producto.
2. Presione la tecla **SELECCIONAR** para seleccionar uno de los programas de pérdida de peso de P1-P4, o presione la tecla **AUTO**.
3. Presione la tecla **VELOCIDAD** para seleccionar la ola de pérdida de peso.
4. Configurar el temporizador (tiempo de trabajo)
5. Conecte los electrodos y colóquelos en la posición de grasa con los dos electrodos colocados simétricamente y a 5 cm de distancia entre sí, luego

asegúrelos con un cinturón de seguridad (precaución: no los coloque en el área del corazón).

6. Presione la tecla **PAUSA / INICIO** para comenzar a perder peso.
7. Ajuste la potencia de salida a un grado que pueda soportar.
8. Cuando termine la sesión de pérdida de peso, desenchufe la unidad.

1) Operación sugerida

① Aplique un poco de gel o crema para adelgazar sobre los parches eléctricos y fíjelos con el flex en la parte del cuerpo.

② Pegue el parche en las partes del cuerpo de la siguiente manera:

Imagen 1: Cuello y hombro

Función: estimula la circulación sanguínea en el cuello y el hombro, lo que puede eliminar la grasa y el cansancio.



Imagen 2: Cuello, hombro y brazo

Función: estimula la circulación sanguínea en el cuello, el hombro y el brazo, que puede abrirse para eliminar la grasa.



Imagen 3: Seno

Función: estimular la circulación sanguínea en el pecho y estimular el desarrollo de la mama, que puede ajustar la secreción de la hormona.

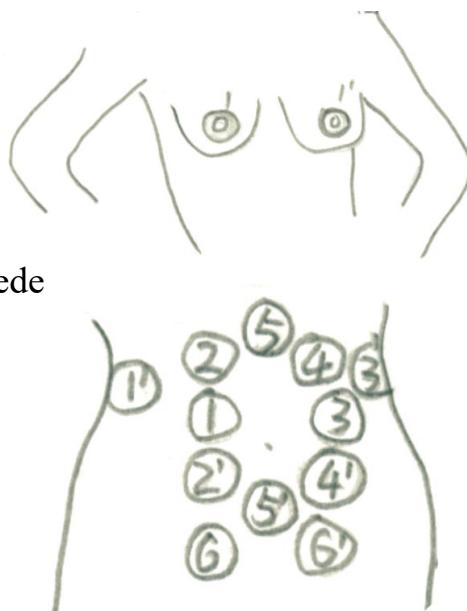


Imagen 4: Barriga

Función: estimula la circulación sanguínea en el vientre y elimina la grasa y tonifica el músculo del pecho.

Imagen 5: Espalda

Función: Estimula la circulación sanguínea en la espalda y tonifica los músculos de la espalda, lo que puede eliminar el exceso de grasa y aliviar la fatiga.

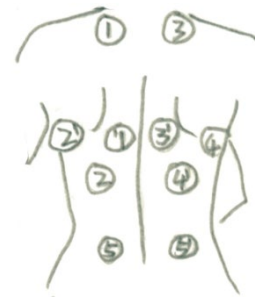


Imagen 6: Cadera

Función: Estimula la circulación sanguínea en la cadera, lo que elimina el exceso de grasa y tonifica el músculo de la cadera.



Picture 7: Brazo

Función: Estimula la circulación sanguínea en los brazos y abre canales que pueden eliminar el exceso de grasa y tonificar el músculo del brazo.



Picture 8: Pierna

Función: Estimula la circulación sanguínea en las piernas y abre canales que pueden eliminar el exceso de grasa y tonificar el músculo de la pierna.



Precauciones:

1. No coloque las almohadillas sobre la piel lesionada o los músculos infectados.
2. No coloque almohadillas sobre cicatrices correspondientes a cirugías recientes (dentro de los 10 meses).
3. No coloque almohadillas en el estómago después de comer dentro de 1 hora.
4. No utilice este dispositivo en pacientes con problemas cardíacos.
5. No utilice este dispositivo en personas gravemente enfermas con problemas de dolor de estómago, hígado, entrañas y cálculos vesicales.
6. No utilice este dispositivo en personas con epilepsia o alcohólicas.
7. No utilice este dispositivo en mujeres embarazadas.

**SERV
TECH**

SERVICIO TÉCNICO OFICIAL GADNIC
www.servitech.com.ar

📞 11 6260 1114 (sólo texto)
serviciotecnico@servitech.com.ar