


Nicefeel

Oral Irrigator

Model NO.: FC 159



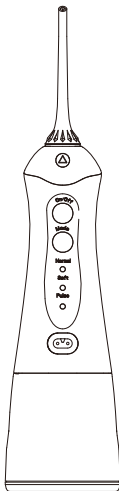

Spazzolino ad acqua portatile

Portable Waterflosser Usage
Manual Manuale d'uso dello
spazzolino portatile ad acqua

FC 159


Gracias por adquirir el irrigador dental portátil.

Gracias por adquirir el irrigador dental portátil. Los irrigadores dentales usan chorros fluctuantes de agua para la limpieza dental, que eliminan las bacterias dañinas que se esconden en las profundidades de las oquedades dentales y la encía: lugares que no pueden limpiarse mediante el mero cepillado dental. Los cepillos dentales tradicionales son incapaces de eliminar restos de comida y bacterias dañinas profundamente escondidas. El hilo dental solo entra en contacto con una zona limitada bajo la encía. El irrigador dental puede limpiar bacterias dañinas escondidas en las oquedades dentales y bajo la línea de la encía.

Contenidos

Contenidos	01
Descripción del producto	02
Accesorios del producto	03
Procedimiento operativo	03
Instrucciones de uso	04
Técnicas recomendadas	05
Ejemplo de desmontaje	06
Problemas habituales	08
Servicio post-venta	09

Descripción del producto

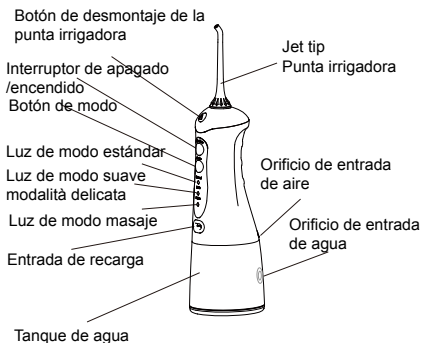

Accesorios del producto



2x Puntas irrigadoras estándar



Cable

La punta irrigadora y otros componentes reemplazables pueden ser adquiridos en comercios minoristas.

Procedimientos operativos




Preparación previa.

¡De extrema importancia! Antes de su primer uso, le rogamos que cargue totalmente el aparato, enchufando el conector USB en la entrada de corriente y el otro extremo, a la fuente de alimentación. Durante su carga el producto no debe usarse.


Montaje y desmontaje de la punta irrigadora.

Inserte la punta irrigadora en el orificio de la cabeza de rociado, enroscándola hasta que oiga un clic.

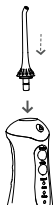

Como se muestra en el Diagrama 4, abra la tapa de la cisterna de agua y vierta agua en la misma.

Aviso: Le rogamos que se asegure de que el aparato está apagado cuando vierta agua en la cisterna de agua.

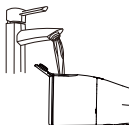

Al retirar o cambiar la punta irrigadora, le rogamos que antes de retirarla presione el botón de desmontaje situado en el mango de la punta irrigadora



Instrucciones de uso


- Este producto tiene una función de memoria, tras su re-encendido el modo de presión de agua será el mismo que cuando el aparato se apagó.
- Se puede cambiar entre los modos estándar, suave y masaje sin importar si el aparato está encendido o apagado.
- Los modos pueden cambiarse mientras el aparato está apagado, por lo que se puede elegir el modo que se desee antes de re-encender el aparato. Independientemente del modo, tras 120 segundos de funcionamiento el aparato se apagará automáticamente.
- Cuando se use el modo masaje durante más de 3 segundos, se mostrará el nivel de batería restante.
- Durante la recarga, las tres luces indicadoras parpadearán. Cuando las tres luces indicadoras estén encendidas de modo constante, esto indicará que la batería está recargada.
- Durante su uso, si las tres luces indicadoras parpadean, esto indicará que la energía del aparato es insuficiente y que se debe recargar.
- Durante la recarga el aparato no se deberá usar.
- Rote el dial de la punta irrigadora para ajustar la dirección del chorro de agua.




(ES)

Técnicas recomendadas

Manteniendo el aparato inclinado hacia abajo, coloque la punta irrigadora en la boca y apúntela hacia los dientes antes de encender el aparato.

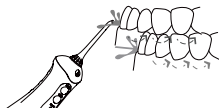

Una vez que el chorro de agua incida en un ángulo de 90 grados en la encía, cierre ligeramente la boca para evitar que el agua salpique fuera y conseguir un mejor resultado. Primero apriete los molares y premolares y aplique el chorro en los incisivos. Deslice el chorro a lo largo de la encía, parando brevemente entre los dientes, hasta que el área alrededor de las encías y los espacios entre los dientes estén totalmente limpios.

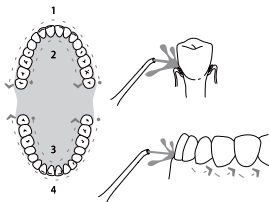


Ejemplo de desmontaje

Pasos a seguir

1. Apague el dispositivo y vacíe la cisterna de agua.



2. Usando ambas manos como se muestra en el Diagrama 2; utilice su mano izquierda para sujetar el cuerpo del producto y su mano derecha para sostener la cisterna de agua. Al mismo tiempo, para desmontar la cisterna de agua, extráigala rotando en el sentido contrario a las agujas del reloj.

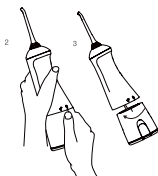

Uso y mantenimiento de la batería

Mantenimiento de la batería

- Previamente a su primer uso el aparato se deberá cargar totalmente, durante aproximadamente 4 horas.
- Si va a ser almacenado durante un periodo largo de tiempo, le rogamos que cargue el aparato previamente.
- Para maximizar la vida útil de la batería, le rogamos que la recargue con prontitud cuando la energía sea insuficiente.

Uso de la batería

El dispositivo incluye una batería de litio que no debe ser reemplazada. Al final de la vida útil de la batería, le rogamos que la deposite en el punto de recogida o reciclaje de su municipio.

Problemas habituales y soluciones

Problemas	Motivos	Modo de solucionarlo
Fuga de agua entre la punta irrigadora y la pieza roscada	El anillo obturador del casquillo fijo para la punta irrigadora está dañado y la punta irrigadora no se puede instalar adecuadamente	Tras ponerse en contacto con el proveedor para su reparación, instale la punta irrigadora adecuadamente
Fugas de agua en la cisterna de agua	El anillo obturador está suelto	Reinstálelo correctamente
Presión inadecuada	Voltaje bajo	Recárguelo antes de usarlo
El aparato no se puede encender	Voltaje bajo	Recárguelo antes de usarlo
El producto no descarga agua	El filtro está obstruido	Limpie el filtro
Los lados del cisterna tienen fugas de agua	El orificio de entrada de aire filtra agua	Habitualmente provocado por una excesiva presión de aire.

Si no se pueden resolver estos problemas con los métodos arriba mencionados, le rogamos que consulte con su proveedor o contacte con el servicio designado de reparación post-venta.

Le recordamos que:

1. Durante los primeros usos, le rogamos que seleccione “modo suave” para evitar el sangrado de las encías provocado por la falta de adaptación al uso. Después de dos semanas de uso habitual deberían apreciarse mejoras. Si el sangrado es excesivo o no remite tras estas dos semanas, podría estar sufriendo un problema de gingivitis crónica y sería recomendable que buscara tratamiento dental profesional.
2. No es recomendable el uso del producto por niños, ni por personas con implantes dentales, úlceras bucales o llagas orales abiertas.

Servicios post-venta

Gracias por adquirir el irrigador dental portátil; le rogamos que recuerde los siguientes puntos.

1. Le rogamos que conserve la factura de compra válida emitida por el proveedor como documentación requerida para el mantenimiento.
2. El producto incluye uno años de garantía contra fallos de funcionamiento no causados por el usuario, de acuerdo a la legislación estatal pertinente. Si el producto fue adquirido a través de Amazon, no se requerirá documentación, únicamente se deberá proporcionar el número de pedido para recibir el correspondiente servicio de mantenimiento gratuito post-venta que proporcionamos (en base a la fecha de compra del aparato indicada en la factura).
3. Cuando durante el período de mantenimiento se den las siguientes circunstancias, los costes y honorarios de servicios se cobrarán en función del caso:
 - Daños provocados por el mal uso o inadecuado mantenimiento causados por el consumidor;
 - Daños durante la reparación causados por servicios de reparación no designados por la compañía;
 - Ausencia de la documentación de compra pertinente o si han transcurrido más de dos años desde la fecha de fabricación;
 - Daños causados por el uso con propósitos comerciales;
 - Daños provocados por causas de fuerza mayor (tales como tormentas, terremotos o incendios).

技术要求:

1.尺寸: 70x110mm

2.材质: 80g书写纸 骑马钉装 13P

3.材料符合ROHS/REACH