


Nicefeel

Irrigador oral


Manual de usuario

FC169

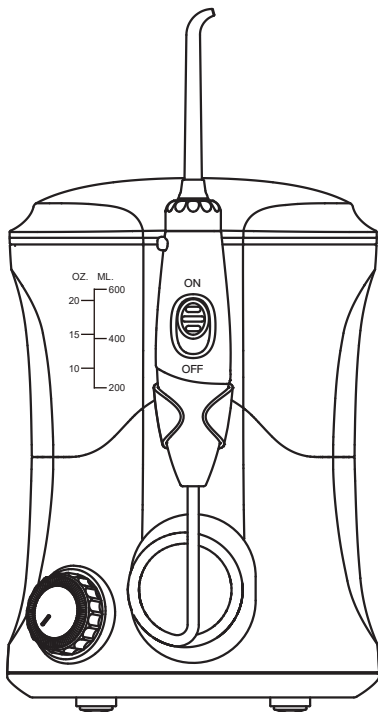

Irrigador dental

Manual de uso

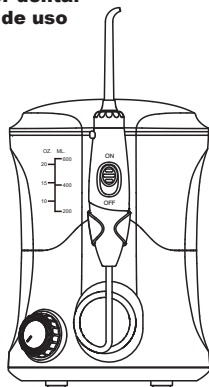

Número de modelo: FC169

Servicios post-venta

Gracias por adquirir el irrigador dental. Le rogamos que recuerde lo siguiente:


1. Le rogamos que conserve la factura de compra válida emitida por el proveedor como documentación requerida para el mantenimiento.
2. El producto incluye dos años de garantía contra fallos de funcionamientos no causados por el usuario, de acuerdo a la legislación estatal pertinente. Si el producto fue adquirido a través de Amazon, no se requerirá documentación, únicamente se deberá proporcionar el número de pedido para recibir el correspondiente servicio de mantenimiento gratuito post-venta que proporcionamos (en base en la fecha de compra del aparato indicada en la factura).
3. Cuando durante el período de mantenimiento se den las siguientes circunstancias, los costes y honorarios de servicios se cobrarán en función del caso;
Daños provocados por el mal uso o inadecuado mantenimiento causados por el consumidor;
Daños durante la reparación causados por servicios de reparación no designados por la compañía;
Ausencia de la documentación de compra pertinente o si han transcurrido más de dos años desde la fecha de fabricación;
Daños causados por el uso con propósitos comerciales;
Daños provocados por causas de fuerza mayor (tales como tormentas, terremotos o incendios).

4. Le rogamos que rellene cuidadosamente el siguiente formulario y entregue el aparato en el servicio de reparación post-venta designado por la compañía para llevar a cabo las reparaciones.


Registro de mantenimiento y reparación

Nombre completo del consumidor		Número de contacto	
Modelo del producto		Color del producto	
Fecha de compra		Plataforma de compra	
Dirección de contacto			
Fecha de mantenimiento			

Diagrama del producto

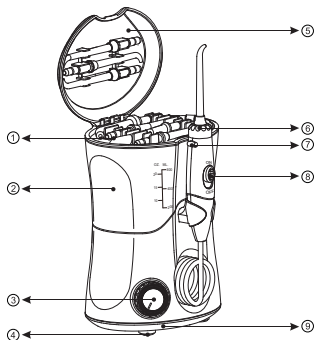

1. Deposito
2. Cisterna de agua
3. Interruptor de encendido/apagado/ botón de ajuste de presión.
4. Ventosa de la base
5. Tapa de la cisterna de agua
6. Dial de 360 grados de la punta irrigadora
7. Botón de desmontaje de la punta irrigadora
8. Interruptor del mango
9. Base

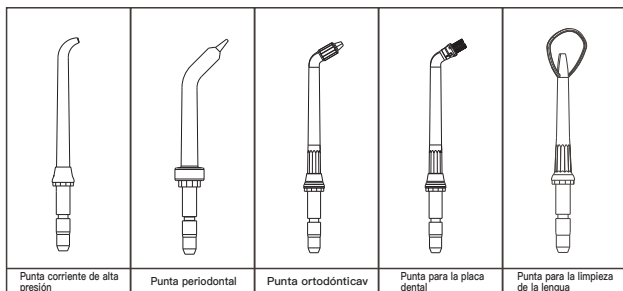

Punta corriente de alta presión

Punta periodontal

Punta ortodóntica

Punta para la placa dental

Punta para la limpieza de la lengua

- La punta corriente de alta presión incluye tres anillos de color para su uso por tres personas diferentes (pack familiar).


Se incluyen cuatro puntas irrigadoras para usos especiales (punta para la limpieza de la lengua, punta periodontal, punta para la placa dental, punta ortodóntica)

- 1x Punta periodontal
- 1x Punta para la placa dental
- 1x Punta ortodóntica
- 1x Punta para la limpieza de la lengua


Para las instrucciones de uso, consulte las páginas 43-44 de este manual de instrucciones.

Preparación para el uso


Enchufe el conector de alimentación del aparato de irrigación dental en la fuente de alimentación.

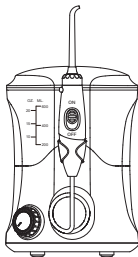

Una vez que la cisterna de agua esté llena de agua, colóquela de nuevo en el aparato, presionando ligeramente su parte superior. Asegúrese de que el anillo obturador de la base de la cisterna está alineado con el anillo de goma de la base del aparato.

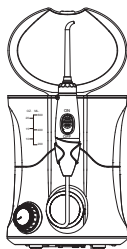


Introducción y retirada del tubo pulverizador

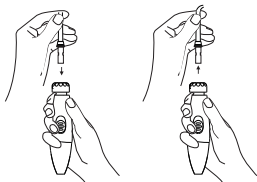

Cuando introduzca la punta irrigadora en el mango, debería escuchar un nítido sonido de clic. Cuando retire la punta irrigadora del mango únicamente deberá presionar ligeramente el botón de desmontaje de la punta irrigadora y retirar la punta del mango.



Ajuste de la presión de agua

Cuando escuche un clic mientras gira el interruptor de encendido y apagado, esto indicará que el aparato ha sido encendido. Girarlo en el sentido de las agujas del reloj incrementará la presión del agua. Si el aparato se mantiene encendido durante más de 3 minutos, se apagará automáticamente. Para volver a encenderlo deberá girar el interruptor en el sentido contrario al de las agujas del reloj hasta que vuelva a escuchar el clic, entonces podrá girarlo de nuevo en el sentido de las agujas del reloj.

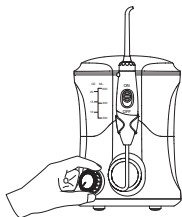

Usando el Irrigador Dental

Coloque la punta irrigadora en la cavidad bucal y diríjala hacia los dientes. Con la otra mano encienda el aparato y ajuste la presión al nivel requerido (se recomienda usar la presión mínima en su primer uso). La dirección del chorro de agua puede controlarse rotando el dial de 360 grados en la parte superior del mango.

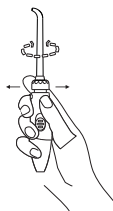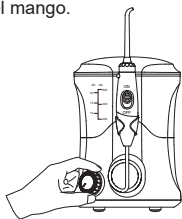

Técnica de uso

Cuando el chorro de agua incida a un ángulo de 90 grados sobre las encías, cierre ligeramente la boca para evitar que el agua salpique fuera, permitiendo que el agua fluya desde la esquina de la boca al lavabo. Deje deslizarse suavemente la punta irrigadora a lo largo de las encías, deteniéndose brevemente entre diente y diente. Cuando el agua irrigue los dientes permita que esta pase a través

Introducción a las puntas irrigadoras


Punta periodontal

La punta periodontal inyecta agua o medicamentos líquidos de uso oral en lugares específicos bajo la línea de la encía.



Punta corriente de alta presión

Limpia lugares profundos dentro de la cavidad bucal con un radio de acción de 360 grados, alcanzando al mismo tiempo lugares de difícil limpieza, restos de comida y bacterias dañinas que se encuentren en las profundidades de las oquedades dentales o bajo la encía. Lo que le proporcionará una placentera experiencia dental.

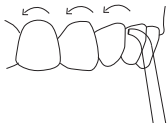


Punta para la limpieza de la lengua.

Sitúe el raspador lingual sobre la lengua antes de encender el irrigador de agua. Apóyelo ligeramente sobre la parte central posterior de la lengua, tirando ligeramente de él hacia delante mientras lo mantiene en contacto con la superficie de la lengua.



Punta para la placa dental


La placa dental está provocada por conjuntos de bacterias que se fijan a la superficie de los dientes sin haberse aún mineralizado. Esta punta irrigadora es de gran efectividad para prevenir la formación de placa dental. El uso especial de la punta para la placa dental es el de la limpieza de zonas de difícil acceso en aparatos y otros dispositivos dentales.

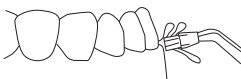

Boquilla para Ortodoncia

La punta especial de Ortodoncia esta diseñada de forma exclusiva para simultáneamente cepillar y enjuagar las zonas difíciles de alcanzar alrededor de los brackets y otros aparatos dentales.

Para utilizar la boquilla, inclínese sobre el lavabo y use las cerdas del cepillo para limpiar alrededor del trabajo dental. El cepillo tirará un poco de agua para enjuagar cualquier residuo.

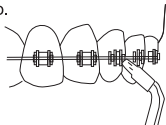

Limpieza:

Si se ha usado algún medicamento líquido en la cisterna de agua, le rogamos que se tome unos momentos para limpiar el aparato.

Vierta algo de agua caliente en la cisterna de agua, mientras dirige la punta irrigadora hacia el lavabo. Encienda el aparato y déjelo funcionar hasta que la cisterna de agua se vacíe. Esto puede ayudar a impedir el bloqueo de la punta irrigadora y alargar la vida útil del aparato.

Use un paño y productos de limpieza neutros y no abrasivos para limpiar el producto.

Antes de su limpieza, asegúrese de que el aparato no esté conectado a la fuente de alimentación.

Mantenimiento y conservación

1. Después de cada uso, le rogamos que retire del aparato el conector de alimentación y coloque la cisterna de agua sobre una superficie plana. Una vez que el agua se ha vaciado totalmente o se ha secado con un paño, colóquela junto con el aparato limpio en un lugar oscuro y seco. Si no se va a usar durante un periodo prolongado de tiempo, guárdelo en su paquete o en una caja de almacenamiento.
2. En caso de avería del aparato, proceda a consultar con su proveedor o llame al servicio post-venta para informarse acerca del método de reparación pertinente.
3. Le rogamos que no desmonte o intente desarmar el producto. La garantía proporcionada por la compañía no cubre daños provocados de tal modo.
4. Si el cable de alimentación se dañara, le rogamos que acuda al servicio de reparación designado por la compañía o a un taller cualificado para su reparación. Está totalmente prohibido cambiar el cable o clavija de alimentación por cuenta propia.
5. Cuando expire la garantía del irrigador dental, la compañía le seguirá prestando servicio, cobrando únicamente el coste de los materiales y una pequeña tasa en concepto de gastos de mano de obra.

Averías habituales y modo de solucionarlaslösungen

Avería	Causa	Modo de solucionarla
Fugas de agua entre la punta irrigadora y el mango	La punta irrigadora no ha sido instalada correctamente	Introduzca la punta irrigadora en el mango hasta escuchar un clic
Elcabezal del cepillo periodontal estápartido	La punta irrigadora ha sufrido daños graves	Cámbiela por una nueva
Fugas de agua en el tubo que conecta la base del irrigador con el mango	El tubo está dañado	Cambio o reparación post-venta por parte del proveedor
Fugas en la cisterna de agua	La válvula de la cisterna de agua no se ha instaladoo se ha instalad en la dirección errónea	Reponga la válvula de agua o reinstálela correctamente
Presión insuficiente	La cisterna de agua no se ha instalado correctamente	Reinstale la cisterna de agua presionando su parte superior ligeramente
El aparato no se puede encender	El motor no está operativo	Asegúrese de que la fuente de alimentación está conectada o contacte con su proveedor para sreparación

Garantizamos a los propietarios y usuarios originales que no existen defectos en los materiales o métodos de fabricación del producto, el periodo de garantía se extiende por un año desde la fecha de compra.

¡Le agradecemos la adquisición del irrigador dental Oral Irrigator !

Contenidos:

Medidas de seguridad destacadas: 3

Diagrama del producto: 5

Instrucciones de uso del producto: 8

Instrucciones de uso de las puntas irrigadoras especiales: 11

Limpieza y mantenimiento: 13

Averías habituales y como solucionarlas: 14

Le recordamos:

Accesorios incluidos en este producto:

1x Aparato principal (incluida cisterna de agua)

1x Manual de instrucciones

Puntas irrigadoras

3x Punta corrientes de alta presión

1x Punta para la limpieza de la lengua

1x Punta periodontal

1x Punta para la placa dental

1x Punta ortodóntica

Gracias por adquirir el Irrigador Dental


El irrigador dental usachorros fluctuantes de aguapara la limpieza dental, que eliminan las bacterias dañinas que se esconden en las profundidades de las oquedades dentales y las encías: lugares que no pueden limpiarse mediante el mero cepillado dental.

Higiene dental tradicional

Los cepillos de dientes tradicionales son incapaces de eliminar los restos de comida y las bacterias dañinas que se ocultan en la encía.



La seda dental solo puede alcanzar un área limitada bajo la encía.

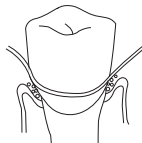

El irrigador dental

Elimina las bacterias dañinas ocultas en las oquedades dentales y bajo la línea de la encía.



◆ PRECAUCIONES IMPORTANTES

Cuando use aparatos eléctricos, especialmente cuando haya niños presentes, siempre deberían tomarse algunas medidas de seguridad básicas, que incluyen las siguientes:

LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR

PELIGRO- Para reducir el riesgo de electrocución:

- ◆ Desenchufe siempre este producto inmediatamente después de usarlo.
- ◆ No lo use cuando se esté bañando.
- ◆ No guarde o coloque el producto en lugares desde los que se pueda caer o ser tirado a un fregadero o bañera.
- ◆ No lo sumerja ni vierta sobre él agua u otros líquidos.
- ◆ No intente tocar un aparato que se ha caído al agua. Desenchúfelo inmediatamente.

ADVERTENCIA- Para reducir el riesgo de quemaduras, electrocución, fuego, o heridas en las personas.

- ◆ Un aparato nunca debería estar sin supervisión mientras esté enchufado.
- ◆ Es necesario supervisar cuando el producto esté siendo utilizado por, o haya cerca, niños o personas discapacitadas.
- ◆ Utilice este producto únicamente para los usos descritos en el manual de instrucciones. No use accesorios no recomendados por el fabricante.
- ◆ Nunca utilice este producto si tiene un cable o un enchufe dañados, si no funciona correctamente, se ha caído, dañado o sumergido en agua. Devuelva el producto al centro de servicio para su examen y reparación.

- ◆ Mantenga el cable lejos de superficies calientes.
- ◆ No tape nunca las aberturas de ventilación del producto, ni lo ponga sobre superficies blandas como camas o sofás, en las que se pueden tapar las aberturas de ventilación. Mantenga las aberturas de ventilación limpias de pelusa, pelos y objetos similares.
- ◆ Nunca lo use cuando esté durmiendo o somnoliento.
- ◆ Nunca meta o deje caer objetos por las aberturas o mangueras.
- ◆ No lo use en el exterior ni lo utilice donde se estén empleando productos en aerosol (spray) o administrando oxígeno.
- ◆ Enchufe este producto solo en tomas de corriente con toma de tierra.
- ◆ Vea las instrucciones de puesta a tierra.
- ◆ Desenchufe este producto antes de llenarlo. Llene (el depósito) solo con agua a menos que se especifique otra cosa por parte del fabricante. No deje que se rebose (ver instrucciones de llenado).
- ◆ Es muy normal que te provoca las encías sangrantes si usas el irrigador dental en la primera vez, esto depende de la sensibilidad gingival de cada persona . Por lo tanto, te recomendamos que comiences a utilizar el irrigador dental con la velocidad más baja.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

