

**Care**  
by GADNIC

## MANUAL DE USUARIO



Cabina Corporal Terapia Facial  
**LEDF5000**

**LEDMASK5**

Antes de utilizar el producto, lea atentamente este manual de usuario.

# 1. Introducción

## 1.1 Información general

Este sistema de producto está diseñado de acuerdo con las especificaciones internacionales, no sólo seguro, fuerte y cómodo de usar.

## 2. Precaución de seguridad



**Nota: Lea el manual de instrucciones antes de usarlo y utilícelo.**

El manual de usuario contiene no sólo las instrucciones para el uso del dispositivo, sino también para las precauciones de seguridad, mantenimiento e información de garantía del producto. Con el fin de estar seguro, por favor confirme la siguiente información de seguridad y guía de inicio antes de utilizar este instrumento.

### 2.1 Esquema

- 1). Cuando utilice este producto, lea las precauciones y el método antes de usarlo, y debe estar a disposición de quienes puedan utilizarlo siguiendo los pasos adecuados.
- 2). Informar sobre la seguridad básica del producto y las precauciones de seguridad necesarias para poner en marcha este instrumento.
- 3). Quienes deseen utilizar este instrumento deben estar familiarizados con el cumplimiento de las normas de seguridad.
- 4). Este instrumento debe ser manejado por alguien que haya sido instruido en conocimientos de seguridad, comunicarse adecuadamente a la persona acerca de las precauciones antes de recibir el producto.

### 2.2 Notas generales

Antes de utilizar el instrumento, debe comprobar el cuerpo y el módulo LED.

Evite las altas temperaturas, la humedad y la luz directa.

mejor colocarlo en una habitación con buena ventilación.

Instálelo en una habitación que evite la luz directa y con una buena ventilación.

Instálelo en una superficie plana.

Este instrumento también puede causar daños significativos en caso de un impacto débil, por lo que no debe aplicarse ningún golpe externo y, cuando lo mueva, hágalo lentamente.

### 2.3 Los peligros de la electricidad

- 1). Se prohíbe el uso de otros productos de transferencia de calor cuando se pone en marcha el aparato.
- 2). Tenga cuidado de que no entre agua en el aparato. Una corriente elevada debida a la humedad puede provocar un incendio o descargas eléctricas.
- 3). No utilice un enchufe dañado o una toma de corriente floja.
- 4). Desenchufe el aparato cuando no lo vaya a utilizar durante mucho tiempo y guárdelo después de limpiarlo. De lo contrario, puede provocar descargas eléctricas, fugas o incendios.
- 5). Cuando haya agua en el producto o tenga un sonido anormal, olor a humo y otros equipos tengan un tiempo anormal, por favor desenchufe la corriente y póngase en contacto con el centro de servicio a tiempo.

## 2.4 Precaución con los accidentes

- 1).No coloque materiales inflamables o combustibles alrededor de la posición de instalación y tratamiento del instrumento.
- 2).Por favor, no utilice este instrumento bajo cubierta o paño.

## 2.5 Precaución durante la limpieza

- 1).Después de cortar la alimentación, tenga cuidado de que el aparato no entre en contacto con el agua.
- 2).Limpie suavemente con un paño suave cuando esté contaminado. Por favor, mantenga limpio e higiénico del cuerpo del instrumento.

## 2.6 Reglamentación pertinente

- 1).Los usuarios deben utilizar el aparato después de conocer las instrucciones de funcionamiento.
- 2).El uso de decoraciones no reconocidas puede causar el mal funcionamiento del aparato.
- 3).Cuando se produce el daño, no se permite el servicio gratuito, así que por favor utilice el artículo genuino.
- 4).Por favor, no rompa o modifique el equipo de mantenimiento. Se anulará la garantía ante problemas causados por reparaciones no autorizadas



## 2.7 Artículos prohibidos

**(1).No lo utilice si el operario tiene alguna instrucción, aunque no entre dentro de las siguientes consideraciones.**

- Enfermedades cardíacas, enfermedades mentales, hipertensión.
- Enfermedades de la piel (Infecciosas)
- Existe una inflamación similar de la piel

## 3. Composición del producto

### 3.1 Composición del producto

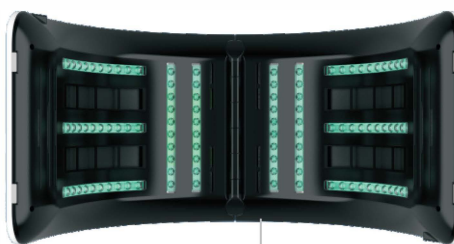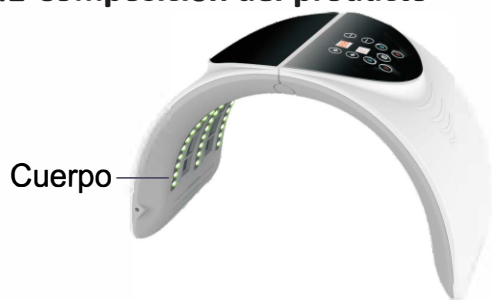

Cuerpo

### 3.2 Unidades



Cuerpo



Adaptador



Lentes

## 5.2 Esquema

Para utilizar el aparato correctamente, comprenda la función, el método de uso, la atención y las advertencias de cada paso.

## 5.3 Precaución

Antes de pasar la operación, por favor, pasar la prueba y operar con seguridad en el suelo plano y recibir tratamiento.

## 5.4 Método de inicio

1: Enchufe el adaptador de corriente y encienda el interruptor situado encima del cuadro de instrumentos.

2:TIEMPO ajustes de tiempo + + - aumentar y reducir el tiempo

3:TEMP ajustes de temperatura, + aumentar y reducir los ajustes de temperatura

4:RY interruptor de luz roja y luz amarilla, se pueden seleccionar los niveles 1, 2 o 3, Pulse RY una vez más para cambiar la luz de color.

5: Interruptor de luz verde y luz cian GC, se pueden seleccionar los niveles 1, 2 o 3.

Pulse GC una vez más para cambiar la luz de color. 6:BP Interruptor de luz azul y luz púrpura, se puede pulsar el archivo 1-2-3. Pulse BP una vez más para cambiar la luz de color. 7:CICLO Ciclo de luz de siete colores, antes de abrir, pulse primero.

Apague otras fuentes de luz.



(La imagen sirve de referencia)

## 6. Color del LED

### 6.1 Resumen para LED

Luz LED roja

Blanquea y renueva la piel, mejora el poro áspero y trata la dilatación microvascular

Luz LED azul

Eliminar el acné, reducir la actividad del sebo, eliminar las bacterias del acné y mejorar la piel grasa.

Luz LED verde

Tiene un efecto calmante sobre la piel sensible.

Luz LED amarilla

Pecas, mejora el enrojecimiento de la piel, eritema, pigmento

Luz LED cian

Equilibra la secreción, estabiliza la piel y controla la grasa

Luz LED púrpura

Tratamiento del acné y marcas de acné

CICLO Light LED

Circulación de siete colores, manchas, pecas, piel sensible y restauración profunda de la piel.

## 7. Mantener

### 7.1 Resumen

Para mantener el rendimiento del aparato, incluido el método de autodiagnóstico y la información del código de error de los métodos de limpieza y almacenamiento.

### 7.2 Limpiar

Limpie el mando o el cuerpo con una toalla suave.

### 7.3 Almacenamiento

Cuando el producto se guarda durante mucho tiempo, se almacena en un lugar que evite la humedad. Cuando el producto esté almacenado, pliegue el soporte y mantenga el equipo en su caja original



Abrir



Nota

Cuando el usuario mantiene la gestión, la fuente de alimentación debe ser cortada y se desconecta el cable de alimentación. La limpieza o el almacenamiento debajo de la fuente de alimentación pueden provocar anomalías en el equipo.

## 7.4 Antes de que sucedan fallos, revise la siguiente lista

PROBLEMA	Estimar el motivo	Confirmar elementos
Anomalía de alimentación	Mal contacto en el conector del adaptador	Compruebe que el adaptador está bien conectado.
Arranque del dispositivo anormal	La luz LED no funciona	En caso de apagón, cambie la superficie del disco LED correspondiente; (Póngase en contacto con el agente de compras/ centro de servicio para cambiar la luz)
	El actuador está anormal	Contactar con el agente de compras/centro de servicios

## 8. Configuración de la producción

POTENCIA	DC24V4A50HZ/60HZ
LED	Luz de colores
DIMENSIÓN(AN*AN*AL)	435x265x329(mm)
PESO	4.5kg±10%

## ¿Necesitás ayuda?

Ingresá a nuestro soporte técnico  
escaneando el QR o escribinos por  
nuestros canales oficiales.



**11 6260 1114 (sólo texto)**



**serviciotecnico@bidcom.com.ar**



**www.bidcomservice.com.ar**

**bidcom**  
SERVICE

