

MANUAL DE USUARIO



Masajeador Ultrasónico Facial LED
LEDF6000

LEDMASK6

I DESCRIPCIÓN

El dispositivo de belleza multifuncional para el cuidado de la piel es bueno para la terapia diaria del cuerpo y la cara. Actúa en el rejuvenecimiento de la piel, tonificación de la piel, lifting facial y blanqueamiento, eliminación de arrugas, antiedad, renovación de la piel, antialérgico, reducción del tamaño de los poros, aumento de la elasticidad de la piel, mejora la absorción cutánea de productos cosméticos, etc. Utiliza tecnologías de EMS y RF, terapia de luz LED, vibración acústica y terapia ultrasónica de microcorriente galvánica positiva y negativa. Y contiene 2 pares de puntas eléctricas bipolares, 9 piezas de lámparas LED, 1 pieza de cabezal ultrasónico. La gente se siente un poco cálida, cómoda y relajada durante el tratamiento. Sin dolor, sin daño. Se debe aplicar un producto para la piel (por ejemplo, esencia). Y ayudaría a la piel a absorber los productos de manera más eficiente. El tratamiento diario está disponible. Aproximadamente 10 minutos de tratamiento todos los días pueden mantener el cuerpo afilado, la piel suave y el rostro joven.

El dispositivo de belleza multifuncional para el cuidado de la piel se aplica con 6 tecnologías de belleza avanzadas. Futuro y ventaja para cada teoría de la belleza:

1. RF: estimula la regeneración del colágeno.

La radiofrecuencia (RF) es una frecuencia alta. Es una terapia de penetración térmica.

A través de la cabeza conductora de RF, transmite una especie de energía electromagnética causada por un cambio de CA de alta frecuencia al tejido subcutáneo. Conducirá el calor a través de los 4 puntos y las personas se sentirán un poco calientes durante el tratamiento. La terapia de RF puede estimular la regeneración del colágeno de la dermis, aumentar el grosor y la densidad de la dermis, levantar y rellenar las arrugas, eliminar las cicatrices y restaurar la elasticidad y el brillo de la piel, asegurando que el rostro se vea simétrico y natural. Es seguro, confiable y no daña la piel.

2. EMS - Electroporación

Actúa directamente sobre la piel, mejora instantáneamente la penetración del tejido cutáneo. Bajo la función de electrochoque, se formarán agujeros en la movilización de lípidos de las células, al mismo tiempo, la molécula hidrófila que no ha sido absorbida originalmente puede penetrar en el interior de las células. Una vez que se forman los orificios, entre varios segundos y varios minutos, mantendrá el estado de apertura de acuerdo con la duración del electrochoque. Penetración en el colágeno de la piel profunda, ácido hialurónico, como ingredientes cosméticos El tratamiento EMS es una técnica avanzada utilizada ampliamente en el área de la belleza, combinada con la terapia de aguja tradicional china estimula un punto especial (punto de acupuntura chino), simula masajes, tapping, raspado chino, acupuntura, esto tendrá la siguiente función: adelgazar, mejorar el metabolismo, especialmente para reducir la celulitis. Debe aplicarse con productos para el cuidado de la piel para que funcione.

3. Característica ultrasónica: masaje ultrasónico

Para actuar en la cara puede hacer que la piel de la célula con vibración y producir un efecto de micro masaje, cambie el volumen de la célula. Por lo tanto, mejora la circulación sanguínea y linfática local, fortalece la permeabilidad celular, mejora el metabolismo y la regeneración de los tejidos, suaviza los tejidos, estimula el sistema nervioso y la función celular, hace que la piel sea brillante y elástica.

4. Función de vibración acústica: masaje, limpieza.

Si se siente cansado después de un día tenso, puede aliviar los nervios mediante un masaje de vibración acústica. Sus funciones principales: promover la circulación sanguínea, acelerar el metabolismo, hacer que la piel esté más tersa y brillante. La cara de todos tiene al menos más de 300,000 poros, las manos y el líquido de limpieza facial solo pueden lavar la superficie de la piel, es difícil eliminar la contaminación por aceite en los poros. Con este producto se puede quitar el cabezal del cepillo diseñado y limpiar completamente sin ángulo muerto, vibración de alta frecuencia 8500 latidos por minuto, introducido limpiando eficazmente los poros con aceite profundo, limpiando los residuos de aceite en los poros, puede responder desde una piel limpia profunda.

5. Función de luces LED: hiperplasia de colágeno, eliminando bacterias

Recuerde: el dispositivo de belleza para el cuidado de la piel tiene una luz constante que no daña la piel. Luz roja súper fuerte: longitud de onda de 620 nm (± 5 nm) 9 LED penetran profundamente en la piel de 625 nm para promover la circulación sanguínea y la regeneración del colágeno, mejorar la elasticidad de la piel y hacer que la piel sea suave y humectada. Sea adecuado para la piel floja y arrugada.

Luz verde: longitud de onda de 520 nm (± 5 nm) 9 LED llegan profundamente a la piel de 525 nm. para resolver la pigmentación, el color, las pecas, las manchas solares y las manchas de la vejez, puede diluir y reducir la pigmentación existente, mejorar el color general de la piel y proteger la piel contra el potencial futuro de la crisis de salpicaduras. El pigmento negro crece en la parte inferior de la epidermis y la luz verde puede inhibir la producción excesiva de melanina y prevenir el crecimiento del pigmento de la piel.

Luz azul: longitud de onda 465 nm (± 5 nm) 9 LED, penetra profundamente en la piel de 470 nm, para matar las bacterias, promover la circulación sanguínea, puede penetrar en 0,25 mm debajo de la corteza, destruir el entorno de vida de las bacterias, antiinflamatorio, bactericida, elimine el acné, las cicatrices del acné, etc. de forma eficaz.



Luz amarilla: longitud de onda de 590 nm (± 5 nm) 9 LED, llega profundamente a la piel de 595 nm, la luz amarilla es una luz cálida. Se utiliza para estimular el sistema linfático y nervioso, ajustar los músculos y estimular el sistema inmunológico, relajar y restaurar el equilibrio de la piel sensible.

Luz rosada: longitud de onda de 700 nm (± 5 nm) 9 LED, penetra profundamente en la piel de 705 nm, mejora la circulación sanguínea, fortalece la absorción de esencias de belleza y blanquea la piel, es adecuado para pieles más oscuras.

6. Terapia de iones de microcorriente galvánica: lo mejor de entrada y salida. Logran resultados máximos al penetrar las sustancias activas en los tejidos, el ion positivo conduce y excluye las sustancias nocivas y los iones metálicos del cuerpo. El ion negativo conduce y hace que la piel absorba completamente la nutrición de las esencias de belleza.

II DIAGRAMA DE ESTRUCTURA DEL PRODUCTO

1. Tira de metal conductora de iones
2. Base de carga
3. Cable USB
4. Cabezal de sonda ultrasónica e iónica
5. Pantalla LCD
6. Tecla de nivel de función
7. Encendido / apagado
8. Cambiar
9. Cabezal de sonda para EMS y RF
10. Lámparas LED
11. Luz indicadora

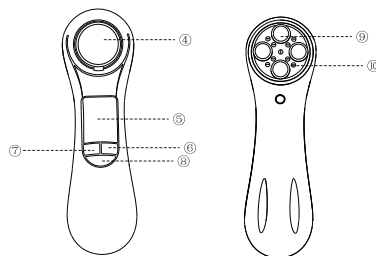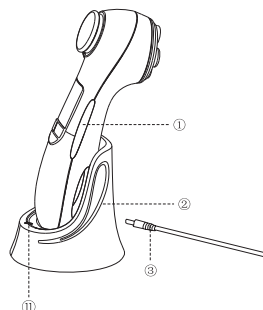

Terapia de luz LED	Fotón	☀️
RF + EMS + Electroporación	RF&EMS	⚡️
Ultrasónico	Ultrasónico	🔊
Vibración acústica	Vibración	🌀
Piel de plomo de iones sucia	Ion positivo	➡️
Nutrición inicial de iones	Ion negativo	⬅️
	10 minutos / tiempo	🕒

III MÉTODO DE OPERACIÓN

1. Para cargar:

El instrumento se aplica a un adaptador de corriente de 500mA 5V o PC (computadora), conecte la base de carga a la fuente de alimentación DC 5V, su luz indicadora de energía se enciende, luego coloque el sistema principal en la base de carga para cargar. Una vez que esté completamente cargada, el indicador de carga en la pantalla LCD dejará de parpadear.

2. Uso:

① Mantenga presionada la tecla "encendido" durante 2 segundos. Para el primer uso, necesita configurar las funciones o el nivel que elija.

② Método para el conjunto de funciones: mantenga presionada la tecla "modo" para ingresar al modo de selección de función, luego presione brevemente la tecla "modo" para elegir la función. cuando elige la función que necesita, el signo de función en la pantalla LCD parpadeará. Presione brevemente la tecla "H / L" para elegir el nivel de la función que necesita, si está elegido el más bajo, significa que la función está cerrada y el nivel de función que se muestra no tiene signo.

③ La multifunción se puede combinar para usar y ser adecuada para diferentes tipos de piel. El usuario puede ajustar la función y el nivel combinados en consecuencia.

④ Después de 10 segundos cuando haya terminado todas las selecciones, el modo de función tendrá memoria automática para el estado de uso actual. Es decir: el dispositivo entra en modo de trabajo de memoria para el próximo uso de una tecla para comenzar.

IV MODO Y FUNCIÓN DE LUZ LED

Modo de conmutación 1

Para el modo "fotón", primero presione la tecla "H / L", la luz roja se enciende. Longitud de onda: 620nm (± 5nm), mejora la regeneración del colágeno, mejora la elasticidad de la piel, es adecuado para la piel floja y arrugada.

Modo de conmutación 2

Para el modo "fotón", presione en segundo lugar la tecla "H / L", la luz verde se enciende. Longitud de onda: 520 nm (± 5 nm), inhibe la melanina y blanquea la piel.

Modo de conmutación 3

Para el modo "fotón", presione tercero la tecla "H / L", la luz azul se enciende. Longitud de onda: 465 nm (± 5 nm), es antiinflamatorio y calma los poros, es adecuado para el acné o la piel grasa.

Modo de conmutación 4

Para el modo "fotón", presione cuatro veces la tecla "H / L", la luz amarilla se enciende. Longitud de onda: 590 nm (± 5 nm), ilumina la piel, es adecuado para personas con manchas y piel opaca.

Modo de conmutación 5

Para el modo "fotón", presione el quinto botón "H / L", la luz rosa se enciende. Longitud de onda: 700nm (± 5 nm), blanquear la piel, ser adecuado para la piel oscura.

Modo de conmutación 6

Para el modo "fotón", sexta pulsación de la tecla "H / L", la luz rosa parpadea, lo que refuerza la absorción de esencias de belleza o gel. Después de haber terminado todas las diferentes terapias de fotones de luz LED, presione la tecla "H / L" la séptima vez, la luz LED se apaga.

Funcionamiento correcto



El cabezal de la sonda de tratamiento debe estar en todo contacto con la piel.

Funcionamiento incorrecto



El cabezal de la sonda de tratamiento no debe estar en contacto completo con la piel

Instrucciones de uso:

1. Se requiere gel / crema a base de agua.
2. Limpiar la piel antes del tratamiento.
3. Mueva el cabezal de tratamiento punto por punto durante el tratamiento.
4. Ajuste el nivel de función de menor a mayor hasta que la piel se sienta caliente pero no demasiado caliente.
5. El nivel de función debe ser menor cuando se usa en el área de los ojos.

¿Necesitás ayuda?

Ingresa a nuestro soporte técnico escaneando el QR o escribinos por nuestros canales oficiales.

📞 11 6260 1114 (sólo texto)
✉️ serviciotecnico@bidcom.com.ar
🌐 www.bidcomservice.com.ar

bidcom
SERVICE

