

140.00 mm

210.00 mm

MANUAL DEL USUARIO

*Dispositivo de fototerapia
de tratamiento con fotones*



ADVERTENCIA: NO MIRE DIRECTAMENTE A NINGUNO DE LOS EMISORES DE LUZ DEL INTERIOR DEL APARATO.



Contenido

Descripción del producto	02
Instrucciones de seguridad importantes	03
Contraindicaciones	04
Advertencias e información	05
Estructura del producto	07
Pasos a seguir	08
Sitio adecuado	11
Utilización del dispositivo	12
Cuidado del dispositivo	12
Preguntas frecuentes	13
Embalaje	13
Especificaciones	14
Garantía	15

Descripción del producto

Dispositivo de belleza que contiene 573 lámparas, tres fuentes de luz: rojo amarillo y azul, y siete modos de emisión de luz (tres de luz monocromática, 4 de luz mixta).

Tres fuentes de luz de longitud de onda especial presente en la disposición de la matriz, directamente ilumina la piel, restaura la vitalidad natural de las células de la piel, la belleza y el cuidado de la piel.

25 minutos de modo de fototerapia; el producto es libre de doblar y ajustar, y el diseño ergonómico se adapta al uso del cuerpo.

	Longitud de onda	470nm
	Efecto	Eliminación de bacterias, limpieza de la piel, activación celular, composición de proteína-osseína que favorece la recuperación de lesiones, esterilización de la piel con acné, inhibición de la glándula sebácea, prevención de la infección de heridas.
	Referencia	Suele aplicarse en el tratamiento del acné.

	Longitud de onda	590nm
	Efecto	Mejora la alternancia de oxígeno de las células, favorece la microcirculación, descompone el pigmento, favorece la secreción de la linfa, cura la aspereza de la piel, las manchas rojas y la circulación deficiente, antienvejecimiento, cara roja, precipitación del pigmento.
	Referencia	Se utiliza para terapia anti manchas, también puede ser utilizado para el tratamiento del herpes zoster.

	Longitud de onda	623nm
	Efecto	El poder más penetrante, regeneración celular de la piel, aumentando el contenido de oxígeno en la sangre para estimular la circulación de la sangre, mejora la herida del acné, el tratamiento de la dermatitis alérgica para aliviar el dolor y promover activamente de los ingredientes activos. Amplia activación de las células, la mejora de la eficiencia energética, la promoción de la proliferación de colágeno, el tratamiento eficaz del envejecimiento, relajación de la piel y productos de absorción profunda.
	Referencia	Habrán un poco de calor durante el tratamiento. Habrá cierta estimulación cuando se someta a este tratamiento en condición de que la piel se pondrá roja después del tratamiento.

Instrucciones de seguridad importantes

Lea todas las instrucciones antes de utilizar el aparato, guárdelas para futuras consultas.

Este manual contiene símbolos e instrucciones de seguridad importantes. Preste atención a estos símbolos y siga todas las instrucciones dadas.



Consulte la documentación adjunta

Este símbolo indica que se deben seguir todas las instrucciones de uso.



Advertencia o precaución general

El símbolo de exclamación de la figura anterior aparece en las advertencias y de precaución de este documento. El símbolo designa área en la que es posible que se produzcan daños personales o en el equipo...



Símbolo de descarga eléctrica

El símbolo de descarga eléctrica de la figura anterior aparece este manual, este símbolo indica un riesgo derivado de una tensión peligrosa. Posibles daños irreparables en el equipo, y lesiones personales o muerte.



A prueba de humedad

El aparato no está sellado y no puede utilizarse al aire libre o donde pueda mojarse o humedecerse.

Contraindicaciones

Nota:

Cuando realice cambios en sus rutinas de salud y bienestar puede ser aconsejable consultar con su médico antes de proceder.

-  No utilizar si la paciente está embarazada o en periodo de lactancia.
-  No utilizar en lactantes ni en niños.
-  No utilizar si el paciente o el administrador padece epilepsia o tiene antecedentes de convulsiones.
-  Evitar su uso cuando el paciente esté recibiendo inyecciones de cortisona o cualquier otro tipo de inyecciones de esteroides.
-  Evitar su uso si el paciente está tomando medicamentos fotosensibles.
-  No lo utilice si tiene un tumor maligno.
-  No utilizar en caso de trombosis o enfermedad venosa.
-  No lo utilice si tiene un regulador de frecuencia cardíaca.
-  No utilizar en caso de ulceración cutánea.

Advertencias e información sobre la seguridad del producto

Lea y conserve estas instrucciones

	Advertencia No intente utilizar este equipo si hay indicios de daños de transporte o sospecha que la unidad está dañada. El equipo puede presentar peligros para usted. Póngase en contacto con el servicio técnico para obtener asesoramiento antes de intentar enchufar y poner en funcionamiento el equipo dañado.
	Advertencia Sólo personal autorizado puede realizar el mantenimiento de este equipo para servicio de mantenimiento o reparación.
	No se acueste sobre el dispositivo ni se apoye en él. No está diseñado para soportar el peso de todo el cuerpo o una presión extrema. No coloque el Dispositivo debajo de ropa, mantas, sábanas o toallas.
	El incumplimiento de esta precaución puede provocar una descarga eléctrica.
	Advertencia El personal sanitario (médicos, enfermeras, esteticistas, etc.) y los pacientes deben evitar mirar directamente a la luz y llevar las gafas protectoras o utilizar protección ocular adecuada durante el tratamiento.

Precauciones

1. Siga las instrucciones y preste atención a todas las advertencias. Instale de acuerdo con las instrucciones.
2. Utilice únicamente los aditamentos / accesorios especificados en este manual.
3. Compruebe que el aparato no presenta daños evidentes antes de utilizarlo. Si el aparato o cable de alimentación tiene algún signo de daño, no lo utilice.
4. No desmonte el aparato, ya que un montaje incorrecto puede provocar una descarga eléctrica o un incendio.
5. Manténgalo seco. No utilice este aparato cerca del agua.
6. No utilice este dispositivo cerca de fuentes de radiación electromagnética, el dispositivo puede dispararse inadvertidamente cuando se utiliza en presencia de un campo electromagnético elevado.
7. No utilice disolventes volátiles (como tolueno, alcohol, etc.) para limpiar el aparato. Dichos disolventes pueden dañar la carcasa y la superficie de control.
8. No lo instale cerca de fuentes de calor como radiadores, estufas o aparatos que produzcan calor.
9. Proteja el cable de alimentación para que no sea pisado o pellizcado, especialmente en los enchufes, el cable de extensión o el punto donde ellos salen del aparato.
10. Desenchufe este aparato durante tormentas eléctricas o cuando no lo vaya a utilizar durante largos periodos de tiempo.
11. No doble, arrugue ni pliegue el aparato más allá de sus posibilidades de diseño. Cuando Al dar forma alrededor de una parte del cuerpo - como un brazo - la curva interior no debe ser inferior a 10 centímetros de diámetro. Al doblarlo (con las luces hacia fuera) la curva no debe ser inferior a 20 centímetros de diámetro.
12. Es necesario prestar mucha atención cuando sea utilizado por niños o cerca de ellos. Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no juegan con el aparato.
13. Si siente alguna molestia, deje de utilizar el producto inmediatamente y póngase en contacto con su médico.

Estructura del producto



Modo de luz azul

1. Pulse brevemente el botón azul para encender el grupo de luz azul. Temporización 25 minutos.
2. Durante el proceso de funcionamiento, pulse brevemente el botón de impulsos y el grupo de luces azules activará la función intermitente. El grupo de luz azul activará la función de parpadeo; vuelva a pulsar el botón de pulso de nuevo, el grupo de luz azul desactivará la función intermitente y volverá al estado de luz continua.
3. Si necesita dejar de usar el equipo, pulse el botón azul durante un segundo.
4. El equipo tiene un temporizador de apagado automático.


Modo de luz amarilla

1. Pulse brevemente el botón amarillo para encender el grupo de luz amarilla. Temporización 25 minutos.
2. Durante el proceso de funcionamiento, pulse brevemente el botón de impulsos y el grupo de luces amarillas activará la función intermitente. El grupo de luz amarilla activará la función de parpadeo; vuelva a pulsar el botón de pulso de nuevo, el grupo de luz amarilla desactivará la función intermitente y volverá al estado de luz continua.
3. Si necesita dejar de usar el equipo, pulse el botón amarillo durante un segundo.
4. El equipo tiene un temporizador de apagado automático.

Instrucciones de funcionamiento para el modo de luz mixta

1. Seleccione el color de luz deseado y pulse brevemente los botones de los colores correspondientes (rojo, amarillo, azul). Puede combinar diferentes colores de luz para la fototerapia según sus necesidades. Temporización 25 minutos.
2. Durante el proceso de trabajo, presione el botón de pulso por un corto tiempo, y el grupo de luz encenderá la función intermitente; presione el botón de pulso de nuevo por un corto tiempo, y el grupo de luz apagará la función intermitente, y volverá al estado de luz continua.
3. Si necesita dejar de utilizar la luz y apagarlo, pulse los botones de los colores correspondientes durante un segundo.
4. Una vez finalizada la temporización, todos los grupos de luces se apagarán, el zumbador emitirá tres pitidos y el sistema volverá al estado inicial de encendido.


Sitio adecuado

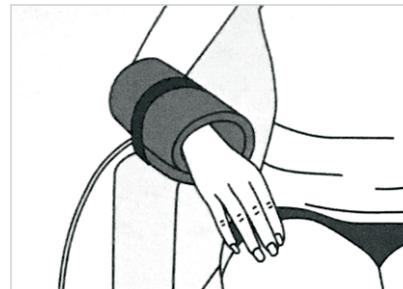


Zona de los brazos




Cara, cuello, pecho

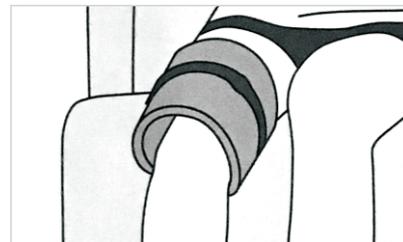

Muslo y Pierna

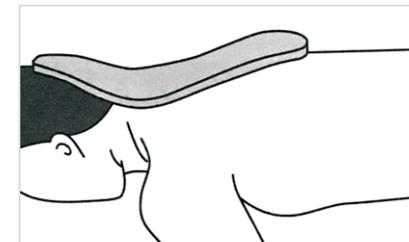

Zona de la nuca

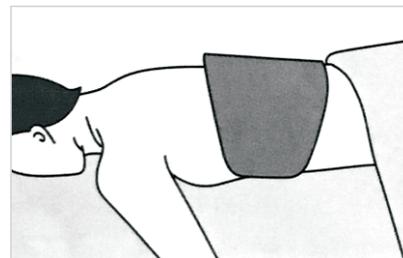

Zona del torso

Utilización del dispositivo

¿Cuándo debo utilizar la luz azul?

El tratamiento consiste en 12 sesiones repartidas en 4 semanas, con 3-5 sesiones por semana.

¿Cuándo utilizar la luz roja?

Utilice la luz roja para el tratamiento de las arrugas. Sesiones de tratamiento repartidas en 4 semanas, permitiendo 4-6 tratamientos por semana.

¿Cuándo se debe utilizar la luz amarilla?

Utilice la luz amarilla para el eritema de la piel, alivia el enrojecimiento, el tratamiento consiste en 18 sesiones de tratamiento repartidas en 6 semanas, Permitiendo 3-5 tratamientos por semana.

Cuidado del dispositivo

Si su aparato requiere una limpieza puntual, siga atentamente las siguientes instrucciones.

1. Asegúrese de que la fuente de alimentación está desenchufada de la toma de corriente antes de limpiar el aparato.
2. No utilice disolventes volátiles (como tolueno, alcohol, etc.) para limpiar el aparato. Dichos disolventes pueden dañar la carcasa y la superficie de control.
3. Limpie suavemente con una toalla suave ligeramente humedecida en agua y seque con una toalla suave seca. No utilice productos químicos o limpiadores.
4. Si la carcasa o la superficie de control están muy contaminadas, o para reducir el riesgo de infección entre usuarios, utilice un paño suave humedecido con un desinfectante sin alcohol y con cloro para limpiar el aparato. Escurra el paño antes de limpiarlo para evitar que penetre líquido en la carcasa. Limpie el dispositivo con un paño limpio y seco después de la limpieza.

Preguntas frecuentes

P: ¿Cuánto dura una sesión de tratamiento de fotones?

R: 25 minutos.

P: ¿Se necesita alguna preparación especial antes de utilizarlo?

R: Debe utilizarse lo más cerca posible de la piel, que debe estar libre de ropa, maquillaje o cualquier otra cosa que pueda desviar la luz de la piel. No mire directamente a la luz y lleve las gafas suministradas o utilice protección ocular adecuada.

P: ¿Por qué se recomienda desmaquillarse?

R: Muchas fórmulas de maquillaje contienen minerales que pueden reflejar la luz. Se recomienda una piel limpia y recién lavada para obtener mejores resultados.

P: ¿A qué distancia de la piel deben colocarse los fotones?

R: Coloque los fotones lo más cerca posible de la superficie de la piel. Cuanto más cerca estén los fotones de la piel, más energía absorberán las células. No mire directamente a la luz y protéjase los ojos con las gafas suministradas, o utilice otra protección ocular adecuada.

P: ¿Puedo viajar con el dispositivo?

R: Sí, el dispositivo es ligero y portátil, por lo que es ideal para viajar a la oficina o al gimnasio.

P: ¿Por qué algunas filas de diodos parecen no emitir luz?

R: El elemento negro es la resistencia, por eso no se enciende.

Embalaje

Control remoto	Fuente de alimentación	Correa	Manual	Almohada	Anteojos	Soporte
1	1	1	1	1	1	1

Especificaciones

Nombre	Dispositivo de fototerapia de tratamiento con fotones	Modelo	LEDMASK8
Tensión de entrada	12V	Corriente nominal	1,33A
Potencia nominal	16W	Tamaño del producto	545 x 235 x 30 mm
Normalizaciones	GB4706.1-2005	GB4706.10-2008	
Funcionamiento y condiciones de almacenamiento	3-32°C, Humedad relativa: 10-80% (sin condensación)		
Condiciones de transporte	-20°C a 50°C, Humedad relativa: 20-85% (sin condensación)		

Garantía

Estimados usuarios :

Muchas gracias por comprar el aparato de fototerapia. Estamos comprometidos a proporcionarle el mejor servicio. Para satisfacer mejor a nuestros clientes, esperamos que puedan leer atentamente este manual y guardar correctamente esta tarjeta de garantía.

Condiciones de la garantía:

1. El periodo de garantía de los productos comienza a partir de la fecha de compra.
2. Prohibido el desmontaje no autorizado, la modificación de este producto o mal uso del mismo. El servicio de garantía no está disponible para daños causados por desmontaje, modificaciones o reparación no autorizada.
3. Los productos en periodo de garantía sólo pueden ser reparados en los lugares designados por nuestra empresa; presente esta tarjeta de garantía, el y el comprobante cuando necesite el servicio de garantía. En caso de avería durante el funcionamiento dentro del período a partir de la fecha de compra; la máquina (excepto los productos con fines comerciales) será revisada por el personal calificado. No obstante, incluso dentro del periodo de garantía, los productos no estarán cubiertos por la garantía en cualquiera de las siguientes circunstancias, para las que ofrecemos servicios de reparación de pago:

- * Daños en el producto debidos a un funcionamiento incorrecto por mala lectura del Manual de usuario;
- * Daños en el producto causados por piezas accesorias no aprobadas, como cargadores (fuentes de alimentación) no autorizados;
- * Daños en el producto debidos a un entorno de funcionamiento inadecuado, como altas temperaturas, corrosión, etc.
- * Daños del producto debidos a fuerzas externas anormales como caídas, apretones, golpes, impactos, etc.
- * Fallo del producto causado por catástrofes naturales o fuerza mayor, como incendios, inundaciones, terremotos, etc.
- * Productos falsificados y de contrabando (equipo no provisto por el vendedor oficial).
- * Productos sin prueba válida de compra, como factura, tarjeta de garantía, etc.
- * Otros daños a este producto o a sus piezas debidos a accidentes o a un uso inadecuado.