




SERVICIO TÉCNICO OFICIAL GADNIC
www.servitech.com.ar

📞 11 6260 1114 (sólo texto)
serviciotecnico@servitech.com.ar

GADNIC

MANUAL DE USUARIO

MASAJEADOR DE PIE
LUXURY

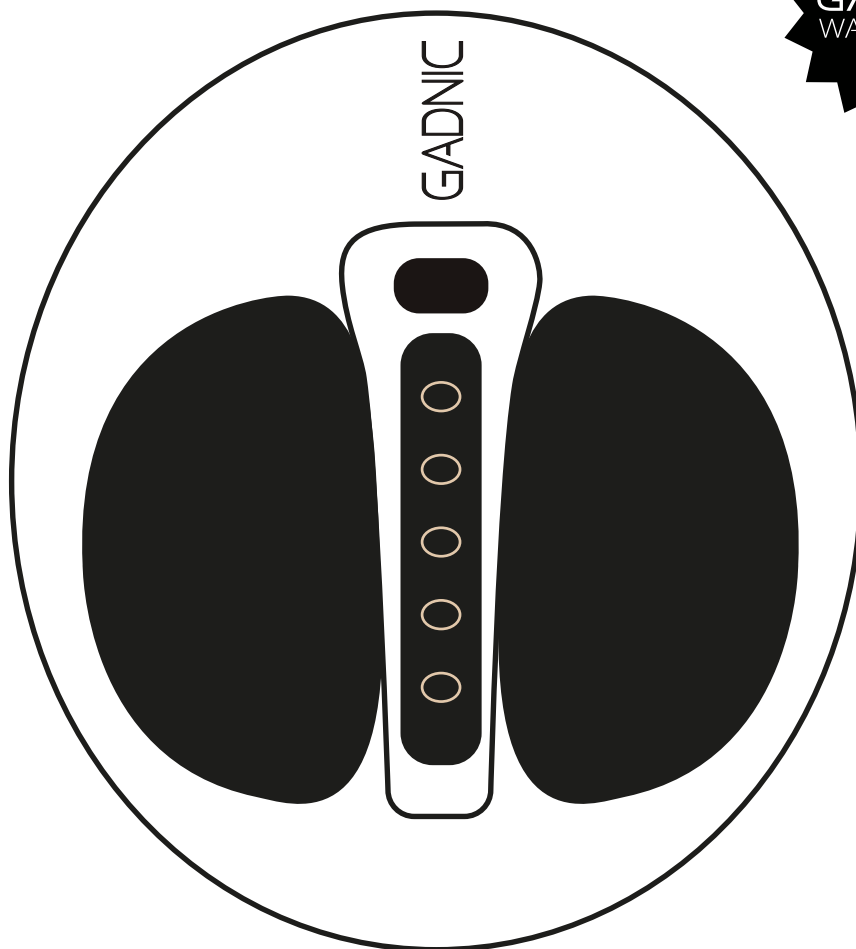

MASAJ002

CUIDADO

Por favor lea cuidadosamente el manual de usuario antes de utilizar el producto, para garantizar su seguridad.

Use el producto tal y como lo indica el manual, y siga las instrucciones.

Desenchufe el transformador del tomacorrientes al finalizar el uso del masajeador, o antes de limpiarlo.

No utilice el producto en personas que presenten insensibilidad en alguna parte del pie.

Tampoco en personas hipersensibles o de sensibilidad elevada, o con poca circulación.

El funcionamiento, o manipulación del producto de forma inadecuada, es peligroso.

Evite dejar el masajeador al alcance de los niños.

No utilice el masajeador debajo de almohadas o cobijas, ya que el producto podría sobrecalentarse y generar descargas o incendios.

Si el masajeador se sobrecalienta, además de ser peligroso, podría dañar el motor, y quedar inutilizable.

En el caso de que este producto tenga que ser utilizado en niños o en personas con alguna disfuncionalidad física, o mental, por su seguridad le recomendamos que una persona responsable y capacitada colabore con el uso.

Si comienza a sentirse mal, apague el producto inmediatamente para dejar de utilizarlo

No utilizar el producto en los siguientes casos:

- El conector o el cable están dañados
- El producto no funciona correctamente
- Se daña por una caída
- Se moja, humedece
- En áreas con mucha humedad o polvo
- En una habitación de alta temperatura superior a 40
- Al aire libre.
- No lo use cerca del horno eléctrico, las estufas ni a la luz directa del sol.

Comuníquese con el centro de posventa de inspección y mantenimiento.

No use ningún complemento que no sea propio del producto o de su fabricación

No inserte ni deje caer ningún objeto en ninguna abertura del producto.

Si desea apagar el producto, apague todos los botones y desconecte el enchufe de la toma de corriente.

PRODUCTO

Si usted se encuentra en alguna de las siguientes situaciones, por favor, antes de utilizar el producto, consulte con un médico.

Hipertensión. Enfermedad cardíaca. Arteriosclerosis cerebral. Trombosis cerebral. Embarazo.

Periodo menstrual. Osteoporosis. Con marcapasos u otros dispositivos médicos.

Enfermedades graves en general.

- 1) No lo utilice por más de 30 minutos consecutivos
- 2) No lo use desde 1 hora antes, hasta 1 hora después de comer.
- 3) Se recomienda usar esta función cuando la temperatura es normal.

INTERRUPTOR

No opere el interruptor con la mano mojada:

No permita que el interruptor entre en contacto con agua u otros líquidos

Nota

No se duerma cuando el producto esté funcionando.

No lo use cuando está borracho o se encuentra en mal estado.

No permita que el rodillo de masaje trabaje en las manos, codos, rodillas, pecho o abdomen.

No lo utilice por más de 30 minutos consecutivos.

No lo use desde 1 hora antes, hasta 1 hora después de comer

Se recomienda usar esta función cuando la temperatura es normal.

Se propone usar cuando la temperatura es normal.

Use después de una hora cuando pase de una temperatura baja a un ambiente más cálido porque puede haber vapor de agua en el interior del producto que afecte el uso normal.

TÉRMINOS DE GARANTÍA

Los derechos de garantía no son transferibles.

El período de garantía es de un año.

Por favor, muestre el comprobante de compra y la tarjeta de garantía.

El momento de la compra está sujeto a los documentos válidos del mostrador.

Esta garantía no se aplica al alcance de arrendamiento, transacción, comercio, organización y otros usuarios residentes.

Las siguientes situaciones no están cubiertas por la garantía, pero proporcionan un servicio pago (se cobrará el costo de mano de obra y material)


Todo el daño causado por factores humanos, incluido el utilizado en un entorno no normal, no se usa y se mantiene de la manera correcta de acuerdo con el manual del usuario, operación incorrecta.

Desarmar, reparar o modificar por usuarios no autorizados o por un tercero.

Transporte inapropiado después de la compra.

Dañado por un factor de fuerza mayor (incendio, inundación, rayos, terremoto, etc.)

ESTRUCTURA DEL PRODUCTO

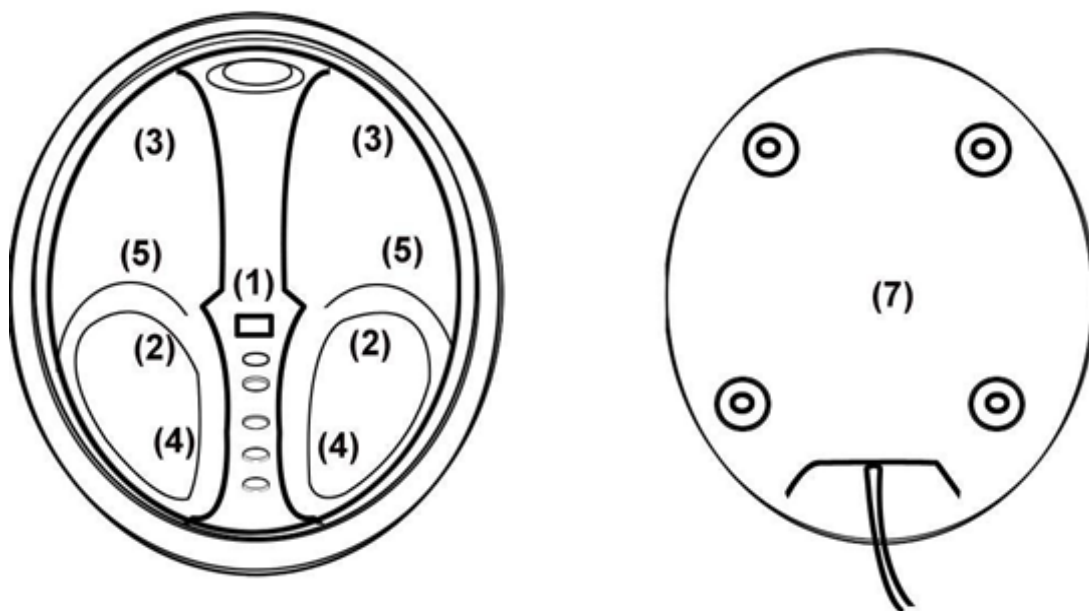

Fachada del medio: 4 funciones de masaje con control de botones.

Mid of inner: Descarte del arco del pie de masajeador, con función de calentamiento.

Frente del interior: pies con ruedas.

Fin del interior: masaje de amasamiento en el talón.

Debajo de la fachada: bolsas de aire, masaje de presión de aire en el empeine.

Superficie inferior: cubierta de tela lavable-- limpieza.

Abajo: soporte de almacenamiento del cable de alimentación: para guardar el cable de alimentación.

CARACTERÍSTICAS Y DIAGRAMA ESQUEMÁTICO

En forma de huevo, hermoso y sofisticado, fácil de trasladar.


Masaje todos los puntos en el pie.

Funda de tela lavable, fácil de mantener limpia.

Soporte de almacenamiento del enchufe, para mayor comodidad.



BOTONES DE CONTROL

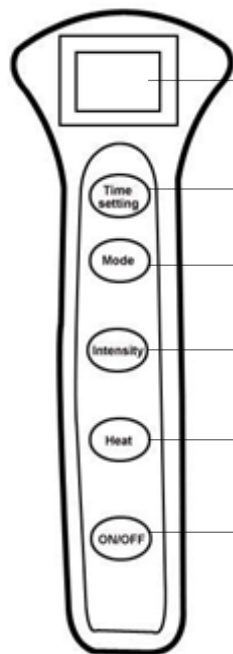

PANTALLA LCD

TIEMPO: Ajusta el tiempo de masaje deseado

MODO: Dos tipos de modos que se indican con luz roja o azul, respectivamente.

INTENSIDAD- Luz roja para nivel fuerte, Luz azul para nivel débil

CALOR: La calefacción se enciende de forma predeterminada al prender el masajeador, indicada con una luz roja.

Power- Enciende / apaga la máquina

ANTES DE USAR.

Verificar que el producto no se encuentre dañado.

Utilice el producto en una superficie plana.

Despliegue el transformador, y conecte el extremo que contiene el conector PLUG en la parte inferior del masajeador. Luego conecte el cable de corriente al otro extremo del transformador, y éste último, al tomacorriente.

EXPLICACIÓN DE FUNCIONES.

Presione el botón de calentamiento después de encender la unidad, para apagar la función de calentamiento, la luz roja también se apaga.

Presione el botón de fuerza para transferir entre fuerte y débil, azul es débil, rojo es fuerte.

Presione el botón de modo para transferir entre dos modos, el azul es el modo 1. el rojo es el modo 2.

BOTONES DE CONTROL

Nombre	Foot Massager
Nivel de voltaje	110V-240V
Nivel de energía	45W
Tiempo	15mins

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Si ocurrió algún problema utilizando el producto, intente resolverlo mediante las siguientes recomendaciones. Si el problema persiste, envíe el producto al centro de postventa, o al personal de mantenimiento autorizado para su revisión.

Problema	Posible causas	Solución
Dejó de funcionar	Apagado inesperado	Controle las conexiones eléctricas
	El tiempo de masaje superó los 15 minutos	Apague el masajeador y enciéndelo nuevamente
	El masajeador se calienta demasiado.	Apague la función de calefacción desde el panel frontal. Apague el masajeador y déjelo enfriar
Se detuvo	Fuerza excesiva	Regule la presión desde el panel frontal, o el modo de masaje para adaptarlo a su gusto.

NOTA: Considere evaluar su aptitud física al momento de adquirir el producto

Mantenimiento

Cuando no esté en uso, coloque el producto en su caja, y guárdelo en un lugar seco, fresco y ventilado. Evite la humedad.

No retuerza ni doble los cables de alimentación.

No use fuentes de alimentación conmutadas o adaptadores de corriente.

Si no se usa durante un tiempo prolongado, asegúrese de guardarlo de forma adecuada, utilizando una cubierta antipolvo para evitar daños internos.

Limpieza.

Apague y desenchufe el cable de alimentación antes de limpiarlo.

Usando un paño limpio y seco.

No use limpiadores corrosivos, benceno o diluyentes.

Nota:

No use limpiadores corrosivos, benceno o diluyente.

Mantenimiento.

Mantenga la limpieza del masajeador y manténgalo alejado de la alta humedad.

Si no se usa durante un tiempo prolongado, use una cubierta antipolvo para evitar que entre polvo.