


GADNIC

MASAJEADOR CERVICAL Y LUMBAR **CEIBO**

Manual de Usuario

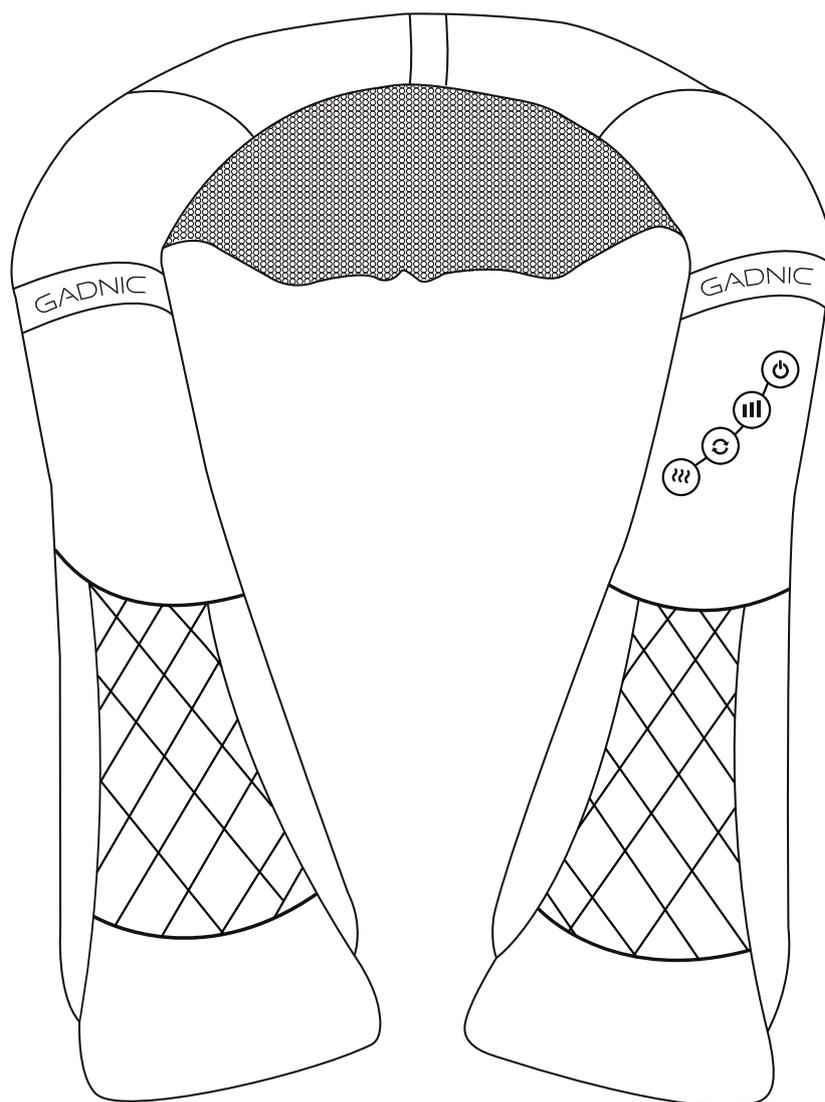

MASAJ014

SERVITECH

Servicio Técnico Oficial Gadnic
www.servitech.com.ar

Tel: 011 5278 1149
serviciotecnico@servitech.com.ar

Manual de Instrucciones

Instrucciones importantes de seguridad:

La siguiente guía debe seguirse siempre a la hora de utilizar artefactos eléctricos para reducir el riesgo de incendio, shock eléctrico o lastimar a alguna persona.

Precauciones:

1. Lea todas las instrucciones detalladamente y manténgalas a mano para referencia futura.
2. El producto no es adecuado para los niños
3. No lo utilice mientras maneja
4. No lo utilice si esta embarazada
5. No utilice el producto si tiene los siguientes problemas de salud: sensibilidad al calor, desorden circulatorio, várices, moretones, piel muy sensible, irritación cutánea, inflamación muscular o de tejidos, inflamación venosa, lastimaduras, heridas no cicatrizadas.
6. Si llega a sentir dolor o incomodidad durante el masaje por favor detenga el uso inmediatamente y consulte a su médico.
7. No utilice el producto si tiene algunos de los siguientes inconvenientes: marcapasos, articulaciones artificiales (prótesis), implantes electrónicos.
8. No utilice el producto si ha utilizado algún aceite o loción en su piel.
9. Apague y desconecte el producto luego de haberlo utilizado.
10. Tome precauciones para asegurarse que no se quede dormido luego de utilizarlo.
11. No lleve el producto del cable de alimentación.
12. Limpie el mismo solo cuando esté desenchufado. Utilice siempre un paño humedecido con muy poca agua pero debe secarse de inmediato. No intente enchufarlo nuevamente a menos que esté bien seco el producto.
13. No utilizarlo bajo las sábanas o las almohadas. El calor excesivo del producto puede provocar fuego, descarga eléctrica o lastimar a personas.
14. Nunca utilice este producto en lugar cercano al agua o la humedad. Nunca utilizar el producto a menos que esté bien seco.
15. No sumerja o esponja este producto a ningún otro líquido por ninguna razón.

16. Este dispositivo es adecuado solamente para su utilización en el hogar. En el caso de que se utilice con fines comerciales o profesionales no se aplicará la garantía. El proveedor no puede ser responsable de ninguna lesión o daño que haya provocado el producto si no ha sido con el fin anteriormente mencionado.
17. El producto debe estar lejos del alcance de los niños.
18. Siempre desenchúfelo cuando no esté atento al mismo.
19. No deje de estar atento al producto mientras esté enchufado.
20. No deje ningún cable apoyado en lugares donde puedan engancharse, caerse o correr peligro.
21. No permita que la fuente de alimentación esté cerca de ninguna superficie caliente.
22. No utilice el dispositivo si se ha caído o está dañado.
23. Chequear regularmente las condiciones del cable de alimentación para descartar cualquier tipo de daño. Si nota alguno tanto en el cable como en el enchufe de alimentación deberá ser reparado por el fabricante o una persona calificada.
24. En el caso de que necesite reparar el producto utilice solamente partes o piezas originales.
25. En el caso de que el producto empiece a funcionar mal, debe desenchufarlo y detener su uso inmediatamente.
26. Nunca intente abrir el dispositivo por su cuenta.
27. Nunca utilice el producto con las manos húmedas.
28. Evite utilizarlo antes de dormir ya que el masaje puede funcionar como estimulante y puede llegar a retrasar su sueño.
29. Mantenga todo el envoltorio con el producto lejos del alcance de los niños

Guía de Usuario:

Regule la presión de masaje deseada de acuerdo a sus necesidades, si el nudo es muy áspero puede relajar la presión.


Areas de masaje:



Hombro




Cuello

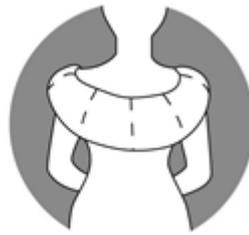

Espalda



Cintura

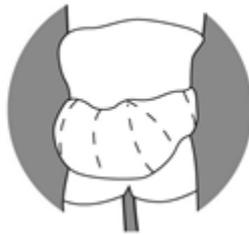

Abdomen



Muslos



Piernas



Pies




Pantorrillas

LISTADO DE PARTES

A

Unidad Principal

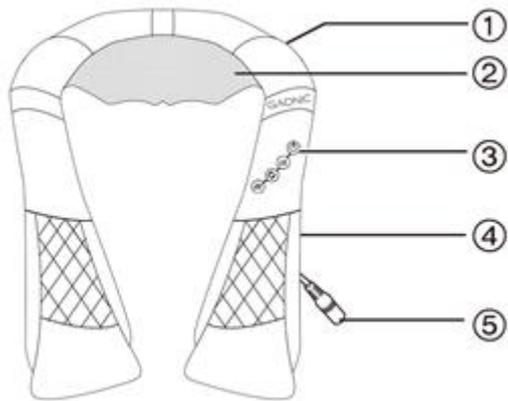

① Funda de cuero

② Masajeador de cabeza


③ Botón de Encendido

④ Agarre del producto

⑤ Conector de alimentación

B

Fuente de alimentación

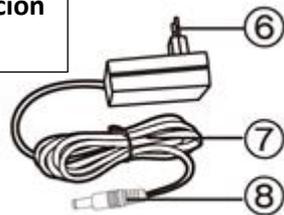

⑥ Enchufe

⑦ Cable

⑧ Conector de alimentación del masajeador

C

Alimentación para el encendedor de auto



Información Técnica:

Tensión de alimentación: DC 12V

Potencia: 24W

Frecuencia: 50Hz

Las funciones del producto pueden llegar a ser modificadas sin previo aviso.

Guía de funciones

	Encendido/ Apagado Para prender y apagar el dispositivo. Apagado automático luego de 15 minutos.
	Velocidad Puede cambiar la intensidad de acuerdo a sus necesidades.
	Dirección Fácilmente puede cambiar el sentido del masaje para poder dar con las áreas de mayor tensión.
	Función calor Puede optar por esta función, fácil de alternar entre sentido horario o antihorario

Detección de inconvenientes técnicos

Problema	Solución
No puede iniciar el masaje	Asegurese de que esta bien enchufado. Confirme si esta prendido. Revise si el botón ha sido presionado.
Se detiene repentinamente	El masaje se detiene automaticamente luego de haber funcionado por 15 minutos. Fijarse si no se desenchufó. Chequear si existe alguna conexion no adecuada que provoco el cese del producto. Si ninguna de estas opciones funciona intente desenchufar el producto por una hora para que se pueda enfriar. El masajeador tiene una función automática para prevenir el recalentamiento del mismo.

Si el problema continua comuníquese con el servicio técnico adecuado.