


GADNIC

Manual de Usuario PISTOLA MASAJEADORA

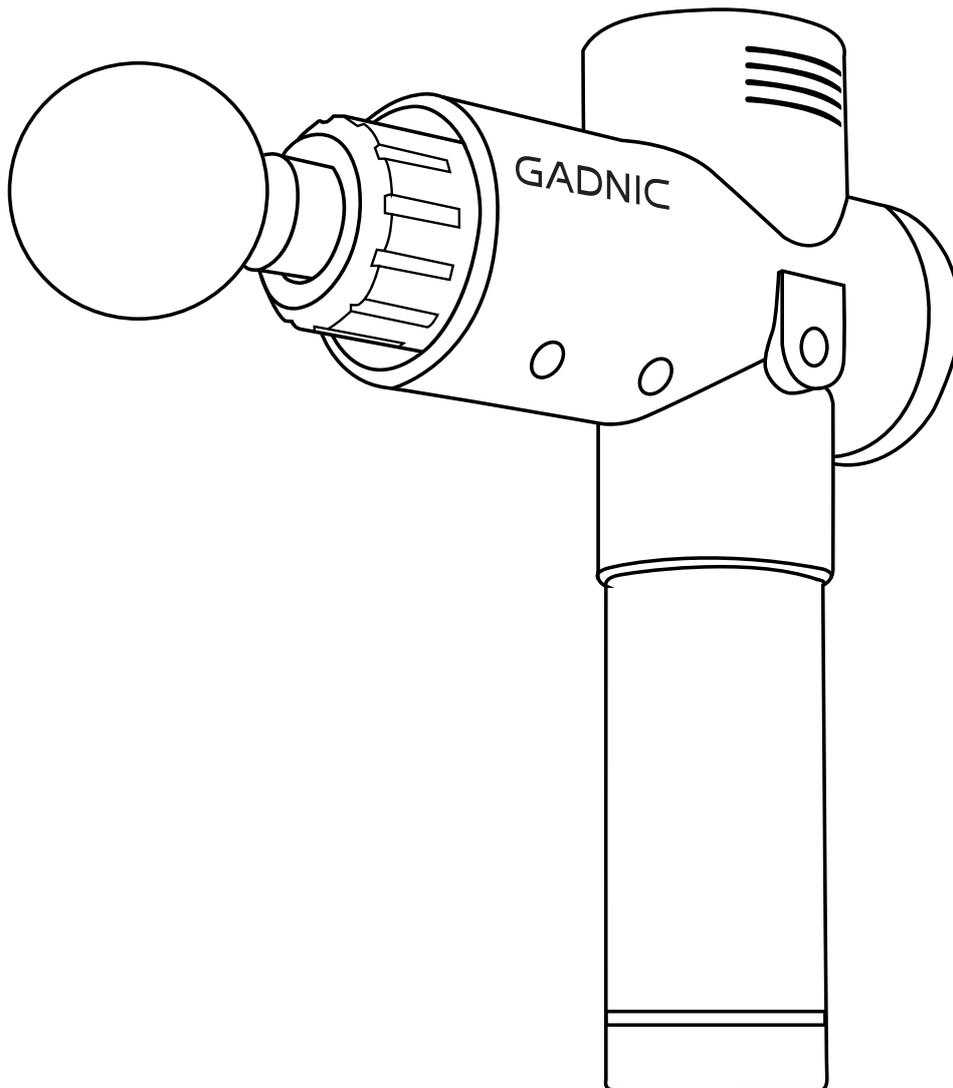

MASAJ017

SERVITECH

SERVICIO TÉCNICO OFICIAL GADNIC
www.servitech.com.ar

☎ 11 6260 1114 (sólo texto)
serviciotecnico@servitech.com.ar

Detalles del producto



- 1 Motor sin escobillas de alto torque con tecnología de deslizamiento silenciosa
- 2 Batería Removible
- 3 Batería de Ion-Litio (más de 2 horas de uso por carga)
- 4 Configuración de múltiples velocidades para distintos niveles de presión
- 5 Inalámbrico y liviano (2.5 Lbs). Incluye cargador de pared.
- 6 Perilla de encendido ON/OFF
- 7 Accesorios intercambiables (x4)

Velocidad de Vibración: Nivel 1 a Nivel 20

Peso: 25 Lbs / 1.1 Kg.

Cargador: 110 – 240V 50/ 60Hz – 5A -26VDC – 1A



INSTRUCCIONES DE USO

A tener en cuenta antes de su utilización

CARGA

- Realice la carga completa de la batería hasta 6 horas antes de utilizar el producto por primera vez.
- Para cargar el producto conecte el enchufe directamente a la pared y el otro extremo del cargador de 24V al producto, en la parte inferior.
- Las luces LED de la batería se encenderá en modo respiración indicando que el producto está cargando correctamente.
- Con la batería colocada, las luces LED de la parte inferior indicarán el nivel de carga remanente mediante tonos de colores VERDE, AMARILLO, NARANJA y ROJO.
- Cuando la batería del producto esté cargada en su totalidad, en la pantalla display se mostrará un indicador en forma de corchetes "[]"
- La batería puede cargarse en cualquier momento que lo requiera.
- No recomendamos dejar agotar la batería hasta que muestre la luz LED roja, siendo ideal cargar el producto mientras lo indique con luz NARANJA.
- La duración promedio de la batería es de más de 2 horas dependiendo del nivel de velocidad y la presión aplicada.

FUNCIONAMIENTO

- Alinee la batería dentro de la unidad y asegúrese de que esté bien trabada.
- Prenda el dispositivo moviendo la llave de encendido a la posición "ON" que se encuentra abajo de la batería.
- Con la llave de encendido en ON presione el botón una vez para prender el dispositivo y dos para irlo cambiando de nivel. Si presiona el dispositivo una vez más el dispositivo se apagará. La luz azul LED corresponde al nivel de carga.
- Con el dispositivo apagado, inserte el cabezal deseado presionando hacia dentro, y puede removerlo tirando hacia afuera.
- Masajee la parte del cuerpo que desee y aplique la velocidad deseada.

MANTENIMIENTO, LIMPIEZA Y ALMACENAMIENTO

- . Utilice una toalla levemente húmeda para limpiar el dispositivo y luego séquelo con un paño seco.
- . Para guardarlo o llevarlo de viaje remueva la batería y almacénela en una caja de cartón.

ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES

- . No sumerja el producto en agua, manténgalo lejos de líquidos o fuentes de calor. Mantenga los puertos de ventilación libre de polvo y basura
- . No remueva tornillos ni intente desarmar el producto
- . No lo utilice de manera continua por más de una hora y deje de utilizarlo al menos por 30 minutos antes de comenzar nuevamente.
- . Desenchufe el cargador de la batería del dispositivo antes de utilizarlo
- . Solo puede ser utilizado por adultos, recomendamos no utilizarlo si se encuentra lastimado. Consulte a su médico ante cualquier inquietud.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

PELIGRO: PARA REDUCIR EL RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA, INCENDIO O DAÑO PERSONAL. ESTE PRODUCTO DEBE SER UTILIZADO DE ACUERDO A LAS SIGUIENTES INSTRUCCIONES

- . Para uso solo en adultos.
- . Utilice solamente en superficies limpias sobre la ropa, presionando suavemente y deslizándolo
- . Utilice el producto sobre telas y evite zonas como la cabeza ya que puede producir incomodidad
- . Utilice solo los cabezales para tener mejores resultados
- . Pueden aparecer hematomas en el caso de utilizar mucha presión. Recomendamos detener el uso en el caso de tener dolor o incomodidad
- . Mantenga los dedos lejos del área del eje o de los costados ya que puede pincharse
- . No ponga ningún objeto en las áreas de ventilación
- . No sumerja el producto en agua ni permita que ingrese agua en los agujeros de ventilación
- . No permita que se caiga o un uso inadecuado
- . Verifique cuidadosamente la batería antes de colocarla en el producto
- . No altere ninguna propiedad del producto.
- . Nunca descuide el aparato mientras lo esté utilizando.