


MANUAL DE USUARIO

MASAJEADOR ASIENTO SHIATSU **CIPRÉS**

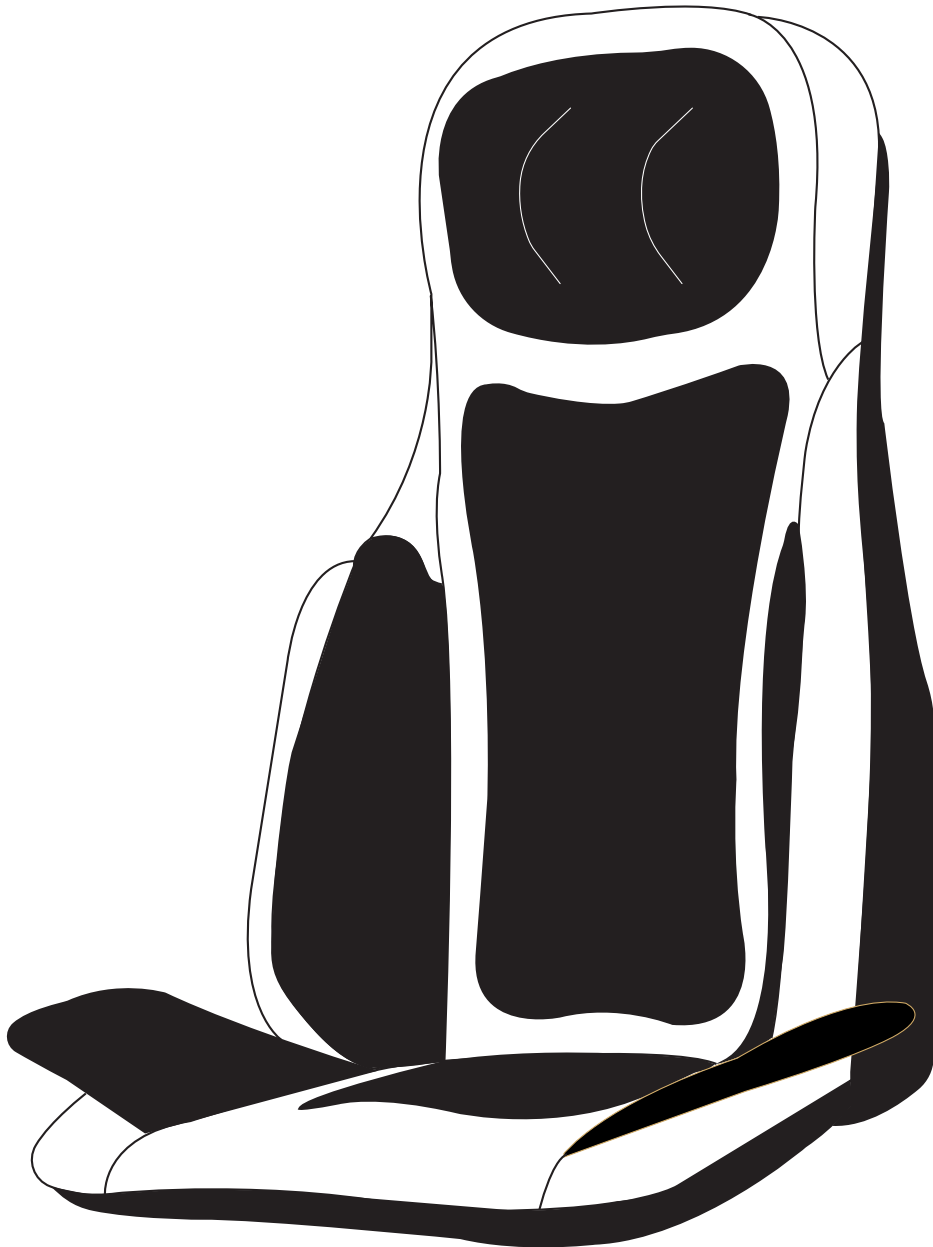

MASAJ020

**SERV
TECH**

Servicio Técnico Oficial Gadnic

www.servitech.com.ar

Tel: 011 5278 1149

serviciotecnico@servitech.com.ar

Gracias por adquirir nuestros productos. Por favor lea el manual cuidadosamente antes de utilizar el producto, sobre todo la sección de seguridad. Guarde el manual a modo de referencia para poder utilizarlo en el futuro.

CONSEJOS DE SEGURIDAD

1. Prestar atención a las personas a las que no se aconseja utilizar el producto.
2. Personas con periodo menstrual, mujeres embarazadas, pacientes cardíacos.
3. Personas con hemorragias, septicemia, fiebre, etc.
4. No permita que los niños utilicen el producto o adultos que no estén en condiciones de utilizarlo por su cuenta.

5. Por favor no se pare o no agregue mucha presión en el dispositivo ya que puede detener su funcionamiento o dañar el motor.
6. Por favor no remueva la protección de paño que recubre el producto.
7. No utilice el dispositivo si posee la piel inflamada o dañada.
8. Por favor tome una taza de 500ml de agua o té luego del masaje, para estimular el metabolismo del cuerpo.
9. No lo utilice si detecta que la carcasa del motor se encuentra rota o que el paño que lo recubre está roto.
10. No intente poner los dedos en la base del cabezal del motor para evitar lastimaduras o que se quede atorado.

PROHIBIDO REMOVE

1. No intente sacar componentes interiores ya que puede provocar el mal funcionamiento de la unidad.
2. No intente reparar o modificar el aparato por su cuenta ya que la empresa cuenta con técnicos especializados para realizar esa tarea. Ante cualquier consulta recomendamos contactar al proveedor del producto.

NO TIRAR DEL ENCHUFE

1. Para mantener el producto en condiciones por favor desenchúfelo desde el enchufe y no desde el cable.
2. No utilice las manos húmedas para desenchufar el producto ya que puede provocar una descarga eléctrica o puede lastimarse.
3. Cuando no lo esté utilizando, por favor desenchufe el masajeador.
4. Si nota que hay una falla al encenderse, recomendamos apagarlo y desenchufarlo.


LA FUENTE DE ALIMENTACIÓN

1. No utilice un voltaque superior al voltaje autorizado para la fuente de alimentación ya que puede producir un incendio.
2. Si el cable de alimentacion se encuentra dañado, para evitar cualquier peligro, debe contactar al fabricante, al departamento de mantenimiento o a cualquier otro técnico responsable.


CONDICIONES DEL AMBIENTE

1. No utilice el aparato en un ambiente húmedo o con polvo para evitar una descarga eléctrica o una falla del mismo.
2. No utilice el producto cerca de la luz directa del sol o cerca de una llama.
3. No lo utilice cuando haya truenos.

ELEMENTOS DEL PRODUCTO

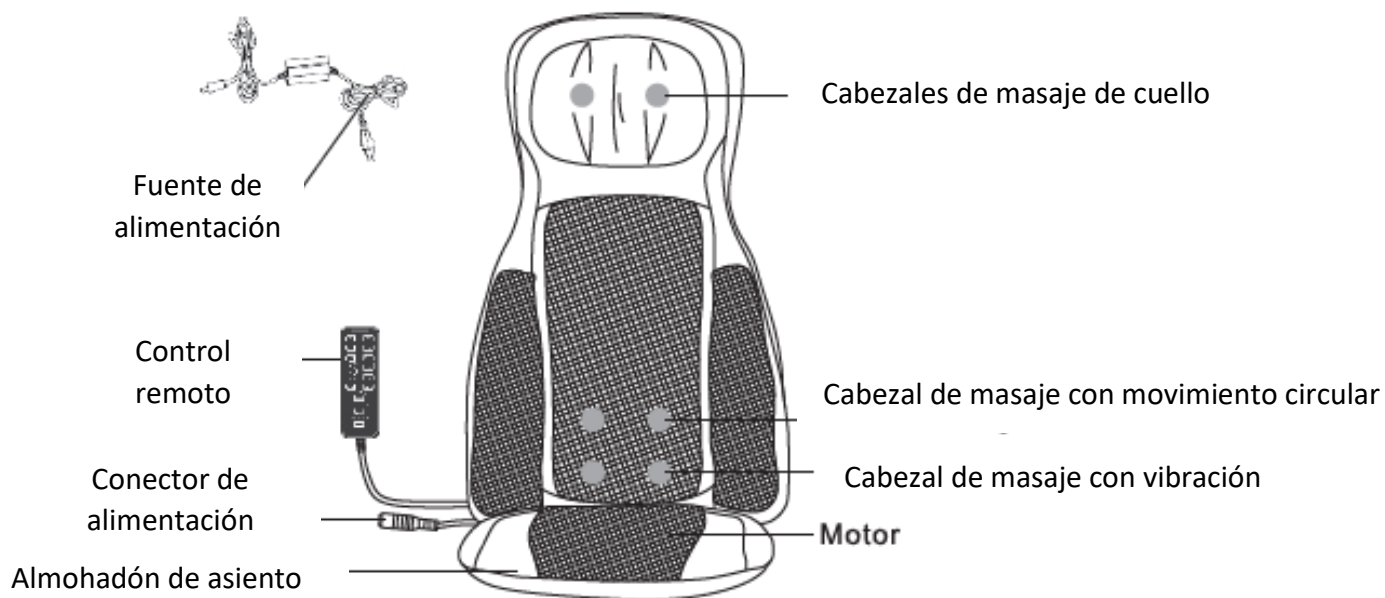

INSTRUCCIONES DEL CONTROL REMOTO

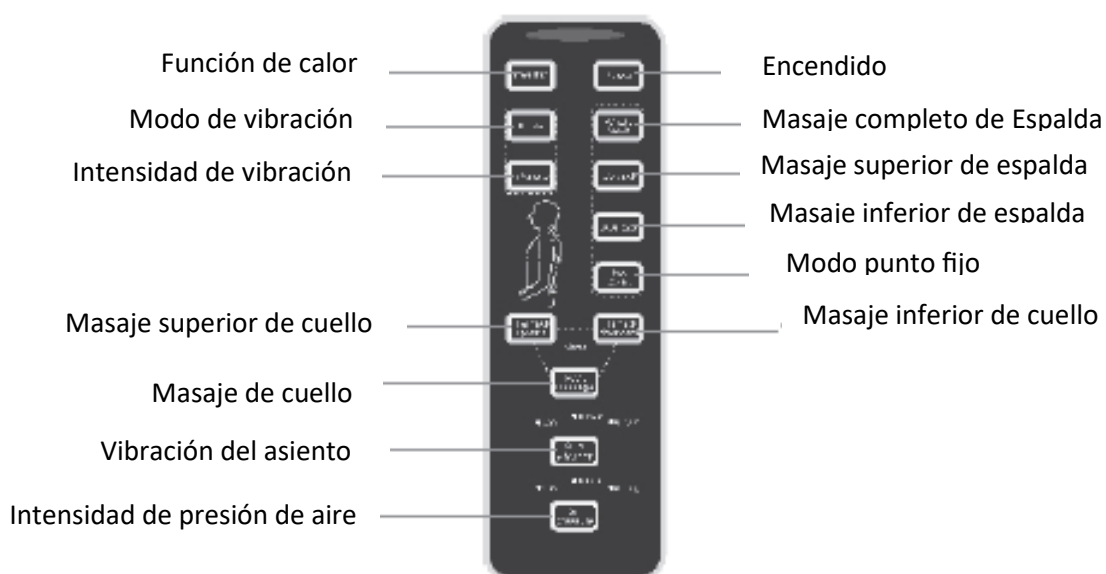

COMO UTILIZARLO

1. Ubique el producto en la silla. (Puede utilizar tiras para ubicarlo en la misma)
2. Conecte de un extremo de la fuente de alimentación a la red eléctrica de 220v. El otro extremo conéctelo al masajeador.
3. Presione el botón de encendido, el producto comienza a funcionar. La parte trasera corresponde al masaje por presión con dirección hacia arriba y hacia abajo. La sección del cuello contiene el masaje con cabezales de movimiento circular con dirección hacia arriba y hacia abajo. En la cintura y en las caderas está la función del masaje por presión de aire y la intensidad por defecto es intermedia.
4. Presione el botón de fuente de calor, la luz correspondiente al masaje por presión se vuelve roja y comienza a calentar. Si presiona nuevamente la luz roja se apaga, así como también la función de calor.
5. Presione la función de “Masaje completo de espalda”, activa o desactiva esta función, los rodillos suben y bajan en toda la sección de la espalda. Presione el botón “Masaje superior de espalda”, activa o desactiva esta función haciendo que los rodillos se queden solo en una sección superior. Presione el botón “masaje inferior de espalda”, activa o desactiva esta

función haciendo que los rodillos se queden solo en la sección inferior. Presione el modo “Punto fijo” para dejar los rodillos en una sección deseada.

6. Presione el botón de “Modo”, inicia en el modo de vibración 1 y la intensidad por defecto es intermedia. Presione nuevamente y pasa el modo de vibración 2. Si presiona una vez más puede pasar el modo de vibración 3, si presiona por una 4 vez, apaga el modo de vibración.

7. Presione el botón de Modo, cambie la intensidad de la vibración, tiene 3 tipos de intensidad de vibración para ajustar y la intensidad por defecto es intermedia. (Nota: El botón de intensidad puede ser utilizado solamente si el botón de modo está encendido)

8. Presione el botón de presión de aire, cambie la intensidad de presión de aire, tiene 3 tipos de intensidad para ajustar y la intensidad por defecto es intermedia. (Nota: Puede apagar el modo de presión de aire fijándose en la luz indicadora de este modo).

9. Presione el botón de masaje del cuello, tiene la opción de masaje por presión en reversa. Si presione nuevamente apaga esta opción.

Si presiona el botón “Masaje superior de cuello”, la presión del masaje se dirige hacia arriba.

Si presiona el botón “Masaje inferior de cuello”, la presión del masaje se dirige hacia abajo.

10. Presione el botón de vibración del asiento, la intensidad de vibración es alta. Presione nuevamente para que la vibración del asiento sea media, presione por tercera vez para que la intensidad del asiento sea baja. Presione por cuarta vez para apagar la función.

CARACTERÍSTICAS DE LAS FUNCIONES DEL PRODUCTO

1. El masajeador es un nuevo concepto de masajes para la espalda, cuello, etc.
2. El masaje del cuello puede ser configurado en dirección para arriba o para abajo. Se podrá regular dependiendo las necesidades de cada persona y sus estaturas.
3. Tiene varios tipos de masaje de espalda.
4. Masaje por presión de aire.
5. Asiento masajeador con vibración de alta frecuencia.
6. El dispositivo se apaga automáticamente a los 15 minutos.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

1. Asegúrese de limpiar el producto antes de utilizarlo y desenchufe el mismo antes de limpiarlo.
2. Por favor mantenga el producto en un lugar seco y libre de polvo.
3. Cuando el producto esté manchado por favor utilice un paño seco para limpiarlo.
4. Evite el agua u otros líquidos para limpiar el producto
5. Por favor no use aceite volátil, lavandina o solventes corrosivos para limpiar el aparato

6. Este producto ha sido especialmente diseñado y fabricado para no tener que agregar aceites específicos regularmente.

Parámetros técnicos

Modelo del producto: LY – 718A

Voltaje de entrada: 12V

Potencia de consumo: 60W

Polaridad de entrada: 

DETECCIÓN DE INCONVENIENTES TÉCNICOS

Si al utilizarlo detecta algunos inconvenientes, puede chequear la siguiente información

Inconvenientes	Posibles motivos	Soluciones
El dispositivo no funciona	1. No hay electricidad 2. No conectó el enchufe 3. No apretó el botón de encendido	1. Conectelo a la fuente de alimentación 2. Chequee el enchufe 3. Encienda el producto
Cuando lo utiliza siente que funciona muy rápido o muy despacio	1. Que el producto no esté correctamente ubicado. 2. No puedo ubicarse correctamente cuando comienza a utilizarlo	1. Ajuste el ángulo de ubicación del producto. 2. Es una situación esperable hasta que se acostumbre al equipo.
Cuando lo utiliza escucha el sonido GIGI	EL motor está funcionando correctamente	No necesita preocuparse por este motivo

Si nota que el inconveniente persiste, aun realizando las indicaciones anteriores, recomendamos que desenchufe el producto y contacte nuestro servicio post-venta.