


GADNIC

PISTOLA MASAJEADORA MPS57

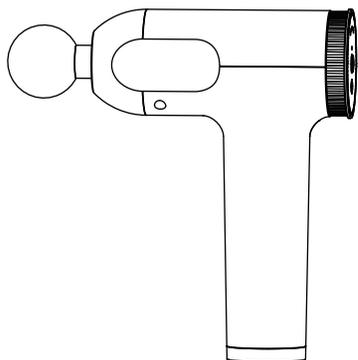

MANUAL DE USUARIO

MASAJ028

Gracias por comprar nuestra pistola de masaje. Lea el manual del usuario antes de usarlo para garantizar el método de funcionamiento correcto.

Precauciones de Seguridad

1 Declaración

Consulte a un médico antes de usarlo si se encuentra en alguna de las siguientes situaciones:

1. Mujeres embarazadas o poco después del parto;
2. Enfermedad cardíaca o marcapasos implantado;
3. Las fracturas, la osteoporosis, la columna o las articulaciones son diferentes;
4. Sufriendo de un tumor maligno.

⚠ Atención

1. Queda prohibido el uso de este producto a menores o personas que se hayan lesionado.
2. Está prohibido usarlo sobre una piel seca o que no esté limpia. Le sugerimos que lo use en su ropa. Presione y mueva suavemente sobre la piel, aproximadamente 60 segundos para cada parte.
3. Está prohibido usarlo en las partes que están por encima del cuello, con menor cobertura muscular o de los huesos. Úselo solo en los tejidos blandos de su cuerpo sin dolor ni molestias.
4. Está prohibido usarlo cuando se golpea o se siente doloroso e incómodo.
5. Está prohibido colocar cualquier objeto en los orificios de ventilación del mismo.
6. Está prohibido sumergirlo en agua ya que, no se permite que entre agua en los orificios de ventilación.
7. Está prohibido ponerlo al fuego o cerca de una fuente de fuego.
8. Está prohibido dejarlo caer intencionalmente.
9. Está prohibido desmontarlo de cualquier forma.
10. Está prohibido poner los dedos, el cabello u otras partes cerca del eje o la parte posterior del cabezal de masaje para evitar pellizcos.





1

⚠ Advertencia

1. Saque el cargador después de cargar.
2. Utilice el cabezal de masaje que pueda lograr el mejor efecto de masaje.
3. No lo use durante más de 15 minutos. Si desea continuar usándolo, déjelo descansar por 30 minutos y podrá reutilizarlo luego.
4. Utilice un cargador de 5V ~ 2A o más para cargarlo.
5. Retire la batería del producto antes de desecharlo.
6. Apáguelo antes de quitar la batería.
7. La batería debe desecharse de forma segura.

Descripción del Producto

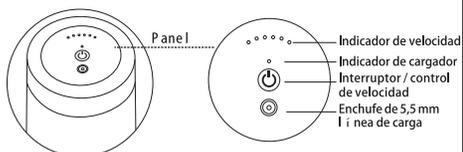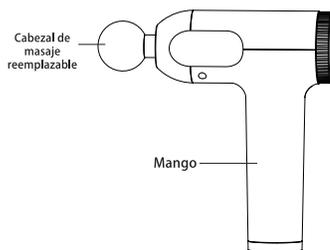

2

Equipado con cuatro cabezales de masaje reemplazables



Cabezal de masaje redondo para grandes grupos de músculos.
Cabezal de masaje de bala para tejidos profundos.
Cabezal de masaje plano para relajar y dar forma a varias partes de los músculos.
Cabezal de masaje de horquilla para ambos lados del cuello y la columna vertebral y el tendón de Aquiles.

Método de instalación de cabezales de masaje

Apague la pistola de masaje e inserte lentamente el cabezal de masaje en la ranura de la boca del mismo. Cuando se combinan, la instalación está terminada.




Dirección de instalación incorrecta

Terminado

Instrucciones de operación

Método de carga

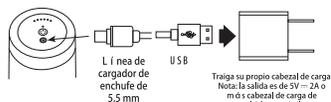

1. Cargue completamente la pistola de masaje durante unas cuatro horas antes del primer uso.
2. Cuando se recarga, la luz LED roja del indicador de carga indica que la batería se está cargando.
3. La luz LED verde del indicador de carga indica que la pistola de masaje está completamente cargada.

3

- ⚠ La pistola de masaje se puede cargar en cualquier momento y con cualquier nivel de batería.
- ⚠ La pistola de masaje no puede funcionar durante la carga. Debe desconectarse de la fuente de alimentación antes de su uso.
- ⚠ Mantenga la batería completamente cargada cada tres meses si no la usa durante mucho tiempo.

Método de uso

Encienda / apague, la velocidad predeterminada es una marcha. Hay un total de 6 velocidades. Cada vez que lo presiona, agrega una marcha. La marcha más alta es 6. Cuando alcance la sexta marcha, presione el producto nuevamente para apagarlo. El masajeador se apagará automáticamente después de 15 minutos.

Ajuste de velocidad

1. De forma predeterminada, la pistola de masaje entra en la primera velocidad (la luz indicadora de la primera velocidad se enciende). Presione brevemente para ajustar la velocidad. Hay seis velocidades en total. Cuando se trata de la sexta velocidad, presiónela brevemente nuevamente para apagarla.

2. La pistola de masaje entrará en su modo de protección de apagado inteligente después de 15 minutos de uso continuo. Debe encenderlo si desea volver a usarlo.

Limpieza y Mantenimiento

Recuerde apagar la pistola de masaje antes de limpiar.

- ▶ Please clean it with a slightly damp towel, then dry it with a soft cloth.
- ▶ Please do not use cleaners, cleaning brushes, gasoline, kerosene, glass cleaners or thinners to clean it.
- ▶ Please store it in the original box or put it in a safe, dry, cool and ventilated place after wiping off the dust and dirt.
- ▶ The massage gun is specially designed and manufactured, so there is no need to maintain or add lubricating oil regularly.

Acerca del reciclaje de baterías



- Para proteger el medio ambiente, extraiga la batería una vez finalizada su vida útil y recíclala de manera unificada. Por favor, no lo deseché a voluntad.
- Antes del final de la vida útil, no desmonte la pistola de masaje a voluntad.

4

Acerca de la extracción de la batería

1. La batería solo se puede sacar de la pistola de masaje después de que se haya agotado o la pistola de masaje no funcione en absoluto.
2. Lleve la pistola de masaje al centro de servicio posventa correspondiente para sacar la batería.
3. Evite el cortocircuito de los terminales positivo y negativo de la batería después de sacarla.

Solución de problemas

Consulte los siguientes consejos y soluciones si tiene problemas durante el uso.

Problema	Possible solution
No funciona	● La pistola de masaje tal vez esté a punto de morir. Úselo después de que esté completamente cargado.
De repente deja de funcionar	● La pistola de masaje tal vez esté a punto de morir. Úselo después de que esté completamente cargado. ● El tiempo ha terminado. Se apagará automáticamente después de 15 minutos.
Un ligero ruido al trabajar	● Esto se debe al sonido generado por la estructura mecánica, no a un mal funcionamiento. Por favor note.

5

