

GADNIC


MANUAL DE USUARIO

Pistola
Masajeadora



MASAJ060


DIAGRAMA DEL PRODUCTO

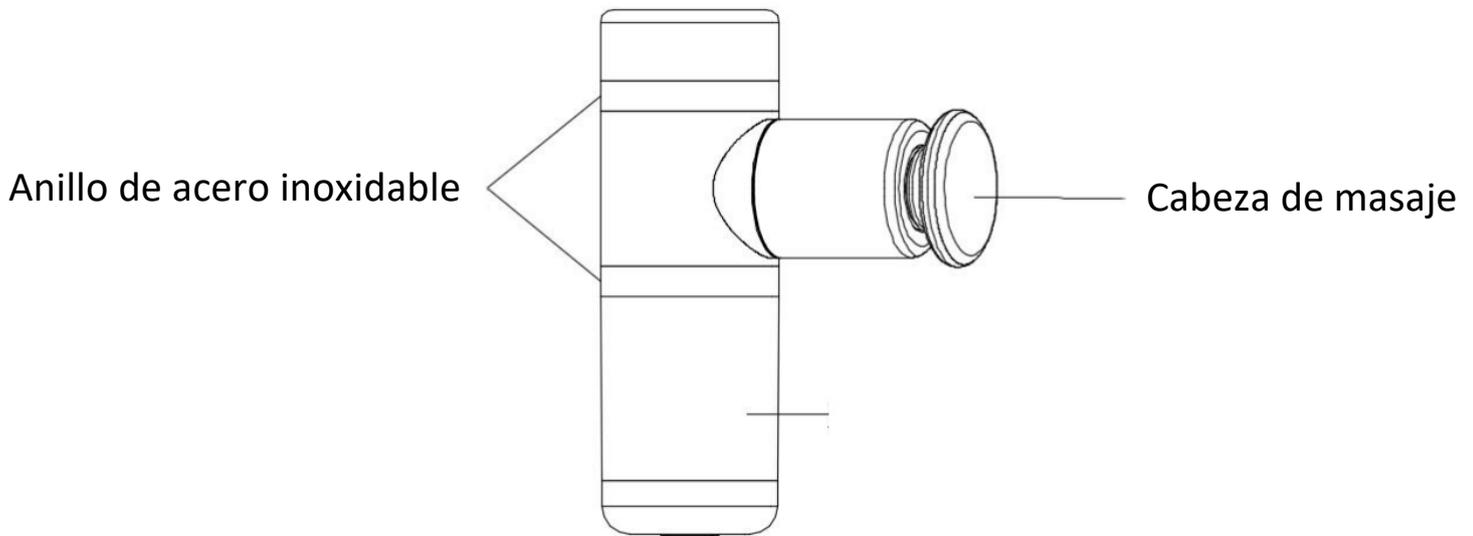


Forma de Y



Forma plana

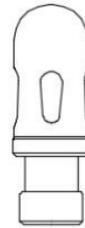

Forma de I

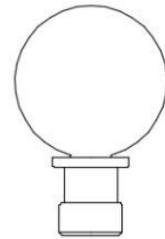


Forma redondeada

La pistola de masaje de fascia muscular profunda es un tipo de dispositivo de vibración conveniente y recargable con las características de gran torque, larga resistencia y ajuste de múltiples engranajes. Puede reducir eficazmente el dolor causado por la acumulación de ácido láctico después de un ejercicio extenuante, así como aliviar la incomodidad de todos los músculos en personas sedentarias.

USO DEL PRODUCTO

Interfaz de carga

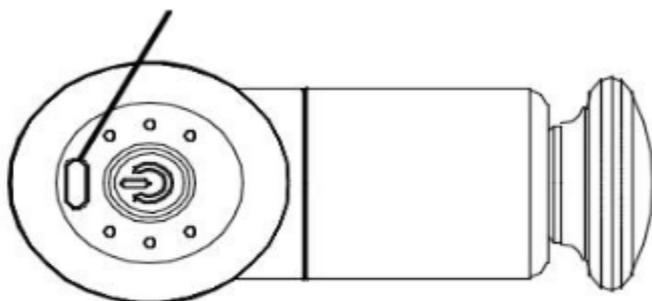

INSTRUCCIONES

Por favor, saque la máquina de la caja, luego inserte uno de los cabezales de masaje en el orificio frente a la máquina.

Mantenga presionada la tecla de encendido durante 3 segundos para encender la máquina.


La luz roja indica las velocidades, presione el botón de encendido una vez para girar el dispositivo al nivel 1, presione dos veces para el nivel 2, tres veces para el nivel 3 y cuatro veces para detener la máquina.

Las luces LED azules indican el nivel de potencia correspondiente.

Apague la máquina después de su uso.

Cuando la máquina se está cargando, la luz azul parpadea. Cuando la luz azul deja de parpadear, indica que se ha cargado por completo. Si la luz azul parpadea en el proceso de uso indica energía insuficiente, así que cárguela oportunamente. No utilice la máquina durante la carga.

CAMBIA EL CABEZAL DE MASAJE

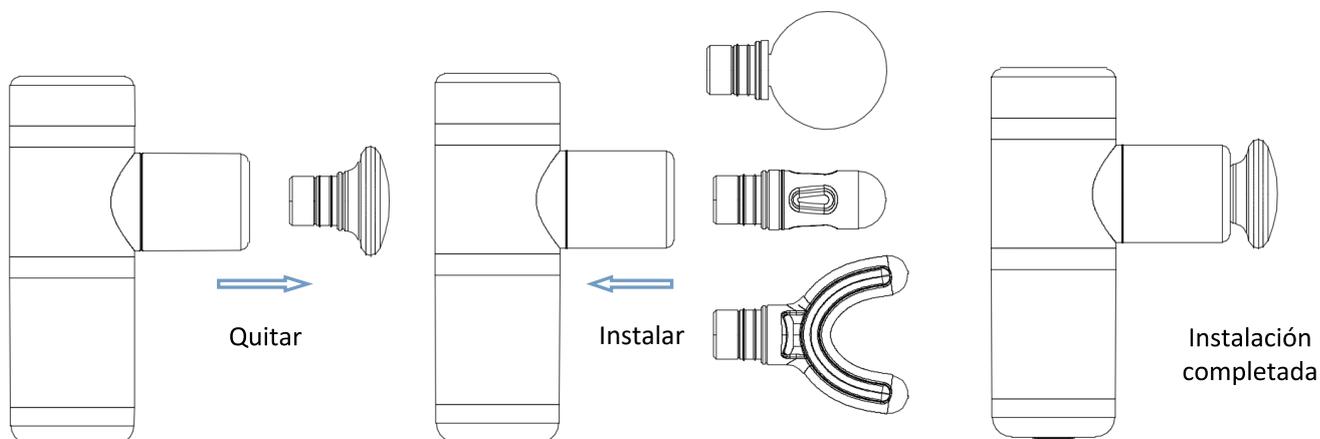

BENEFICIOS

- Ayuda a que el líquido del edema fluya en el sitio de la hinchazón.
- Reduce la acumulación de ácido láctico en los músculos.
- Elimina la fatiga muscular.

ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES

- No sumergir en agua. Mantener alejado de líquidos o fuentes de calor. Mantenga los puertos de ventilación libres de polvo y escombros.
- No quite los tornillos ni intente desmontar.
No lo opere continuamente durante más de 30 minutos, deje que el dispositivo descanse durante 30 minutos antes de volver a usarlo.

SERVITECH

SERVICIO TÉCNICO OFICIAL GADNIC
www.servitech.com.ar

📞 11 6260 1114 (sólo texto)
serviciotecnico@servitech.com.ar