


GADNIC

MANUAL DE USUARIO

MASAJEADOR DE PIES
CEREZO

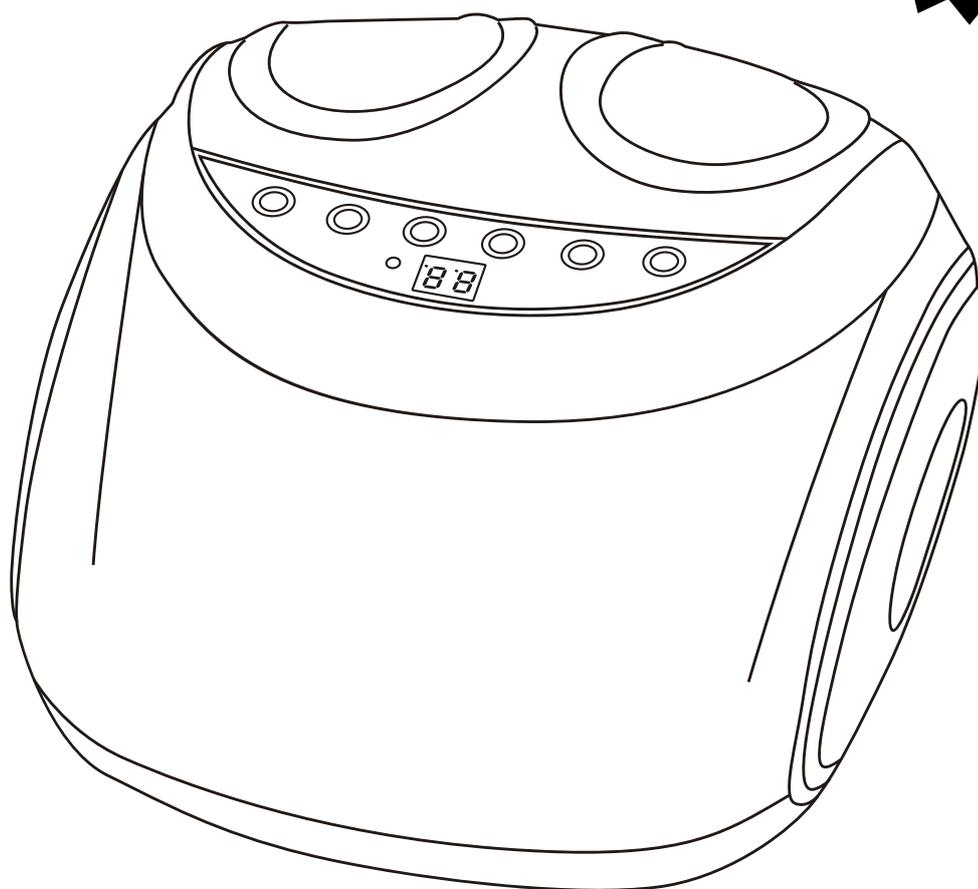

MASAJ088

Le agradecemos por haber elegido nuestro masajeador de pies. ¡Lea el manual de instrucciones con atención antes de utilizar el producto!

1. Las siguientes personas no deben utilizar el producto:

- Embarazadas, personas que sufran de enfermedades cardíacas, de tumores malignos y de osteoporosis.
- Personas que sufran de enfermedades de la piel, como piel agrietada, o que tengan un marcapasos u otro dispositivo médico implantado.

2. ATENCIÓN

- Los niños y las personas con enfermedades mentales deben utilizar el producto bajo supervisión de un adulto responsable.
- Si utiliza el producto durante un tiempo prolongado, puede provocar malestar. La persona que tenga sensibilidad al calor no debe utilizar el producto durante un tiempo prolongado.
- No inserte, ni deje que caigan, elementos u objetos en las ranuras del producto.
- Puede dañar el producto si lo arrastra por el suelo o si tironea del cable de alimentación para moverlo de lugar.
- Si ejercerse presión en un solo pie, no solo la estructura masajeadora del producto puede dañarse, sino que además el producto puede voltearse y lastimar al usuario.
- Si el producto está dañado, rajado o averiado deje de utilizarlo de inmediato.
- No se pare sobre el producto ni apoye objetos pesados sobre él.
- Si nota un sonido o un olor anormal, u observa humo, deje de utilizar el producto de inmediato.
- No desarme los componentes internos del producto porque podrá provocar una falla.
- Si no utiliza el producto durante un tiempo prolongado, colóquelo en la caja original o en un lugar seguro, seco y bien ventilado. También puede ponerle una funda protectora contra el polvo (deberá adquirirla por separado).
- Cuando realice tareas de mantenimiento, desenchufe el cable de alimentación del toma-corriente. No toque el enchufe si tiene las manos húmedas porque puede provocar una descarga eléctrica o sufrir una lesión.
- Luego de utilizar el producto, desenchufe el cable de alimentación del toma-corriente.
- En caso de que haya un corte de electricidad, interrumpa el suministro de energía de inmediato y desenchufe el cable de alimentación del toma-corriente.

3. Enchufe y adaptador


- No utilice una tensión nominal superior.
- Cuando desenchufe el producto, sujete el enchufe y no tire del cable de alimentación.
- Si el enchufe o el cable de alimentación está dañado, no utilice el producto. Comuníquese con nuestro servicio de post-venta, o consulte con un técnico capacitado para la reparación.

4. Lugar de uso

- No utilice el producto en ambientes con humedad o con polvo, para evitar descargas eléctricas o fallas del producto.
- El producto no debe quedar directamente expuesto a los rayos del sol ni a superficies calientes.
- No utilice el producto cuando haya una tormenta eléctrica.


Funciones del producto

1. Imagen de cómo se usa el producto

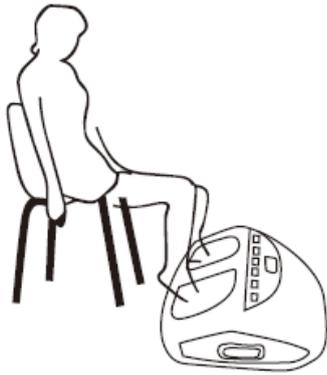

Control remoto

2. Componentes y funciones del producto.

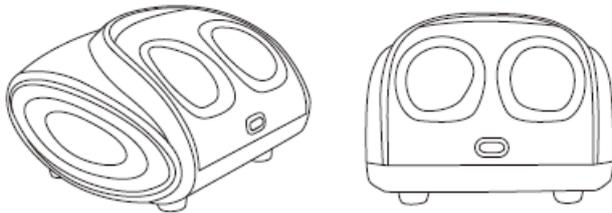

- (1) Panel de control, o panel central: 6 botones de control independientes, que controlan varias funciones del producto.
- (2) Centro de la base interna: Cabezal masajeador para técnica de raspado. Aplica acupresión en los pies con compresas calientes.
- (3) Parte delantera de la base interna: Cabezal masajeador para técnica de amasado y de rotación. Brinda masajes con presión.
- (4) Parte trasera de la base interna: Cabezal masajeador para técnica de amasado y de golpeteos leves. Brinda masajes con presión en el talón.
- (5) Parte superior de la base interna: Airbag - masaje neumático cerrado en el dorso del pie, masaje neumático cerrado en el talón, y técnica de masaje de rotación.
- (6) Superficie de la base interna: Funda de pies lavable.

Instrucciones

Descripción de las funciones del panel de control



–Visualización del tiempo



–Botón de tiempo

Configura el tiempo del masaje



–Botón de modo

Controla el modo del masaje; tiene tres modos posibles que se señalan mediante una luz indicadora. (Modo 1 : luz verde; modo 2: luz amarilla; modo 3: luz roja)



–Botón de intensidad

Controla la intensidad del masaje que se señala mediante una luz indicadora.

(Intensidad baja: luz verde; intensidad media: luz amarilla; intensidad alta: luz roja)



–Botón de calor

Controla el encendido o apagado de la función de terapia de calor. La luz indicadora queda iluminada mientras esté encendida la función. (Está predeterminado que se encienda la función de terapia de calor de la bota)



–Botón de rotación

Controla el encendido o apagado de la función de rotación.



–Botón ON/OFF (encendido/apagado)

Controla el encendido o apagado del producto.

Modo de uso

1. Enchufe el cable al toma-corriente.

2. Funcionamiento

- Luego de enchufar el cable, el producto está en modo pausa, la luz indicadora del **Botón ON/OFF** del panel de control parpadea.
- Presione el **Botón ON/OFF**, la luz indicadora siempre estará encendida, el modo de masaje es modo 1; la intensidad del masaje es media; la función de calor se enciende automáticamente.
- Cuando esté funcionando, presione el **Botón de modo** para configurar el modo del masaje. Hay tres modos para elegir: Modo 1: Patrón de apriete variable en función de la velocidad, se enciende la luz verde; Modo 2: Modo de amasado y exprimido rápido, se enciende la luz amarilla; Modo 3: Modo de exprimido puro, se enciende la luz roja. Está predeterminado que en la bota comience en el Modo 1.
- Cuando esté funcionando, presione el **Botón de intensidad** para cambiar la intensidad del masaje. Hay tres intensidades para elegir: intensidad baja, se enciende la luz verde; intensidad media, se enciende la luz amarilla, e intensidad alta, se enciende la luz roja. Está predeterminado que en la bota comience en la intensidad media.
- Cuando esté funcionando, presione el **Botón de calor** para encender o apagar la función de terapia de calor. Está predeterminado que se encienda la función de terapia de calor de la bota.
- Cuando esté funcionando, presione el **Botón de rotación** para encender o apagar la función de rotación.
- Cuando esté funcionando, presione el **Botón ON/OFF** para configurar la duración del masaje, "5-30" minutos.

Instrucciones de mantenimiento

- Antes de limpiar el producto, desenchúfelo y espere a que se enfríe.
- Utilice un paño seco para limpiar la carcasa del masajeador.
- Nunca sumerja el producto en ninguna clase de líquido.
- El producto no debe tener contacto con agua ni con otro líquido.
- No limpie el producto con detergente, cepillo, nafta, querosén, limpiador de vidrio ni diluyente.

Solución de problemas

Cuando utilice el producto, en caso de que tenga alguno de los siguientes problemas, lea los consejos y las posibles soluciones especificados en el cuadro.

Situación anormal	Causa	Solución
No funciona	<ol style="list-style-type: none"> 1. El suministro de energía no está conectado. 2. El botón de encendido/apagado no funciona. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Enchufe el cable de alimentación o asegúrese de que el suministro de energía esté bien conectado. 2. Presione el botón de encendido/apagado.
Dejó de funcionar repentinamente.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Corte del suministro eléctrico. 2. Se terminó el tiempo: el producto tiene un ciclo automático de 15 minutos. 3. El producto ha sido utilizado en forma continua durante un plazo prolongado, se activa la protección contra sobrecalentamiento. 4. Se ejerce mucha fuerza que evita que las bolas masajeadoras funcionen. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Asegúrese de que el suministro de energía esté bien conectado. 2. Presione el botón de encendido/apagado nuevamente. 3. Una vez que esté frío el producto, presione el botón de encendido/apagado nuevamente. 4. Presione el botón de encendido/apagado nuevamente.

Parámetros técnicos

Nro. de modelo: LY-309A Voltaje nominal: AC 220V

Frecuencia: 60Hz Potencia nominal: 50W



SERVICIO TÉCNICO OFICIAL GADNIC
www.servitech.com.ar

 11 6260 1114 (sólo texto)
serviciotecnico@servitech.com.ar