

Por favor, consulte los siguientes puntos y formas de solución si se encuentra con some problema al utilizar el cinturón de masaje.

Si el cinturón de masaje se estropea, apague el interruptor y desenchúfelo. Los usuarios no deben demoler ni reparar el cinturón de masaje por sí mismos, ya que esto podría dañar el producto e invalidar la garantía del mismo. En ese caso, la empresa no se hará responsable de las consecuencias causadas por los motivos anteriores

| Circunstancias | ~Posibles motivos/vías de solución |
|--|---|
| No se puede iniciar el trabajo | Asegúrese de que el enchufe está insertado en la toma Asegúrese de que el interruptor de la toma está encendido Asegúrese de que se ha presionado el botón. |
| El masaje deja de funcionar de repente | Por favor, compruebe si la clavija ha sido extraída de la toma de corriente. Empuje el botón descuidadamente. Exceda el tiempo fijo automático -10 minutos. Si el dispositivo de protección contra sobrecarga está activado, desconecte la alimentación principal y espere a que se enfríe el cinturón de masaje. Si el problema persiste, póngase en contacto con el servicio técnico. |

| | |
|----------------------|----------------------------|
| Nombre del producto: | Masaje de cuello y hombros |
| Modelo de producto: | W-808 |
| Consumo de energía: | AC 220V - 50Hz |
| Potencia nominal: | 70W |
| Peso bruto: | 4.2Kg |



SERVICIO TÉCNICO OFICIAL GADNIC
www.servitech.com.ar

☎ 11 6260 1114 (sólo texto)
serviciotecnico@servitech.com.ar

GADNIC


MANUAL DE USUARIO MASAJEADOR DE CUELLO



MASAJ122



1. Conjunto de masaje
2. Grupo de masaje
3. Panel de control
4. Cable
5. Enchufe

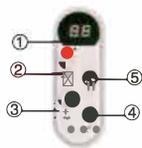

Panel de control I :

1. Pantalla digital
2. Tecla On/Off
3. Interruptor de salida alta
4. Low Output Switch
5. Modo

1. Preparación antes del uso

Enchufe la clavija eléctrica en la toma de corriente y encienda el interruptor. Coloque el cinturón de masaje alrededor de la zona a masajear y asegúrese de que el cinturón está bien sujeto.

2. Tecla de encendido/apagado

Pulse el botón [] para iniciar el Modo automático y batido automático. La cuenta atrás se iniciará automáticamente dentro de 10 minutos después de iniciarse el inicio.

3. Regulación de fuerza

En la circunstancia de masaje, cada vez que pulse abajo [] cambiará la Fuerza. Hay cinco opciones de fuerza disponibles.

4. Tecla Modo

En la circunstancia de masaje, cada vez que pulse [] el Modo se puede cambiar en el automático. Hay cinco modos disponibles.

⚠ Attention:

- Por favor, haga el masaje en menos de 10 minutos
- Por favor, deje el masaje si se siente bien.
- Asegúrese de desenchufar el aparato cuando no lo utilice.

Quando utilice equipos eléctricos, preste especial atención a lo siguiente **Precaución de seguridad y cúmplala.**

Antes de utilizar el producto, lea atentamente las siguientes instrucciones: **Peligro: Observe las siguientes instrucciones para reducir el peligro de descarga eléctrica.**

1. Desconecte el enchufe de la toma de corriente cuando termine de masajear o antes de lavar el producto.
2. No se sumerja en el agua para recoger el producto cuando caiga al agua.
3. No utilice el producto durante el baño.
4. No coloque el producto en lugares donde pueda caerse fácilmente o ser arrojado a la bañera o a otros lugares.

Advertencia -Por favor, siga las instrucciones que se indican a continuación con el fin de reducir los riesgos de lesiones causadas por chispas, descargas eléctricas, etc.

peligro causado por chispas, golpes, descargas eléctricas, etc.

Instrucciones:

1. Asegúrese de que el enchufe está desenchufado cuando no haya nadie cerca. Además, extraiga el enchufe de la toma cuando el producto no se utilice o cuando se reparen piezas en mal estado.
2. Con el fin de evitar el peligro causado por salpicaduras, descargas eléctricas, etc., no coloque el producto bajo la almohada o manta durante su uso.
3. Por favor, asegúrese de que alguien está cerca para guiar a los (niños y personas discapacitadas) cómo utilizar el producto.
4. Por favor, siga las instrucciones de uso del producto y no utilice las piezas no recomendadas por el fabricante.
5. No utilice el producto en las siguientes situaciones: el cable o el enchufe estén dañados, el producto no funcione correctamente, el producto se ha caído al suelo o al agua. Por favor, envíe el producto al Centro de Servicio de Repaire para su revisión y reparación.
6. Por favor, no desplace el producto tirando del cable o utilice el cable como agarre.
7. Mantenga el cable y la superficie de calentamiento a una distancia adecuada para la venta.
8. No utilice el producto cuando el drenaje de aire esté bloqueado. Mantenga el drenaje de aire libre de obstrucciones, y evite que el drenaje esté bloqueado por flocado o pelo.
9. No utilice el producto al aire libre.
10. Por favor, no utilice el producto cuando se utilizan productos de aerosol sobre o bajo la circunstancia de lleno de oxígeno.
11. Si desea cortar la corriente, desconecte todos los enchufes y desenchufe la clavija de la toma de corriente.