

GADNIC

MANUAL DE USUARIO

PISTOLA MASAJEADORA PROMASSAGE



MASAJ141



Cabeza en U para vértebras



Cabeza redonda pequeña para articulaciones



Cabeza en forma de bola para músculos grandes



Cabeza plana pequeña para todas las partes del cuerpo

Instrucciones

1. Botón de encendido / apagado (mantenga pulsado para iniciar / mantenga pulsado para apagar).
2. Presione la tecla de engranaje para cambiar.
3. Vibrador desmontable y reemplazable. Al desmontar el vibrador, simplemente tire de él con fuerza.
4. Seleccione un equipo de carga de 5 V para cargar.
5. Dele a este producto una carga inicial de 3 horas. Conecte el cable de datos al adaptador de 5 V para cargar.
6. Tipo de botón: durante la carga, 6 luces parpadearán, cuando esté lleno, 6 luces estarán encendidas y cuando esté funcionando, las luces indicarán la posición del cambio.
7. Tipo de toque: al cargar, el tubo nixie muestra la cantidad eléctrica, mientras trabaja, muestra el equipo.

Permisos de garantía

El periodo de garantía de este producto es de 12 meses y los permisos no son transferibles. Está disponible durante el periodo de garantía a partir de la fecha en que el usuario compra la máquina.

Los documentos primarios pueden disfrutar del servicio de garantía (la apariencia y el desgaste causados por la operación mecánica no están cubiertos por la garantía de responsabilidad: lo siguiente no será cubierto por la garantía).

1. Daños accidentales, uso indebido o transporte
2. No siguió las instrucciones del producto;
3. El producto fue reparado por medio de fuentes no autorizadas
4. No se puede proporcionar prueba formal de compra.

TARJETA DE GARANTÍA DEL PRODUCTO

MODELO DEL PRODUCTO	NO. DE SERIE	FECHA
Nombre del cliente		Código postal
Dirección detallada		
Número de contacto		
Nombre comercial	Registro de reparación	
Registros de mantenimiento		

El contenido de esta especificación y las especificaciones de este producto están sujetos a cambios sin previo aviso. Nos reservamos el derecho de cambiar las especificaciones y los materiales contenidos en el mismo sin previo aviso, debido a la confianza en los materiales citados. La empresa no será responsable de los daños (incluidos los daños resultantes), incluidos entre otros, errores de impresión y otros errores relacionados con esta publicación. Este manual de instrucciones es solo para referencia y no constituye ningún tipo de compromiso. Consulte la compra real para obtener información y especificaciones de configuración del producto.

Método de uso

Programa de operación de miembros inferiores

Posición prona

Pequeña cabeza plana verticalmente hacia abajo

Tendón de la corva
Biceps femoral 20s-30s x3 veces
Semitendinoso 20s-30s x3 veces
Semimembranoso 20s-30s x3 veces
La dirección del movimiento es de arriba a abajo.

Posición supina

Pequeña cabeza plana verticalmente hacia abajo

Cuádriceps femoral
Recto femoral 30s-45s x2 veces
Vasto lateralis 30s-45s x2 veces
Vasto medial 30s-45s x2 veces
Vastus intermedius 30s-45s x2 veces
La dirección del movimiento es de arriba a abajo.

Cabeza plana pequeña hacia afuera 45 °


Gracilis 10s-15s x2 veces
Aductor largo 10s-15s x2 veces
Aductor corto 10s-15s x2 veces
Tríceps sural
Gastrocnemio 20s-30s x3 veces
Soleus 20s-30s x3 veces
La dirección del movimiento es de arriba a abajo.

Pequeña cabeza plana verticalmente hacia abajo

Sartorio 30-45s
Tensor de la fascia lata 15s-20s x2 veces
Tibial anterior 15s-20s x2 veces
Peroneo largo 15s-20s x2 veces
Peroneus brevis 15s-20s x2 veces
La dirección del movimiento es de arriba a abajo.

Pequeña cabeza redonda verticalmente hacia abajo

Poplíteo
Posición de enderezamiento de rodilla 15-30s
Posición de flexión de la rodilla 15-30s

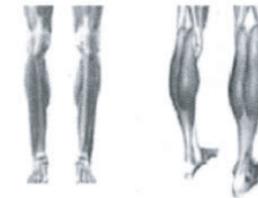

Método de uso

Gonartritis

Posición supina

Pequeña cabeza plana verticalmente hacia abajo

Cuádriceps femoral
Recto femoral 30s-45s x2 veces
Vasto lateralis 30s-45s x2 veces
Vasto medial 30s-45s x2 veces
Vastus intermedius 30s-45s x2 veces
La dirección del movimiento es de arriba a abajo.
El paciente dobla la rodilla lenta y levemente

Pequeña cabeza redonda verticalmente hacia abajo

Borde del hueso ilíaco - hueso ilíaco anterior 30s-1 min
Recto femoral 1 minuto
Tensor de la fascia lata 15s-20s x2 veces
Área del ligamento rotuliano 20s x3 veces

Posición prona

Pequeña cabeza redonda verticalmente hacia abajo

Poplíteo 30-45s
Posición de enderezamiento de rodilla 15-30s
Posición de flexión de la rodilla 15-30s
Tríceps sural
Gastrocnemio 20s-30s x3 veces
Soleus 20s-30s x3 veces



Fascitis plantar

Posición prona (un solo lado)

Pequeña cabeza plana verticalmente hacia abajo

Tendón de la corva
Biceps femoral 20s-30s x3 veces
Semitendinoso 20s-30s x3 veces
Semimembranoso 20s-30s x3 veces
La dirección del movimiento es de arriba a abajo.

Cabeza U verticalmente hacia abajo

Poplíteo
Posición de enderezamiento de rodilla 15-30s
Posición de flexión de la rodilla 15s-30s
Tríceps sural
Gastrocnemio 20s-30s x3 veces
Soleus 20s-30s x3 veces
La suela del pie delantero toca el suelo

Cabeza redonda pequeña vertical a planta pedis

Fascia plantar

Programa de operación de la parte sacroiliaca

Posición prona (un solo lado)

Pequeña cabeza plana verticalmente hacia abajo

Glúteo medio 30s-1min x4 veces
Glúteo mayor 30s-1min x4 veces
Piriforme 1 min-1,5 min
Articulación sacroiliaca 1 min-1,5 min
La dirección es de adentro hacia arriba hacia afuera hacia abajo, a lo largo de la dirección muscular.

Tendón de la corva

Biceps femoral 20s-30s x3 veces
Semitendinoso 20s-30s x3 veces
Semimembranoso 20s-30s x3 veces
De arriba a abajo

Posición supina

Tibial anterior 15s-20s x2 veces
Peroneo largo 15s-20s x2 veces
Peroneus brevis 15s-20s x2 veces
La dirección del movimiento es de arriba a abajo.



SERVI TECH

SERVICIO TÉCNICO OFICIAL GADNIC
www.servitech.com.ar

☎ 11 6260 1114 (sólo texto)
serviciotecnico@servitech.com.ar