

展开尺寸: 210x142mm




GADNIC




MASAJ145

Descripción del producto

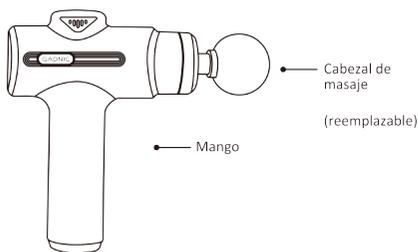

Cabezal de masaje

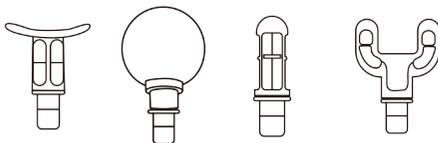

Cabeza plana
Para cada relajación muscular de las partes. Forma de plástico.

Cabeza redonda
Para masajear partes de músculos, como palmas, plantas, etc.

Cúspide
Adecuado para profundidad de impacto, organización de capas, como colaterales y juntas.

Línea de doble garra
Para masaje de cuello y columna.

Uso del producto

Encendido / Apagado

Mantenga presionado el botón de encendido por un segundo para encender. Mantenga presionado el botón de encendido por 3 segundos para apagar.




Ajuste de fuerza

Presione el botón del interruptor para comenzar a girar. Haga clic, una luz roja se encenderá, que representa la posición del engranaje "1". Presione de nuevo, 2 luces rojas se encenderán, lo que representa la posición de marcha "2". Presione 3 veces, tres luces rojas se encenderán, lo que representa la posición de cambio "3". Presione 4 veces, cuatro luces rojas se encenderán, lo que representa la posición de cambio "4". Presione 5 veces, cinco luces rojas se encenderán, lo que representa la posición de cambio "5". Presione 6 veces, 6 luces rojas se encenderán, lo que representa la posición de marcha "6". Presione 7 veces, momento en el que el motor deja de girar. Presione el motor nuevamente para arrancar.



Cambiar cabezal de masaje

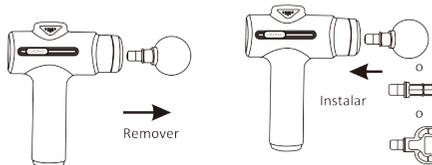

Luz indicadora, luz de señal

La luz indicadora indica el tamaño del engranaje de la pistola fascial. Cuando una luz está encendida, está en primera marcha; cuando dos luces están encendidas, está en segunda marcha. Tercera marcha cuando tres luces están encendidas, cuarta marcha cuando cuatro luces están encendidas. Cinco con cinco luces, seis con seis.




Lámpara de señal



Una luz roja está encendida, lo que representa la posición de cambio "1". Hay 2 luces rojas encendidas, que representan la posición de marcha "2". Hay 3 luces rojas encendidas, que representan la posición de marcha "3". Hay 4 luces rojas encendidas, que representan la posición de cambio "4". Hay 5 luces rojas encendidas, que representan la posición de cambio "5". Hay 6 luces rojas encendidas, que representan la posición de marcha "6".

Carga de la batería

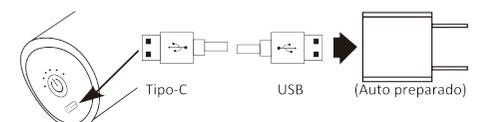

Asegúrese de cargar completamente antes del primer uso. Siempre que se esté cargando, la luz de señal parpadeará hasta que las seis luces de señal estén encendidas, lo que significa que la batería está completamente cargada. Cuando la energía de la batería de la pistola de fascia sea inferior al 10%, la luz de señal parpadeará y deberá cargarla lo antes posible.
* Para garantizar la seguridad de uso, no utilice la pistola fascial al cargar.
* Para proteger la vida útil de la batería, ponga a cargar apenas la luz roja comience a parpadear.
Asegúrese de que la batería esté completamente cargada antes de usarla por primera vez.