


GADNIC


MANUAL DE USUARIO

MINI PISTOLA MASAJEADORA

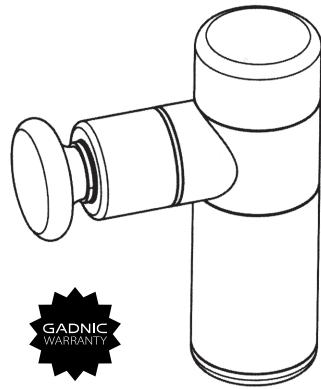


MASAJ155

Información del producto

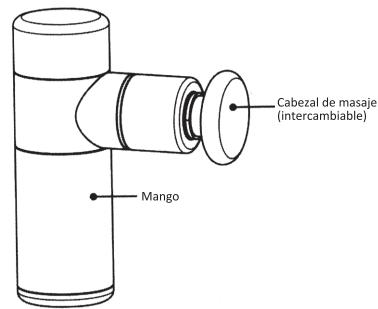

Cabezal de masaje

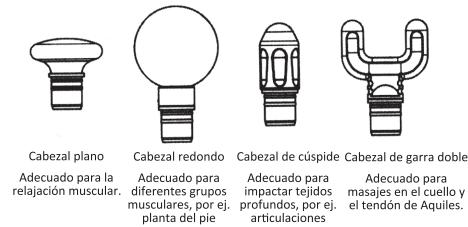

Cabezal plano
Adecuado para la
relajación muscular.

Cabezal redondo
Adecuado para
diferentes grupos
musculares, por ej.
planta del pie

Cabezal de cúspide
Adecuado para
impactar tejidos
profundos, por ej.
articulaciones

Cabezal de garra doble
Adecuado para
masajes en el cuello y
el tendón de Aquiles.

Instrucciones del producto


Botón de encendido / apagado

- Presione durante segundos para encender.
- Presione durante tres segundos para apagar.




Ajuste de fuerza

- Al encender la máquina estará en la primera marcha.
- Presione el botón de inicio una vez para aumentar una marcha.
- La marcha máxima es la 4ª.
- Cuando esté en la 4ª marcha, presione el botón de inicio una vez para volver a la 1ª marcha.

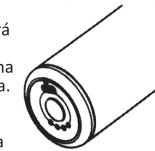

Cambiar el cabezal de masaje

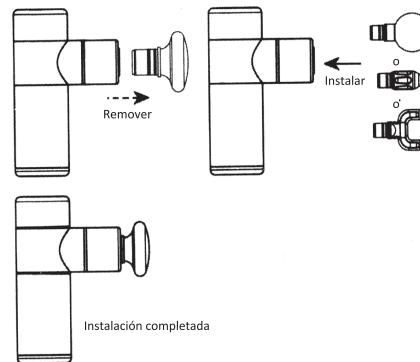

Luz indicadora, luz de señal

- La luz indicadora indica la marcha de la pistola.
- En la 1ra marcha habrá una luz encendida, en la 2da marcha habrán dos luces encendidas, en la 3ra marcha habrán tres luces encendidas y en la 4ta marcha habrán cuatro luces encendidas.



- Cuando se enciende la pistola, la luz de señal se encenderá en verde por un tiempo y parpadeará en verde tres veces. La luz de señal se encenderá en una luz roja durante la carga y se volverá a encender con la luz verde cuando esté completamente cargada.

Indicaciones


- Dolor y espasmo por construcciones musculares, esguince o distensión.
- Ayuda al flujo de fluidos en el área inflamada.
- Relaja y espesa el tejido conectivo y la fascia.
- Reduce la acumulación de ácido láctico en los músculos.
- Aumenta el rango de movimiento.
- Elimina la fatiga muscular

SERVITECH

SERVICIO TÉCNICO OFICIAL GADNIC
www.servitech.com.ar

☎ 11 6260 1114 (sólo texto)
serviciotecnico@servitech.com.ar

Carga

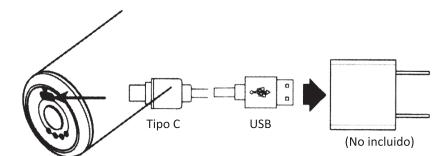

- Cargue completamente la pistola cuando la use por primera vez.
- La luz de señal permanecerá en rojo cuando se está cargando y en verde cuando está completamente cargada.
- Cuando no tiene batería, tanto la luz de señal como la luz indicadora parpadearán cuando encienda la pistola.

* POR SEGURIDAD, NO USE LA PISTOLA DE MASAJE AL CARGAR