

- IV. Mantenimiento y almacenamiento de productos
- Tenga en cuenta de sacar el enchufe de AC de la toma de corriente antes de limpiarlo;
 - No limpie el masajeador con benceno, diluyente y otros impregnantes;
 - Limpie el masajeador o las partes alrededor del interruptor suavemente con un paño seco. No limpie el masajeador o el interruptor con un paño húmedo;
 - El dispositivo de la máquina de este masajeador está diseñado y fabricado por expertos y no requiere de lubricación, mantenimiento ni reparación regular;
 - No inunde el espacio delgado del masajeador, ni lo coloque sobre una superficie blanda, en una cama o un sofá, donde el espacio delgado será fácil de bloquear; mantenga el espacio delgado libre de suciedad ya que puede acumular sustancias como cabello;
 - Si va a estar inactivo durante un tiempo; es mejor que enrolle el cable de alimentación y coloque el masajeador en un lugar seco;
 - No almacene el masajeador en un lugar cerca de aire caliente o fuego abierto;
 - No exponga el masaje al sol durante mucho tiempo.

Nota: Todo el trabajo de reparación deberá ser realizado por personal de mantenimiento autorizado por nuestra empresa.

SERVITECH

SERVICIO TÉCNICO OFICIAL GADNIC
www.servitech.com.ar
☎ 11 6260 1114 (sólo texto)
serviciotecnico@servitech.com.ar

GADNIC

MANUAL DE USUARIO MASAJEADOR TÉRMICO DE DOBLE CABEZAL




MASAJ156

- II. Características del producto
- El diseño individual aerodinámico está más de moda;
 - Los potentes golpes y el masaje en profundidad de los cabezales dobles revivirán de forma más eficaz las molestias y renovarán la vitalidad;
 - El golpe escalonado de los dos cabezales al trabajar será más adecuado para el masaje del cuerpo humano;

efecto del masaje sea más evidente.

caliente con rayos infrarrojos y masaje vibratorio que hace que el infrarrojo más conveniente, unidad original de funciones, compresión de control de la placa giratoria de manera eficiente, tecnología de velocidades infinitamente variables, operación eficiente, fuerza de masaje es mejor y más cómodo.

- Cuando el área del masaje está estresada y calentada, el efecto del ovalado del cabezal de masaje.
- Masaje con compresas calientes, perfecto y uniforme. Diseño infrarrojo segura que ayuda a mejorar la circulación sanguínea.
- Onda infrarroja que entra en contacto con la piel y calefacción

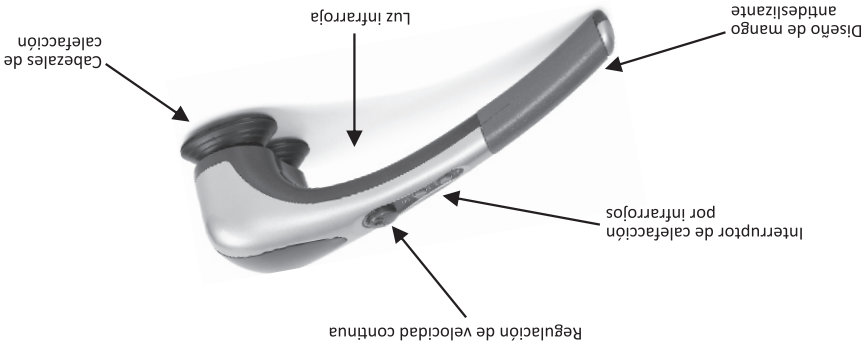

I. Nombre de las partes

- III. Características y Funciones
- Puede calentar su cuerpo para evitar que el mismo se lastime por el movimiento si se usa antes de realizar un deporte;
 - Favorece la circulación sanguínea;
 - Alivia la tensión muscular y alivia la presión;
 - El masaje le proporcionará a las diferentes musculaturas un masaje en profundidad para aliviar la tensión, ejercitar los músculos y eliminar la presión para relajarse;
 - Es útil para el alivio de dolores y detumescencia, y mejora la flexibilidad de la musculatura sensible;
 - Es útil para aliviar el músculo distendido;
 - Puede ayudar al músculo a eliminar la fatiga si se usa después de realizar un deporte.
- El diseño práctico especial transfiere el peso al cabezal, y por lo tanto, lo que tiene que hacer es simplemente agarrar el mango para que el cabezal funcione con su propio peso solo para lograr efectos ideales sin ejercer presión sobre él;
- El masaje de doble velocidad de engranajes fuertes y débiles satisfará diferentes demandas;
 - Con el diseño de ingeniería humana, el mango aerodinámico facilitará el masaje de cualquier parte del cuerpo.