

# GADNIC

## MANUAL DE USUARIO MASAJEADOR DE PIES MASAJ161



### MASAJ161

**SERVITECH**

SERVICIO TÉCNICO OFICIAL GADNIC  
[www.servitech.com.ar](http://www.servitech.com.ar)

☎ 11 6260 1114 (sólo texto)  
[serviotecnico@servitech.com.ar](mailto:serviotecnico@servitech.com.ar)

- No utilice el masajeador por más de 20 minutos.
- Use el masajeador con medias.
- La calefacción no se puede utilizar sola.

#### Atención


1. Inserte el enchufe de conexión antes de usar. (Tensión alterna: 110V; Frecuencia: 60Hz).
2. Siéntese y ponga un pie en el masajeador.
3. Presione el interruptor una vez para iniciar la función de masaje. (La luz azul brillará).
4. Presione el interruptor dos veces para iniciar la función de masaje con calefacción. (La luz roja brillará).
5. Presione el interruptor tres veces para apagar el masajeador.

#### Operación

#### Uso

- Ayuda a promover el metabolismo celular.
- Terapia termal con infrarrojo
  - Podrá disfrutar del masaje como si lo hiciera un masajista profesional.
  - Nuevo cabezal de masaje con 18 protuberancias giratorias
  - Puede estimular la zona de flexión del pie para aliviar el dolor y relajar.
  - Masaje profundo y masaje shiatsu

#### 3. Características

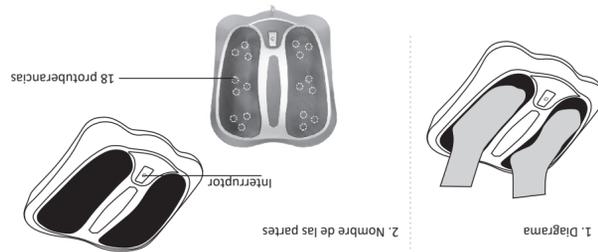

#### Funciones

Si aún no puede resolver el problema, extraiga el enchufe adjunto y comuníquese con nuestro departamento de servicio posventa.

Problemas	Posibles razones	Soluciones
No funciona	1. No está conectado a la corriente. 2. No presiona el interruptor.	1. Vuelva a conectar el enchufe. 2. Presione el interruptor.
Deja de funcionar de repente	La electricidad está cortada.	Compruebe si la interfaz de alimentación está en correcto funcionamiento.

Si experimenta problemas cuando está usando el masajeador, intente resolverlo de acuerdo con los siguientes consejos:

#### Solución de problemas

1. Limpieza
  - Antes de limpiar el producto, extraiga el enchufe de conexión y espere hasta que se enfríe.
  - Limpie la corteza del masaje con un trapo seco.
  - No limpie el masajeador con ningún líquido.
  - No utilice cepillos, gasolina, limpiadores o diluyentes durante la limpieza.
2. Almacenamiento
  - Coloque el masajeador en un lugar seguro y aireado si no lo va a usar durante mucho tiempo.
  - No cuelgue el masajeador por el cable.

#### Mantenimiento