

GADNIC


MANUAL DE USUARIO

MASAJEADOR
DE PIES



MASAJ165

Cómo funciona

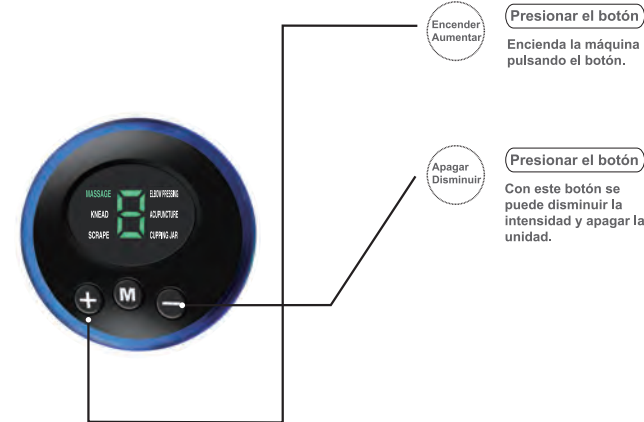

Cuando pulsa el botón de "encendido" o "aumento de intensidad" el equipo aumenta la intensidad de su luz. Cuando pulsa el botón "apagar" y "bajar intensidad" el equipo baja la intensidad de su luz.

- Botón para "encender" y "subir intensidad", "apagar" y "bajar intensidad". La intensidad cambia de a 10%.
- Botón para elección de modo: elección de sus 6 modos.

Advertencia

Por favor, no utilice este producto para las siguientes partes, de lo contrario puede causar un accidente o problemas en la piel o el cuerpo.

- Partes circundantes, tales como, pecho y hombros (la cabeza, cara, etc)
- Heridas y ojos, boca, vagina, zonas de mucosa, etc.
- Partes en que haya sido desplazado hace pocas horas
- Conformación del lugar de la cirugía
- Implantes de metal y plástico
- Columna vertebral o en los tatuajes

No lo aplique a partes del cuerpo que no sean recomendadas en este manual.

Información general de seguridad


Esta Unidad EMS nunca debe utilizarse para enmascarar o aliviar un dolor no diagnosticado. Antes de tratar cualquier síntoma de dolor, debe consultar a su médico. Para un uso correcto y seguro del dispositivo, le recomendamos que lea las siguientes guías antes de utilizarlo:

Precauciones

- *Utilizar una intensidad baja y una duración más corta para aclimatar los músculos y evitar la sobre estimulación.
- *Mantener fuera del alcance de niños y mascotas.
- *Este producto no es impermeable. No lo introduzca en el agua ni lo lave con agua.
- *No utilizar el producto si hay un esguince o herida en los pies, planta, tobillo y pantorrilla.

- Otras precauciones de seguridad importantes.
1. Utilice este aparato únicamente con fines de fisioterapia.
 2. Utilice únicamente los accesorios suministrados con la alfombrilla para pies.
 3. No utilice este aparato en lugares con mucha humedad, como el cuarto de baño.
 4. No sobrecargue de equipos la toma de corriente con muchos adaptadores.
 5. Si el aparato funciona mal, desconéctelo de la red eléctrica y póngase en contacto con el servicio de atención al cliente. No intente reparar el aparato por su cuenta, ya que de hacerlo invalidará la garantía.
 6. No deje que el aparato entre en contacto con ningún objeto metálico, como hebillas de cinturón o joyas.

Pasos a seguir

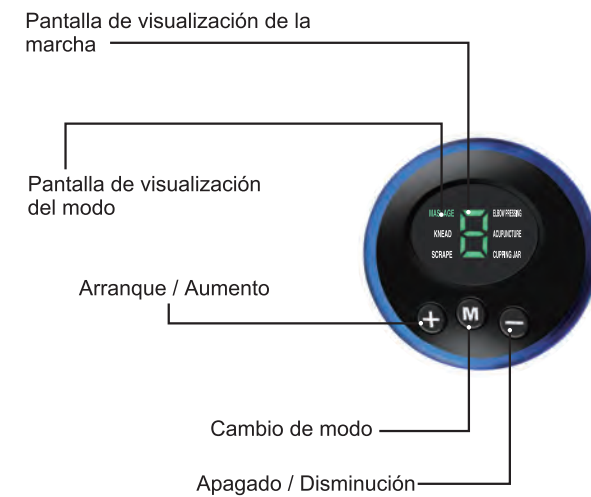

- Para lograr un ejercicio eficiente, utilice el equipo frecuentemente.
- Uselo unos 15 minutos de principio a fin.
- Utilice la misma parte del cuerpo como máximo una vez al día.
- Bajar la intensidad puede prolongar la vida de la batería. El tiempo de uso de la batería se acortará ajustando la intensidad a su máximo nivel.
- En entornos de baja temperatura, el rendimiento de la batería baja.

Las siguientes personas no deben utilizar nunca la alfombrilla para los pies.

- Cualquier persona equipada con un marcapasos o un desfibrilador cardíaco automático (AICD).
- Embarazadas.
- Las personas con trombosis venosa profunda (TVP) para evitar la movilización del coágulo.
- Hipertensos.
- Las personas con cardiopatías.

Especificaciones técnicas

Función	Masajeador de pies EMS
Modo de uso	6 modos
Nivel de intensidad	9 Niveles
Tensión	DC 3V
Salida	Máximo 9,8 mA
Temperatura sugerida del entorno de uso	Alrededor de 15 ~ 35 °C
Apagado automático	15 minutos
Frecuencia	1 ~ 100Hz
Tipo de carga	Cable de carga USB
Tamaño	32 cm X 29 cm
Accesorios	1* Dispositivo principal 1* Alfombrilla para los pies 1* Manual del usuario 1* Cable de carga USB

Una buena herramienta para la circulación sanguínea

- EMS
- Modos LED
- 9 Intensidades de nivel
- Funcionamiento automático
- Carga por cable USB



Sugerido usar una vez al día.
Apagado automático; unos 15 segundos.

¿Qué es la tecnología EMS?

La estimulación eléctrica muscular (EMS), también conocida como estimulación eléctrica neuromuscular (NMES), consiste en provocar la contracción muscular mediante impulsos eléctricos. Los impulsos imitan el potencial de acción procedente del sistema nervioso central, provocando la contracción de los músculos. La EMS ha demostrado ser muy eficaz como herramienta proactiva para el fortalecimiento muscular.

¿Para qué sirve el EMS?

- Fortalecimiento muscular
- Rehabilitación
- Prevención de la atrofia muscular
- Aumento de la circulación sanguínea local
- Relajación muscular
- Tonificación muscular cosmética

Conozca su masajeador de pies EMS

Dispositivo principal (FRONTAL)



Dispositivo principal (POSTERIOR)



Alfombrilla para los pies



Incluye

- 1* Dispositivo principal
- 1* Alfombrilla para los pies
- 1* Manual del usuario
- 1* Cable de carga USB

Importante

*UTILIZAR SÓLO SEGÚN LAS INDICACIONES. NO SE TRATA DE UN PRODUCTO SANITARIO. *LA INFORMACIÓN PROPORCIONADA ES PARA FINES INFORMATIVOS ÚNICAMENTE Y NO PRETENDE SUSTITUIR EL CONSEJO DE SU MÉDICO O PROFESIONAL SANITARIO.

Características del producto


1. El tratamiento de baja frecuencia es por ritmo e impulso suave.

La baja frecuencia es una electricidad especial con ritmo regular. Según la potencia y la frecuencia conveniente en el cuerpo, generan un ritmo y una clase de electro estimulación. La suavidad de la baja frecuencia es similar al efecto del masaje de presión o el pellizco de la mano humana.

2. Elección: 6 modos.

- 1) Elección de 6 modos con un funcionamiento sencillo
- 2) Se apagará automáticamente después de 15 minutos.

La intensidad de la estimulación se divide en 9 niveles (intensidad 1 - 9)

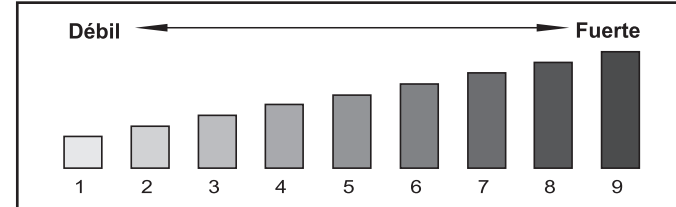

Por favor, establezca una intensidad más baja cuando se utiliza por primera vez. Ajustelo después de que se adapte a la baja intensidad.

SERVICIO TÉCNICO OFICIAL GADNIC
www.servitech.com.ar

☎ 11 6260 1114 (sólo texto)
serviciotecnico@servitech.com.ar