

# GADNIC

## MANUAL DE USUARIO

### MASAJEADOR DE RODILLAS *AGAPANTUS*



**MASAJ167**

# Instrucciones

Gracias Por su compra de rodillera calefactada con masaje  
Con los cuidados normales y el tratamiento adecuado proporcionará años de servicio fiable

**Lea atentamente todas las instrucciones antes de utilizar este producto. Conserve este manual para futuras consultas.**

## CARACTERÍSTICAS

- - Terapia de calor con 2 niveles de calor
- - Masaje por vibración con 5 modos de masaje
- - Diseño envolvente ajustable
- - Un temporizador de 30 minutos para el apagado automático
- - Panel de control de fácil manejo




## CONTENIDO

- - AGAPANTUS Rodillera Calefaccionada con Masaje x 2
- - Adaptador doméstico de 12 V con aprobación UL

# MEDIDA

## TALLA ÚNICA


Tamaño ajustable para uso de toda la familia

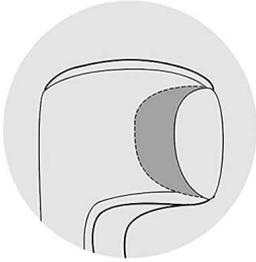

Longitud del perímetro del muslo

Máx. 52 cm

Mínimo 38 cm

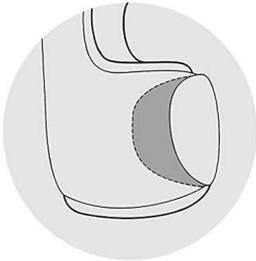

Longitud del perímetro de la pantorrilla


Máx. 44 cm

Mínimo 30 cm




# ARMADO Y USO


## Opt 1.

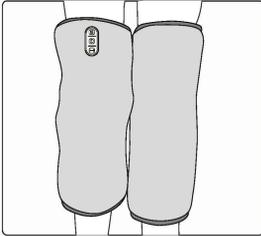


Paso 1: Colocar el masajeador de la rodilla derecha e izquierda

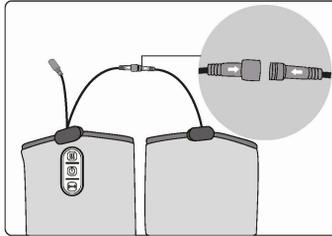


Paso 2: Conectar el cable entre la rodilla derecha y la izquierda

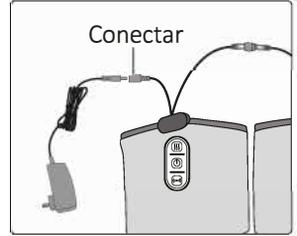

Paso 3: Conecta el cable de alimentación al cable de la envoltura de la rodilla derecha

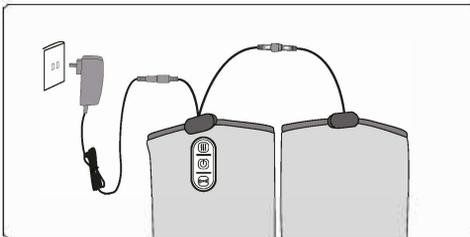


Paso 4: Conectar el adaptador a una toma de corriente

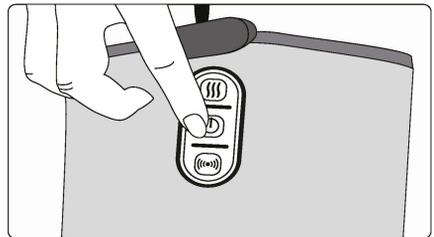

Paso 5: Pulse el botón de encendido para encender el dispositivo

## Opt 2.

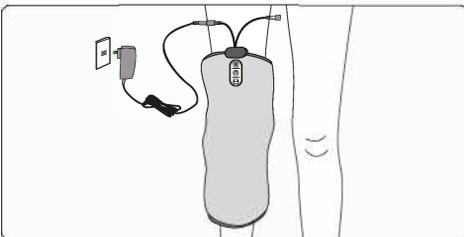


Sólo puede utilizar un masajeador de rodillas. Póngase la rodillera con el panel de control, conecte el cable de alimentación al cable de la rodillera, y luego enchufe el adaptador en una toma de corriente.

## Panel de Controles

**Encendido:**  
Pulse el botón para encender o apagar el dispositivo

**Masaje por vibración:**  
Presione para cambiar el modo entre el Modo 1 y el Modo 5. El masaje por vibración se puede activar de forma independiente. Pulse el botón durante 2 segundos para activar la vibración.

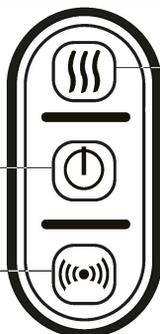

**Calor:** Pulse para activar la función de calor, puede pasar por los ajustes Alto, Bajo y apagado. El calor puede encenderse de forma independiente.

- El dispositivo se apagará automáticamente después de 30 minutos de duración del temporizador.
- No instale o utilice el dispositivo en un baño o áreas similares húmedas o mojadas.
- Ensure the device is not exposed to direct sunlight or placed near sources of heat.

### Nota:

Este producto produce un calor de calentamiento. Por favor, espere unos minutos para alcanzar la temperatura máxima. La temperatura máxima: aproximadamente 55°

**SERVITECH**

SERVICIO TÉCNICO OFICIAL GADNIC  
[www.servitech.com.ar](http://www.servitech.com.ar)

☎ 11 6260 1114 (sólo texto)  
[serviciotecnico@servitech.com.ar](mailto:serviciotecnico@servitech.com.ar)

# Instrucciones de seguridad



Lea atentamente las siguientes instrucciones antes de poner en marcha su de su aparato de masaje para garantizar un funcionamiento sin problemas y una funcionamiento. Conserve este manual de instrucciones para su uso posterior.

- \* NO mojar, NO usar alfileres, nunca quitar la tapa.
- \* Este artículo NO ES UN JUGUETE. Es necesaria una estrecha supervisión cuando este en uso
- \* Este aparato no debe dejarse desatendido cuando está enchufado.
- \* Las posibles reparaciones sólo pueden ser realizadas por personal experto autorizado.
- \* El uso inadecuado y las reparaciones no autorizadas no están permitidos por razones de seguridad y conllevan la pérdida de la garantía.
- \* No toque nunca el enchufe con las manos mojadas.
- \* Evite el contacto del aparato con el agua, las altas temperaturas y la luz solar directa.
- \* NO utilice cables, enchufes o tomas de corriente dañados.
- \* Si los enchufes o cables están dañados, deben ser sustituidos por el fabricante, un representante del servicio técnico o por personal cualificado.
- \* En caso de mal funcionamiento, desconecte inmediatamente de la red eléctrica.
- \* El uso indebido o incorrecto excluye cualquier responsabilidad por daños.
- \* No lo utilice mientras duerme.
- \* Para evitar una estimulación excesiva de los músculos y los nervios, el tiempo de tiempo de masaje recomendado no debe superar los 30 minutos cada vez.
- \* No utilice este producto para tratamientos médicos.



## **POR FAVOR LEA !**

- NO lo utilice si tiene trastornos de la piel, heridas abiertas o zonas inflamadas
- Hay que abstenerse de cualquier masaje -incluso de manos- durante el embarazo o si se presentan una o más de las siguientes dolencias en el y hinchazones, y cáncer. Se recomienda consultar a un médico antes de someterse a un masaje para el tratamiento de dolencias y enfermedades.
- Si usted depende de ayudas eléctricas, por ejemplo, marcapasos, asegúrese de consultar a su médico antes de recibir un masaje.
- El material de embalaje suministrado no debe utilizarse como juguete

## instrucciones de mantenimiento y limpieza

1. No lavar en lavadora ni sumergir el producto o el adaptador en agua.
2. Desconecte siempre antes de limpiar y retire el adaptador de la toma de corriente con las manos limpias y secas.
3. El aparato debe limpiarse con un paño ligeramente húmedo y secarse bien. No limpie el producto con alcohol o productos químicos fuertes como diluyente.
4. No sobrecargar las correas elásticas
5. Manténgase alejado del calor, el fuego o la exposición a la luz solar directa.
6. Guarde el masajeador en un lugar fresco y seco, fuera del alcance de los niños.
7. Evite el contacto con bordes afilados u objetos puntiagudos que puedan cortar o perforar la superficie del tejido

## GUÍA PARA LA RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Falla	Solucion
El Dispositivo se apaga de repente	El aparato se apagará cuando el temporizador se agote. Continúe utilizando el aparato pulsando el botón 'Power'. Si el aparato ha funcionado durante 30 minutos, vuelva a encenderlo después de descansar la unidad durante 15 minutos.
	El dispositivo tiene un sistema de protección contra el sobrecalentamiento se activa, el dispositivo se apagara para su seguridad. Por favor deje descansar el dispositivo aproximadamente 15-30mins antes de reiniciar
Fallo en el arranque del dispositivo	Compruebe si el aparato ha sido utilizado durante más de 30 minutos. Si es así, deje que el dispositivo descanse durante 15 minutos antes de continuar. El dispositivo puede necesitar más tiempo para enfriarse en entornos más cálidos.
	Verifique si la fuente esta correctamente enchufada.
	Compruebe si la salida del adaptador está conectada al cable de entrada de alimentación del aparato.



