

GADNIC

MANUAL DE USUARIO

MASAJEADOR DE CINTURA *BONSAI*



MASAJ168

Instrucción

Gracias por comprar el cinturón calefactor con masaje. Con un cuidado normal y un tratamiento adecuado, le proporcionará años de servicio fiable.

Lea atentamente todas las instrucciones antes de utilizar este producto.

CARACTERÍSTICAS

- Incorpora 4 motores de masaje por vibración
- 3 modos de masaje preprogramados
- 2 niveles de intensidad de vibración
- Terapia de calor relajante opcional
- Temporizador automático de 30 minutos
- Funciona con un mando a distancia con cable




DATOS TÉCNICOS

Medidas:	110 x 21 Cm
Peso:	800 gramos
Tensión:	Entrada: AC 100-240V ~50/60Hz Salida: 12VDC 2,5A
Potencia nominal:	máx. 30Watt
Tiempo de ejecución automático:	30 minutos

Instrucciones de funcionamiento y control

1. Conecte el cable adaptador al cable correspondiente del dispositivo.

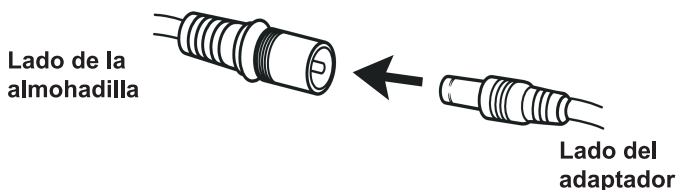

2. Enchufe el adaptador doméstico en una toma de corriente.
3. Encienda el aparato con el mando (instrucciones en la página 5).
4. Si es necesario, añada la pieza de extensión para ajustar la longitud que le convenga.



- Este dispositivo se apagará automáticamente después de que el temporizador de 30 minutos se agote.
- No instale ni utilice el masajeador en un cuarto de baño o en zonas similares húmedas o mojadas.
- Para su propia seguridad, equipamos el masajeador con una protección contra el sobrecalentamiento. El calor se crea en los motores cuando se somete a una gran tensión y a una presión excesiva. Antes de que esto pueda crear cualquier riesgo y después de un tiempo de funcionamiento de 30 minutos, el masajeador se desconectará automáticamente y sólo se podrá volver a conectar después de un tiempo de inactividad adecuado.
- Del mismo modo, debe permitir a su cuerpo algunos períodos de descanso. Para no forzar demasiado los músculos, se recomienda no superar un masaje continuo de 30 minutos.

Instrucciones de seguridad



Lea atentamente las siguientes instrucciones antes de poner en marcha su aparato de masaje para garantizar un funcionamiento sin problemas y una eficiencia óptima. Conserve este manual de instrucciones para su uso posterior.

- El aparato de masaje se ajusta a los principios técnicos reconocidos y a las últimas normas de seguridad.
- No mojar, no usar alfileres, nunca quitar la tapa.
- Este artículo NO ES UN JUGUETE. Es necesaria una estrecha supervisión cuando este aparato sea utilizado por, sobre o cerca de niños o personas discapacitadas.
- Este aparato no debe dejarse nunca sin vigilancia cuando esté enchufado.
- Las posibles reparaciones sólo pueden ser realizadas por personal especializado autorizado. El uso inadecuado y las reparaciones no autorizadas no están permitidos por razones de seguridad y conllevan la pérdida de la garantía.
- No toque nunca el enchufe con las manos mojadas.
Evite el contacto del aparato con el agua, las altas temperaturas y la luz solar directa.
No utilice cables dañados, enchufes o tomas de corriente defectuosas.
No utilice nunca el aparato debajo de mantas en las que se pueda bloquear la circulación de aire.
Si los enchufes o los cables están dañados, deben ser sustituidos por el fabricante, por un representante del servicio técnico.
- En caso de mal funcionamiento, desconecte inmediatamente de la red eléctrica.
- No lo utilice si tiene trastornos cutáneos, heridas abiertas o zonas inflamada.
- El uso indebido o incorrecto excluye cualquier responsabilidad por daños.
- No utilice este aparato mientras conduce.
- No lo utilice mientras duerme.
- No utilice este producto para tratamientos médicos.
- Para evitar una estimulación excesiva de los músculos y los nervios, el tiempo de masaje recomendado no debe superar los 30 minutos cada vez.
- Hay que abstenerse de cualquier masaje -incluso el de las manos- durante el embarazo o si se dan una o varias de las siguientes dolencias en la zona del masaje: lesiones recientes, enfermedades trombóticas, todo tipo de inflamaciones e hinchazones y cáncer. Se recomienda consultar a un médico antes de someterse a un masaje para el tratamiento de dolencias y enfermedades.
- Si usted depende de ayudas eléctricas, por ejemplo, marcapasos, asegúrese de consultar a su médico antes de recibir un masaje.
- El material de embalaje suministrado no debe utilizarse como juguete.


Instrucciones del control a distancia

ON/OFF

Pulse para encender
o apagar el cinturón
de masaje

MODE

Pulse para cambiar
el modo de masaje
entre M1 y M3

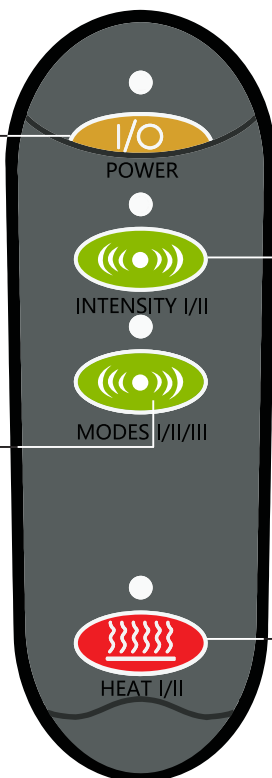

INT

Pulse para ajustar la
intensidad del masaje,
en el nivel Bajo o Alto

HEAT

Pulse para ajustar el
calor al nivel I o II

Instrucciones de cuidado y limpieza

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

- Desenchufe siempre el aparato antes de limpiarlo. No toque nunca el enchufe con las manos mojadas.
- Antes de limpiarlo, deje que la unidad se enfríe.
- Limpie la unidad con un paño suave y seco. No utilice paños que contengan ningún tipo de líquido químico o alcohol y disolventes.
- No sumerja nunca ninguna parte de la unidad en líquido.
- Si la unidad está especialmente sucia, siga las siguientes instrucciones:
 1. Humedezca un paño en agua o en una solución de detergente suave al 3%-5%.
 2. Limpie las zonas sucias con el paño húmedo.
 3. Limpie las zonas con un paño suave y seco.
 4. Espere a que la unidad esté completamente seca antes de utilizarla.
- Coloque el masajeador en un lugar seguro, seco y fresco. Evite el contacto con bordes afilados u objetos puntiagudos que puedan cortar o perforar la superficie.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Problema	Solución
El dispositivo se desconecta repentinamente.	El dispositivo puede haber estado en uso durante 30 minutos. La función Auto-shutoff está activada. Continúe utilizando el aparato pulsando el botón 'On' después de dejarlo en reposo durante 15 minutos.
	Función de protección contra el sobrecalentamiento activada. El aparato está desconectado para su seguridad. Por favor, deje descansar el dispositivo durante 15-30 minutos antes de reiniciarlo.
El dispositivo no se inicia.	Compruebe si el dispositivo ha sido utilizado durante más de 30 minutos. Si es así, deje que el dispositivo descanse durante 15 minutos antes de continuar. El dispositivo puede necesitar más tiempo para enfriarse en entornos más cálidos.
	Compruebe si la salida del adaptador está conectada al cable de entrada de alimentación del aparato.

Garantía

Si tiene algún problema sobre el producto, no dude en ponerse en contacto con nosotros.

Atención!!

No se concederá ninguna garantía a las causas de fuerza mayor y de origen humano de un producto defectuoso, como el cuidado inadecuado, el deterioro personal y los daños intencionados, etc.



SERVICIO TÉCNICO OFICIAL GADNIC
www.servitech.com.ar

📞 11 6260 1114 (sólo texto)
serviciotecnico@servitech.com.ar