

2. Coloque la almohadilla de masaje en la parte del cuerpo deseada.
3. Pulse el interruptor para encender el aparato.
4. Seleccione el modo.
5. Ajuste del nivel de salida.
6. El tiempo de trabajo es de 12 minutos/cada uno.
7. Pulse el botón "OFF/DEC" hasta que la luz se apague, cuando no se mueva durante el tiempo de trabajo.

PRECAUCIONES

1. Limpie los puntos de elevación del cuerpo principal y otras partes de la carcasa con un paño húmedo con un material de limpieza neutro y luego limpie con un paño seco.
2. No almacenar en un lugar caliente o frío o húmedo.
3. La suciedad en el parche afectará a la eficacia de uso, ect.



Por favor, enciéndalo con la salida más baja cuando esté empezando.



GADNIC

MANUAL DE USUARIO

Masajeador
Eléctrico Adhesivo



MASAJ171


PARÁMETROS DEL PRODUCTO

Modo de uso	A-F (6 modos)
Frecuencia	1~100Hz
Trabajo	12 minutos (por tiempo de instalación)
Salida	máximo 9.8mA

CARACTERÍSTICA DEL PRODUCTO

1. La terapia de baja frecuencia se realiza mediante el ritmo y la propulsión suave.
La baja frecuencia es una corriente especial con un ritmo regular o de detención, en función de la potencia y velocidad adecuadas, mediante la cual se trata el cuerpo a bajas frecuencias, creando así un impulso rítmico y categórico en el cuerpo.
La suavidad de las bajas frecuencias tiene el mismo efecto que un masaje con la presión, el pellizco y la percusión de la mano humana.
2. Elección de 6 modos
 - 1) La selección de 6 modos es fácil de operar.
 - 2) Se apagará después de 12 minutos de parar cuando se olvide de apagar la energía.

CÓMO FUNCIONA

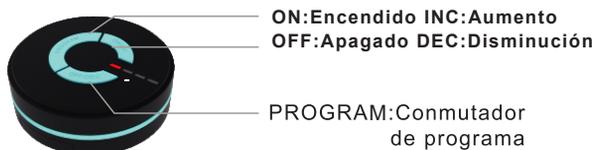

Luz de indicación de modo



Cuando pulsa el botón de encendido "e intensidad creciente", la luz se enciende poco a poco.
Cuando pulsa el botón de "apagado y disminución de intensidad", la luz se atenúa poco a poco.

- Pulse los botones "Encender la luz" y "Subir la luz". "Apagar la luz y bajar la intensidad" se divide en 10 niveles.
- Botón para seleccionar el modo: hay 6 modos disponibles (A-F).
- Tapa de la batería externa: la tapa se puede abrir desde la parte trasera para sustituirla.
- Batería seca.

Procedimiento de funcionamiento

1. Saque el aparato de la caja.