


# GADNIC

**MANUAL DE USUARIO**

**MASAJEADOR  
CERVICAL Y LUMBAR  
ROBLE**

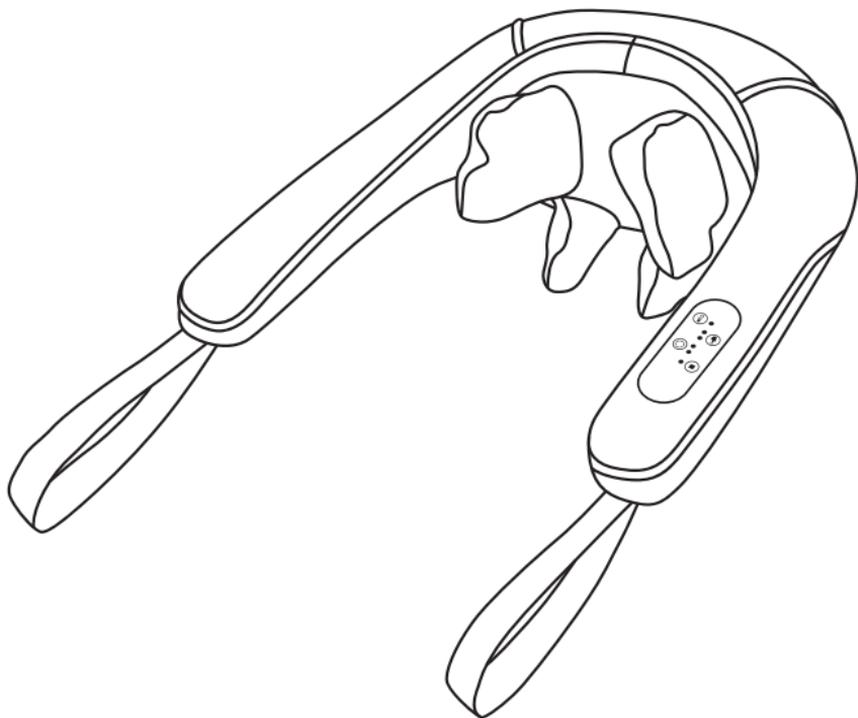

MASAJ26M

## Medidas de Seguridad

1. Si presenta la siguiente situación, consulte a su médico, por favor.  
Si utilizó marcapasos o un equipo similar.  
Si padece una enfermedad cardíaca.  
Esqueleto frágil o dañado, especialmente el hueso de la espalda.  
Después de una operación quirúrgica.  
Durante el embarazo o sólo el parto.  
Con tumor maligno.  
Con osteoporosis.  
Con problemas de circulación sanguínea o trombosis.  
Con una infección aguda.  
Con una infección de la piel.  
Si está recibiendo tratamiento o terapia complementaria.  
Con presión sanguínea anormal.  
La columna vertebral esté dañada por accidente o enfermedad.
2. No tire de la cremallera en ningún estado y no toque los componentes internos.
3. Los interruptores electrónicos no se lavan con agua.
4. Cuando el producto se encuentre encendido, debe ser con su presencia.  
De no usarlo durante mucho tiempo o dejarlo fuera, desenchufe el cable de alimentación.
5. No utilice un cable de alimentación o un enchufe dañado.
6. No rocíe aceite volátil, pintura, pesticidas.
7. No lo use en lugares húmedos como baños.
8. No lo exponga al sol por un tiempo prolongado, de lo contrario, puede provocar fallas fácilmente.
9. No reforme ninguna de las estructuras de la máquina o piezas de repuesto.
10. No lo coloque cerca del fuego y combustibles

## Instrucciones de Uso

1. Conecte el adaptador a la fuente de alimentación y conecte el adaptador a la toma de CC del masajeador de cuello y hombros.
2. Presione el botón "AUTO" o el botón "MOVIMIENTO MANUAL" para ingresar al estado de inicio.
3. Presione el botón "AUTO" para alternar entre el modo "RELAX" y el modo "DEPP SHOTTING", y el indicador para el modo correspondiente se ilumina.
4. Presione el botón "MOVIMIENTO MANUAL" para cambiar entre el modo "CONTINUACIÓN" y el modo "PULSACIÓN", y el indicador para el modo correspondiente se ilumina.
5. En el modo "AUTO" o "MOVIMIENTO MANUAL", la función de calor está desactivada. Presione el botón "HEAT", la función de calor se enciende y la luz indicadora se enciende; presione nuevamente, la función de calor se cierra y la luz se apaga.
6. El masajeador se apagará automáticamente después de 15 minutos. Si necesita detenerse durante el masaje, presione el botón "OFF".
7. Después de su uso, debe encender el producto presionando el botón "OFF".

## Panel de Control y Zonas de Uso



**OFF**

**MODOS AUTOMÁTICOS**

**MANUAL**

**FUNCIÓN CALOR**



Hombros



Cuello



Tiras para brazos



Abdomen



Cintura



Piernas

## Notas

1. El producto tiene la función de calentamiento, debe prestar atención a la persona insensible al calor;
2. Los niños menores cuando usen este producto deben tener un adulto en el costado;
3. Úselo si siente alguna molestia o anormal, deje de usarlo inmediatamente;
4. Después del uso, apague el interruptor, desenchufe el cable de alimentación;
5. Beber 500 ml de agua o té caliente después del masaje para promover el metabolismo corporal;
6. Si el cable de alimentación está dañado, debe usar un cable especial o comprarlo al fabricante o al departamento de mantenimiento para reemplazar

## Almacenamiento y Preservación

1. Corte la corriente cuando no esté en uso;
2. No sumerja agua u otro líquido en el producto;
3. Limpie el producto con un paño suave;
4. Si el producto está sucio, limpie con un paño suave humedecido con agua o un detergente neutro, limpie el polvo con un paño seco;
5. No limpie el producto con agua;
6. Almacene el producto en un lugar fresco y seco, no exponga el producto directamente a la luz solar, altas temperaturas, niebla o ambientes húmedos.