

Utilice el enchufe y el cable de alimentación

- 1. Compruebe que el voltaje cumple con las especificaciones del producto.
- 2. No utilice otros accesorios similares en lugar de los accesorios de este producto.
- 3. No toque la fuente de alimentación ni el enchufe con las manos mojadas para evitar un funcionamiento incorrecto o una acumulación eléctrica.
- 4. No cargue el producto si la tensión es inestable.

No utilice este producto cuando se den las siguientes condiciones

- 1. El masajeador no está en condiciones, y el dispositivo de masaje está dañado o estropeado.
- 2. En caso de dolor grave o intenso durante el masaje, deténgalo inmediatamente y acuda a un médico.
- 3. En caso de que se confirme que la causa es el producto, envíelo al centro de servicio de reparaciones para que lo reparen.

Instrucciones de seguridad importantes

- Antes de utilizar este producto, lea todo el material y siga las siguientes instrucciones.
- 1. No coloque el producto en el baño o en un lugar húmedo.
 - 2. No deje el masajeador a la luz directa del sol o a altas temperaturas durante mucho tiempo.
 - 3. Si el producto es utilizado por niños, discapacitados físicos o mentales o minusválidos, debe ser acompañado y guiado por el tutor.
 - 4. Por favor, deseché este producto de acuerdo con las normas de protección medioambiental vigentes en su país.

No apto para el uso de este producto

- Si padece alguna de las siguientes afecciones, consulte a su médico antes de utilizarlo.
- 1. Estar siendo examinado por un médico o tener molestias físicas
 - 2. Los pacientes con aguda, repentina paciente
 - 3. Consumidores de alcohol
 - 4. Menores y adolescentes, niños

Uso de carga de la batería

- 1. En condiciones normales de uso, la vida útil de la batería recargable es de 2500 veces de carga y descarga.
 - 2. Cuando la batería recargable no se utiliza durante mucho tiempo, la vida de la batería se acorta.
- Se recomienda cargarla al menos 12 veces al mes.

Los productos que ha adquirido se fabrican bajo estrictos controles de calidad y un proceso de inspección estándar.
Esta tarjeta de garantía se refiere al funcionamiento del producto en condiciones normales de uso.

Terminos de Garantía

- 1. A partir de la fecha de compra, si hay un mal funcionamiento en condiciones normales de uso, usted puede disfrutar de un año de servicio de garantía gratuita a excepción de los daños (tales como; desmontaje de piezas, manipulación, etc)
- 2. En caso de pérdida de la tarjeta de garantía, guárdela en un lugar seguro.
- 3. No hay servicio de garantía gratuito debido al mal funcionamiento causado por el uso inadecuado de los consumidores.
- 4. Si el producto ha caducado dentro del periodo de garantía, si la empresa aún dispone de accesorios, se le dará servicio de garantía, y se dictarán ciertos pases y gastos de gestión.

SERVITECH

SERVICIO TÉCNICO OFICIAL GADNIC
www.servitech.com.ar

☎ 11 6260 1114 (sólo texto)
serviciotecnico@servitech.com.ar

GADNIC

MANUAL DE USUARIO
MASAJEADOR DE CUELLO



MASAJ30X

Gracias por elegir este producto.
Lea atentamente este manual antes de utilizarlo.
Consérvelo en buen estado para futuras consultas.

Etilidad del producto

- | | |
|---|---|
| Aliviar la fatiga y el dolor muscular, Liberar la tensión | Favorece la circulación sanguínea |
| Promover la relajación física y mental | Reducir la fatiga y el cansancio |
| | Mejorar el estado subcutáneo de la columna cervical |

Descripción de los parámetros

- | | |
|--|---------------------------|
| Nombre del producto: Masajeador de vértebra cervical | Tensión de carga: DC 5.0V |
| Potencia de retardo: 3,7w | Peso neto: 495g |
| Temporización automática: unos 10 min | |

Método de utilización

- 1. Pulse el botón de encendido durante 2 segundos, y el masajeador se inicia y entra en estado de funcionamiento.
- 2. Pulse cíclicamente las teclas "M" y cambie de modo: Amasamiento y Masaje hacia delante y hacia atrás.
- 3. En el modo de masaje de amasamiento, pulse el botón "sl" para activar el modo de calentamiento infrarrojo.
- 4. Cuando deje de utilizarlo, mantenga pulsado el botón de encendido durante 2 segundos para apagarlo.
- 5. El masajeador funciona con una batería de litio incorporada. cargue el masajeador antes de utilizarlo.
- 6. Cuando lo cargue, utilice el cable de alimentación de este producto para comprobar si la conexión eléctrica es normal.
- 7. Durante la carga, el voltaje puede ser inestable, y el producto está prohibido durante la carga.
- 8. Se tarda aproximadamente 2 horas para cargar, y el enchufe está desenchufado después de estar completamente cargada.
- 9. Este producto incluye accesorios sólo para su uso con esta máquina.


Problemas comunes y manejo

Numero Serial	Problema	Razon	Solucion
1	El masajeador no puede arrancar	agotado durante el tiempo de espera	puede arrancar normalmente después de la carga.
2	El masajeador deja de funciona	se ha completado el programa de masaje o se ha agotado la energía de la batería	Vuelva a abrir el interruptor


Si sigue habiendo una anomalía en el proceso anterior, póngase en contacto con su distribuidor local para obtener servicio de reparación.

Configuración del producto

Su almohada en forma de U en hasta cable de carga, manual de instrucciones certificado, tarjeta de garantía

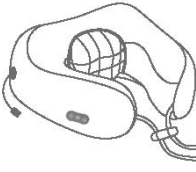


Tipo de funcionamiento

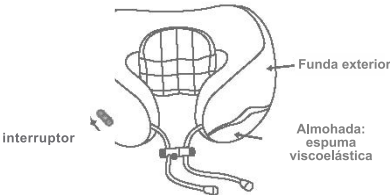


Diseño con hebilla de cuerda



- Pulse el botón de desbloqueo
- Presione hacia arriba y hacia abajo para aflojar

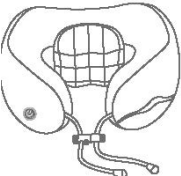

Arranque con un botón

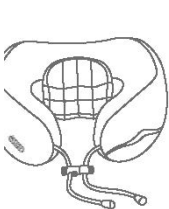


Arranque con un botón

Positivo/reverso

Enlace fuerte y enlace débil

Luz Roja

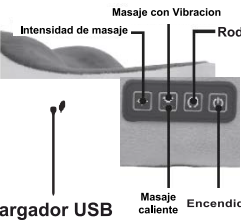

Cargador USB

Masaje caliente

Encendido

RZH-4 RZH-4T

Explicación del funcionamiento de las teclas De derecha a izquierda

- 1: Pulse y mantenga pulsada la tecla durante 2 segundos, se activarán completamente con una tecla; pulse y mantenga pulsada durante 2 segundos de nuevo para apagar. Cuando está encendido y funcionando, este producto está diseñado para durar 15 minutos.
- 2: En el estado de encendido, pulse el botón B una vez y el masaje de amasamiento girará.
El masaje de amasado girará en sentido inverso; Pulse el botón B 2 veces y la función de amasado se detendrá. el botón B 3 veces, la función de amasado vuelve a funcionar.
- 3: En el estado de encendido, pulse el botón C una vez para desactivar la función de masaje por vibración, para desactivar la función de masaje por vibración; pulse el botón C dos veces para desactivar la función de compresión caliente; pulse el botón C 3 veces, y la función de masaje por vibración volverá a funcionar. vibración se reanuda; pulse el botón C 4 veces y la función de compresión en caliente con luz roja se reanudará, se apaga Pulse la tecla C 5 veces, vibración + luz roja caliente compresión + masaje sincronizados
- 4: En condiciones de funcionamiento de encendido, pulse la tecla D una vez, la fuerza de amasado del motor se ajusta a velocidad lenta; pulse la tecla D dos veces, la fuerza de amasado del motor se ajusta a velocidad rápida; pulse la tecla D tres veces, la fuerza de amasado del motor se ajusta a velocidad media, Pulse la tecla D 4 veces, la fuerza de amasado del motor se ajusta a rápida; Pulse la tecla D 5 veces, la fuerza de amasado del motor se ajusta a "rápida"; pulse la tecla D 6 veces, la fuerza de amasado del motor se ajusta a "lento".
- 5: El indicador de carga está oculto, Conecte el cable de carga USB. Después de enchufado, la luz roja se encenderá en estado de carga; cuando la batería esté completamente cargada, la luz roja se encenderá en estado de carga.
- 6: Cuando esté completamente cargada, Automáticamente pasará a luz azul. El tiempo de carga es de unos 240 minutos.