
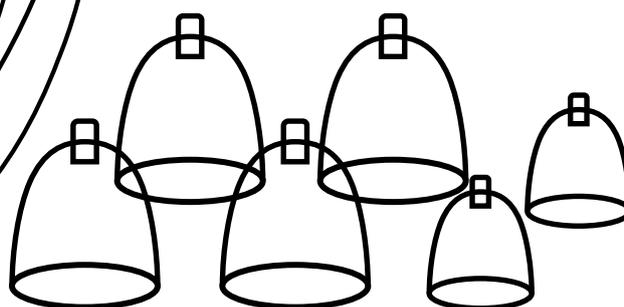


# GADNIC

## MANUAL DE USUARIO

### EQUIPO DE VACUMTERAPIA *VACUMFIT*

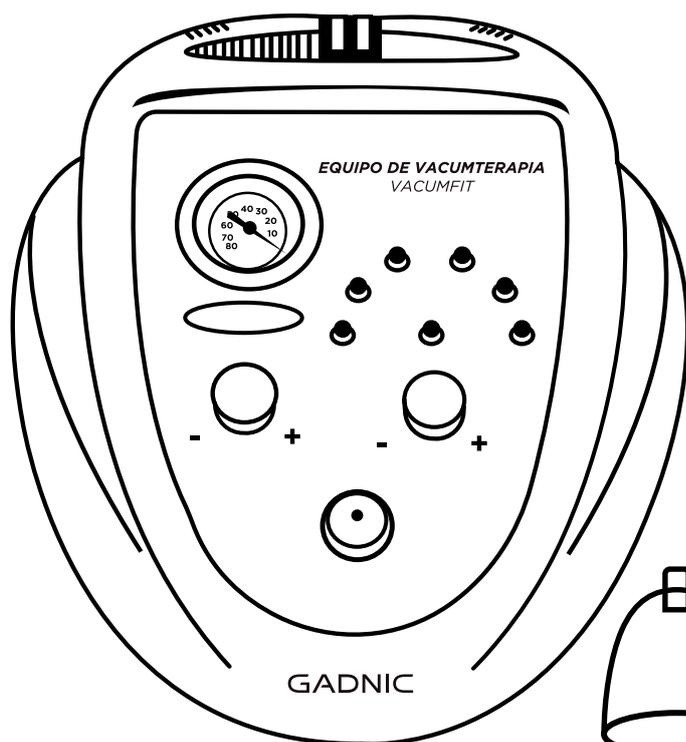

**VACUM001**

## Prefacio

### I. Función y teoría

La bomba de vacío especialmente diseñada mejora rápidamente el tamaño y la forma de los senos sin ningún dolor ni problemas de salud.

No requiere inyecciones de silicona, ni empujar y rellenar el sujetador.

Le proporcionará unos pechos naturales y bonitos acordes con su fisiología sin necesidad de inyecciones de silicona y sin necesidad de empujar y rellenar los sujetadores.

1. La bomba de vacío absorbe las partículas de grasa y los líquidos y permite que penetren en el tejido y las células mamarias, dando a los senos más desarrollados.

2. Drena las toxinas y purifica el sistema linfático, poros, reconstruye la piel, mejora la microcirculación, aumenta la elasticidad de los senos y levanta los músculos caídos, contrarresta las arrugas, activa la piel, elimina las bolsas bajo los ojos y la papada, elimina las arrugas, la dilatación capilar y trata la subluxación.

3. Estimula la glándula pituitaria para que segregue hormonas, refuerza la elasticidad y fibras de los tejidos musculares, restaurando la elasticidad de los senos

y suavidad, levanta y desarrolla el pecho, mejora la forma de la mama, dejar para mejorar el pezón de succión y estabilizar el efecto del tratamiento.

4. Transformación de ácidos grasos, seguro y eficaz.

Elimina el exceso de grasa, reduce el peso, adelgaza el cuerpo, elimina el exceso de grasa en el abdomen, mejora la forma de las piernas, tensa la piel, se puede utilizar en exfoliantes, tratamientos puntuales, drenaje linfático, trata la celulitis, mejora los glúteos y consigue un contorno corporal perfecto.

## **Indicaciones sobre:**

### **(I) Desarrollo del pecho**

1. Elegir las copas de acuerdo con las necesidades de la clienta y conectar las copas a la toma del sacaleches.

2. Tener a la cliente medio dormida para que los pechos estén estirados y cubiertos con una sábana de plástico, no utilizar en aquellas con pechos hundidos.

3. Gire el mando de presión de aire de la copa hasta el punto más alto y el mando de intensidad hasta el punto más bajo, después pulse "Select Inspiration" y gire el mando de ritmo hasta "Levantamiento de senos" (o pulse alternativamente Ritmo corporal1, Ritmo corporal 2 y Levantamiento de senos).

4. Colóquese la copa sobre los pechos de modo que estén en estrecho contacto con la copa. Para personas con diferentes tamaños de pecho, se recomienda colocar el instrumento en el lado más pequeño durante 5 minutos antes de aplicar ambos lados juntos.

5. Ajuste el mando de intensidad de "débil" a "fuerte" y, a continuación, ajuste la presión del aire hasta que el cliente se sienta cómodo.
6. Transcurridos 20 minutos, gire el mando de la presión del aire al punto más alto, gire el mando de la intensidad al punto más bajo, retire las copas y aplique la Crema elevadora de Pecho.

## **(II) Terapia de masaje rítmico (dedo móvil)**

1. Seleccione el tipo adecuado de "dedo en movimiento" y conecte la ventosa al orificio de succión con una manguera.
2. Gire el mando de presión de aire de la ventosa al punto más alto y el mando de intensidad al punto más bajo, después pulse "Encendido" y "Selección de función" para seleccionar la inhalación y gire el mando de ritmo a "Ritmo facial" o "Ritmo corporal" (o pulse alternativamente Ritmo corporal 1, Ritmo corporal 2, Ritmo facial I y 2).
3. Ajuste la perilla de intensidad de "débil" a "fuerte" y luego ajuste la presión de aire hasta que el cliente se sienta cómodo.
4. Transcurridos 20 minutos, gire el mando de presión de aire hasta el punto más alto y gire el mando de intensidad hasta el punto más bajo y retire el dedo móvil.

## **(III) Acabado esmerilado (taza de calabaza)**

1. Seleccione el tipo de calabaza adecuado y conecte la calabaza a la toma de aspiración con una manguera.
2. Gire el mando de presión de aire hasta el punto más alto de la taza y el mando de intensidad hasta el punto más bajo, después pulse "Encendido" y "Selección de función" para seleccionar Inspiración y gire el mando de ritmo hasta "Terapia".

3. Gire el mando de intensidad de "débil" a "fuerte" y, a continuación, ajuste la presión del aire hasta que el cliente se sienta cómodo.

#### **(IV) Copa de aire (copa de cuello largo)**

1. Seleccione una ventosa adecuada y conéctela al puerto de succión con una manguera.
2. Gire el botón de presión de aire de la ventosa hasta el punto más alto; gire el botón de intensidad hasta el punto más bajo y, a continuación, pulse el botón "Encendido" y "Selección de función" para seleccionar la succión.
3. Gire la perilla de intensidad de "débil" a "fuerte", luego ajuste la presión de aire hasta que el cliente se sienta cómodo.

#### **(V) Precaución:**

1. Mantenga la máquina nivelada para evitar sacudidas y golpes.
2. Apague y desenchufe la máquina cuando vaya a limpiarla.
3. Las personas con cardiopatías graves, diabetes y hepatitis no son aptas para el tratamiento con esta máquina.
4. El tratamiento no es adecuado para mujeres durante la menstruación y el embarazo.
5. El tiempo de fregado debe limitarse a 30 minutos y la intensidad debe ser la adecuada para que el cliente se sienta cómodo.

6. No utilice la máquina media hora antes o después de una comida. El tratamiento no es adecuado para personas con el estómago vacío, fatiga, falta de sueño o debilidad.
7. El tratamiento no es adecuado para personas con trastornos sanguíneos y hemorragias espontáneas, como hemofilia, púrpura y leucemia.
8. Las personas con alergias cutáneas graves o infestación por ácaros no son aptas para el tratamiento.
9. El tratamiento no es adecuado para personas con tumores cutáneos malignos o úlceras cutáneas parciales, fracturas, varices o pérdida parcial de elasticidad de la piel. Se debe tener especial cuidado con las personas ebrias, sedientas o hambrientas.
10. Limpie el filtro con regularidad para garantizar la eficacia y longevidad de la máquina.
11. Al combinar con aceites esenciales, no aplique demasiado aceite esencial o cosmético, ya que podría dañar la máquina.
12. Ajuste la presión de aire al punto más bajo después de utilizar la máquina.
13. No realice tratamientos de drenaje linfático cuando padezca linfadenitis.
14. El tratamiento no es adecuado para pacientes con infarto de miocardio, empeoramiento de flebitis y tumores venosos.
15. No aplicar el tratamiento durante las tres semanas posteriores a una intervención quirúrgica en caso de hipertiroidismo y mujeres embarazadas.

16. El lavado no es adecuado para pacientes con cardiopatías graves, diabetes y hepatitis.
17. El lavado no es adecuado para mujeres que estén menstruando. Las mujeres embarazadas pueden someterse a un tratamiento de lavado suave para mejorar la circulación sanguínea.
18. El tiempo de exfoliación no debe ser demasiado largo, una media hora es suficiente, y la fuerza debe ser tan fuerte como el cliente se sienta cómodo.
19. No realice el tratamiento antes o media hora después de las comidas, o si está en ayunas, cansado, sin dormir o débil.
20. Después del tratamiento exfoliante, pruebe un vaso de agua tibia seguido de un té de hachís caliente para potenciar el efecto.
21. Es posible que sienta un poco de dolor durante uno o dos días después del tratamiento exfoliante, esto es normal y desaparecerá por sí solo.

# TARJETA DE GARANTÍA

NOMBRE : \_\_\_\_\_

FECHA DE COMPRA : \_\_\_\_\_

DIRECCIÓN: \_\_\_\_\_

TEL: \_\_\_\_\_

E-MAIL: \_\_\_\_\_

Nº MODELO: \_\_\_\_\_

Nº DE SERIE: \_\_\_\_\_

DISTRIBUIDOR: \_\_\_\_\_

(Para los términos de la garantía, consulte los términos detallados en el manual)

**SERVI  
TECH**

SERVICIO TÉCNICO OFICIAL GADNIC  
[www.servitech.com.ar](http://www.servitech.com.ar)

📞 11 6260 1114 (sólo texto)  
[serviciotecnico@servitech.com.ar](mailto:serviciotecnico@servitech.com.ar)