


(5) Lesión de tejidos blandos

Síntoma: Hinchazón parcial, dolor y limitación de movimientos causados por heridas en los ligamentos musculares, etc. Miembros superiores

Acupuntos seleccionados: Hegu, Shou sanli, Quchi y acupuntos no fijos.


Acupuntos seleccionados: Yaoyangguan, Weizhong, Dazhui, Yongquan y otros acupuntos no fijos.

Acupuntos seleccionados de los miembros inferiores: Weizhong, Chengshan, Yanglingquan y otros acupuntos seleccionados temporalmente.

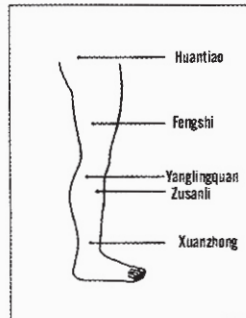

(6) Dolor en el talón

Síntoma: Dolor en el talón, incapaz de mantenerse en pie o de caminar, causado por un traumatismo, un sobreesfuerzo o un espolón. Acupuntos seleccionados: Chengshan, Taixi, Kunlun, Yongquan, Zhaohai y otros acupuntos no fijos.

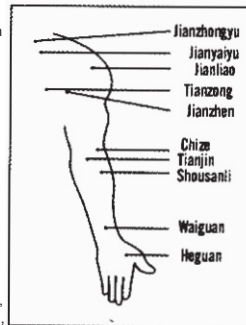

(7) Dolor en el nervio óseo

Síntoma: Dolores de tipo punzante, quemadura o esparcimiento en cintura, cadera, parte posterior del muslo y pantorrilla o limitación de movimientos, el dolor se agrava después de cansarse o resfriarse.

Acupuntos seleccionados: punto de reacción en la cintura, Shengyu, Yaoyangguan, Huantiao, Chibian, Jizhong, Chengshan, Yinmen, Xuanzhong, Fengshi, Yanlingquan.


6. Precauciones

- (1) No utilizar sobre piel lesionada, irritada o con heridas abiertas. Se recomienda consultar con un profesional de la salud antes de usar en personas con problemas cardíacos, trastornos de coagulación, tendencia a hemorragias, embarazo, fracturas, epilepsia o enfermedades graves. Suspender el uso si produce dolor excesivo, mareos o irritación severa. Mantener fuera del alcance de los niños.
- (2) La habitación en la que se realiza el tratamiento con ventosas debe mantenerse caliente y evitar el viento frío. Es aconsejable que beba agua caliente después del tratamiento con ventosas y no lave las marcas de las ventosas en su cuerpo en los 30 minutos posteriores al tratamiento con ventosas.
- (3) Las Petequias (azules, moradas, negras y rojas) que quedan después del tratamiento con ventosas son un tipo de reacción sintomática. Por ejemplo, las Petequias negras indican frío, las Petequias amarillas y rojas indican calor. No se preocupe. Las Petequias desaparecerán 3-5 días después. Es normal encontrar burbujas en el cuerpo durante un cierto periodo después del tratamiento de ventosas, si la burbuja es grande, entonces desinféctala regularmente y pinchela con una aguja desinfectada, luego limpie la burbuja con un tampón y desinféctela con alcohol médico al 75% para prevenir la infección.

GADNIC

MANUAL DE USUARIO

VENTOSAS DE VACÍO

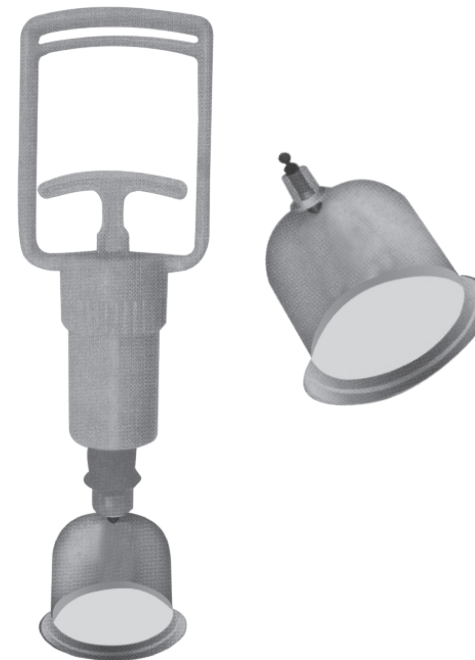

VENTO001 VENTO002

1、Descripción general

Nuestro nuevo instrumento de ventosas sustituye la técnica tradicional de evacuación de aire por ignición por la técnica de purga de aire al vacío, que hace que el aparato de ventosas se absorba en los puntos de acupuntura de la superficie corporal para provocar una contraflujo o una ligera sedimentación de la sangre con el fin de facilitar la fluidez de los flujos en los canales y colaterales, promover la circulación sanguínea, eliminar enfermedades, y por lo tanto hacer florecer el qi y la sangre. El instrumento de ventosas puede producir un potente efecto de campo magnético y es muy eficaz para aliviar el dolor, reducir la hinchazón, disminuir la presión arterial, disminuir la grasa en la sangre, detener la diarrea, la desintoxicación, la prevención de la proliferación de células cancerosas, así como otras eficacias como la eliminación de la grasa acumulada y mantenerse en forma. El instrumento de ventosas puede utilizarse para diversos tipos de tratamientos médicos, como medicina interna, cirugía, ginecología, pediatría, tratamiento de enfermedades cutáneas y enfermedades de los órganos de los cinco sentidos. El nuevo Instrumento de Ventosas, como producto sanitario de alta calidad, tiene ventajas tales como una perspectiva fina, alta seguridad y fiabilidad, alta efectividad, cura desde la superficie hasta la raíz, económico y duradero.

2、Método de aplicación


- (1) Tire de la barra de la válvula superior de la copa para garantizar un flujo de aire suave antes de comenzar el tratamiento;
- (2) Fije la boquilla de purga de aire en la parte superior de la ventosa y tire de la varilla verticalmente unas 4 veces para crear una presión negativa adecuada;
- (3) Una vez finalizado el tratamiento, tire suavemente hacia arriba de la barra de la válvula situada en la parte superior de la ventosa para retirar el instrumento de ventosas;
- (4) Utilice líquido desinfectante para limpiar el instrumento de ventosas después de la aplicación. Nunca lo empape de líquido.

3、Métodos de tratamiento

- (1) Elija las posturas adecuadas, como boca abajo, boca arriba o tumbado de lado, según el estado de su enfermedad.
- (2) Un tratamiento dura entre 10 y 15 minutos, se realiza todos los días o cada dos días, y 7 tratamientos constituyen un periodo de tratamiento. Puede comenzar el siguiente periodo de tratamiento tras un intervalo de 4 días.
- (3) El instrumento de ventosas se puede utilizar de varias formas, como el uso de una sola taza o el uso de un número de tazas al mismo tiempo. Para los ancianos o niños, optar por utilizar menos tazas y tirar de la taza más suavemente y el tiempo del tratamiento debe ser comparativamente más corto, por lo general 5-10 minutos.
- (4) Este producto es especialmente eficaz para curar la insolación (es decir, la terapia de raspado para la insolación) y los acupuntos no fijos (es decir, cualquier punto de dolor por presión del cuerpo).

4、Resfriado común de tipo cálido


Síntoma: Fiebre, dolor distendido en la cabeza, tos, flema espesa, boca seca, angina, pelaje y piel pálida de la lengua.
Acupuntos seleccionados: Dazhu, Quchi, Taiyang (ventosas flash), Fengchi, Tiantu.
El efecto será mejor si se mueve la ventosa sobre el impulso bak du y ambos canales de la vejiga urinaria hasta que la habilidad se vuelva roja antes de ahuecar sobre el acupunto Yu y otros acupuntos relevantes.

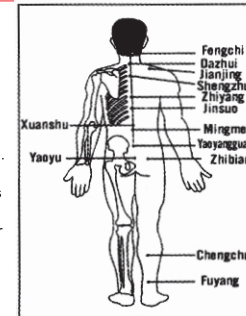

5、Enfermedades de la cirugía ósea

(1) Espondilopatía cervical


Síntoma: Dolor en el cuello, coma, rigidez, limitación de los movimientos o el dolor se extiende al antebrazo, al abductor o se arremolina o se siente mal.
Acupuntos seleccionados: Dazhu, Dazhu, Jianzhongyu, Jianwaiyu, Jianjing, Tianzong, Quchi, Waiguan y Fengchi.

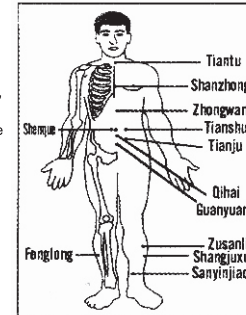

(2) Periartritis escapulo humeral

Síntoma: Dolor / dolor a la presión en el hombro, limitado movimiento más seroso dolor por la noche.


Acupuntos seleccionados: Jianliao, Jianyu, Jianzhen, Tianzong, Dazhui, Fengchi, Quchi y Hegu.

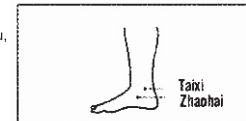

(3) Lumbago crónico

Síntoma: Dolor continuo en la cintura, el dolor se agrava después de cansarse o resfriarse.

Acupuntos seleccionados: Shengyu, Yaoyangguan, Qihai, Mingmen, Huantiao, Weizhong, Yangling quan, Yongquan y otros acupoints no fijos.

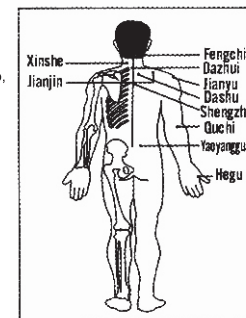

(4) Cuello rígido

Síntoma: rigidez o dolor de cuello causados por una postura inadecuada al dormir o por tensión en el cuello.
Acupuntos seleccionados: Dazhui, Fengchi, Fengmen, Jianjing, Jianzhongyu, Jianwaiyu y otros acupuntos no fijos.

¿Necesitás ayuda?

Ingresa a nuestro soporte técnico
escaneando el QR o escribinos por
nuestros canales oficiales.

 **11 6260 1114 (sólo texto)**
 **serviciotecnico@bidcom.com.ar**
 **www.bidcomservice.com.ar**

Bidcom
SERVICE

