


Care
by GADNIC

MANUAL DE USUARIO
IRRIGADOR BUCAL PORTÁTIL XB1




WATER001

Descripción del producto

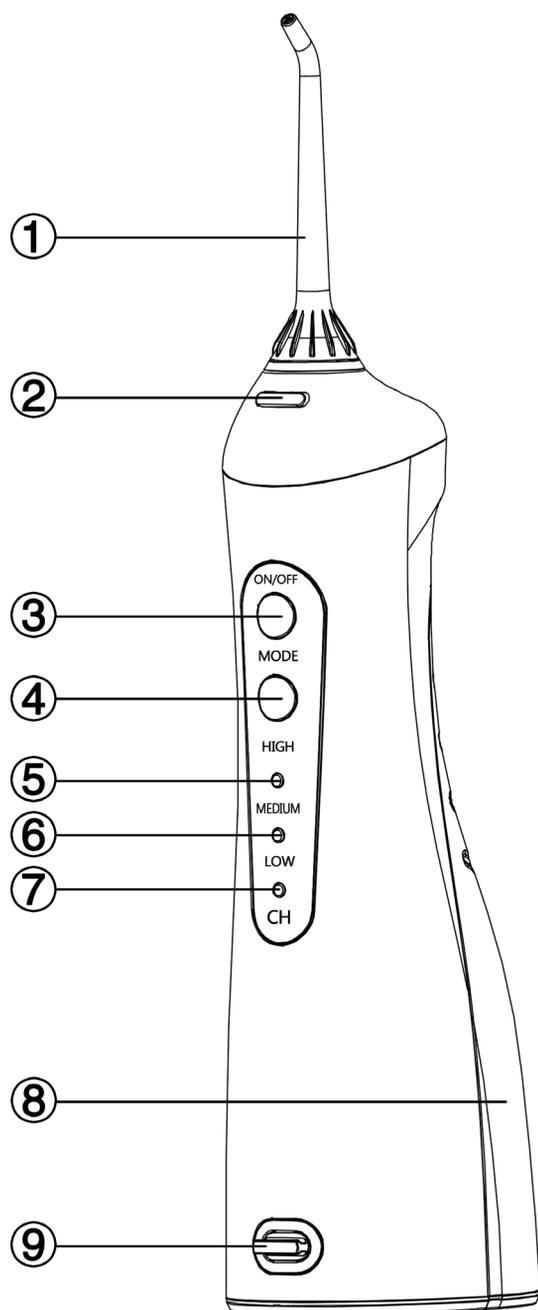


- ① : boquilla ②: botón de extracción de boquilla ③: botón de encendido ④
botón de selección de modo ⑤: Indicador de modo de alta presión ⑥:
Indicador de modo de presión media ⑦: Indicador de modo de presión baja
⑧: compartimento de agua ⑨: puerto de carga

Accesorios

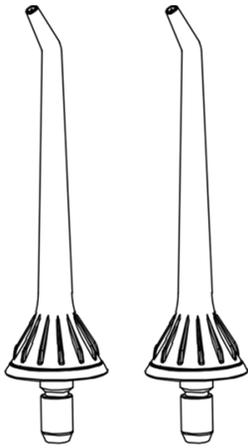

boquillas X 2

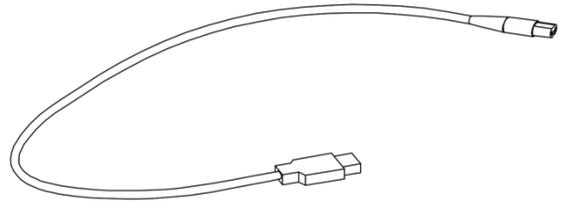

cable cargador X 1

Insertar y remover la boquilla



Fig. 1

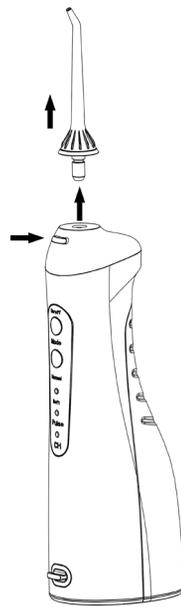


Fig. 2

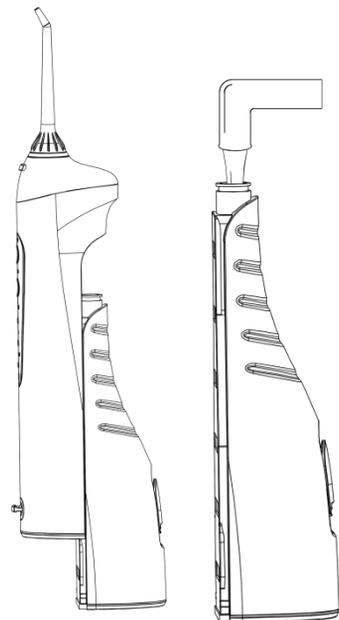


Fig. 3

Inserción de la boquilla

Inserte la boquilla en el orificio de la parte superior del dispositivo. Presione firmemente hasta que la boquilla haga un click.

Extracción de la boquilla

Presione el botón de remoción de la boquilla y remuévala .

Retire el tanque de agua y llénelo con agua.

Retire el tanque de agua y llénelo desde la parte de arriba.

Llenar o vaciar el tanque de agua

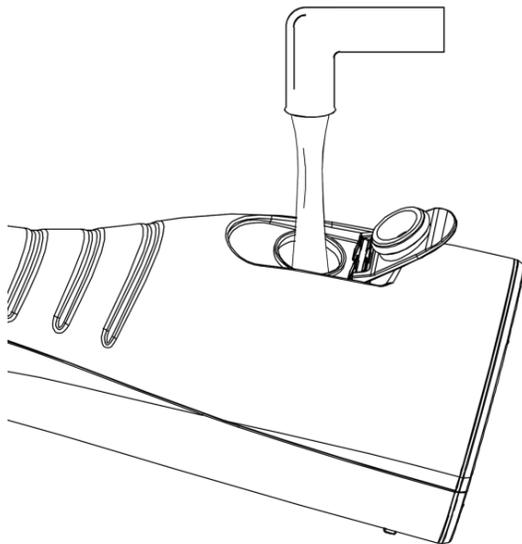


Fig. 4

Para llenar el tanque, coloque el orificio hacia arriba, abra la tapa del orificio de llenado y cargue el tanque con agua.

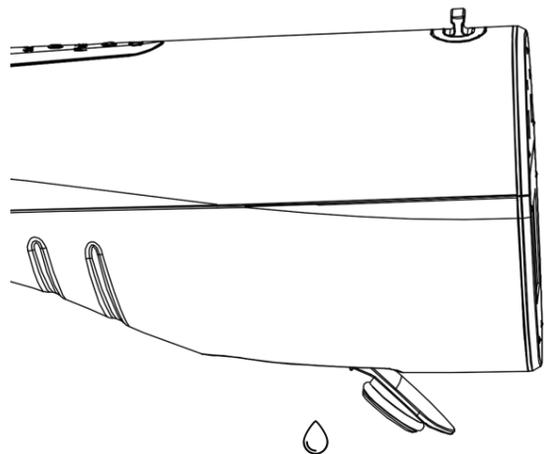


Fig. 5

Para vaciar, abra la tapa del orificio de llenado, con el dispositivo en posición hacia abajo y vierta el agua.

Instrucciones de uso

1. Antes de usar, verifique la carga de la batería. Después de presionar el botón de modo durante más de 3 segundos, si los tres indicadores de modo están siempre encendidos, significa que la batería es suficiente; si dos indicadores de modo están siempre encendidos, significa que la energía de la batería permanece 3/2; Si solo un indicador está encendido, significa que la energía restante es 3/1; Durante el funcionamiento, si los tres indicadores de modo parpadean, indica que la batería está baja y debe cargarse antes de su uso.
2. Cargue el producto de la siguiente manera: Seleccione el adaptador compatible y conecte el cable para comenzar a cargar:

- Se necesitan aproximadamente 4 horas para cargar completamente el limpiador dental.
- Durante la carga, los tres indicadores de modo parpadean alternativamente para indicar que la batería se está cargando.
- Cuando los tres indicadores de modo están encendidos durante la carga, indica que la batería se ha cargado completamente y la carga se ha completado.

3. Instrucciones de uso:

1). Inserte la boquilla en el orificio central en la parte superior (Fig. 1). Si necesita cambiar la boquilla, presione el botón de expulsión de la punta (Fig.2) y retírelo.

2) Como llenar el tanque de agua:

- Sostenga el limpiador dental en posición horizontal y abra la tapa del tanque de agua (Fig. 4). Cierre el orificio de llenado después de llenar el tanque de agua.
- Sostenga firmemente el mango del limpiador dental y extraiga el tanque de agua. Agregue agua en el tanque desde el orificio en la parte superior. Y luego instale el tanque de agua en su lugar original. (Fig. 3)

3). Seleccione el modo deseado presionando el botón de modo, este también se puede seleccionar presionando el botón de modo durante el uso.


El producto tiene tres modos: ALTO, MEDIO y BAJO. Las funciones específicas son las siguientes:

- ALTA: Presión de agua fuerte, limpieza profunda, adecuada para dientes muy juntos.
- MEDIA: presión de agua estándar, moderadamente limpia, adecuada para la mayoría de las personas.
- BAJA: presión de agua suave , limpieza suave, adecuada para los primeros usos o dientes sensibles.

4). Cuando lo use, sostenga el limpiador dental en un ángulo de 45 grados, mientras que su cuerpo se inclina hacia adelante, incline la boquilla hacia la boca alineándose con los dientes o encías, y abre la boca ligeramente para que el agua salga de su boca. suavemente.

5). Presione el botón de encendido para encender el producto para su uso. Nota:

- La dirección del flujo de agua es perpendicular a los dientes o encías;
- Mueva lentamente a lo largo de los dientes y limpie los dientes en orden;
- No rocíe agua directamente en la bolsa periodontal.

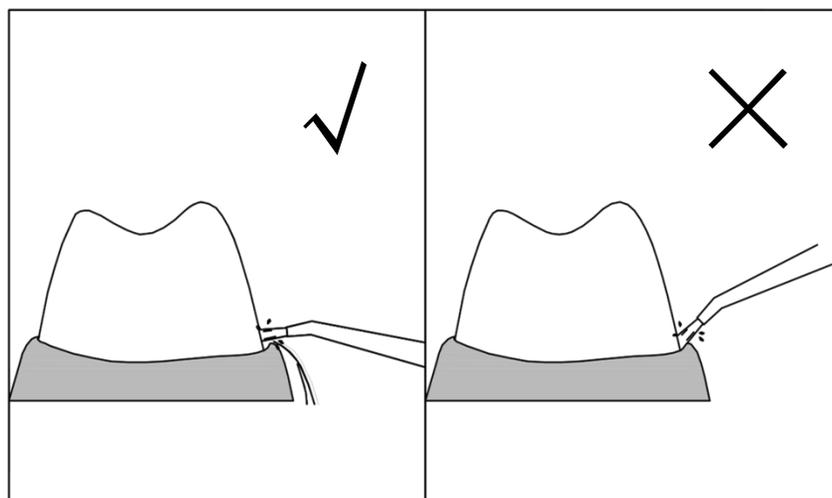

6). Presione el botón de encendido para apagarlo después de su uso. Este producto está diseñado con una función de temporización de 2 minutos y se apagará automáticamente después de 2 minutos de funcionamiento. Comience de nuevo si desea continuar usándolo.

4. Después del uso, opere de la siguiente manera:

1) Abra la tapa del tanque y vierta el agua restante (Figura 5);

2) Presione el botón de encendido del limpiador dental, y el agua interna se drenará automáticamente para evitar agua residual en el compartimento evitando así la formación de bacterias.

3) Presione el botón de encendido para apagar el limpiador dental y cierre la tapa del compartimento de llenado del tanque de agua;

4) Limpie los restos de agua en la superficie del limpiador dental con un paño seco;

5) Limpie el producto y guárdelo después de secarlo si no desea usarlo en unos días.

6) Se recomienda reemplazar la boquilla por una nueva cada 6 meses.

Resolución de problemas

Problemas	Causas	Resolución
No funciona	Sin bacteria	Por favor cargue por 4 horas
	Tiempo de carga demasiado corto	Por favor cargue por 4 horas
La batería solo se puede utilizar durante un tiempo breve después de la carga.	Tiempo de carga demasiado corto	Por favor cargue por 4 horas
	La bacteria alcanzo su vida	Por favor comuníquese con

	útil	el servicio técnico
Presión de agua muy baja	El interior de la boquilla está bloqueado o la punta se deforma.	Reemplace la boquilla por una nueva
	El filtro esta bloqueado	Limpie el filtro
El indicador de carga no se ilumina	La fuente de alimentación exterior no está bien conectada.	Por favor conecte a la corriente correctamente
	El circuito de carga tiene un problema	Por favor comuníquese con el servicio técnico.

Servicio Post-Venta

Al comprar, solicite al distribuidor que emita un comprobante de venta válido como base para la garantía;

2. Este producto posee garantía por fallas del producto debido a factores no humanos dentro de un año de acuerdo con las regulaciones nacionales relevantes (sujeto a la fecha de la factura de compra). La garantía no incluye extensiones. Si se excede el tiempo de la garantía, se puede enviar el producto al servicio técnico designado para una reparación con cargo .

3. En el período de garantía, el costo y las tarifas de servicio técnico se cobrarán según corresponda de acuerdo a las siguientes pautas:

1) daños causados por uso, mantenimiento y almacenamiento inadecuados por parte de los consumidores

2) daño causado por la reparación de un servicio técnico que no es responsable del mantenimiento del servicio oficial.

3) Sin factura de compra relevante y más de un año de fecha de producción;

4) daños causados por uso comercial;

5) Daños causados por factores externos (como rayos, terremotos, incendios, etc.);

4. Complete el siguiente formulario con cuidado y envíelo al punto de servicio postventa de la empresa para su reparación junto con el dispositivo a reparar

Nombre del comprador		Teléfono	
Modelo Nro.		Color	
Fecha de compra		Lugar de compra	
Descripción de la falla			
Address			
Fecha de servicio técnico			

SERVITECH
Líder en soluciones tecnológicas

Tel: 011 5278 1149
serviciotecnico@servitech.com.ar
www.servitech.com.ar

Servicio técnico oficial de **GADNIC**