


MANUAL DE USUARIO



Irrigador Bucal
XB6

WATER006

Descripción del producto

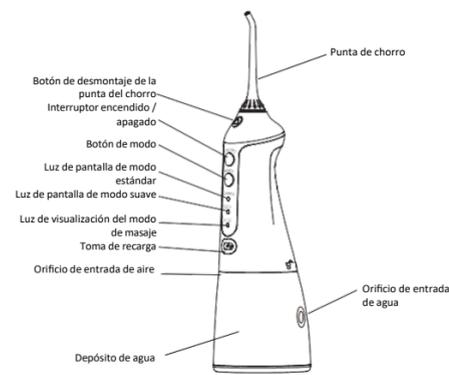

Procedimiento de operación

Trabajo de preparación
¡Extremadamente importante! Antes de usarlo por primera vez, cargue completamente el dispositivo con un cable USB apropiado. Durante la carga de energía, el producto no se puede utilizar.



Instalación y desmontaje de la punta del chorro

Inserte la boquilla de chorro en el orificio del cabezal rociador atornillándola hasta que escuche un clic.



Como se muestra en el Diagrama 4, abra la tapa del tanque de agua y vierta agua en el tanque de agua;
Nota: asegúrese de que al verter agua en el depósito de agua, el dispositivo esté apagado.

Si cambia o quita la punta del chorro, presione el botón de desmontaje en el mango de la punta del chorro antes de quitar la punta del chorro.



Instrucciones de Uso

Este producto tiene una función de memoria, y después de volver a encenderlo, el modo de presión de agua será el mismo que cuando se apagó el dispositivo.

Los modos estándar, suave y de masaje se pueden cambiar tanto si el dispositivo está encendido como apagado.

Los modos pueden cambiarse cuando el dispositivo está apagado, y puede seleccionar el modo que desee antes de volver a encender el dispositivo.

Independientemente del modo, después de funcionar durante 120 segundos, el producto se apagará automáticamente.

Cuando el modo de masaje se utiliza durante más de 3 segundos, se mostrará la carga restante de la batería.

Durante la recarga, las tres luces de la pantalla parpadearán. Cuando las tres luces de la pantalla están encendidas constantemente, esto indica que la energía está recargada.

Durante el uso, si las tres luces de la pantalla parpadean, esto indica que la energía del producto es insuficiente y es necesario recargarla. Durante la recarga, este producto no se puede utilizar.

Gire el dial de la punta del chorro para ajustar la dirección del flujo de agua.




Técnicas recomendadas

Sosteniendo el dispositivo inclinado hacia abajo, coloque la punta del chorro en la boca y dirija la punta del chorro hacia los dientes antes de encender el dispositivo.



Cuando el agua fluya y las encías estén en un ángulo de 90 grados, cierre ligeramente la boca para evitar que el agua se salga y obtener los mejores resultados.

Primero apriete los dientes (dientes posteriores) y comience a aplicar en los incisivos. Deslice el flujo de agua a lo largo de las encías, y haga una breve pausa entre los dientes, hasta que el área alrededor de las encías y los espacios entre los dientes estén completamente limpios.

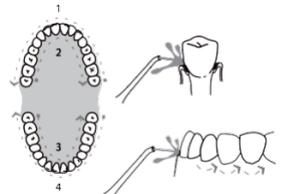


Ejemplo de desmontaje

Uso siguiente

1. Desconecte la alimentación y vacíe el depósito de agua.



2. Usando ambas manos como se indica en el Diagrama 2 - use su mano izquierda para sostener el cuerpo del producto y su mano derecha para sostener el tanque de agua. Al mismo tiempo, gire hacia abajo en sentido antihorario para extraer el depósito de agua.

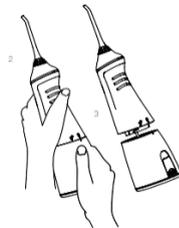

Mantenimiento y manipulación de la batería

Mantenimiento de la batería

Antes del uso inicial, el dispositivo debe estar completamente cargado, durante aproximadamente cuatro horas; Si se va a almacenar durante un largo período de tiempo, cargue completamente el dispositivo con anticipación; Para maximizar la vida útil de la batería, recárguela inmediatamente cuando la energía sea insuficiente.

Manejo de la batería

El dispositivo incluye una batería de litio que no se puede cambiar. Hacia el final de la vida útil de la batería, deséchela en un centro de reciclaje local.

Problemas y soluciones

| Problema | Causa | Solución |
|---|---|--|
| Fuga de agua entre la punta del chorro y la pieza roscada | El anillo de sello en el receptáculo fijo de la punta del chorro está dañado y la punta del chorro no se puede instalar correctamente | Comuníquese con el minorista para que lo reparen e instale la punta del inyector correctamente |
| El tanque de agua gotea agua | El anillo de sello está suelto | Vuelva a instalar correctamente |
| Presión inadecuada | Uso de bajo voltaje | Usar después de recargar |
| El dispositivo no se puede encender | Uso de bajo voltaje | Usar después de recargar |
| El producto no descarga agua | La red de filtración está obstruida | Limpiar la red de filtración |
| Los lados del tanque de agua tienen fugas de agua | El orificio de entrada de aire produce agua | Principio estándar de alta presión de aire del fenómeno |

Recordatorio:

1. En el momento del uso inicial, seleccione "modo suave" para evitar que las encías sangren debido a la falta de adaptación al uso. Después de un uso constante durante dos semanas, debería haber mejoras. Si el sangrado es excesivo o el sangrado continúa después de dos semanas, la inflamación crónica de las encías podría ser un problema y se recomienda buscar tratamiento dental profesional.

2. No se recomienda que el producto sea utilizado por niños o personas con implantes dentales, úlceras bucales o llagas bucales abiertas.

