


Care
by GADNIC


MANUAL DE USUARIO

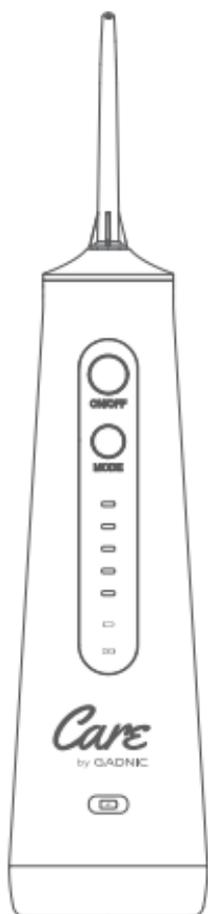


Trigador Bucal
XB8

WATER008

Descripción del Producto

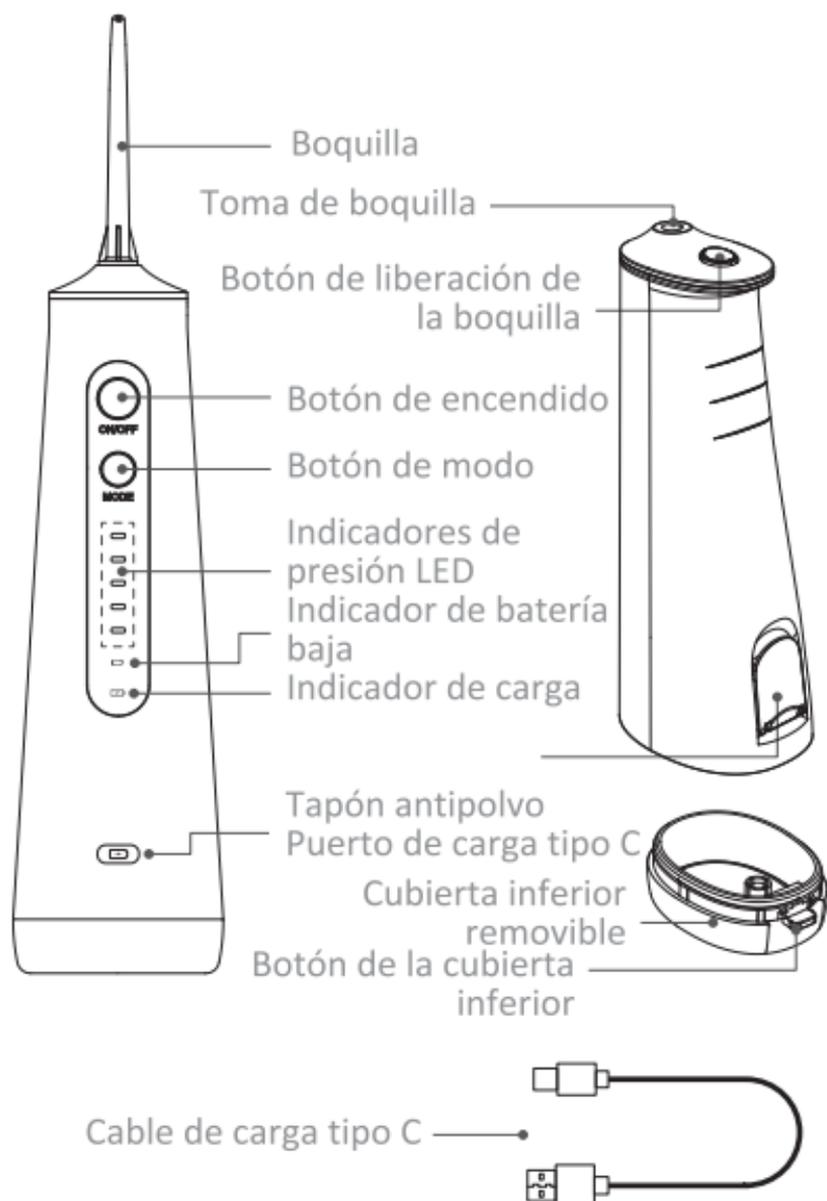

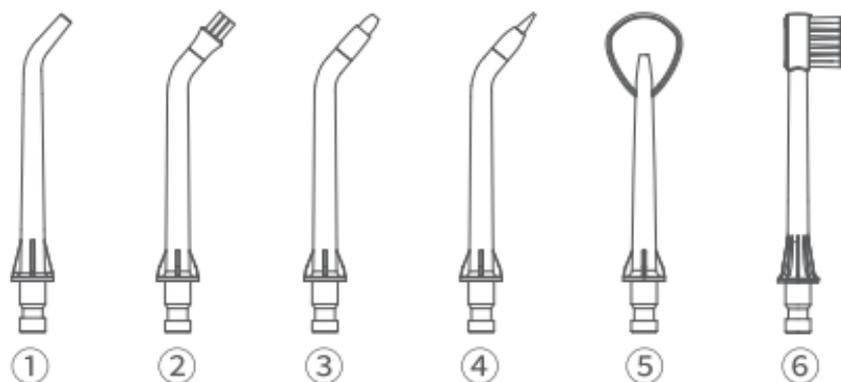

- ① Boquilla de chorro clásica - Uso general
- ② Boquilla del buscador de placa - Implantes / Coronas / Puentes / Retenedores / Uso general
- ③ Boquilla de ortodoncia - Brackets / Uso general
- ④ Boquilla de bolsillo Pik - Bolsillos periodontales / Furcaciones
- ⑤ Limpiador de lengua
- ⑥ Boquilla de cepillo de dientes - Uso general

NO TODAS LAS BOQUILLAS ESTÁN INCLUIDAS
EN UN CONJUNTO DE ACCESORIOS DEL
PRODUCTO

Empezando

* Cargando

1. Asegúrese de que el producto y las manos estén secas y asegúrese de que el producto esté apagado.
2. Retire el tapón antipolvo, enchufe el cable de carga tipo c en el puerto de carga, conecte el adaptador de corriente (suministrado por usted mismo) y la luz indicadora se encenderá.
3. La luz LED verde parpadeará cuando se esté cargando y la luz LED verde estará encendida en lugar de parpadear cuando la unidad esté completamente cargada.
4. Una recarga completa tardará 3 horas y se puede utilizar durante 90 minutos después de una carga completa.
5. Cuando sea necesario cargar la batería, la luz indicadora azul parpadeará.



* Insertar y quitar la boquilla

1. Saque la boquilla del paquete.
 2. Inserte la boquilla en el orificio en la parte superior del irrigador de agua. Presione firmemente hasta que la boquilla encaje en su lugar.
 3. Para quitar la boquilla del mango, presione el botón de liberación de la boquilla y extraiga la boquilla del mango.
 4. Función de viaje amigable: la boquilla se puede almacenar en el depósito.
- PRECAUCIÓN:** No presione el botón de expulsión de la boquilla mientras la unidad está funcionando.




* Llenado del depósito

Abra la puerta del depósito. Sostenga el hilo dental de agua en posición horizontal y llene el depósito con agua tibia.

Nota:

1. Se recomienda utilizar agua hervida tibia por debajo de 40 °C o agua corriente del grifo.
2. No agregue pasta de dientes, sal, lejía u otras sustancias sólidas o insolubles en agua.
3. Se puede usar un hilo dental para administrar el enjuague bucal.

Después de usar enjuague bucal, enjuague la unidad para evitar obstrucciones llenando parcialmente el depósito con agua tibia por debajo de 40 °C y haciendo funcionar la unidad con la punta apuntando hacia el fregadero hasta que se vacíe.

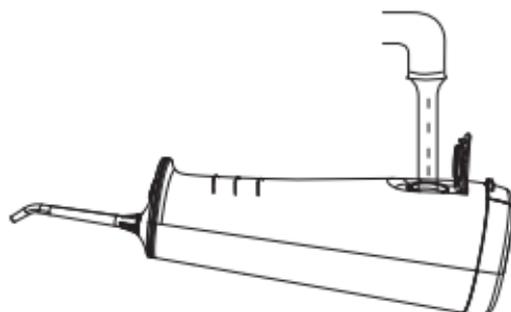

* Ajuste de la configuración del modo de presión

1. Presione ligeramente el botón ON / OFF para iniciar / detener el uso del producto.
2. Puede ajustar la configuración del modo de presión en su irrigador dental presionando el botón de modo en el mango.
3. Comience con la configuración del modo suave y aumente a su gusto.
4. Función de memoria, memorizará el modo de presión que usó la última vez.
5. Apague automáticamente después de trabajar 90min para evitar un mal funcionamiento.


- **Modo de pulso:** flujo de pulso variable, adecuado para principiantes.

- **Modo suave:** presión de agua suave, adecuado para personas sensibles a las encías y principiantes.

- **Modo estándar:** Limpieza diaria de restos de comida. Utilizando para la limpieza de rutina de la cavidad bucal. Adecuado para la mayoría de personas.

- **Potente:** limpia eficazmente las manchas difíciles y repele la placa dental.

- **Modo de disparo:** alinee el área a limpiar, presione una vez y dispare una vez. Limpia con precisión los dientes y los frenillos.

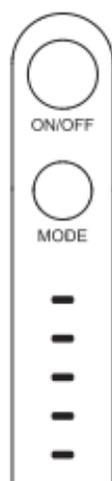

* Técnica recomendada

1. Inclínese sobre el fregadero y coloque la boquilla en la boca. Apunte la boquilla hacia la línea de las encías y encienda la unidad. Cierre los labios ligeramente para evitar salpicaduras, pero permita que el agua fluya libremente de la boca al lavabo.
2. Para obtener mejores resultados, comience con los dientes posteriores y avance hacia los dientes frontales. Deslice la boquilla a lo largo de la línea de las encías y haga una breve pausa entre los dientes. Continúe hasta que haya limpiado el interior y el exterior de los dientes superiores e inferiores.
3. Mantenga el hilo dental de agua en posición vertical durante el uso para obtener mejores resultados.
4. Cuando termine, apague la unidad. Vacíe cualquier líquido que quede en el depósito.




Consejos:

1. Un leve sangrado gingival es una situación normal al principio con el uso de hilo dental con agua. La situación mejorará en 1-2 semanas.
2. Comience con la configuración del modo suave y aumente a su gusto.
3. No presione los dientes o encías con fuerza con la boquilla del irrigador bucal.

Limpieza y mantenimiento

1. El fondo del depósito de agua se puede quitar para facilitar la limpieza. Presione el botón en la parte inferior y tire de él hacia afuera para quitar la tapa del depósito.
2. Este producto se puede limpiar con agua corriente, pero no lo sumerja en agua.
3. Limpie el producto cuando sea necesario utilizando un paño suave y un limpiador suave no abrasivo para limpiar el exterior. Se recomienda retirar y limpiar el fondo del depósito semanalmente.
4. Pueden acumularse depósitos de agua dura en su unidad, dependiendo del contenido mineral de su agua. Si se deja desatendido, puede obstaculizar el rendimiento.
5. Limpieza de las partes internas: agregue 1 cucharada de vinagre blanco a un depósito lleno de agua tibia. Apunte el mango y la boquilla hacia el fregadero. Encienda la unidad y hágala funcionar hasta que el depósito esté vacío. Enjuague repitiendo con un depósito lleno de agua tibia limpia por debajo de 40 °C. Este proceso debe realizarse cada 1 a 3 meses para garantizar un rendimiento óptimo.

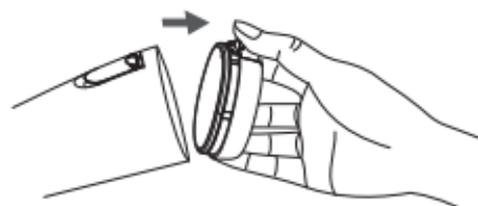

Orificio de
almacenamiento
de la boquilla