

Care
by GADNIC

MANUAL DE USUARIO
Limpiador dental
Ultrasónico
DENTAL PRO



WATER009

Características del producto

- Este producto está diseñado para la familia, simple, rápido y eficiente.
- Vibración UHF, suave, cómoda, mejorada en tres modos ajustable.
- Diseño de protección de trabajo de detención automática luego de 10 minutos sin uso, deja de funcionar después de que se apaga la luz LED.
- Diseño integrado, iluminación LED de cabeza, observación clara de las condiciones bucales.
- El transductor ultrasónico está hecho de aleación de titanio para aviación.

Principio del producto


La onda de pulso eléctrico de alta frecuencia es generada por el circuito de oscilación electrónica, amplificada a cierta intensidad y transmitida al transductor, que convierte la energía eléctrica en energía mecánica y estimula la punta de trabajo para producir la misma vibración de frecuencia, para lograr el propósito de triturar el cálculo dental y barrer las manchas dentales persistentes y el sarro suelto. El ion es producido por el generador de iones, y el ion es producido sujetando el anillo conector de iones. Los iones negativos se transmiten a los dientes y las manchas dentales se sueltan y separan de los dientes mediante el principio de exclusión de iones negativos.

Limpeza y mantenimiento

- No coloque ni deje caer el producto dentro de otros líquidos.
- El equipo debe manipularse con cuidado y almacenarse en un lugar seco.
- No mezclar con materiales tóxicos, corrosivos, inflamables y explosivos.

-1-

Partes del producto

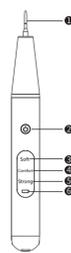

- Punta de trabajo * 2
- Botón interruptor
- Modelo blando
- Modelo confort
- Modelo fuerte
- Visualización de cantidad eléctrica
- Tecla pequeña

-2-

Como operar


- Asegúrese de que el limpiador esté completamente cargado antes de usarlo.
- Presione la tecla ON para iniciar la máquina, encienda la luz e ingrese el engranaje suave. Al mismo tiempo, encienda el ion negativo y el modo ultrasónico. Presione la tecla de encendido nuevamente, el ion negativo permanece sin cambios y el ultrasonido ingresa al equipo de confort. Y así sucesivamente, hay tres engranajes en total. Se sugiere comenzar desde la marcha baja y aumentar gradualmente la marcha después de la adaptación.
① Suave ② Comodidad ③ Fuerte
- Seleccione el punto de trabajo adecuado e instálelo en el sentido de las agujas del reloj en el motor principal con una llave pequeña. No use una rotación fuerte para no dañar la interfaz. Primero, abra el engranaje apropiado y haga vibrar la piedra dental con la cabeza de metal. Luego, cuando opere la piedra del diente, raspe con un poco de fuerza e intente más veces. Debido a que la piedra dental es terca, un poco más de paciencia hará que sea más fácil dominar el método.
- Presione Ⓞ encendido y apagado, la luz de modo brilla y la luz LED en el extremo frontal del mango se enciende, lo que indica que la máquina está funcionando.
- Cuando la máquina funciona normalmente, la frecuencia de vibración es muy rápida. Al limpiar los dientes, solo necesita un contacto ligero y un movimiento repetido a cierta velocidad para eliminar los cálculos dentales.
Precaución: no aplique fuerza parcial ni permanezca demasiado tiempo al limpiar los dientes.
- Quando esté apagado, presione la tecla de encendido y desconecte el enchufe después de que las luces LED estén apagadas.
- La máquina es un equipo de precisión. Evite daños a los componentes internos y externos causados por caídas y toques.

-3-

- El cabezal del cepillo es para limpiar los dientes después del cálculo, no se puede usar como un cepillo de dientes eléctrico.
- Detección de bajo voltaje, cuando el voltaje de la batería es inferior a 3V, se encenderá una luz de alarma.
- Después del uso, mantenga presionada la tecla abierta, el equipo preestablece la función de apagado automático de 10 minutos, para protegerse contra sobrecalentamiento.

Introducción a las puntas de trabajo

La punta 1 es delgada, se usa para eliminar el cálculo y las manchas de humo de dientes en la encía.

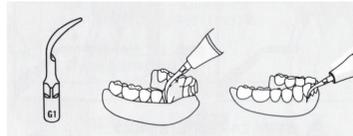

La punta 2 es más ancha y se usa para eliminar cálculos grandes y manchas de humo en el cuello y el lado lingual de los dientes supragingivales.

-4-



- ◆ Vaporice, sumerja en alcohol y desinfecte la punta de trabajo a alta temperatura y alta presión antes de usar.
- ◆ Para evitar infecciones cruzadas, no comparta la punta de trabajo con muchas personas.
- ◆ La frecuencia de la máquina es variable, elija la punta de trabajo correcta.
- ◆ Utilice la punta de trabajo correctamente como se muestra arriba.


Cómo utilizar los consejos de trabajo

La punta de trabajo toca suavemente los dientes verticalmente y se mueve hacia arriba y hacia abajo, así como hacia la izquierda y hacia la derecha. Ajuste el tiempo de uso de cada pieza según el estado de los dientes.



⚠ No utilice la superficie de la punta de trabajo sin haber sido correctamente desinfectado.

-5-

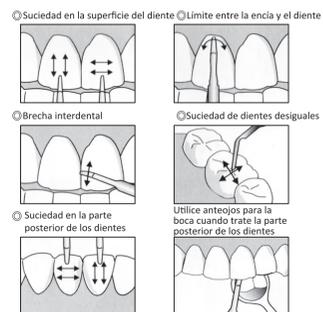

Ⓞ Suciedad en la superficie del diente Ⓞ Límite entre la encía y el diente

Ⓞ Brecha interdental

Ⓞ Suciedad de dientes desiguales

Ⓞ Suciedad en la parte posterior de los dientes




Utilice anteojos para la boca cuando trate la parte posterior de los dientes.

-6-

Cómo cambiar la punta de trabajo

La orientación de la punta de trabajo puede ser diferente, pero siempre que esté firmemente montada sobre ella, se puede usar en cualquier dirección.

- ⚠ Si la conexión está floja, la salida no se puede transmitir correctamente, así que asegúrese de que la punta de trabajo esté bien conectada y use el juego de llaves para la instalación de la punta de trabajo.
- No utilice otras herramientas para desmontar la placa de muestra, lo que puede causar fallas o daños.

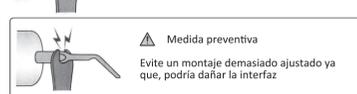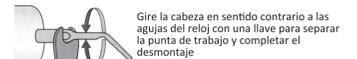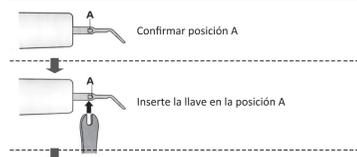

-7-

Cómo mantener

⚠ Cuando no esté en uso durante mucho tiempo, manténgalo en un lugar seco.

⚠ No enjuague el cuerpo y el adaptador de corriente con agua. No use diluyente, benceno y solvente, como queroseno, polvo para fregar.

El cuerpo principal no se puede lavar directamente con agua. Limpie la suciedad del cuerpo con un paño.



La punta de trabajo se puede limpiar con agua.



-8-

Servicio postventa

Nombre: _____ Modelo del Producto: _____

Número de contacto: _____ Dirección: _____

Tiempo de reparación: _____ Hora de regreso: _____

Razón de retorno:	1. Para la devolución de productos causados por problemas de calidad, comuníquese con el comerciante; 2. Asegúrese de devolver el producto sin afectar la segunda venta;
Motivo de la reparación:	3. Complete el nombre correcto del cliente, el número de contacto, la dirección postal y el motivo del reemplazo, y devuelva la tarjeta de servicio postventa al comerciante junto con los productos. <small>Gracias por su cooperación</small>



-9-