


# GADNIC


MANUAL DE USUARIO

IRRIGADOR BUCAL  
*WM3*

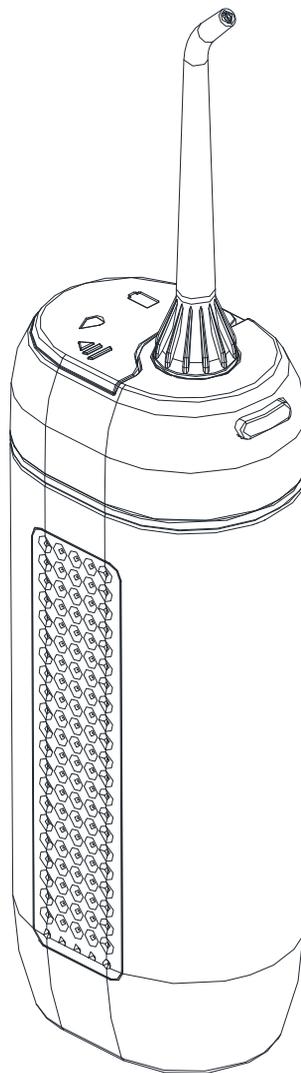

**WATER013**

## Descripción del Producto

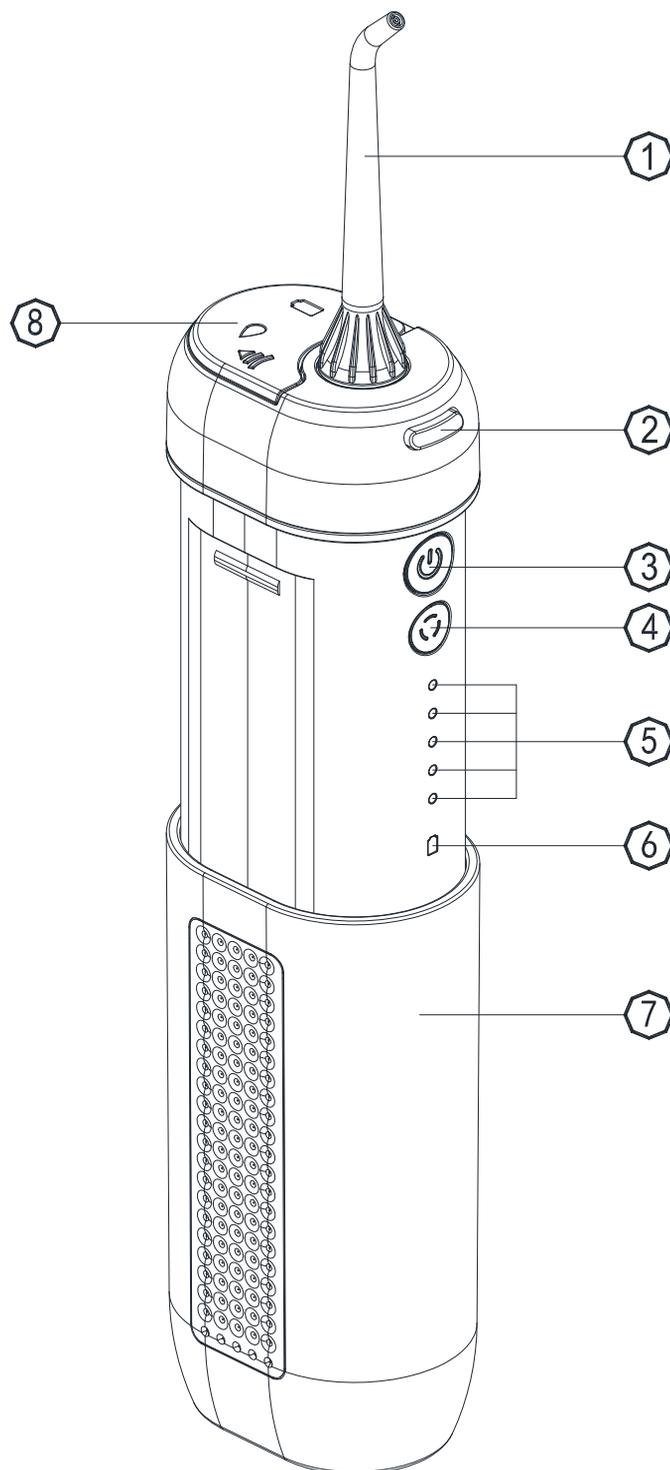


- ①: Punta ②: Botón de liberación de punta ③: Botón de encendido  
④: Botón de selección de modo ⑤: Indicador de presión  
⑥: Indicador de potencia ⑦: Tanque de agua ⑧: Tapa superior

## Accesorios



Punta X 2

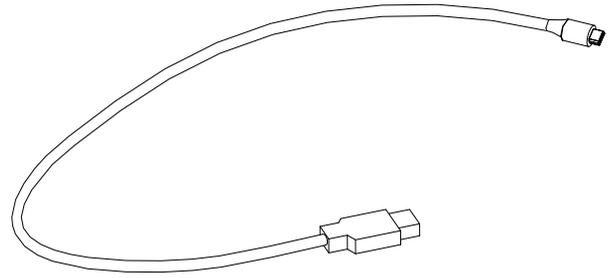

Cable USB X 1

## Inserción y extracción de puntas

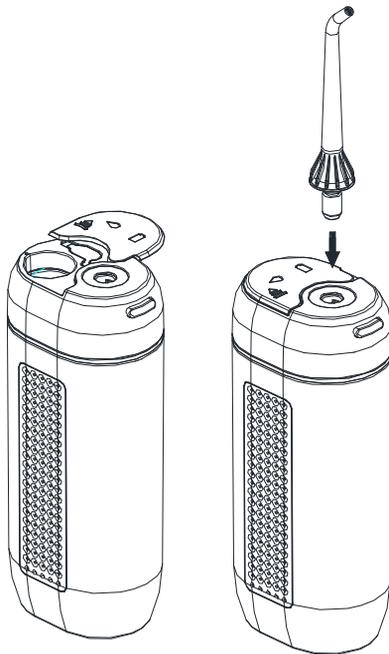


Fig1

Fig2

### Insertar la punta

Fig. 1, Empuje la tapa superior en el sentido de las agujas del reloj, saque la punta del orificio de la punta.  
Fig. 2, Inserte la punta en el orificio en la parte superior del hilo dental. Presionando firmemente hasta que la punta encaje en su lugar.

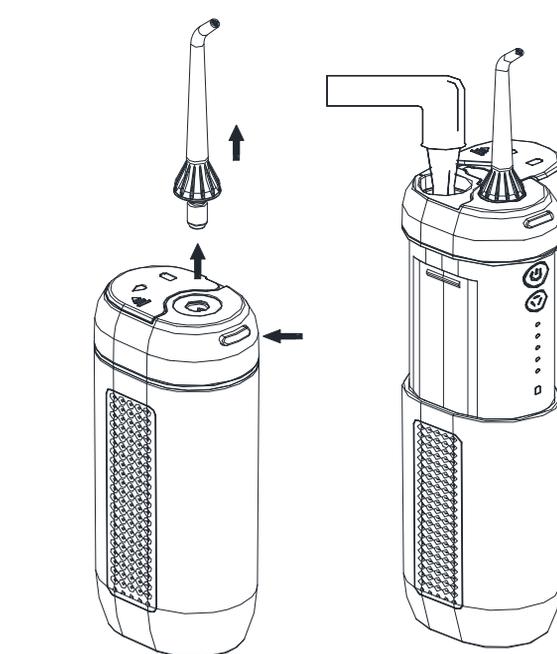


Fig3

Fig4

### Extraer la punta

Presione el botón de liberación de la punta y retire la punta.

### Llenar de agua

Tire hacia abajo del tanque de agua, abra la tapa superior y llene de agua desde el orificio de la punta hasta el tanque de agua.

## Instrucciones de Uso

1. Antes de usar, verifique la energía de la batería. Presione el botón de modo, si el indicador de encendido muestra el color rojo significa que no hay energía (la potencia es inferior al 20%), si el indicador muestra el color azul (permanece entre el 20% y el 80%) significa que puede funcionar normalmente y si el indicador muestra el color verde significa que permanece encendido más allá del 80%. Presionar prolongadamente el botón de modo puede mostrar la potencia restante, una luz significa que la potencia permanece al 20%, 2 luces significa que la potencia permanece al 40% y 5 luces significan potencia máxima.

2. Cargue el producto de la siguiente manera: seleccione un adaptador compatible de 5V y conecte el cable para comenzar a cargar:

- Se tarda unas 4 horas en cargar completamente el irrigador bucal.
- Al cargar, los indicadores de modo parpadean alternativamente, la luz roja parpadeante significa que la potencia es inferior al 20%, la luz azul parpadeante significa que la potencia es inferior al 80% y la luz verde parpadeante significa que la potencia supera el 80%.
- Cuando los indicadores de modo están en luz verde, indica que la batería se ha cargado completamente y que la carga se ha completado.

3. Pasos de Uso:

1) Inserte la punta en el orificio central en la parte superior (Fig. 2). Si necesita cambiar la punta, apague el irrigador bucal, presione el botón de liberación de la punta (Fig. 3) y saque la punta.

2) Cómo llenar el tanque de agua:

- Sostenga el irrigador dental verticalmente, baje el tanque de agua hasta el fondo y abra la tapa superior llenando agua desde el orificio de la punta hasta el tanque de agua (Fig. 4). Cubra la tapa superior después de llenar el tanque de agua.

3) Seleccione el modo deseado presionando el botón de modo, también se puede seleccionar presionando el botón de modo durante la operación. El producto tiene cinco velocidades en total. Las funciones específicas son las siguientes:


- Normal (presione el botón de modo hasta que se encienda la primera luz): 60% de presión de agua, moderadamente limpio, adecuado para la mayoría de las personas.
- Fuerte (presione el botón de modo hasta que se encienda la segunda luz): presión de agua completa, limpieza profunda, adecuada para dientes apretados.
- Suave (presione el botón de modo hasta que se encienda la tercera luz): 30% de presión de agua, limpieza suave, adecuada para la primera experiencia.

- Masaje (presione el botón de modo hasta que se encienda la cuarta luz): alta presión y baja presión funcionan alternativamente, limpie los dientes mientras masajea las encías.
- Sastre personal (presione el botón de modo hasta que se encienda la quinta luz): después de elegir este modo, mantenga presionado el botón de modo nuevamente, los 7 tipos de presión de agua cambiarán de bajo a alto, puede elegir lo que le gusta.

4) Cuando lo use, sostenga el irrigador en un ángulo de 45 grados con respecto a la horizontal, mientras que el cuerpo se inclina hacia adelante, la boquilla se extiende hacia la boca alineándose con los dientes o las encías y abra la boca ligeramente para que el agua pueda salir.

5) Presione el botón de encendido para activar el producto para su uso. Nota:

- La dirección del flujo de agua es perpendicular a los dientes o las encías;
- Mueva lentamente a lo largo de los dientes y límpielos en orden;
- No rocíe agua directamente sobre la bolsa periodontal.

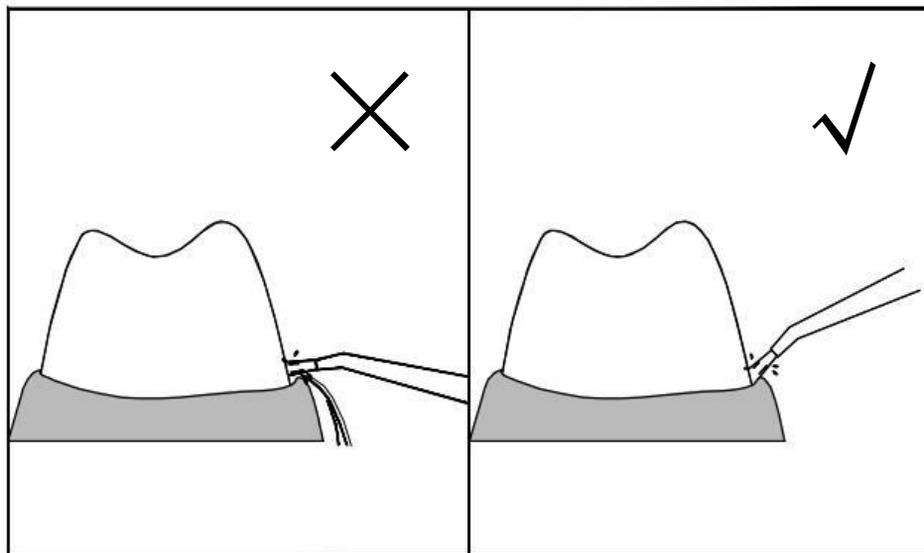

6) Presione el botón de encendido para apagarlo después de usarlo. Este producto está diseñado con una función de temporizado de 2 minutos y se apaga automáticamente después de 2 minutos de funcionamiento. Comience de nuevo si desea continuar usándolo.

4. Después del uso, opere de la siguiente manera:

- 1) Presione el botón de encendido para iniciar el irrigador bucal, y el agua interna se drena automáticamente para evitar el agua residual de la reproducción de bacterias;
- 2) Abra la tapa del tanque y vierta el agua restante o el tanque de agua limpia;
- 3) Presione el botón de encendido para apagar el irrigador y cierre la tapa del puerto de llenado del tanque de agua;
- 4) Limpie la mancha de agua en la superficie del irrigador con un paño seco;

- 5) Limpie el producto y guárdelo después de secarlo si no quiere usarlo dentro de unos días.
- 6) Se recomienda reemplazar la punta por una nueva cada 6 meses.

### Problemas comunes y soluciones

Problema	Causa	Solución
Falla en la operación	La batería se agota	Cargue durante 4 horas.
	El tiempo de carga es corto	Cargue durante 4 horas.
La batería solo se puede utilizar durante un breve período de tiempo después de la carga	El tiempo de carga es corto	Cargue durante 4 horas.
	La batería alcanza su vida útil	Por favor llame a la línea directa de servicio.
La presión del agua es baja	El interior de la punta está bloqueado o la punta se deforma	Reemplace la punta por una nueva.
	El filtro está bloqueado	Limpie el filtro.
El indicador de carga no se enciende	La fuente de alimentación exterior no está bien conectada	Por favor, conecte la alimentación correctamente.
	El circuito de carga tiene un problema	Por favor llame a la línea directa de servicio.

**SERVITECH**

SERVICIO TÉCNICO OFICIAL GADNIC  
[www.servitech.com.ar](http://www.servitech.com.ar)

☎ 11 6260 1114 (sólo texto)  
[serviciotecnico@servitech.com.ar](mailto:serviciotecnico@servitech.com.ar)