

**SERV
TECH**


SERVICIO TÉCNICO OFICIAL GADNIC
www.servitech.com.ar

☎ 11 6260 1114 (sólo texto)
serviciotecnico@servitech.com.ar

GADNIC

MANUAL DE USUARIO

KIT BOQUILLAS PARA IRRIGADOR BUCAL ***BUCALFR***

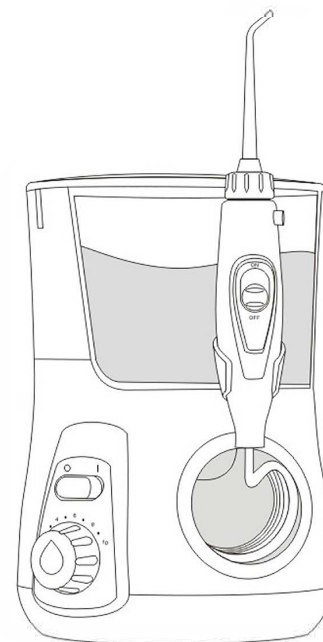

WATER02B

MEDIDAS DE PROTECCIÓN

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El producto emplea una combinación única de presión de agua y pulsaciones para limpiar en profundidad entre los dientes y por debajo de la línea de las encías, eliminando bacterias dañinas y los residuos que los cepillos tradicionales, el hilo dental y los cepillos interdentales no pueden alcanzar.

Indicaciones

La producción está indicada para su uso por personas que tienen gingivitis, periodontitis y eliminación del biofilm de placa en junto con un plan de tratamiento dental integral.

Contraindicaciones

El producto está contraindicado en personas que tengan una herida abierta en la lengua o en la boca.

MEDIDAS DE PROTECCIÓN

Al utilizar productos eléctricos, especialmente cuando hay niños presentes, deben seguirse siempre las precauciones básicas de seguridad, incluidas las siguientes:

Lea todas las instrucciones antes de utilizar el producto.

PELIGRO

Para reducir el riesgo de electrocución

- No manipule el enchufe con las manos mojadas.

- No lo introduzca ni lo deje caer en agua u otro líquido.

- No lo utilice mientras se baña.

- No coloque ni guarde el producto donde pueda caerse o ser jalado dentro de una bañera o lavabo.

- No coja un producto que haya caído al agua.

- Desenchúfelo inmediatamente.

Compruebe que el cable de alimentación no esté dañado antes del primer uso y durante la vida útil del producto.

⚠ ADVERTENCIA

Para reducir el riesgo de golpes, electrocución, incendio o lesiones a las personas:

- No conecte este aparato a un sistema de voltaje diferente del especificado en el aparato o en el cargador. El uso con un voltaje inadecuado dañará el producto y ANULARÁ la garantía.

- Si el producto se abre/desmonta por CUALQUIER motivo, se anulará la garantía.

- No utilice este producto si tiene un cable o enchufe dañado, si no funciona correctamente, si se ha caído o dañado, o si se ha caído al agua. Póngase en contacto con su distribuidor local.

- No dirija el agua bajo la lengua, al oído, la nariz u otras zonas delicadas. Este producto es capaz de producir presiones que pueden causar graves daños en estas zonas.

- Utilice este producto sólo como se indica en estas instrucciones o como le recomiende su profesional de la odontología.

- Utilice únicamente las puntas y accesorios recomendados por el fabricante.

- No deje caer ni inserte ningún objeto extraño en ninguna abertura o manguera.

- Mantenga el cable eléctrico alejado de superficies calientes.

- No utilizar al aire libre ni en lugares donde se utilicen productos en aerosol o donde se administre oxígeno.

- No utilice yodo ni aceites esenciales concentrados insolubles en agua en este producto. Su uso puede reducir el rendimiento del producto y acortar su vida útil.

- Llene el depósito sólo con agua u otra solución recomendada por un profesional dental.

- Quítese cualquier joya bucal antes de utilizar este producto.

- No lo utilice si tiene una herida abierta en la lengua o en la boca.

- Si su médico o cardiólogo le ha aconsejado recibir premedicación antibiótica antes de procedimientos dentales, debe consultar a su dentista antes de usar este instrumento o cualquier otra ayuda para la higiene bucal.

- Es necesaria la supervisión de un médico cuando este producto sea utilizado por, sobre o cerca de niños o inválidos.


- Si la punta se separa del mango por cualquier motivo, deseche la punta y el mango y sustitúyalos por otros nuevos.

- No utilice este producto durante más de 5 minutos por cada período de dos horas.

- Supervise a los niños para asegurarse de que no juegan con el aparato.

📖 Guarde estas instrucciones.

PRODUCT DESCRIPTION

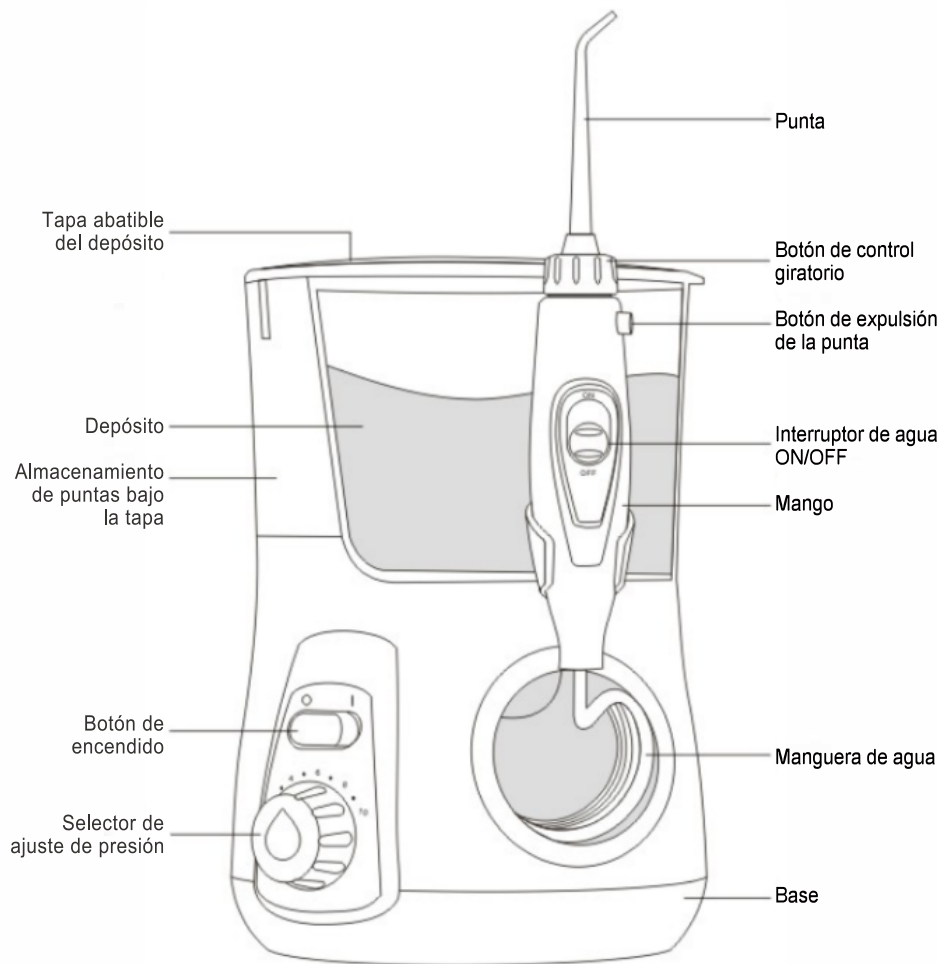


CÓMO EMPEZAR

	Punta de chorro clásica • Uso general ☒ Estándar
	Punta Pik Pocket • Bolsas periodontales • Furcaciones ☒ Estándar
	Raspador de lengua • Aliento más fresco ☒ Estándar


	Orthodontic Tip • Tirantes • Uso general ☒ Opción
	Buscador de placas • Implantes • Puentes ☒ Opción • Coronas • Retenciones
	Cepillo de dientes • Uso general ☒ Opción

Primeros pasos con el hilo dental

- Enchufe el cable a una toma de corriente. Si la toma de corriente está controlada por un interruptor de pared, asegúrese de que esté encendido.
- Levante la tapa del depósito, retírelo y llénelo de agua tibia. Vuelva a colocar el depósito sobre la base, presione firmemente y cierre la tapa.

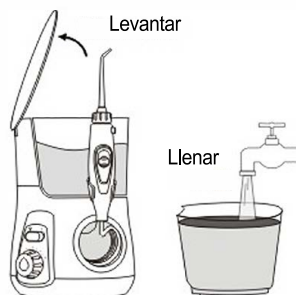


- Insert tip into the center of the handle. Pressing down firmly until the tip clicks into place. The colored ring will be flush with the top of the handle if the tip is correctly locked into place. To remove tip from the handle push the tip eject button on the handle.

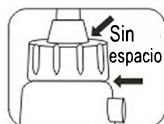

- Coloque el dial de control de presión de la base en la posición alta (ajuste de presión N.º 10), apunte el mango y la punta hacia el fregadero. Encienda el aparato y el agua hasta que salga agua por la punta. Apague la unidad.



- Gire el selector de control de presión situado en la base del aparato hasta el ajuste más bajo (ajuste de presión n.º 1) para el primer uso. Aumente gradualmente la presión con el tiempo hasta el ajuste que prefiera, o según le indique su dentista.

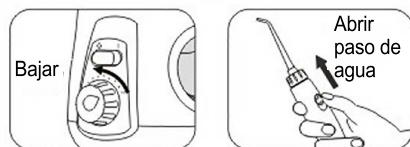

Uso del irrigador bucal Coloque siempre la punta en la boca antes de abrir el grifo. Con el interruptor de agua del mango en la posición OFF, enciéndalo. Inclínese sobre el lavabo y cierre ligeramente los labios lo suficiente para evitar salpicaduras, permitiendo al mismo tiempo que el agua fluya de la boca al lavabo. Gire el interruptor de agua a la posición ON. Cuando termine, apague el interruptor del agua y el aparato.



LIMPIEZA Y SOLUCIÓN DE PROBLEMAS DEL HILO DENTAL

Durante el uso, puede detener el flujo de agua deslizando el interruptor de agua del mango a la posición OFF.

NOTA: El motor seguirá funcionando.




- Técnica recomendada: Para obtener los mejores resultados, comience por los dientes posteriores y avance hacia los anteriores. Dirija el chorro en un ángulo de 90 grados hacia la línea de las encías con la punta en la boca. Deslice la punta por la línea de las encías y haga una breve pausa entre los dientes. Continúe hasta haber limpiado el interior y el exterior de los dientes superiores e inferiores.



CONSEJOS DE USO


Punta pick pocket

La punta pocket está diseñada específicamente para suministrar agua o soluciones antibacterianas en las bolsas periodontales. Para utilizar la punta pocket, ajuste la unidad a la presión más baja. APAGUE el interruptor de agua del mango. Coloque la punta blanda contra un diente en un ángulo de 45 grados y coloque suavemente la punta bajo la línea de las encías, en la bolsa. Encienda la base y el interruptor de agua del mango.

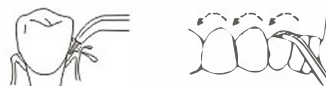


Limpiador lingual

Apague el interruptor de agua del mango. Ajuste la presión más baja. Coloque la punta en el centro de la lengua. Encienda la base y el interruptor de agua del mango. Tire hacia delante con una ligera presión. Aumente la presión según prefiera.

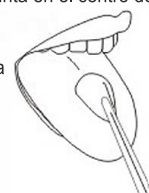


Consejo de ortodoncia

Para utilizar la punta de ortodoncia, deslice suavemente la punta a lo largo de la línea de las encías, haciendo una breve pausa para cepillar ligeramente la zona entre los dientes y alrededor del bracket de ortodoncia, antes de pasar al siguiente diente.

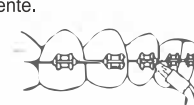


Cepillo de dientes

Coloque la punta del cepillo en la boca con el cabezal del cepillo sobre el diente al nivel de la encía. El cepillo puede utilizarse con o sin pasta dentífrica. Ejerciendo una ligera presión, masajee el cepillo hacia delante y hacia atrás con movimientos muy cortos, de forma parecida a como lo haría con un cepillo de dientes manual.

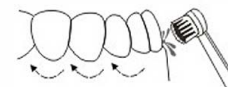

Buscador de placas

Para utilizar el cepillo antiplaca, colóquelo sobre los dientes de forma que las cerdas toquen suavemente los dientes. Deslice suavemente el labio a lo largo de la línea de las encías, haciendo una breve pausa entre los dientes para cepillar suavemente y permitir que el agua fluya entre los dientes.

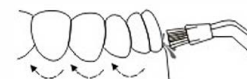

Utilizar enjuagues bucales y otras soluciones

Su producto puede utilizarse para suministrar enjuagues bucales y soluciones antibacterianas. Antes de utilizar cualquier solución especial, enjuague la unidad para evitar que se obstruya llenando parcialmente el depósito con agua tibia y haciendo funcionar la unidad con la punta apuntando hacia el fregadero hasta que la unidad esté vacía.

MANTENIMIENTO

Limpieza

Antes de limpiarlo, desenchúfelo de la toma de corriente. Limpie el producto cuando sea necesario con un paño suave y un limpiador no abrasivo. El depósito de agua es extraíble para facilitar la limpieza y se puede lavar en el lavavajillas.

Eliminación de depósitos de agua dura


Los depósitos de agua estancada pueden acumularse en la unidad, dependiendo del contenido mineral del agua. Si se dejan sin limpiar, el rendimiento puede verse afectado. Para limpiar las partes internas: Añada vinagre blanco a un vaso lleno de agua tibia, apunte el asa hacia el fregadero. Encienda el aparato y déjelo funcionar hasta que se acabe el agua del depósito. Repita el enjuague con agua tibia llena y limpia. Esto debe hacerse cada 1 a 3 meses para garantizar un rendimiento óptimo.

Fugas

Si las fugas se deben a una manguera dañada, puede adquirir mangueras y mangos de repuesto a través de su distribuidor.

Almacenamiento de accesorios

Los accesorios para guardar las dos puntas más utilizadas se encuentran debajo de la tapa del depósito y se puede acceder a ellos fácilmente sacando el depósito.

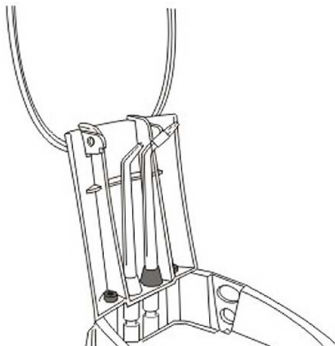

Mantenimiento

Los productos no tienen elementos eléctricos que puedan ser sustituidos o reparados por el usuario y no requieren un mantenimiento rutinario. Para todas sus necesidades de garantía y accesorios, llame a su distribuidor.

El consumidor deberá presentar el recibo de compra original como prueba de la fecha de compra y, si se le solicita, el producto completo, para respaldar una reclamación de garantía. Sustituiremos, a nuestra discreción, cualquier pieza del producto que, en nuestra opinión, sea defectuosa, siempre que el producto no haya sido objeto de abuso, mal uso, alteración o daños después de la compra, se haya utilizado de acuerdo con las instrucciones y sólo con accesorios o piezas consumibles aprobados por nuestro fabricante. La instalación es responsabilidad del consumidor y no está cubierta por la garantía. Esta garantía limitada excluye accesorios o piezas consumibles como puntas, etc. No enchufe este aparato a un sistema de voltaje diferente del especificado en el aparato o en el cargador. El uso con un voltaje inadecuado dañará el producto y ANULARÁ la garantía.