


GADNIC

MANUAL DE USUARIO

Irrigador Bucal **AP-100**

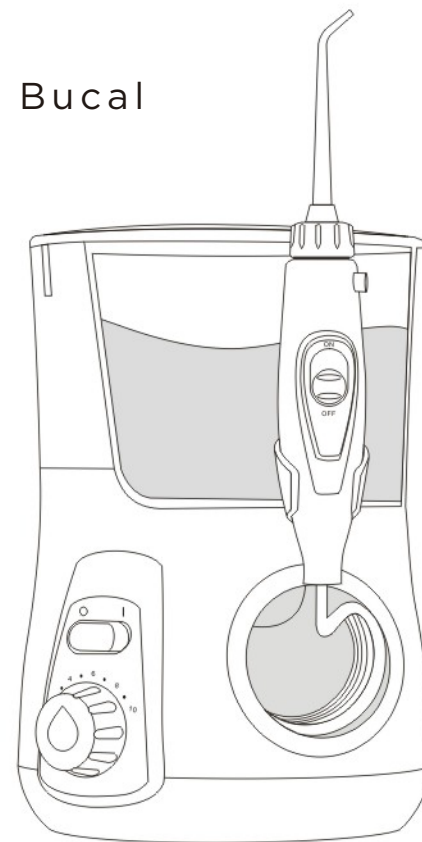

WATER02X

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El producto emplea una combinación única de presión de agua y pulsaciones para limpiar profundamente entre los dientes y debajo de la línea de las encías, eliminando así las bacterias dañinas y la suciedad que el cepillado tradicional, el hilo dental y los cepillos interdentes no pueden alcanzar.

INDICACIONES El producto está indicada para su uso por personas que tienen gingivitis, periodonitis y eliminación de biopelículas de placa junto con un plan de tratamiento dental integral.

CONTRAINDICACIONES El producto está contraindicado para su uso por personas que tienen una herida abierta en la lengua o en la boca.

MEDIDAS DE SEGURIDAD IMPORTANTES

Al usar productos eléctricos, especialmente cuando hay niños presentes, siempre se deben seguir las precauciones básicas de seguridad, incluidas las siguientes: Lea todas las instrucciones antes de usar.

PELIGRO: X PARA REDUCIR EL RIESGO DE ELECTROCUCION:


X No manipule el enchufe con las manos mojadas.

X No colocar ni dejar caer agua u otro líquido.

X No lo use mientras se baña.

X No coloque ni almacene el producto donde pueda caer o ser arrojado en un lavatorio o bañera.

X No intente agarrar un producto que haya caído al agua

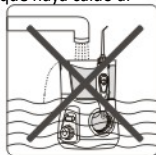

DESENCHUFE INMEDIATAMENTE.

X Compruebe si el cable de alimentación está dañado antes del primer uso y durante la vida útil del producto.

ADVERTENCIA

Para reducir el riesgo de quemaduras, electrocución, incendio o lesiones a personas:

X-No conecte este dispositivo a un sistema de voltaje que sea diferente del sistema de voltaje especificado en el dispositivo o cargador. No lo utilice con voltaje inadecuado o el producto se dañará y la garantía quedará anulada.

X-Si el producto se abre / desmonta por CUALQUIER motivo, La garantía quedará ANULADA.

ADVERTENCIA

Para reducir el riesgo de quemaduras, electrocución, incendio o lesiones a personas:

X-No conecte este dispositivo a un sistema de voltaje que sea diferente del sistema de voltaje especificado en el dispositivo o cargador. No lo utilice con voltaje inadecuado o el producto se dañará y la garantía quedará anulada.

X-Si el producto se abre / desmonta por CUALQUIER motivo,

La garantía quedará ANULADA.

* No utilice este producto si tiene el cable o el enchufe dañado, si no funciona bien si se ha caído o dañado, o se ha caído al agua. Póngase en contacto con su distribuidor local.

X- No dirija agua debajo de la lengua, en el oído, nariz u otras áreas delicadas. Este producto es capaz de producir presiones que pueden causar graves daños en estas áreas.

X-Utilice este producto solo como se indica en estas instrucciones o según lo recomiende su odontólogo. X -Utilice únicamente puntas y accesorios recomendados por el fabricante.

X- No deje caer ni inserte ningún objeto extraño en ninguna apertura o manguera.

X- Mantenga el cable eléctrico alejado de superficies calientes. * No lo use al aire libre ni lo opere donde se utilicen productos en aerosol, o donde se suministre oxígeno.

X- No utilice yodo o concentrado de aceites esenciales solubles en agua en este producto. El uso de estos puede reducir el rendimiento del producto y acortará la vida útil del producto

X- Llene el depósito con agua u otra solución recomendada por su profesional únicamente

X- Quítese las joyas bucales antes de usar este producto.

X- No lo use si tiene una herida abierta en la lengua o en su boca.

X- Si su médico clínico o cardiólogo le ha recomendado recibir pre medicación antibiótica antes de los procedimientos dentales, debe consultar a su odontólogo antes de utilizar este instrumento o cualquier otro dispositivo de higiene bucal.

X- Es necesaria una estricta supervisión cuando este producto sea utilizado por, en o cerca de niños o personas discapacitadas.


X- Si la punta se separa del eje por cualquier motivo, deseche la punta y el eje y reemplácelos por una nueva.

X- No utilice este producto durante más de 5 minutos por cada período de dos horas.

X- Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no jueguen con el dispositivo.

Conserve estas instrucciones.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

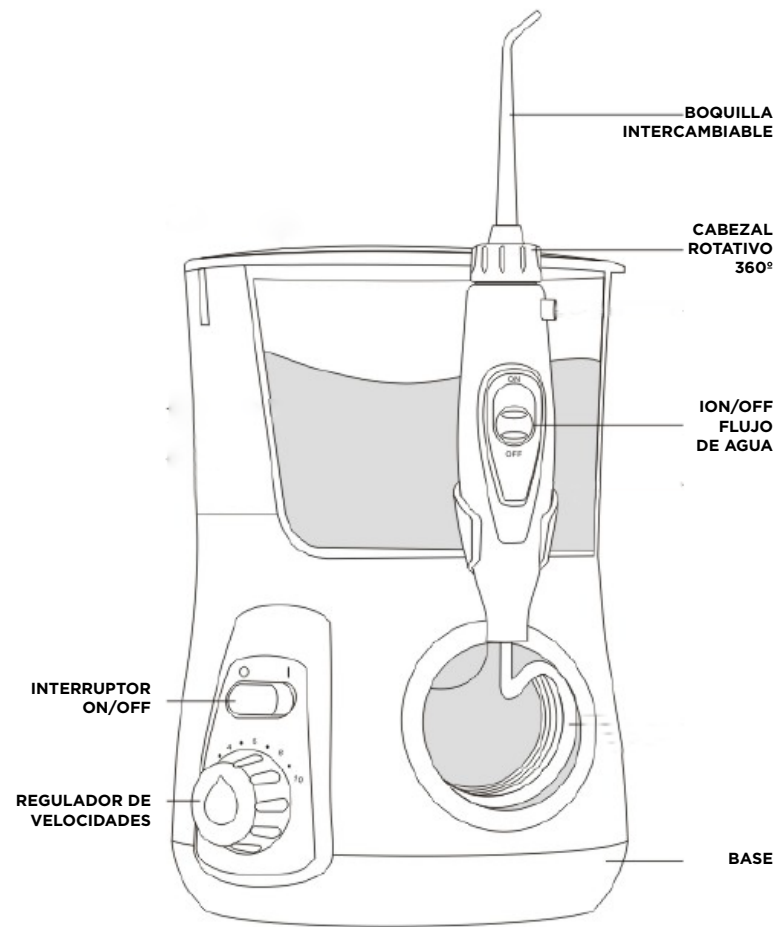

COMENZANDO CON SU LIMPIADOR DENTAL


	PUNTA DE CHORRO CLASICO ● Uso general ☒ Estándar
	PUNTA DE LIMPIEZA PROFUNDA ● Sacos periodontales ☒ Estándar
	LIMPIADOR DE LENGUA ● Aliento fresco ☒ Estándar

	PUNTA DE ORTODONCIA ● Ortodoncia ☐ Opción ● Uso general ☒
	REMOVEDOR DE PLACA ● IMPLANTES ● PUENTES ☐ Opción ● CORONAS ● TENSORES ☒
	PUNTA CEPILLO DENTAL ● Uso general ☒ Opción

- Enchufe el cable en un tomacorriente. Si la salida está controlada por un interruptor de corriente, asegúrese de que este encendido.
- Levante la tapa del depósito de agua y llénelo con agua tibia. Vuelva a colocar el depósito sobre la base y presione firmemente hacia abajo y cierre la tapa.



- Inserte la punta en el centro de la mano presionando firmemente hasta que la punta haga un click en su lugar. El anillo de color coincidirá con la parte superior de la base si es que la punta está bien colocada en su lugar. Para remover la punta del dispositivo, presione el botón de la base.

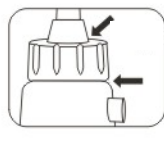

- Seleccione el control de presión que se encuentra en la base en máximo (Selector de presión Nro 10). Direcione la manija y la punta hacia la bacha. Encienda el dispositivo y el agua hasta que el agua fluya por la punta.



Apague el dispositivo.

Gire el dial de control de presión en la base al mínimo de potencia (Selector de presión Nro 1) para el primer uso. Aumente gradualmente la presión, según lo sugerido por su odontólogo especialista.



Usando el limpiador dental, coloque siempre la punta en su boca antes de encender el agua, con el selector de agua en posición OFF (apagado) presione la tecla de encendido (ON). Inclínese hacia la bacha lo suficientemente como para no producir salpicaduras, mientras que al mismo tiempo permita que el agua fluya desde su boca hacia la bacha. Encienda el botón de agua. Cuando termine, apague el botón de agua y de encendido.



MANTENIMIENTO

LIMPIEZA

Antes de iniciar la limpieza, desenchufe el dispositivo de la corriente eléctrica. Limpie el dispositivo cuando sea necesario con un paño húmedo. El receptáculo de agua es removible para su fácil limpieza.

REMOVIENDO RESIDUOS DE AGUA DURA.

Residuos de agua dura se pueden depositar en su dispositivo dependiendo de cuantos minerales contenga su agua corriente, si esto no se soluciona puede producir daños en rendimiento de su dispositivo.

LIMPIEZA DE PARTES INTERNAS

Agregue vinagre blanco al tanque lleno de agua tibia. Posicione el dispositivo y la punta hacia la bacha, encienda el dispositivo y haga correr el agua hasta vaciar el tanque. Enjuáguelo 6 veces con el dispositivo lleno de agua sola. Este proceso debería realizarse cada 1 o 3 meses para asegurar el correcto funcionamiento del dispositivo.

PERDIDAS

Si se observan pérdidas de agua por daño en la manguera, podrá reemplazar la manguera por una nueva con su distribuidor autorizado.

ALMACENAMIENTO DE LOS ACCESORIOS

El dispositivo cuenta con un compartimento para guardar dos de los accesorios más usados para que puedan accederse fácilmente.

SERVICIO DE MANTENIMIENTO

El dispositivo no necesita un servicio técnico de rutina.

